

医療用マスク

# エチケットマスク



ディスポーザブルタイプの  
不織布製マスクです。



## 商品特長

## 1 高性能ろ過フィルタ

(防塵メルトブロー不織布)

- 高性能フィルタでウイルス飛沫の侵入をガードします。
- 「JIS T9001」クラスIIに適合しています。

日本産業規格 JIS T 9001						
医療用マスククラスII 規格適合番号 M22310009						
適合番号発行元: JHPIA						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98%	(区分1)	16.0kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

## 2 ノーズフィッターでぴったりフィット

- ノーズフィッターが顔にぴったりフィットするため、鼻まわりの隙間を作りにくくなっています。

## 3 立体プリーツ加工

- 立体プリーツ加工でアゴまでしっかりガードします。

## 4 購入しやすい2枚入

- 通院時など、急に必要になった際にも購入しやすい2枚入です。

## 5 ボックスタイプの個包装


- 自動販売機での販売に適したボックスタイプの個包装です。

※手動式自動販売機DF-8A(株式会社ダイト製)に対応しています。

## 商品情報

## ■使用方法

着け方

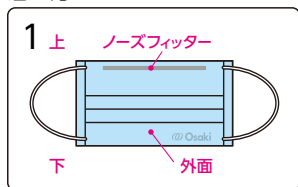

ノーズフィッターを上にして、ヒダが下向きになるように装着します。ゴム紐の付け位置は外面です。



耳にゴム紐を掛け、ノーズフィッターを鼻の形に合わせます。



ノーズフィッターを押さえたままプリーツを広げます。

外し方



マスク外面を触らないようにゴム紐を持って取り外します。

## ■全国マスク工業会 正会員マーク

全国マスク工業会の定める「マスクの表示・広告自主基準」ならびに「衛生マスクの安全・衛生自主基準」を遵守し生産された商品に表示できるマークです。



## ■素材

本体・フィルタ: ポリプロピレン

ノーズフィッター: 鉄、ポリエチレン

耳紐: ポリエステル、ポリウレタン

※天然ゴム不使用(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

## 商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名略称/JANコード	JANコード/ITFコード
05010	CN エチケットマスク BOX ふう ホワイト 2枚入 17.5cm×9.5cm	販売単位   105 × 84 × 25	14.0g	50箱	CNエチケットマスクBOX2	4971032050102
		外表   435 × 145 × 225	1.3kg			14971032050109

◇商品は全てオープン価格です。

**Osaki**  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル  
公式ウェブサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。