

指定医薬部外品

エタノール含浸綿

アルエットィ® Cup



片手操作でクイック開閉! 高い気密性で
アルコール濃度低下をブロック



商品情報

■成分

成分名	薬液100mL中	内容量
日局エタノール	83mL	1個あたり、 14.4gの脱脂綿に 70mLの薬液を含浸
日局イソプロパノール	3.7mL	
日局精製水	適量	

■効能・効果

手指・皮膚の洗浄・消毒

■用法・用量

使用時、本品から清潔に取り出し、適用部位に塗布する

関連商品



第3類医薬品

アルエットィ®one2 エタノール
1包に2枚入でしっかり消毒できる、
個包装タイプのエタノール80%
含浸綿です。



一般医療機器

滅菌QCスリムコットンS/J
用途にあわせた薬液を使用できる、
デスポタイプの万能ツボに入った、
滅菌済スリムコットンです。



第3類医薬品

アルエットィ®one2 イソプロ
1包に2枚入でしっかり消毒できる、
個包装タイプのイソプロパノール
70%含浸綿です。

商品規格

■アルエットィ® cup

指定医薬部外品

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード/ITFコード
		販売単位	外装			
31052	アルエットィ® cup 4cm×4cm 60枚入(10個)	販売単位	230 × 159 × 170	1.1kg	8箱	4971032310527
		外装	475 × 329 × 356	8.8kg		14971032310524
31053	アルエットィ® cup つけかえ用 4cm×4cm 60枚入(10個)	販売単位	225 × 153 × 168	1.0kg	8箱	4971032310534
		外装	465 × 317 × 352	7.8kg		14971032310531

■販売名:アルエットィカップE1α ■承認番号:22900DZX00881000
■成分:日本薬局方 エタノール:83mL,日本薬局方 イソプロパノール:3.7 mL,日本薬局方 精製水:適量/薬液100mL中

◇商品はすべてオープン価格です。

■QCクイックスタンド

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード/ITFコード
		販売単位	外装			
55675	QCクイックスタンド 5個入	販売単位	160 × 95 × 100	—	20袋	4971032556758
		外装	495 × 215 × 335	—		—

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本 社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ/ <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail/ support@osakimedical.co.jp

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店

アルエットィ®cup



補助商品

QCクイックスタンド

- QCシリーズ用スタンドです。
- 滑り止めストッパー付きで、側面のフックを連結しても使用できます。
- 素材にはPP(ポリプロピレン)を使用しているため、廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有毒ガスの発生がなく、完全に燃焼させれば炭酸ガスと水になります。




片手操作で清潔開閉

- 4cm×4cmの脱脂綿にエタノール80%を含浸させた、ディスポ万能ツボタイプの外皮消毒綿です。
- ステンレス製万能ツボ感覚で使用でき、蓋の開閉を片手操作で清潔・確実に行えます。


高い気密性

- ステンレス製万能ツボと比較して気密性が高く、アルコールの揮発を低く抑えることができます。

■アルエットィ®cupのアルコール濃度変化

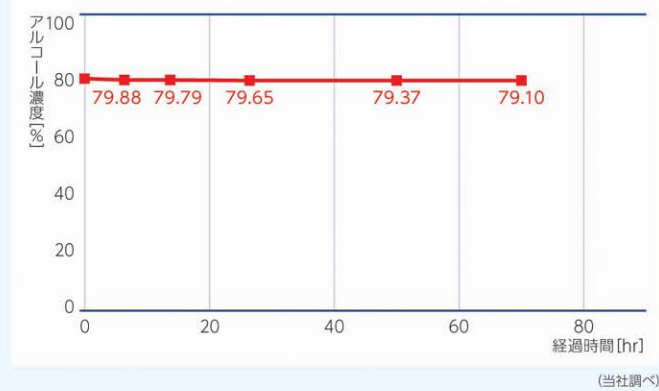

■アルエットィ®cupの気密性、ステンレス製万能ツボとの比較

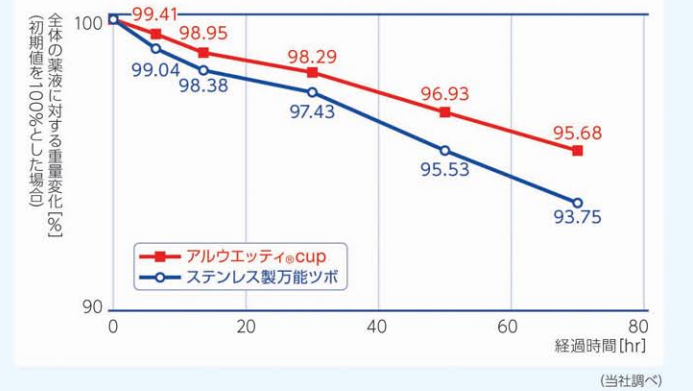

優れた経済性

- 少量パックのため、24時間管理や使用量の少ない診療科でムダなく使用できます。
- 蓋を取り外し、経済的な“つけかえ用”に装着して使用できます。
- アルコール・カット綿の準備や、万能ツボの再生業務(洗浄・滅菌など)の省力化が図れます。

衛生的で便利なカップタイプ

- 使い切りのため、継ぎ足し使用を防ぎ、衛生的です。
- 蓋を開けるだけで素早く使用でき、持ち運びにも便利です。

環境や安全を考慮したパッケージ

- 蓋・カップの素材にはPP(ポリプロピレン)を使用しているため、廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有毒ガスの発生がなく、完全に燃焼させれば炭酸ガスと水に分解されます。
- 使用後は、蓋とカップを分離し、カップは重ねて廃棄することができるため、ゴミの減量が図れます。

広い抗微生物スペクトル

- グラム陽性菌、グラム陰性菌、結核菌、真菌や一部のウイルスに有効で、作用はおおむね速効的です。

■殺菌効果試験結果(作用時間15秒)

試験菌	菌の生死の判定	
	アルエットィ®の薬液	
大腸菌	—	
大腸菌(O157:H7)	—	
腸球菌	—	
緑膿菌	—	
セラチア	—	
MRSA	—	

—:菌は死滅した

(当社調べ)

- ▲血糖測定時に偽低血糖値を示すことがあるため、消毒薬が十分に乾燥していることを確認し、測定を行ってください。
- ▲開封後は保存せず、早めにご使用してください。
- ▲衣類につくと脱色、変色することがあるため注意してください。
- ▲アルコール過敏症の方は医師又は薬剤師に相談してください。
- ▲アルコール又は他の薬剤を注入して使用しないでください。また、脱脂綿を継ぎ足して使用しないでください。
- ▲他の容器に入れ替えしないでください。

“アルエットィ®cup”及び“QCクイックスタンド”を使用する場合

使用方法

1 アルエットィ®cupを数回振ってください。アルコールがまんべんなく浸透するとともにアルコール綿が取り出しやすくなります。

2 外装フィルムをはがし、キャップを取り外した後、カップの上蓋をめぐってください。上蓋はどの方向からでも開けられます。

3 キャップをしっかりとめて、“QCクイックスタンド”に差し込みます。
※“QCクイックスタンド”は別売です。

4 アルコール綿を取り出し、消毒などの処置を行います。(処置後は必ず蓋を閉じてください。)