#### 商品規格

■オオサキ	縫製ガーゼX KL		一般图	医療機器 X線造影	材入りスポンジ:13705000
品番	商品名·内容量·規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JAND-F/ITFD-F
13746	オオサキ 縫製ガーゼX KL20204PT 20枚入	販売単位   210× 40×102	185.0g	12包	4971032137469
13/46	20cm×20cm 4ply 柄付	外装   325 × 180 × 225	2.5kg	12만	_
13747	オオサキ 縫製ガーゼX KL30304PT 20枚入	販売単位   155 × 135 × 80	320.0g	6包	4971032137476
13/4/	30cm×30cm 4ply 柄付	外装   260 × 290 × 170	2.2kg	02	_
13777	オオサキ 縫製ガーゼX KL30304P 20枚入 30cm×30cm 4ply	販売単位   155 × 135 × 80	320.0g	6包	4971032137773
13///		外装   260 × 290 × 170	2.2kg	06	_
13748	オオサキ 縫製ガーゼX KL30308PT 20枚入	販売単位   155 × 260 × 80	554.0g	6包	4971032137483
13740	30cm×30cm 8ply 柄付	外装   330 × 275 × 260	3.7kg	02	_
13778	オオサキ 縫製ガーゼX KL30308P 20枚入	販売単位   155 × 260 × 80	554.0g	6包	4971032137780
13//6	30cm×30cm 8ply	外装   330 × 275 × 260	3.7kg	02	_
13749	オオサキ <b>縫製ガーゼX KL30454PT 20枚入</b> 30cm×45cm 4ply 柄付	販売単位   155 × 140 × 118	467.0g	6包	4971032137490
13749		外装   375 × 300 × 170	3.1kg		_
13750	オオサキ 縫製ガーゼX KL30458PT 20枚入	販売単位   310 × 100 × 155	828.0g	6包	4971032137506
13730	30cm×45cm 8ply 柄付	外装   330 × 320 × 325	5.5kg		_
13779	オオサキ 縫製ガーゼX KL30458P 20枚入	販売単位   310 × 100 × 155	828.0g	6包	4971032137797
13779	30cm×45cm 8ply	外装   330 × 320 × 325	5.5kg	06	_
13751	オオサキ 縫製ガーゼX KL45454PT 20枚入	販売単位   155 × 200 × 118	649.0g	6包	4971032137513
13/31	45cm×45cm 4ply 柄付	外装   375 × 215 × 330	4.4kg	06	_
13752	オオサキ 縫製ガーゼX KL45458PT 20枚入 45cm×45cm 8ply 柄付	販売単位   155 × 350 × 118	1.2kg	8包	4971032137520
13/32		外装   495 × 365 × 330	10.5kg	02	_
13780	オオサキ 縫製ガーゼX KL45458P 20枚入	販売単位   155 × 350 × 118	1.2kg	8包	4971032137803
13760	45cm×45cm 8ply	外装   495 × 365 × 330	10.5kg		_
13753	オオサキ 縫製ガーゼX KL30608PT 20枚入 30cm×60cm 8ply 柄付	販売単位   310 × 130 × 155	1.1kg	6包	4971032137537
13/33		外装   485 × 280 × 325	7.2kg	06	_
1375/	オオサキ 縫製ガーゼX KL60608PT 10枚入 60cm×60cm 8ply 柄付	販売単位   316 × 120 × 155	1.1kg	6包	4971032137544
13754		外装   485 × 260 × 330	7.2kg	V L	_

■販売名:縫製ガーゼX-KS ■届出番号:23B2X10001000067

◇商品は全てオープン価格です。

■滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KL ―般医療機器 X線造影材入りスポンジ:137050					スポンジ:13705000 <b>E.o.g.</b>
品番	商品名·内容量·規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JAND-F/ITFD-F
13755	滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KL20204PT 2枚入(40袋) <sup>20cm×20cm 4ply 柄付</sup>	販売単位   260 × 150 × 150	900.0g	4箱	4971032137551
		外装   320 × 320 × 280	4.1kg	.,,,	_
13756	滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KL30304PT 2枚入(40袋) <sup>30cm×30cm</sup> 4ply 柄付	販売単位   260 × 280 × 200	1.6kg	4箱	4971032137568
13/30		外装   420 × 580 × 280	7.4kg	170	-
13757	滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KL30308PT 2枚入 (20袋) <sup>30cm×30cm 8ply 柄付</sup>	販売単位   260 × 270 × 200	1.4kg	- 4箱	4971032137575
13/5/		外装   540 × 290 × 420	6.6kg		_
13758	滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KL30454PT 2枚入 (20袋) <sup>30cm×45cm</sup> 4ply 柄付	販売単位   295 × 145 × 200	1.2kg	4箱	4971032137582
13/50		外装	5.3kg		_
13759	滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KL30458PT 2枚入(15袋) <sup>30cm×45cm 8ply 柄付</sup>	販売単位   220 × 280 × 200	1.5kg	- 4箱	4971032137599
13/59		外装	7.0kg		_
13760	滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KL45454PT 2枚入(12袋) <sup>45cm×45cm</sup> 4ply 柄付	販売単位   295 × 120 × 200	1.0kg	- 4箱	4971032137605
13700		外装	4.6kg		_
13761	滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KL45458PT 2枚入(12袋) 45cm×45cm 8ply 柄付	販売単位   295 × 225 × 200	1.7kg	2箱	4971032137612
		外装	4.0kg	∠₼	_
13762	滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KL30608PT 2枚入(20袋) <sup>30cm×60cm 8ply 柄付</sup>	販売単位   390 × 285 × 200	2.5kg	4箱	4971032137629
13/02		外装   800 × 305 × 420	11.0kg	4相	_
13763	滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KL60608PT 1枚入(15袋)	販売単位   220 × 370 × 200	2.1kg	2箱	4971032137636
13/03		外装   420 × 390 × 235	4.5kg		_

■販売名:滅菌縫製ガーゼX-KS ■届出番号: 23B2X10001000068

\_\_\_\_\_\_ ◇ 商品は全てオープン価格です。





■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。 ※規格には誤差が生じる場合があります。



取扱店

一般医療機器

手術ガーゼ

X線造影材入りスポンジ

## オオサキ 縫製ガーゼX KL 滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KL




レントゲン撮影時の視認性が高い X線造影糸を織り込んだ縫製ガーゼです。

**Osaki** 

## 多重になったX線造影糸で、レントゲン撮影時の視認性が高い縫製ガーゼです。

### .高い視認性を実現するX線造影糸

- レントゲン撮影時の視認性が高いポリスチレン系熱可塑性エラストマーを使用した、 X線造影糸入り手術用縫製ガーゼです。
- X線造影糸が多重※になっているため、レントゲン撮影時の視認性が高くなっています。
- 万一体内に遺残した場合でもレントゲン撮影により位置の特定ができます。

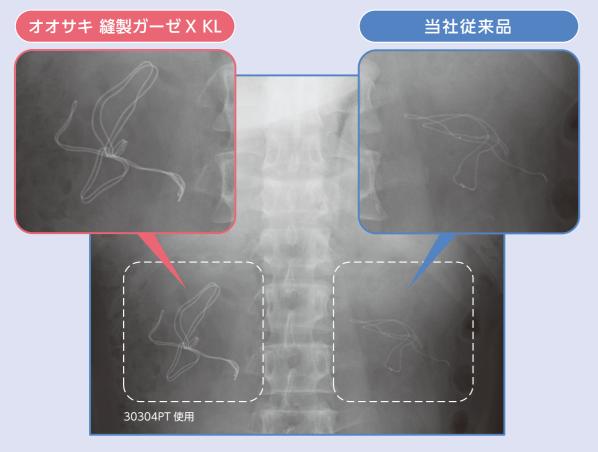

# X線造影糸拡大

※X線造影糸の重なり

サイズ	厚み	X 線造影糸		
517	子の	2重	4重	
20cm×20cm	4ply	0		
30cm×30cm	4ply	0		
30CIII > 30CIII	8ply		0	
30cm×45cm	4ply	0		
30CIII ~ 43CIII	8ply		0	
45cm×45cm	4ply	0		
45011/45011	8ply		0	
30cm×60cm	8ply		0	
60cm×60cm	8ply	0		

## 2.高い吸水量


- ●目が細かな医療ガーゼタイプIIを使用しているため、血液や体液の吸収に優れています。
- ■医療用ガーゼの形状規格

	1cm間の条数 (本)							
タイプ	総	縦糸 横糸		糸	1cm×1cmの 条数の許容誤差	標準幅(cm)	標準重量(g)	
	平均	許容誤差	平均	許容誤差				
I	12	±1	12	±1	24+2 24-1	30+0.5 30-1.0	幅30cm 長さ100cm 10.3±8%	
II	12	±1	12	±1	24+2 24-1	91.4±1.5	幅91.4cm 長さ30cm 8.7±8%	
Ш	11	±1	9	±1	20+2 20-1	91.4±1.5	幅91.4cm 長さ30cm 7.6±8%	
IV	9	±1	8	±1	17+2 17-1	91.4±1.5	幅91.4cm 長さ30cm 6.1±8%	

経製ガーゼX

## 3.豊富なバリエーション

● バリエーションが豊富なため、使用用途に合わ せてサイズや厚み、滅菌の有無が選べます。

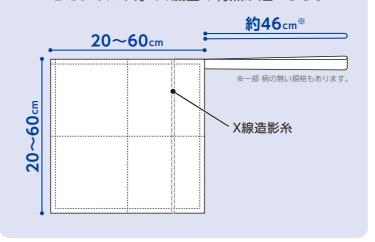

#### 商品情報

#### ■使用方法

術野の確保や臓器保護などに使用する場合は、 本品に滅菌済 生理食塩水を含ませ、適度な 湿潤状態にしてから使用してください。

#### ■使用用途

- ●術野の確保のため、丸めて手前の臓器を圧排
- ●創部の保護(開創器と共に使用)
- ●創部の乾燥防止
- ●体腔内深部臓器の手術時に、手前の臓器を 体外へ挙上するため臓器を包む
- ●取り出した臓器を包む
- ●液の吸収

#### ■素材

ガーゼ:綿100%

X線造影糸:[固定材] ポリスチレン系熱可塑性 エラストマー

[造影剤] 硫酸バリウム [着色剤] カーボンブラック

#### 関連商品

#### 一般医療機器

#### オオサキ縫製ガーゼX KP/滅菌オオサキ縫製ガーゼX KP

- ■販売名:縫製ガーゼX-KS ■届出番号:23B2X10001000067
- X線造影材にレントゲン撮影時の視認性の高い、 X線造影プレートは柔らかい素材を使用し、 ポリスチレン系熱可塑性エラストマーを使用 した、医療ガーゼタイプⅡの手術用縫製ガーゼ
- 幅が広いプレート形状のX線造影材をガーゼに 埋め込んでいるため、レントゲン撮影時の視認性が 高まります。
- 角丸形状にしているため、組織を傷つけ にくく愛護的に使用できます。
- バリエーションが豊富なため、使用用途に 合わせて滅菌の有無と適切なサイズが選べ