

商品規格

■オオサキ アイソレーションガウンSMSⅡ

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード	
51042	オオサキ アイソレーションガウンSMSⅡ Nフリー ブルー 10枚入 身丈120cm 胸囲140cm 袖丈60cm ニット袖口	販売単位	250 × 315 × 80	950.0g	10袋	4971032510422
		外装	530 × 485 × 320	10.5kg		14971032510429
51043	オオサキ アイソレーションガウンSMSⅡ Nフリー イエロー 10枚入 身丈120cm 胸囲140cm 袖丈60cm ニット袖口	販売単位	250 × 315 × 80	950.0g	10袋	4971032510439
		外装	530 × 485 × 320	10.5kg		14971032510436

◇商品はすべてオープン価格です。

■滅菌オオサキ アイソレーションガウンSMSⅡ

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード	
51060	滅菌オオサキ アイソレーションガウンSMSⅡ Nフリー ブルー 1枚入(50袋) 身丈120cm 胸囲140cm 袖丈60cm ニット袖口	販売単位	610 × 475 × 350	6.2kg	—	4971032510606
51061	滅菌オオサキ アイソレーションガウンSMSⅡ Nフリー イエロー 1枚入(50袋) 身丈120cm 胸囲140cm 袖丈60cm ニット袖口	販売単位	610 × 475 × 350	6.2kg	—	4971032510613

◇商品はすべてオープン価格です。

■オオサキ アイソレーションガウンPE

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード	
51026	オオサキ アイソレーションガウンPE フリー ブルー 10枚入 身丈125cm 胸囲130cm 袖丈65cm ニット袖口 前面・腕部PEラミネート加工	販売単位	380 × 260 × 120	900.0g	10袋	4971032510262
		外装	560 × 420 × 380	9.3kg		—

◇商品はすべてオープン価格です。

■滅菌オオサキ アイソレーションガウンPE

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード	
51028	滅菌オオサキ アイソレーションガウンPE フリー ブルー 1枚入(100袋) 身丈125cm 胸囲130cm 袖丈65cm ニット袖口 前面・腕部PEラミネート加工	販売単位	645 × 430 × 380	11.2kg	—	4971032510286

◇商品はすべてオープン価格です。

■オオサキ アイソレーションガウン

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード	
51045	オオサキ アイソレーションガウン Nフリー ブルー 10枚入 身丈120cm 胸囲140cm 袖丈60cm ニット袖口	販売単位	285 × 325 × 50	700.0g	10袋	4971032510453
		外装	600 × 330 × 270	7.6kg		14971032510450
51055	オオサキ アイソレーションガウン Nフリー イエロー 10枚入 身丈120cm 胸囲140cm 袖丈60cm ニット袖口	販売単位	285 × 325 × 50	700.0g	10袋	4971032510552
		外装	600 × 330 × 270	7.6kg		14971032510559
51056	オオサキ アイソレーションガウン Nフリー グリーン10枚入 身丈120cm 胸囲140cm 袖丈60cm ニット袖口	販売単位	285 × 325 × 50	700.0g	10袋	4971032510569
		外装	600 × 330 × 270	7.6kg		14971032510566
51057	オオサキ アイソレーションガウン Gフリー ブルー 10枚入 身丈120cm 胸囲140cm 袖丈55.5cm ゴム袖口	販売単位	285 × 325 × 50	650.0g	10袋	4971032510576
		外装	600 × 330 × 270	7.2kg		14971032510573
51058	オオサキ アイソレーションガウン Gフリー イエロー 10枚入 身丈120cm 胸囲140cm 袖丈55.5cm ゴム袖口	販売単位	285 × 325 × 50	650.0g	10袋	4971032510583
		外装	600 × 330 × 270	7.2kg		14971032510580
51059	オオサキ アイソレーションガウン Gフリー グリーン10枚入 身丈120cm 胸囲140cm 袖丈55.5cm ゴム袖口	販売単位	285 × 325 × 50	650.0g	10袋	4971032510590
		外装	600 × 330 × 270	7.2kg		14971032510597

◇商品はすべてオープン価格です。

■滅菌オオサキ アイソレーションガウン

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード	
51062	滅菌オオサキ アイソレーションガウン Nフリー ブルー 1枚入(50袋) 身丈120cm 胸囲140cm 袖丈60cm ニット袖口	販売単位	440 × 315 × 410	3.6kg	—	4971032510620
51063	滅菌オオサキ アイソレーションガウン Nフリー イエロー 1枚入(50袋) 身丈120cm 胸囲140cm 袖丈60cm ニット袖口	販売単位	440 × 315 × 410	3.6kg	—	4971032510637
51064	滅菌オオサキ アイソレーションガウン Nフリー グリーン1枚入(50袋) 身丈120cm 胸囲140cm 袖丈60cm ニット袖口	販売単位	440 × 315 × 410	3.6kg	—	4971032510644
51065	滅菌オオサキ アイソレーションガウン Gフリー ブルー 1枚入(50袋) 身丈120cm 胸囲140cm 袖丈55.5cm ゴム袖口	販売単位	440 × 315 × 410	3.3kg	—	4971032510651
51066	滅菌オオサキ アイソレーションガウン Gフリー イエロー 1枚入(50袋) 身丈120cm 胸囲140cm 袖丈55.5cm ゴム袖口	販売単位	440 × 315 × 410	3.3kg	—	4971032510668
51067	滅菌オオサキ アイソレーションガウン Gフリー グリーン1枚入(50袋) 身丈120cm 胸囲140cm 袖丈55.5cm ゴム袖口	販売単位	440 × 315 × 410	3.3kg	—	4971032510675

◇商品はすべてオープン価格です。



アイソレーションガウン

アイソレーションガウン



暴露のリスクレベルによって選べる
アイソレーションガウンです。



取扱店

*規格には誤差が生じる場合があります。

暴露のリスクレベルによって選べる豊富なバリエーション!



CDC (アメリカ疾病対策センター) ガイドライン

「袖付隔離用ガウン」の着用目的

医療従事者の腕や露出した身体部位を守り、衣類が血液、体液、その他の感染性物質で汚染されることを防ぐために標準予防策及び感染経路別予防策によって指定し用いる。

参考: 矢野 邦夫, 向野 賢治 (2007) "医療現場における隔離予防策のためのCDCガイドライン", p.72
参考: "2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings", Centers for Disease Control and Preventionホームページ, 2022-05改訂

袖付き隔離用ガウンの着用の必要性和種類

患者との相互作用 (感染物質への接触が予想される程度や血液や体液がバリアを通過する可能性など) の性質に基づいて選択する。腕及び体全体、首から大腿中央、あるいはその下を覆うガウンを着用する。



アイソレーションガウン SMS II

ニット袖口

ブルー

イエロー

1 液体防護性能に優れたAAMIレベルII

- AAMI (米国医療機器振興協会) の定める液体防護性能レベル2の規格を満たした、SMS3層構造のディスポーザブルアイソレーションガウンです。
- 一般処置と比べて侵襲性が高く、着用時間が長めの処置に適しています。
- 接合部が超音波接着で隙間なく接着できるため、感染からしっかり守ります。

2 かんたん着脱の首元ワンタッチテープ


- 首元がワンタッチテープのため、着脱が簡単です。



3 長時間着用でも快適なニット袖口

- 袖口形状は、長時間着用でも手首を締め付けず快適に着用できる「ニット袖口」です。

■ サイズ

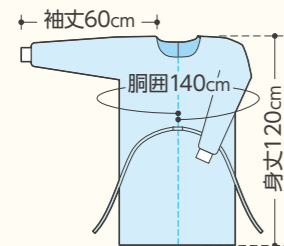

■ 素材


本体: ポリプロピレン
袖口: コットン, ポリエステル
※ラテックスフリー (天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)



4 汚染・清潔区域ごとに選べるカラーバリエーション

- 使用用途や部署に合わせて、ブルーとイエローの2色から選べます。
- 感染対策などの汚染・清潔区域のゾーニングによる色分けが可能です。


汚染・清潔区域のゾーニング (例)

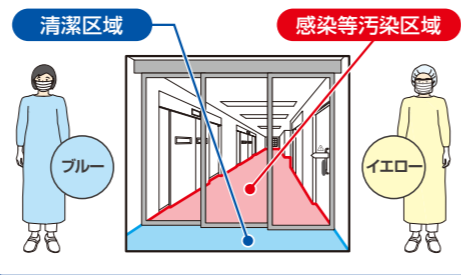

■ 着衣方法



1 アイソレーションガウンPEのみ
ガウンを開き、袖口に手を差し込んで腕を通します。「PE」は、図のように手を差し込むと、ガウンテクニクで着用できます。

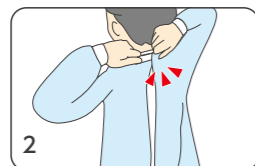


2 首元のワンタッチテープをとめます (又は首紐を結びます)。



3 腰紐を背面で結びます。

■ 脱衣方法

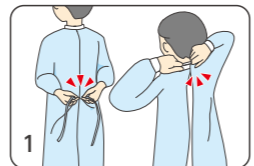

1 腰紐をほどき、首元のワンタッチテープを外し (又は首紐をほどき) ます。汚染部に触れないよう注意してください。



2 汚染部に触れないよう、片腕ずつ引き抜きます。汚染部が内側になるように折りたたみ、廃棄します。



ニット袖口


アイソレーションガウン PE

ブルー

1 PEラミネート加工による優れたバリア性

- 前面と腕にPE (ポリエチレン) ラミネート加工を施したアイソレーションガウンです。
- バリア性・撥水性が高く、感染対策用や化学療法薬剤 (抗がん剤) 調製時など様々な場面で使用できます (耐浸透テスト済)。


ラミネート加工部

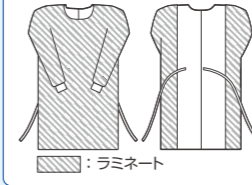

2 かんたん着用

- ガウンテクニクができる折り方で畳まれているため、腕を袖に通すだけで簡単に着用できます (左下「■着衣方法」参照)。
- また、滅菌品は清潔に着用することができます。

■ サイズ

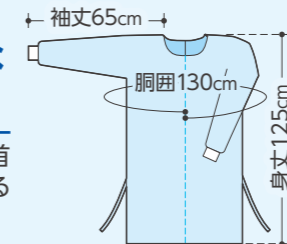

3 長時間着用でも快適なニット袖口

- 袖口形状は、長時間着用でも手首を締め付けず快適に着用できる「ニット袖口」です。



■ 素材

本体: ポリプロピレン、
ポリエチレンラミネート
ニット袖口: ポリエステル
※ラテックスフリー (天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)



ニット袖口

ゴム袖口

アイソレーションガウン

ブルー

イエロー

グリーン


1 優れた経済性

- 経済性に優れたPP (ポリプロピレン) 不織布を使用したアイソレーションガウンです。
- 簡易予防着やお見舞いなどの用途に最適です。


2 使用用途で選べる豊富なバリエーション

- 使用用途や部署に合わせて、ブルーとイエロー、グリーンの3色から選べます。
- 長時間着用でも手首を締め付けず、快適な「ニット袖口」と、経済性に優れた「ゴム袖口」の2種類の袖口から選べます。

■ サイズ

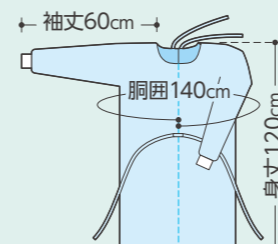

ニット袖口

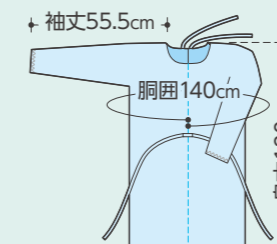

ゴム袖口



■ 素材

本体: ポリプロピレン
ニット袖口: ポリエステル
ゴム袖口: 合成ゴム
※ラテックスフリー (天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)