



外科
製品

メ
ディ
カル
プ
ロ
ダ
ク
ツ
デ
ィ
ス
ホ
ー
ザ
ブ
ル



E.O.G.済

滅菌サージカルガウン

滅菌オオサキ サージカルガウン



軽くてソフトな着心地の
滅菌済みサージカルガウンです。



外科製品

メデイカルプロダクツ
ディスプレイザブル



商品特長

バリア性に優れた素材を使用

- バクテリアバリア性・耐水性・リントフリー性に優れたSMS不織布を使用しています。

軽量で動きやすい


- 軽くてソフトなため、長時間の手術にも適しています。

バリエーション

- サイズバリエーションから術者に適したサイズを選択できます。
- マスク付タイプもあります。

■SMS不織布とは

素材：ポリプロピレン
構造：バクテリアバリア性に優れた、極細繊維のメルトブロー高密度フィルターを、低発塵で撥水性に優れた、長繊維スパンボンドで挟み、3層構造にしています。

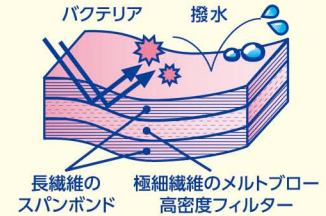

関連商品



オオサキ サージカルマスク

- 内部に高性能フィルターを使用し、バクテリアバリア性 (BFE \geq 98%)・撥水性に優れた、手術・処置用マスクです。
- 手術室からI.C.U・新生児室と、幅広く使用できます。



オオサキ サージカルキャップ

- ソフトで通気性に優れた、サージカルキャップです。



オオサキ シューズカバー

- 撥水性・通気性に優れた、シューズカバーです。
- 手術室・I.C.U.などでの処置に、血液などから汚染されるのを防ぎます。
- グリーンルームなどで足部分から出る塵芥を防ぐのに最適です。
- 靴底にすべり止め加工を施しています。



滅菌オオサキ アームカバー

- 撥水性・通気性に優れ、柔らかな不織布を使用したアームカバーです。
- ガウンの腕部分の損傷・汚染時に着用することで、ガウンを取り替えることなく手術を継続できます。

商品規格

■滅菌オオサキ サージカルガウン

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
50500	滅菌オオサキ サージカルガウンM 119cm(身丈) 1枚入	販売単位 250 × 350 × 25	—	50枚	4971032505008
		外装 650 × 430 × 380	—		14971032505005
50501	滅菌オオサキ サージカルガウンL 122cm(身丈) 1枚入	販売単位 250 × 350 × 25	—	50枚	4971032505015
		外装 650 × 430 × 380	—		14971032505012
50502	滅菌オオサキ サージカルガウンLL 129cm(身丈) 1枚入	販売単位 250 × 350 × 25	—	50枚	4971032505022
		外装 650 × 430 × 380	—		14971032505029
50504	滅菌オオサキ サージカルガウンM(マスク付) 119cm(身丈) 1枚入	販売単位 250 × 350 × 25	—	50枚	4971032505046
		外装 650 × 430 × 380	—		14971032505043
50505	滅菌オオサキ サージカルガウンL(マスク付) 122cm(身丈) 1枚入	販売単位 250 × 350 × 25	—	50枚	4971032505053
		外装 650 × 430 × 380	—		14971032505050
50506	滅菌オオサキ サージカルガウンLL(マスク付) 129cm(身丈) 1枚入	販売単位 250 × 350 × 25	—	50枚	4971032505060
		外装 650 × 430 × 380	—		14971032505067

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

取扱店