

商品情報

■使用用途

- 胃ろう造設部の目隠し
- 胃ろうチューブの収納

- ▲装着する際はチューブを強く引っ張らないよう注意してください。
- ▲栄養剤を注入する際は、締め加減を適度に調節し、強く締めすぎないでください。


■バリエーション

種類	胸囲(A)	サイズ(高さ(B)×幅(C))
SS	40cm~50cm	12cm× 75cm
S	50cm~65cm	15cm× 90cm
M	65cm~80cm	15cm×100cm
L	80cm~90cm	15cm×119cm

■素材

本体:綿95%、ポリウレタン5%  
 ポケット:ポリエステル100%  
 ※天然ゴム不使用(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

■規格

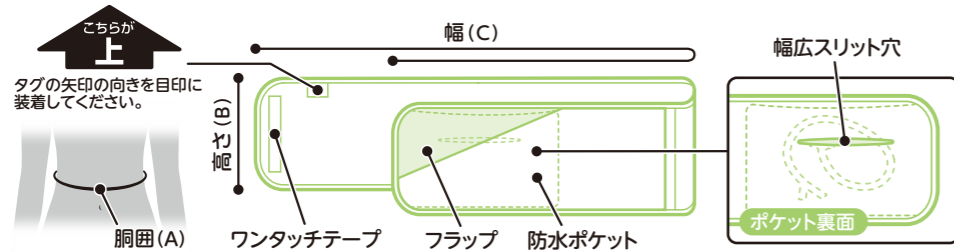

■着用方法

使い方動画はこちら!



看護ウエア  
 介護ウエア

ワンタッチ伸縮性腹帯

ポケット付  
 胃ろう用腹帯



胃ろう造設術後の事故(自己)抜去予防に適した  
 防水ポケット付き伸縮性腹帯です。

関連商品



Yカットガーゼ

- 必要な時にすぐ使用できる便利なYカットガーゼです。ガーゼタイプと不織布タイプがあります。
- 胃ろうチューブを挟み込めるようY型に切込みを入れた、処置用ガーゼです。
- 厚みがあるため吸収性・クッション性に優れ、気管カニューレ挿入部の保護に適しています。

あんしん手袋  
 1双入 フリーサイズ

- 自傷行為や事故(自己)抜去からからだを守る看護・介護用手袋です。
- ワンタッチテープで留めるだけで、簡単に装着できます。装着後はベルト部が隠れて直接触れないため、装着者本人では外しにくくなっています。

商品規格

商品画像	品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード/ITFコード
	70945	ポケット付 胃ろう用腹帯 SS 1枚入 胸囲40cm~50cm	販売単位   170 × 230 × 30	68.0g	10個 × 6袋		4971032709451
			内装   330 × 100 × 190	680.0g			
			外装   400 × 310 × 360	4.6kg			
	70946	ポケット付 胃ろう用腹帯 S 1枚入 胸囲50cm~65cm	販売単位   170 × 230 × 30	87.0g	10個 × 6袋		4971032709468
			内装   330 × 100 × 190	870.0g			
			外装   400 × 310 × 360	5.8kg			
	70947	ポケット付 胃ろう用腹帯 M 1枚入 胸囲65cm~80cm	販売単位   170 × 230 × 30	94.0g	10個 × 6袋		4971032709475
			内装   330 × 100 × 190	940.0g			
			外装   400 × 360 × 360	6.2kg			
	70948	ポケット付 胃ろう用腹帯 L 1枚入 胸囲80cm~90cm	販売単位   170 × 230 × 30	114.0g	10個 × 6袋		4971032709482
			内装   330 × 100 × 190	1.1kg			
			外装   400 × 360 × 360	7.4kg			

◇商品はすべてオープン価格です。

**Osaki**  
 オオサキメディカル株式会社  
 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
 https://www.osakimedical.co.jp/



オオサキメディカル  
 オフィシャルサイト


取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。






# 胃ろう造設術後の管理でお困りごとはありませんか？

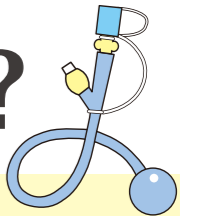


## 一般的な術後腹帯 (を使った際) のお困りごととトップ3

### 1. 事故 (自己) 抜去

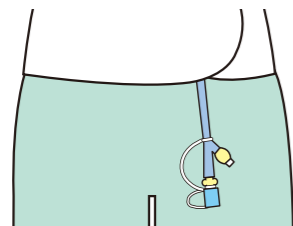


腹部を覆えるが、固定や収納ができないためチューブが出てしまい、事故 (自己) 抜去につながる。

### 2. 腹帯や衣服の汚れ

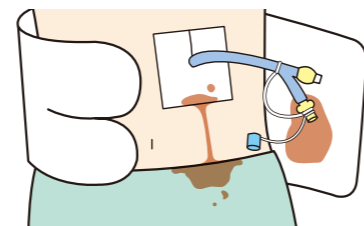

チューブのキャップが外れて栄養剤がモレた時は、腹帯も衣服も汚れてしまう。


### 3. 圧迫による皮膚トラブル

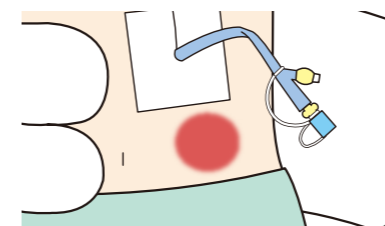

腹部全体が伸縮性のない生地で覆われて圧迫されることで、チューブの折れや皮膚トラブルが起こる。

#### 一般的な対策

ガーゼを挟むなどして直接の圧迫を予防

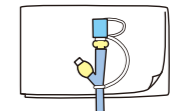


## そこで… ポケット付 胃ろう用腹帯を作りました!

### 1 抜去予防

- チューブが目立たないようポケットに収納でき、さらにポケット自体を隠すことができるため、抜去予防に適しています。
  - ポケットの入り口にフラップがついているため、ポケットの中に手を入れにくくなっています。
- 部分にワンタッチテープを留めるとフラップを隠すことができます。


### 2 防水ポケット付

ポケット内側が防水加工のため、液モレした際にも衣服が汚れにくくなっています。

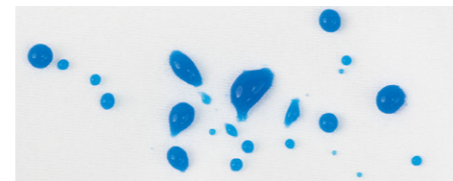

### 3 幅広スリット穴

チューブを通すスリット穴が幅広のため、腹帯がズレても挿入部が引っ張られにくく、抜去予防につながります。

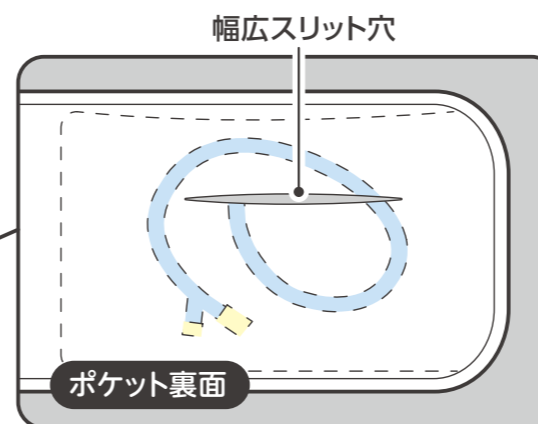


### 4 圧迫による皮膚トラブルが起きにくい

チューブをポケットに収納できるため、直接肌に接触せず皮膚トラブルを起こしにくいです。

### 5 チューブが折れにくい

伸縮性のある生地のため、ポケットに収納しても外部ストッパーに圧がかからず折れにくくなっています。

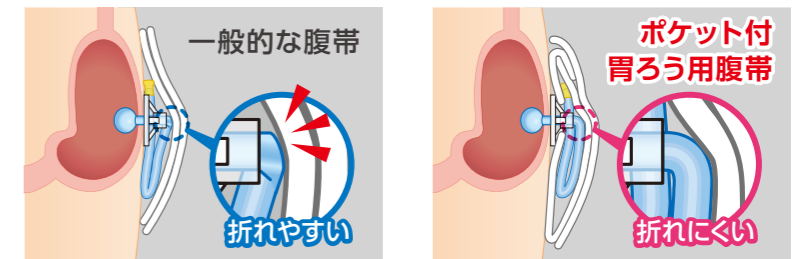

#### ■ 試用していただいた看護師さんの声


##### 事故 (自己) 抜去の一般的な対策

- ・ 腹帯を着用
- ・ つなぎ服やミトンを着用
- ・ チューブを衣服やからだに固定

この腹帯を使用することで、身体拘束しなくてもよくなるのが良い



テープでチューブを固定するとかぶれるので、この腹帯を使用することで皮膚トラブルが防げるのは良い

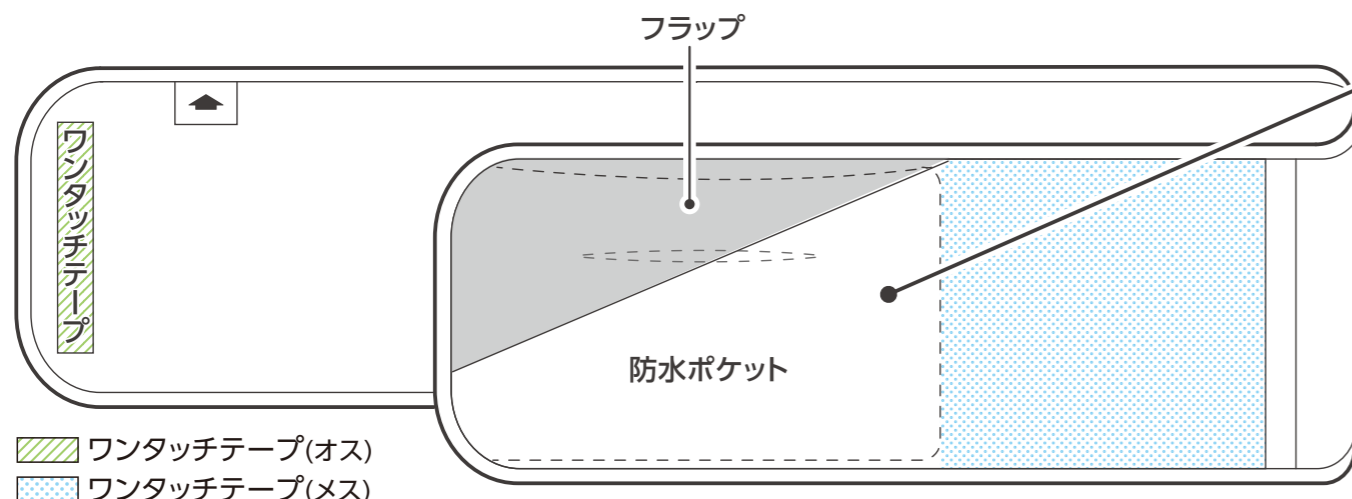

- ワンタッチテープ (オス)
- ワンタッチテープ (メス)