

# 歩行補助杖 すべりにくい杖

プラスハートは看護・介護現場の声から生まれました

- + 特殊耐滑性ゴム使用  
濡れた路面・床面でも滑りにくい
- + 表面保護アルマイト加工  
傷つきにくい本体
- + 軽量アルミ製  
軽くて持ち歩きやすい

身体に合わせて調整可能!  
伸縮2段式

持ち運びや収納に便利!  
伸縮折りたたみ式



滑りやすい路面や床面でも安心な  
歩行補助用の杖です。



看護・介護製品	看護・介護製品
介護歩行用品	介護歩行用品

## 商品規格

### すべりにくい杖 伸縮2段式

商品写真	品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード/ITFコード
	75080	すべりにくい杖 伸縮2段式 茶 1本入 適応身長 135cm~189cm	販売単位   171 × 770 × 37 外表   810 × 200 × 400	325.0g 10.8kg	30袋	ツエニシロクニチヤ 4 971032 750804	4971032750804 -
	75081	すべりにくい杖 伸縮2段式 黒 1本入 適応身長 135cm~189cm	販売単位   171 × 770 × 37 外表   810 × 200 × 400	325.0g 10.8kg	30袋	ツエニシロクニクロ 4 971032 750811	4971032750811 -
	75082	すべりにくい杖 伸縮2段式 銀 1本入 適応身長 135cm~189cm	販売単位   171 × 770 × 37 外表   810 × 200 × 400	325.0g 10.8kg	30袋	ツエニシロクニギン 4 971032 750828	4971032750828 -
	75083	すべりにくい杖 伸縮2段式 桃 1本入 適応身長 135cm~189cm	販売単位   171 × 770 × 37 外表   810 × 200 × 400	325.0g 10.8kg	30袋	ツエニシロクニモモ 4 971032 750835	4971032750835 -
	75084	すべりにくい杖 伸縮2段式 黒ドット 1本入 適応身長 135cm~189cm	販売単位   171 × 770 × 37 外表   810 × 200 × 400	345.0g 11.4kg	30袋	ツエニシロクニクロドット 4 971032 750842	4971032750842 -
	75085	すべりにくい杖 伸縮2段式 紫花 1本入 適応身長 135cm~189cm	販売単位   171 × 770 × 37 外表   810 × 200 × 400	345.0g 11.4kg	30袋	ツエニシロクニムラサキハナ 4 971032 750859	4971032750859 -
	75086	すべりにくい杖 伸縮2段式 赤花 1本入 適応身長 135cm~189cm	販売単位   171 × 770 × 37 外表   810 × 200 × 400	345.0g 11.4kg	30袋	ツエニシロクニアカハナ 4 971032 750866	4971032750866 -
	75087	すべりにくい杖 伸縮2段式 白花 1本入 適応身長 135cm~189cm	販売単位   171 × 770 × 37 外表   810 × 200 × 400	345.0g 11.4kg	30袋	ツエニシロクニシロハナ 4 971032 750873	4971032750873 -
	75088	すべりにくい杖 伸縮2段式 桃花 1本入 適応身長 135cm~189cm	販売単位   171 × 770 × 37 外表   810 × 200 × 400	345.0g 11.4kg	30袋	ツエニシロクニモモハナ 4 971032 750880	4971032750880 -
	75089	すべりにくい杖 伸縮2段式 紺花 1本入 適応身長 135cm~189cm	販売単位   171 × 770 × 37 外表   810 × 200 × 400	345.0g 11.4kg	30袋	ツエニシロクニコシハナ 4 971032 750897	4971032750897 -
	75090	すべりにくい杖 伸縮2段式 茶木目 1本入 適応身長 135cm~189cm	販売単位   171 × 770 × 37 外表   810 × 200 × 400	335.0g 11.1kg	30袋	ツエニシロクニチヤモク 4 971032 750903	4971032750903 -

### すべりにくい杖 伸縮折りたたみ式

商品写真	品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード/ITFコード
	75091	すべりにくい杖 伸縮折りたたみ式 茶 1本入 適応身長 146cm~170cm	販売単位   171 × 360 × 37 外表   565 × 305 × 375	330.0g 17.4kg	50袋	ツエオリクニチヤ 4 971032 750910	4971032750910 -
	75092	すべりにくい杖 伸縮折りたたみ式 黒 1本入 適応身長 146cm~170cm	販売単位   171 × 360 × 37 外表   565 × 305 × 375	330.0g 17.4kg	50袋	ツエオリクニクロ 4 971032 750927	4971032750927 -
	75093	すべりにくい杖 伸縮折りたたみ式 紫チェック 1本入 適応身長 146cm~170cm	販売単位   171 × 360 × 37 外表   565 × 305 × 375	330.0g 17.4kg	50袋	ツエオリクニムラサキツツ 4 971032 750934	4971032750934 -
	75094	すべりにくい杖 伸縮折りたたみ式 黒チェック 1本入 適応身長 146cm~170cm	販売単位   171 × 360 × 37 外表   565 × 305 × 375	330.0g 17.4kg	50袋	ツエオリクニクロツツ 4 971032 750941	4971032750941 -
	75095	すべりにくい杖 伸縮折りたたみ式 紺花 1本入 適応身長 146cm~170cm	販売単位   171 × 360 × 37 外表   565 × 305 × 375	330.0g 17.4kg	50袋	ツエオリクニコシハナ 4 971032 750958	4971032750958 -
	75096	すべりにくい杖 伸縮折りたたみ式 紫花 1本入 適応身長 146cm~170cm	販売単位   171 × 360 × 37 外表   565 × 305 × 375	330.0g 17.4kg	50袋	ツエオリクニムラサキハナ 4 971032 750965	4971032750965 -

◇商品はすべてオープン価格です。

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221  
ホームページ/ <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail/ [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)


■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。  
※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店

# 高齢者の救急搬送の原因 ワースト1は“転倒”です。

過去5年間で、高齢者の救急搬送の  
**約8割は“転倒”が原因**です。

参考：“救急搬送データから見る高齢者事故”、東京消防庁ホームページ。（参照 2020-07-30）。

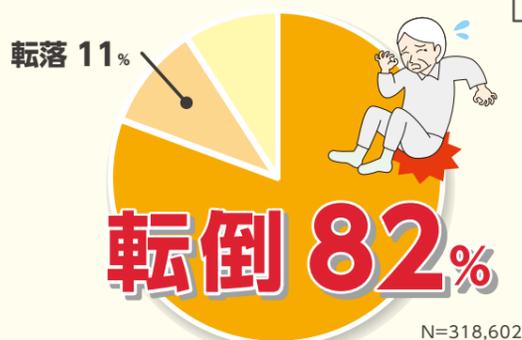


## 転倒から生じる悪循環

一度の転倒が、フレイル(自信喪失による気力低下)<sup>※1</sup>や、サルコペニア(筋力の低下)<sup>※2</sup>の発症リスクを高めます。

※1: 加齢と共に心身の活力が低下し、複数の慢性疾患の併存などの影響もあり、生活機能が障害されて心身が脆弱化した状態。

※2: 筋肉量の低下と筋力の進行性の消失があり、身体機能低下、QOL低下や死亡など健康被害のリスクを伴う状態。

参考：“2017年7月18日 厚生労働省市町村セミナー「後期高齢者の健康」”、“高齢者糖尿病の薬物療法”、厚生労働省ホームページ。（参照 2020-08-12）。

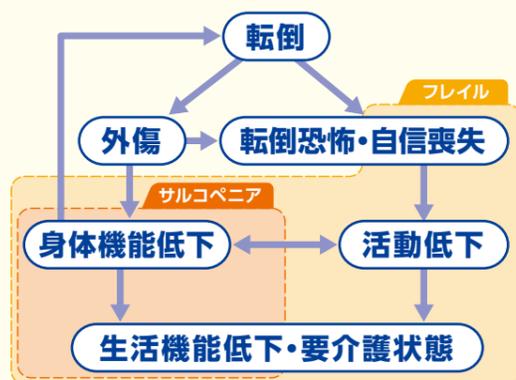

そうならないために!

**転倒予防**をする事が**大切**です。



**雨の日**は、より**転倒の危険**が..!

雨の日は「建物内の濡れた床」、「マンホールや側溝のフタの上」など、足元や杖先が滑りやすく危険!!

**“すべりにくい杖”で今すぐ転倒予防を!**

- 「すべりにくい杖」の先ゴムは、特殊な溝形状で雨の日でも滑りにくい!
- 安心して外出ができるように、**転倒防止にこだわった杖**です。
- 病院内での使用や、リハビリにも最適です。(リハビリで使用の際は、医師に相談してください。)

## “転倒防止”にこだわった“すべりにくい杖”

### + 1.滑りにくい溝形状の先ゴム

- 先ゴムは特殊な溝形状で、滑りにくくなっています。
- 先ゴムの材料に混合物が入っていないため、床などを傷つけにくくなっています。

### + 2.傷つきにくい表面加工

- 杖本体の表面にアルマイト加工<sup>※3</sup>を施しているため、傷つきにくく、長く使用できます。
- ※3: 表面に陽極酸化被膜を作る処理です。アルミニウム表面に、人工的に分厚い酸化アルミニウム被膜を作ることで耐食性、耐摩耗性の向上が見込めます。

### + 3.軽量のアルミ製

- 軽くて持ち歩きやすいアルミ製のため、長時間使用しても疲れにくくなっています。
- 伸縮折りたたみ式はコンパクトになるため、持ち運びに便利です。

### + 4.選べるカラーバリエーション

- 服装に合わせて、杖をおしゃれの一部として楽しめます。

高い  
滑り止め効果!



滑りにくい溝形状!  
特殊耐滑性ゴム使用\*

\*日進ゴム(株)製



安心・安全

製品安全協会認定  
SGマーク適合品

#### 伸縮2段式



#### 伸縮折りたたみ式



#### 商品情報

	サイズ	素材	適応身長	重量
伸縮2段式	全長:71cm~97cm (2cm間隔・14段調節) 杖直径:16mm	本体:アルミ合金 持ち手(2種類):[無地]ポリプロピレン [柄入]木製	135cm~189cm	無地:270g 柄入:290g(茶木目のみ280g)
伸縮折りたたみ式	全長:76cm~88cm (2cm間隔・7段調節) 杖直径:17.5mm	ストラップ:ポリプロピレン 先ゴム:合成ゴム(ニトリルゴム)	146cm~170cm	300g

#### 関連商品

**店頭陳列に最適な木製什器!**

販売効果UP!

- 手に取りやすい
- 17本収納可能!商品が見やすい
- 店頭が華やかに

**取り替えが可能な先ゴム**

- 雨の日も滑りにくい
- 床を傷つけにくい
- 杖直径 16mm~17.5mm 対応

#### 歩行補助杖用 木製什器

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード / ITFコード
75097	歩行補助杖用 木製什器 1台入 17本用	販売単位   550 × 800 × 200	2.0kg	—	ツロ シ・ユウキ	4971032750972

◇商品はすべてオープン価格です。

#### すべりにくい杖 先ゴム

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード / ITFコード
75098	すべりにくい杖 先ゴム 黒 1ヶ入 杖直径 16mm~17.5mm	販売単位   100 × 150 × 33 外装   380 × 170 × 320	35.0g 1.9kg	42個	ツロ シキコ・ムラサキ	4971032750989

◇商品はすべてオープン価格です。