

一般医療機器

滅菌ディスポ万能ツボ

クイックカップ®シリーズ



脱脂綿製品	脱脂綿製品
綿球 ディスポ消耗品	綿球 ディスポ消耗品

院内感染対策や万能ツボの再生業務でお困りではありませんか？



商品規格

■滅菌QCパール®綿球S・J

一般医療機器 コットンボール:11028000

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード	
34269	滅菌QCパール®綿球S EB7-10 7mm (直径) 10球入 (10個)	販売単位	218 × 175 × 192	276.4g	8箱	4971032342696 14971032342693
		外表	450 × 244 × 398	2.8kg		
34270	滅菌QCパール®綿球S EB10-10 10mm (直径) 10球入 (10個)	販売単位	218 × 175 × 192	280.0g	8箱	4971032342702 14971032342709
		外表	450 × 244 × 398	2.8kg		
34271	滅菌QCパール®綿球S EB14-10 14mm (直径) 10球入 (10個)	販売単位	218 × 175 × 192	287.2g	8箱	4971032342719 14971032342716
		外表	450 × 244 × 398	2.9kg		
34272	滅菌QCパール®綿球S EB14-20 14mm (直径) 20球入 (10個)	販売単位	218 × 175 × 192	303.9g	8箱	4971032342726 14971032342723
		外表	450 × 244 × 398	3.0kg		
34273	滅菌QCパール®綿球S EB20-10 20mm (直径) 10球入 (10個)	販売単位	218 × 175 × 192	310.5g	8箱	4971032342733 14971032342730
		外表	450 × 244 × 398	3.1kg		
34274	滅菌QCパール®綿球S EB20-15 20mm (直径) 15球入 (10個)	販売単位	218 × 175 × 192	330.5g	8箱	4971032342740 14971032342747
		外表	450 × 244 × 398	3.2kg		
34237	滅菌QCパール®綿球J EB20-20 20mm (直径) 20球入 (10個)	販売単位	217 × 175 × 192	421.8g	8箱	4971032342375 14971032342372
		外表	454 × 367 × 402	4.1kg		
34241	滅菌QCパール®綿球J EB25-10 25mm (直径) 10球入 (10個)	販売単位	217 × 175 × 192	417.2g	8箱	4971032342412 14971032342419
		外表	454 × 367 × 402	4.1kg		
34248	滅菌QCパール®綿球J EB30-10 30mm (直径) 10球入 (10個)	販売単位	217 × 175 × 192	456.2g	8箱	4971032342481 14971032342488
		外表	454 × 367 × 402	4.4kg		

■販売名:滅菌パール綿球 ■届出番号:23B2X10001000032 ◇商品はすべてオープン価格です。

■滅菌QCスリムコットンS・J

一般医療機器 医療脱脂綿:70975000

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード	
34404	滅菌QCスリムコットンS 4cm×4cm 5g入 (10個) E.O.G滅菌済	販売単位	190 × 115 × 218	320.5g	8箱	4971032344041 14971032344048
		外表	450 × 244 × 398	3.1kg		
34400	滅菌QCスリムコットンJ 4cm×4cm 15g入 (10個) 電子線滅菌済	販売単位	217 × 175 × 192	458.4g	8箱	4971032344003 14971032344000
		外表	454 × 367 × 402	4.4kg		

■販売名:滅菌オオサキ医療脱脂綿 ■届出番号:23B2X10001000030 ◇商品はすべてオープン価格です。

■滅菌QCクイックカップ®S・J

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード	
55647	滅菌QCクイックカップ®S EB 125cc(10個)	販売単位	218 × 115 × 193	270.5g	8箱	4971032556475 14971032556472
		外表	450 × 244 × 398	2.7kg		
55635	滅菌QCクイックカップ®J EB 250cc(10個)	販売単位	218 × 175 × 193	341.6g	8箱	4971032556352 14971032556359
		外表	454 × 367 × 402	3.5kg		

◇商品はすべてオープン価格です。

■QCクイックスタンド

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード	
55675	QCクイックスタンド 5個入	販売単位	160 × 95 × 100	-	20袋	4971032556758 14971032556755
		外表	495 × 215 × 335	-		

◇商品はすべてオープン価格です。

■QCクイックスタンドホルダー

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード	
55643	QCクイックスタンドホルダー 5個入	販売単位	90 × 120 × 90	-	20袋	4971032556437 14971032556434
		外表	435 × 150 × 350	-		

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店

商品特長

選べる2サイズ

- Sカップ(約125cc)とJカップ(約250cc)の2つのサイズから選べます。内容量や用途に合わせて無駄なく使用できます。

片手操作で清潔開閉

- ステンレス万能ツボ感覚で使用でき、フタの開閉を片手操作で清潔・確実に行えます。

使い切りで院内感染防止に

- 薬液を注ぐだけで使用できる、ディスポ万能ツボタイプのため、いつでも清潔・簡単に使用できます。(目安になる目盛りがついています。)
- 衛生材料を万能ツボに移しかえる必要がなく、汚染リスクを軽減できます。

万能ツボの再生業務の省力化に

- 衛生材料の滅菌や、万能ツボの再生業務(洗浄、滅菌など)の省力化が図れます。

環境を配慮したパッケージ


- 使用後はフタとカップを分離し、カップは重ねて廃棄することができるため、ゴミの減量が図れます。



ラインナップ

■滅菌QCパール®綿球S・J

- 薬液を注ぐだけで使用できる、ディスポタイプの万能ツボに入った滅菌済パール®綿球です。
- 本品の綿球には、薬液の使用量を10%~15%節約できる、経済的なパール®綿球を使用しています。(当社オオサキ綿球比)パール®綿球は合成樹脂接着剤を一切使用せず、特殊表面加工により綿球の毛羽を押えてあるため、脱落繊維が少なく創傷部に綿残りしません。

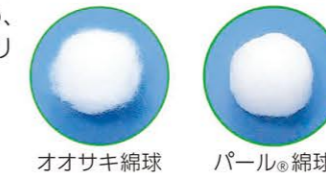

オオサキ綿球 パール®綿球



■滅菌QCスリムコットンS・J

- 薬液を注ぐだけで使用できる、ディスポタイプの万能ツボに入った滅菌済スリムコットンです。
- ダイヤモンドプレス加工が施してあるため、毛羽立ちが少なく1枚1枚はがしやすくなっています。




■滅菌QCクイックカップ®S・J

- 幅広い用途に使用できる滅菌済ディスポ万能ツボです。



商品情報

■使用方法

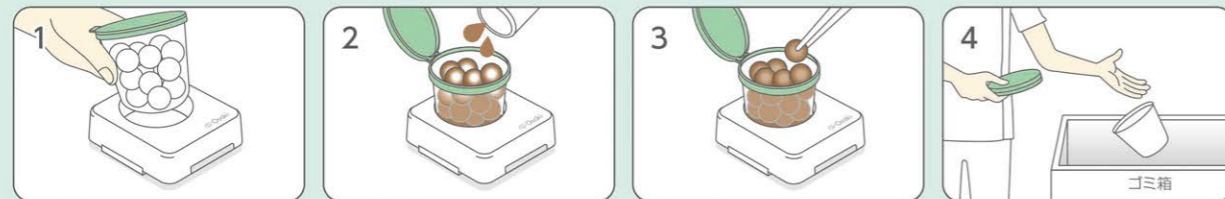

1 フィルムパックを開封し、“滅菌QCパール®綿球J”を取り出した後、“QCクイックスタンド”に差し込みます。
 2 テープを剥がし、フタを開けて薬液を注ぎます。
 3 綿球を取り出し、消毒などの処置を行います。処置後は、必ずフタを閉じてください。
 4 カップの中の綿球がなくなったら、カップをそのままゴミ箱へ捨てます。

※滅菌QCパール®綿球J、及びQCクイックスタンド使用の場合

補助商品



■QCクイックスタンド

- QC・ネオシリーズ用のスタンドとして、カップの安定を保つのに最適です。
- 滑り止めストッパー付きで、側面のフックを連結して使用できます。



■QCクイックスタンドホルダー

- QCシリーズ用ホルダーとして、QCクイックスタンドに装着して使用します。Sカップに装着するとJカップと同じ高さで使用することができます。(右写真①)
- 簡易スタンドとして、単体でも使用できます。(右写真②)
- シリコンゴム製で滑りにくい形状です。



関連商品



■アルウエッティ®cup

- 片手操作で開閉でき、高い気密性でアルコール濃度の低下を防ぐ、60枚入ディスポ万能ツボタイプの外皮消毒綿です。
- 脱脂綿(1枚)のサイズ:4cm×4cm



■ネオシリーズ

- 上ブタをめくるだけで直接薬液を注いで使用できる、カップに入った滅菌済パール®綿球です。