

商品規格

■オオサキ 縫製ガーゼX KL

一般医療機器 X線造影材入りスポンジ:13705000

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード	
13746	オオサキ 縫製ガーゼX KL20204PT 20枚入 20cm×20cm 4ply 柄付	販売単位	210 × 40 × 102	185.0g	12包	4971032137469
		外装	325 × 180 × 225	2.5kg		
13747	オオサキ 縫製ガーゼX KL30304PT 20枚入 30cm×30cm 4ply 柄付	販売単位	155 × 135 × 80	320.0g	6包	4971032137476
		外装	260 × 290 × 170	2.2kg		
13777	オオサキ 縫製ガーゼX KL30304P 20枚入 30cm×30cm 4ply	販売単位	155 × 135 × 80	320.0g	6包	4971032137773
		外装	260 × 290 × 170	2.2kg		
13748	オオサキ 縫製ガーゼX KL30308PT 20枚入 30cm×30cm 8ply 柄付	販売単位	155 × 260 × 80	554.0g	6包	4971032137483
		外装	330 × 275 × 260	3.7kg		
13778	オオサキ 縫製ガーゼX KL30308P 20枚入 30cm×30cm 8ply	販売単位	155 × 260 × 80	554.0g	6包	4971032137780
		外装	330 × 275 × 260	3.7kg		
13749	オオサキ 縫製ガーゼX KL30454PT 20枚入 30cm×45cm 4ply 柄付	販売単位	155 × 140 × 118	467.0g	6包	4971032137490
		外装	375 × 300 × 170	3.1kg		
13750	オオサキ 縫製ガーゼX KL30458PT 20枚入 30cm×45cm 8ply 柄付	販売単位	310 × 100 × 155	828.0g	6包	4971032137506
		外装	330 × 320 × 325	5.5kg		
13779	オオサキ 縫製ガーゼX KL30458P 20枚入 30cm×45cm 8ply	販売単位	310 × 100 × 155	828.0g	6包	4971032137797
		外装	330 × 320 × 325	5.5kg		
13751	オオサキ 縫製ガーゼX KL45454PT 20枚入 45cm×45cm 4ply 柄付	販売単位	155 × 200 × 118	649.0g	6包	4971032137513
		外装	375 × 215 × 330	4.4kg		
13752	オオサキ 縫製ガーゼX KL45458PT 20枚入 45cm×45cm 8ply 柄付	販売単位	155 × 350 × 118	1.2kg	8包	4971032137520
		外装	495 × 365 × 330	10.5kg		
13780	オオサキ 縫製ガーゼX KL45458P 20枚入 45cm×45cm 8ply	販売単位	155 × 350 × 118	1.2kg	8包	4971032137803
		外装	495 × 365 × 330	10.5kg		
13816	オオサキ 縫製ガーゼX KL30604PT 20枚入 30cm×60cm 4ply 柄付	販売単位	155 × 130 × 155	561.0g	6包	4971032138169
		外装	485 × 280 × 170	4.0kg		
13753	オオサキ 縫製ガーゼX KL30608PT 20枚入 30cm×60cm 8ply 柄付	販売単位	310 × 130 × 155	1.1kg	6包	4971032137537
		外装	485 × 280 × 325	7.2kg		
13817	オオサキ 縫製ガーゼX KL60604PT 20枚入 60cm×60cm 4ply 柄付	販売単位	310 × 155 × 120	1.1kg	6包	4971032138176
		外装	485 × 330 × 260	7.3kg		
13754	オオサキ 縫製ガーゼX KL60608PT 10枚入 60cm×60cm 8ply 柄付	販売単位	316 × 120 × 155	1.1kg	6包	4971032137544
		外装	485 × 260 × 330	7.2kg		

販売名:縫製ガーゼX-KS ■届出番号:23B2X10001000067
製造国:中国

◇商品は全てオープン価格です。

■滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KL

一般医療機器 X線造影材入りスポンジ:13705000 E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード	
13755	滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KL20204PT 2枚入(40袋) 20cm×20cm 4ply 柄付	販売単位	260 × 150 × 150	900.0g	4箱	4971032137551
		外装	320 × 320 × 280	4.1kg		
13756	滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KL30304PT 2枚入(40袋) 30cm×30cm 4ply 柄付	販売単位	260 × 280 × 200	1.6kg	4箱	4971032137568
		外装	420 × 580 × 280	7.4kg		
13757	滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KL30308PT 2枚入(20袋) 30cm×30cm 8ply 柄付	販売単位	260 × 270 × 200	1.4kg	4箱	4971032137575
		外装	540 × 290 × 420	6.6kg		
13758	滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KL30454PT 2枚入(20袋) 30cm×45cm 4ply 柄付	販売単位	295 × 145 × 200	1.2kg	4箱	4971032137582
		外装	420 × 310 × 315	5.3kg		
13759	滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KL30458PT 2枚入(15袋) 30cm×45cm 8ply 柄付	販売単位	220 × 280 × 200	1.5kg	4箱	4971032137599
		外装	460 × 300 × 420	7.0kg		
13760	滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KL45454PT 2枚入(12袋) 45cm×45cm 4ply 柄付	販売単位	295 × 120 × 200	1.0kg	4箱	4971032137605
		外装	420 × 260 × 310	4.6kg		
13761	滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KL45458PT 2枚入(12袋) 45cm×45cm 8ply 柄付	販売単位	295 × 225 × 200	1.7kg	2箱	4971032137612
		外装	420 × 245 × 310	4.0kg		
13762	滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KL30608PT 2枚入(20袋) 30cm×60cm 8ply 柄付	販売単位	390 × 285 × 200	2.5kg	4箱	4971032137629
		外装	800 × 305 × 420	11.0kg		
13763	滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KL60608PT 1枚入(15袋) 60cm×60cm 8ply 柄付	販売単位	220 × 370 × 200	2.1kg	2箱	4971032137636
		外装	420 × 390 × 235	4.5kg		

販売名:滅菌縫製ガーゼX-KS ■届出番号:23B2X10001000068
製造国:中国


◇商品は全てオープン価格です。



一般医療機器

X線造影材入りスポンジ

オオサキ 縫製ガーゼX KL 滅菌オオサキ 縫製ガーゼX KL

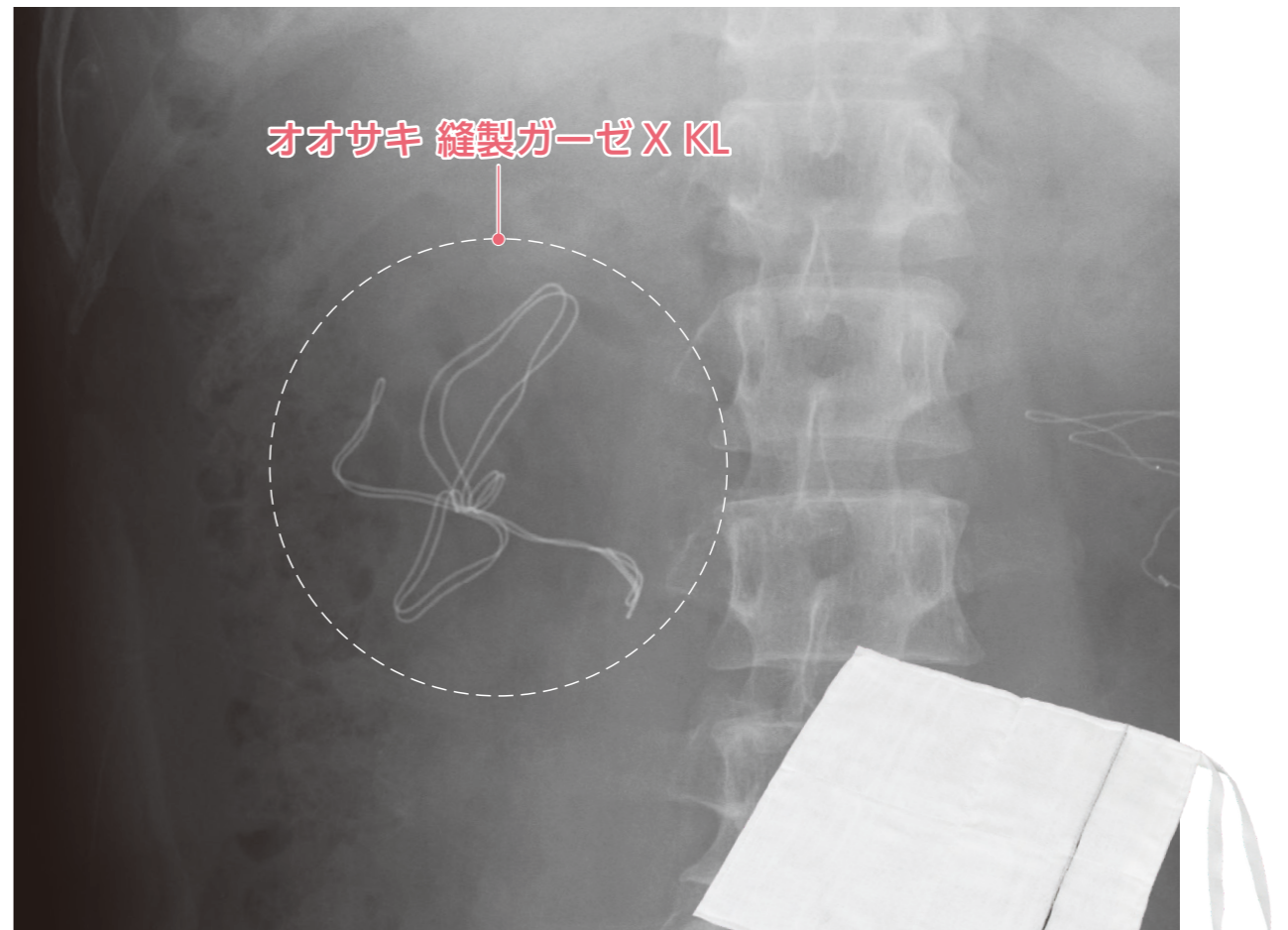

レントゲン撮影時の視認性が高い
X線造影糸を織り込んだ縫製ガーゼです。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
https://www.osakimedical.co.jp/



オオサキメディカル
オフィシャルサイト

取扱店




多重になったX線造影糸で、レントゲン撮影時の視認性が高い縫製ガーゼです。

1. 高い視認性を実現するX線造影糸

- レントゲン撮影時の視認性が高いポリスチレン系熱可塑性エラストマーを使用した、X線造影糸入り手術用縫製ガーゼです。
- X線造影糸が多重※になっているため、レントゲン撮影時の視認性が高くなっています。
- 万一体内に遺残した場合でもレントゲン撮影により位置の特定ができます。

オオサキ 縫製ガーゼ X KL

当社従来品

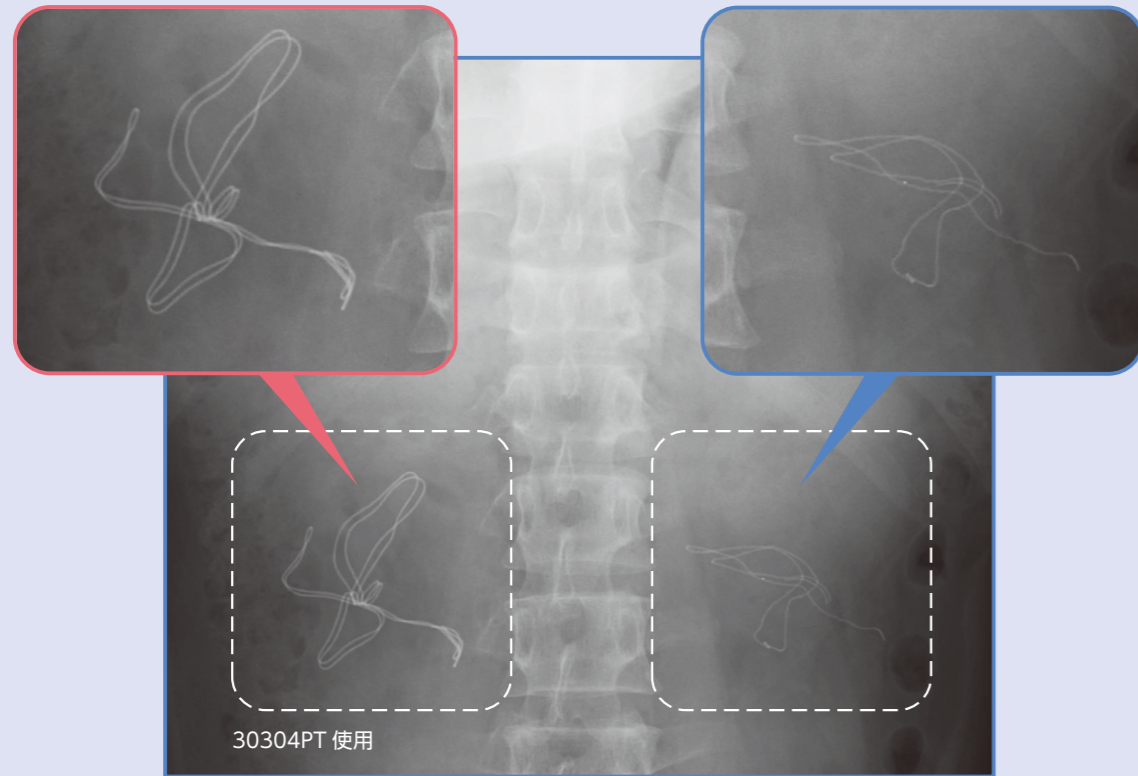

30304PT 使用

X線造影糸拡大

※X線造影糸の重なり

サイズ	厚み	X線造影糸	
		2重	4重
20cm×20cm	4ply	○	
30cm×30cm	4ply	○	
	8ply		○
30cm×45cm	4ply	○	
	8ply		○
45cm×45cm	4ply	○	
	8ply		○
30cm×60cm	4ply	○	
	8ply		○
60cm×60cm	4ply	○	
	8ply	○	

2. 高い吸水量

- 目が細かな医療ガーゼタイプIIを使用しているため、血液や体液の吸収に優れています。


■医療用ガーゼの形状規格

タイプ	1cm間の糸数(本)				1cm×1cmの糸数の許容誤差	標準幅(cm)	標準重量(g)
	縦糸		横糸				
	平均	許容誤差	平均	許容誤差			
I	12	±1	12	±1	24+2 24-1	30+0.5 30-1.0	幅30cm 長さ100cm 10.3±8%
II	12	±1	12	±1	24+2 24-1	91.4±1.5	幅91.4cm 長さ30cm 8.7±8%
III	11	±1	9	±1	20+2 20-1	91.4±1.5	幅91.4cm 長さ30cm 7.6±8%
IV	9	±1	8	±1	17+2 17-1	91.4±1.5	幅91.4cm 長さ30cm 6.1±8%

縫製ガーゼX

3. 豊富なバリエーション

- バリエーションが豊富なため、使用用途に合わせてサイズや厚み、滅菌の有無が選べます。

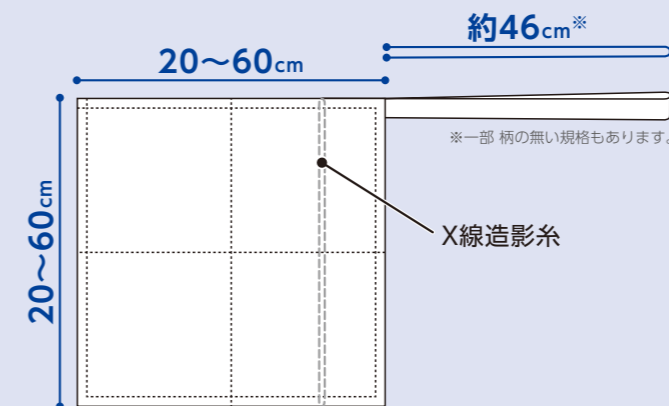

商品情報

■使用方法

術野の確保や臓器保護などに使用する場合は、本品に滅菌済 生理食塩水を含ませ、適度な湿潤状態にしてから使用してください。

■使用用途

- 術野の確保のため、丸めて手前の臓器を圧排
- 創部の保護(開創器と共に使用)
- 創部の乾燥防止
- 体腔内深部臓器の手術時に、手前の臓器を体外へ挙上するため臓器を包む
- 取り出した臓器を包む
- 液の吸収

■素材

ガーゼ:綿100%
X線造影糸:[固定材] ポリスチレン系熱可塑性エラストマー
[造影剤] 硫酸バリウム
[着色剤] カーボンブラック

関連商品



一般医療機器

オオサキ縫製ガーゼX KP / 滅菌オオサキ縫製ガーゼX KP

■販売名:縫製ガーゼX-KS ■届出番号:23B2X10001000067

- X線造影材にレントゲン撮影時の視認性の高い、ポリスチレン系熱可塑性エラストマーを使用した、医療ガーゼタイプIIの手術用縫製ガーゼです。
- 幅が広いプレート形状のX線造影材をガーゼに埋め込んでいるため、レントゲン撮影時の視認性が高まります。

- X線造影プレートは柔らかい素材を使用し、角丸形状にしているため、組織を傷つけにくく愛護的に使用できます。
- バリエーションが豊富なため、使用用途に合わせて滅菌の有無と適切なサイズが選べます。