

一般医療機器

X線造影材入りガーゼ

滅菌OPガーゼX 黒線



写りの良いX線造影糸を織り込んだ
手術用ガーゼです。



ガーゼ製品


手術ガーゼ

E.O.G.

商品特長

1 X線造影糸入り

- X線造影糸を織り込んだ手術用ガーゼです。
- 万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置の特定ができます。

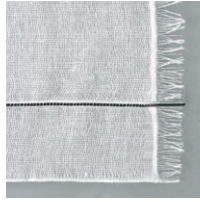


2 1枚あたりの重量が一定

- 1枚 (30cm×30cm) あたりの重量 (約3.3g) が一定で、出血量の測定に適しています。

3 使用感そのまま、X線造影糸を太く!


- 硫酸化バリウムを増量することにより、写りやすく目視も容易になりました。

太さUP↑

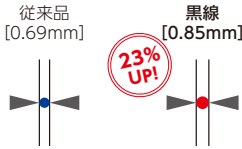

血液を吸収させたガーゼ(黒線)

レントゲン撮影イメージ

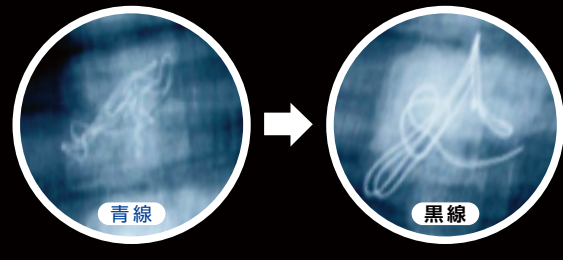


商品情報

■ 素材


ガーゼ: 綿100%
 X線造影糸: [固定材] ポリスチレン系熱可塑性エラストマー
 [造影剤] 硫酸バリウム
 [着色剤] カーボンブラック

環境ホルモンに配慮したX線造影糸黒線


破断強度*UP↑

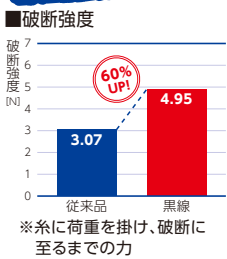


伸長率*UP↑

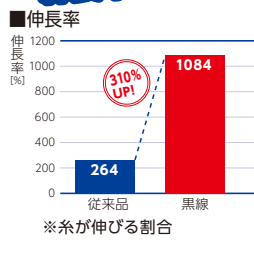

破断エネルギー*UP↑

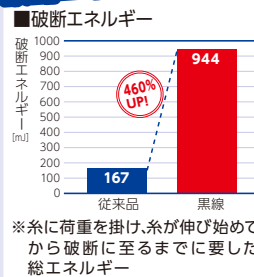

■ 破断エネルギーのグラフ

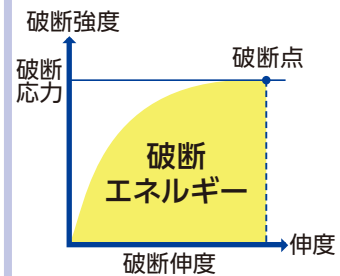

商品規格

一般医療機器 X線造影材入りガーゼ: 32374000 E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
10073	滅菌OPガーゼX 黒線 S4-10 10枚入(30袋) 30cm×30cm 4ツ折	販売単位 205 × 295 × 200	—	4箱	4971032100739
		外装 420 × 308 × 410	—		—
10074	滅菌OPガーゼX 黒線 S4-20 20枚入(15袋) 30cm×30cm 4ツ折	販売単位 205 × 295 × 200	—	4箱	4971032100746
		外装 420 × 308 × 410	—		—
10075	滅菌OPガーゼX 黒線 S4-30 30枚入(10袋) 30cm×30cm 4ツ折	販売単位 205 × 295 × 200	—	4箱	4971032100753
		外装 420 × 308 × 410	—		—

■販売名:滅菌OPガーゼX-KS ■届出番号:23B2X10001000066
 ■その他の規格は、お客様のご要望に応じて承ります。

◇ 商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
 オフィシャルサイト

取扱店

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
 ※規格には誤差が生じる場合があります。