

## 関連商品



### 破水セット

- 出産入院直後、破水に備えて使用する、お産用パッドやショーツ、交換用のパッドなどを組み合わせたセットです。



### キュッとベルト.D

- 出産直後の骨盤をしっかり固定する、ディスプレイブルタイプの骨盤ベルトです。
- やわらかく丈夫な不織布が産直後の骨盤をしっかり固定します。
- 交差して引っ張り、ワンタッチテープで留めるだけで簡単に着脱できます。



### ソフトレーヌαガード。

- モレ・ムレ・ズレを徹底ガードし、プラスアルファの安心感があるお産用パッドです。
- 立体サイドギャザーが体にぴったりフィットし、横モレをしっかりガードします。
- 粉碎パルプと高吸収ポリマーの吸収構造が素早くたっぷり吸収し、逆戻りを防ぎます。



### dc 使い捨てコットンショーツ

- 前開き機能と防水布を省いた使い捨てタイプのため経済的な産じょくショーツです。ママや家族の洗濯の手間を軽減でき、悪露などで汚れたショーツの放置がなく衛生的です。
- 衛生的な1枚ずつの個包装で、入院日数に合わせた4枚入りです。
- フリーサイズで適応サイズが広いので、サイズごとの在庫管理やサイズ選びの手間を軽減できます。

## 商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
96218	dc 直後パッドWギャザー CF-A 1組入 ソフトレーヌαガードL、Sweetギャザー付SL、 使い捨てコットンショーツ フルオープン	販売単位   250×340×36	149.0g	30袋	4971032962184
		外装   610×475×350	5.5kg		
96219	dc 直後パッドWギャザー CF-B 1組入 ソフトレーヌαガードL、Sweetギャザー付SL、 使い捨てコットンショーツ フルオープン、ウエストカパーラミ	販売単位   250×340×39	201.0g	30袋	4971032962191
		外装   610×475×350	7.0kg		
96090	dc 直後パッドWギャザー A 1組入 ソフトレーヌαガードL、Sweetギャザー付SL、αショーツ	販売単位   250×340×36	153.0g	30袋	4971032960906
		外装   610×475×350	5.7kg		
96091	dc 直後パッドWギャザー B 1組入 ソフトレーヌαガードL、Sweetギャザー付SL、 αショーツ、ウエストカパーラミ	販売単位   250×340×39	208.0g	30袋	4971032960913
		外装   610×475×350	7.5kg		

■減菌、その他の規格はお客様のご要望に応じて承ります。

◇商品はすべてオープン価格です。



Wギャザーでモレを徹底ブロック！  
2枚重ねでパッド交換の負担軽減！

# 直後パッド Wギャザー

daccoは助産師さんとママの声から生まれました


ダブル  
Wギャザーで  
モレを防止

2枚重ねで  
パッド交換の  
負担軽減

パッドへの重量表示で  
出血量の  
計算に便利



**Osaki**  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
https://dacco-web.com

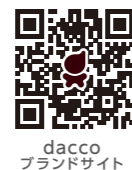



取扱店

\*規格には誤差が生じる場合があります。

# パッド2枚のWギャザーでモレを徹底ブロックして交換に便利! 分娩直後に使用する、お産用パッドとショーツなどのセットです。


## 1 前後左右のモレを防止!

- インナーパッドとアウターパッドのWサイドギャザーで、横モレを徹底ブロック!
- 専用設計のインナーパッドはアウターパッドにぴったり重なる長さで、前後からのモレも防ぎます。

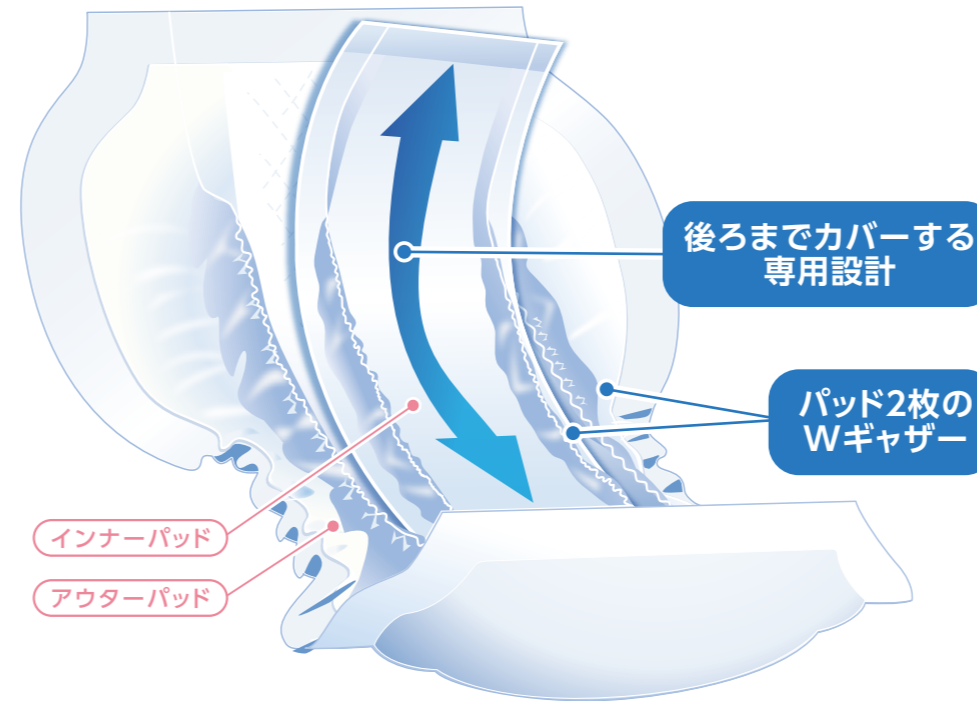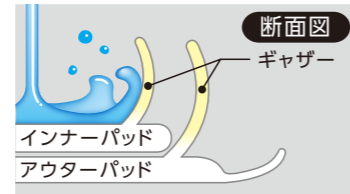

## 3 出血量の計算に便利!

- インナーパッドが前後左右のモレを防止して、アウターパッドへモレにくいいため、インナーパッドだけで1回目の出血量の計算ができます。
- パッド裏側の後方にパッドの重量表示があるため、出血量が計算しやすくなっています。

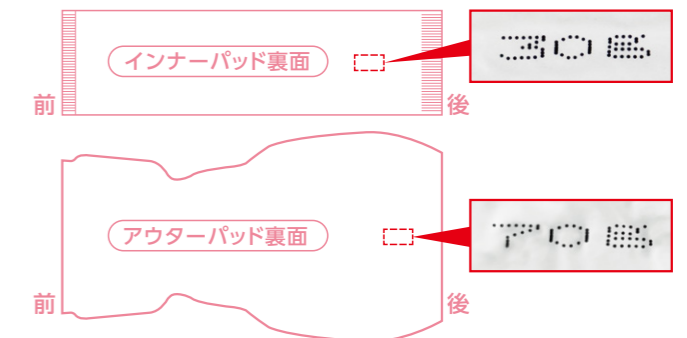

● 重量は±10%程度の誤差が生じる場合があります。

## 2 パッド交換の負担軽減!

- パッドが2枚重ねのため、1回目の交換時は汚れたインナーパッドを外すだけで済みます。そのため、パッド交換にかかる時間の短縮と、ママの体位変換にかかる負担を軽減できます。

### お産用パッド

#### アウターパッド

##### 1 ソフトレーヌαガードL

モレ・ムレ・ズレを徹底ガードする、立体サイドギャザー付きお産用パッド。

規格: 30cm×56cm/重量約70g  
 素材: [表面材] 不織布  
 [吸収体] 高吸収ポリマー、綿状パルプ  
 [防水材] ポリエチレン  
 [ギャザー部ゴム] 合成ゴム  
 ※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

#### インナーパッド

##### 2 Sweetギャザー付SL

ソフトレーヌαガードLのインナーパッドとしてぴったり重なるよう専用設計された、立体サイドギャザー付きお産用パッド。

規格: 12cm×48cm/重量約30g  
 素材: [表面材] ポリプロピレン、ポリエチレン  
 [吸収体] 高吸収ポリマー、綿状パルプ  
 [防水材] ポリエチレン  
 [ギャザー部ゴム] 合成ゴム  
 ※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

### 産じょくショーツ


寝たまま着脱やパッド交換ができ、パッドを体にフィットさせてモレにくい三方開きのショーツです。2種類から選ぶことができ、どちらのショーツも専用アジャスター(別売)を使用すると、適用サイズが広がります。



##### 3 使い捨てコットンショーツ フルオープン

肌にやさしい綿100%のフリーサイズのショーツ。前側は股上が浅めのローライズで、クロス形状のため、出産直前や直後の大きなおなかでも締め付けにくく、ラクなはき心地です。

適応サイズ: ヒップ 82cm~110cm(アジャスター使用時 ヒップ 110cm~140cm)  
 素材: [ショーツ] 綿100%  
 [アジャスター] ポリエステル100%  
 ※全てラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

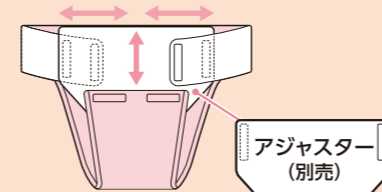

##### 4 αショーツ

ソフトレーヌαガードLにぴったりフィットする、ポリエステル素材のフリーサイズのショーツ。


適応サイズ: ヒップ 82cm~110cm(アジャスター使用時 ヒップ 97cm~140cm)  
 素材: [ショーツ] ポリエステル100%  
 [アジャスター] ナイロン100%  
 ※全てラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

### 吸水防水腰巻

##### 5 ウエストカバーラミ

不織布にフィルムを貼り合わせた、吸水防水タイプの腰巻。万一の血液のモレや分娩直後の体温低下を防止します。

素材: [吸収材] レーヨン、ポリエステル  
 [防水材] ポリエチレン

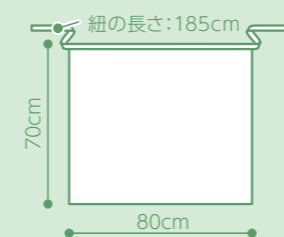

### セット内容

種類	お産用パッド		産じょくショーツ		吸水防水腰巻
	① ソフトレーヌαガードL	② Sweetギャザー付SL*	④ 使い捨てコットンショーツフルオープン	③ αショーツ	⑤ ウエストカバーラミ
CF-A	×1	×1	×1		
CF-B	×1	×1	×1		×1
A	×1	×1		×1	
B	×1	×1		×1	×1

※Sweetギャザー付SLは、ソフトレーヌαガードLの上に重ねます。  
 ■その他の規格はお客様のご要望に応じて承ります。

