




ディスポーザブル吸水防水シート

滅菌グッドシート S ブルー

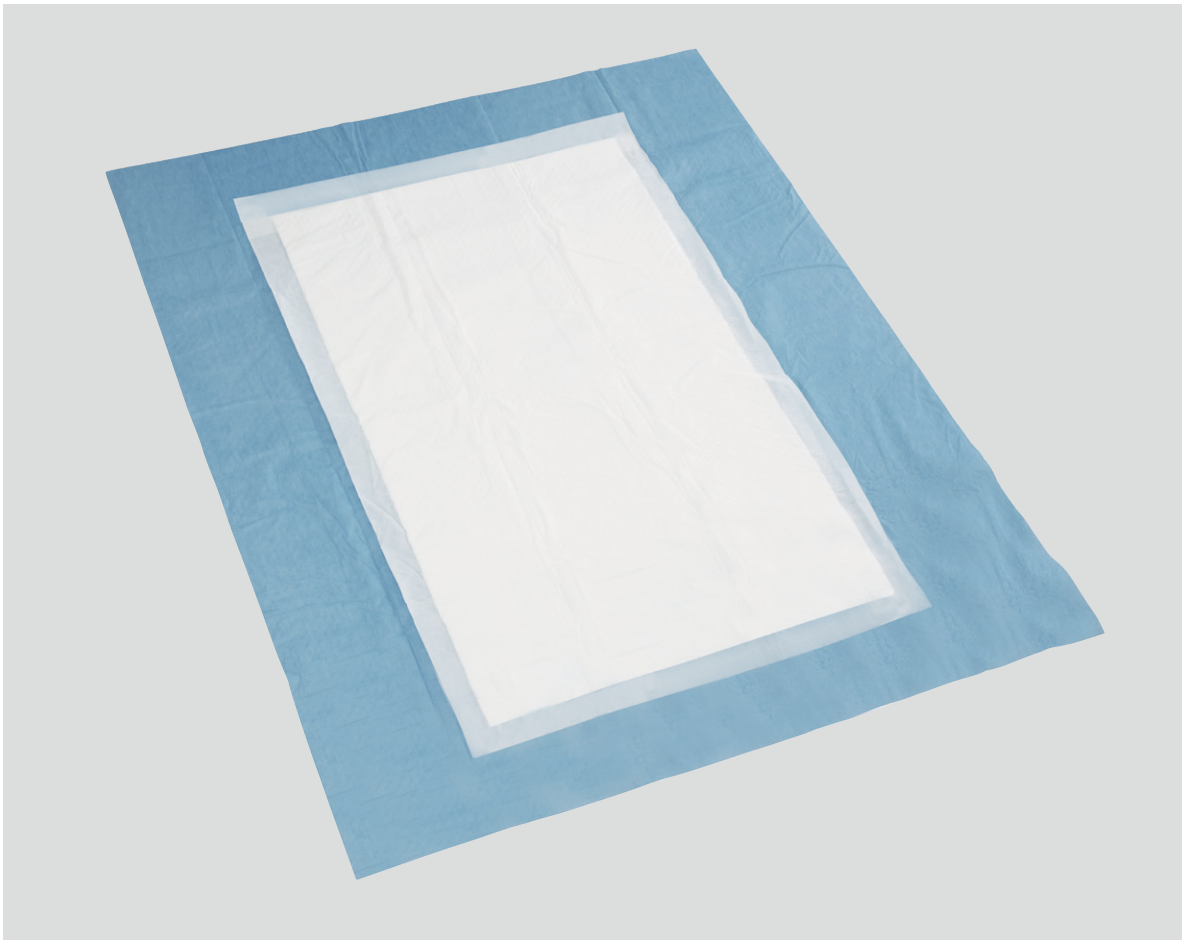

マットが取り外し可能な、吸水防水タイプの
滅菌済分娩用 マット付きシートです。



産科・婦人科製品

産科・婦人科用マット・シート

E.O.G.

商品特長

1 セッティングと清潔野の確保が簡単

- 吸収マットとシートが組み合わせてあるため、マットとシートのセッティングが1度で行えます。また、汚染された吸収マットを取り外せるため、瞬時に清潔野の確保ができます。

2 便利な羊水ポケット付き(フラットタイプ除く)

- 端に羊水ポケットが付いているため、羊水受けや、両手を入れてシートを差し込む際に便利です。



羊水受け




シート差し込み時

3 吸収マットと柔らかかシート

- 羊水や血液などを素早く吸収するマットと、分娩台に沿う柔らかいシートで分娩台の汚染を防止します。

商品情報

■ サイズ

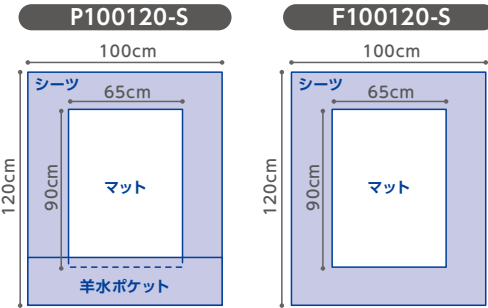

商品規格

E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
84309	滅菌グッドシートP 100120-S ブルー 1枚入 シート100cm×120cm(約100g) マット 65cm× 90cm(約140g)	販売単位 320 × 450 × 45	250.0g	30袋	4971032843094
		外装 550 × 450 × 445	8.5kg		—
84310	滅菌グッドシートP 100150-S ブルー 1枚入 シート100cm×150cm(約120g) マット 65cm× 90cm(約140g)	販売単位 320 × 490 × 45	275.0g	30袋	4971032843100
		外装 550 × 450 × 445	9.3kg		—
84311	滅菌グッドシートF 100120-S ブルー 1枚入 シート100cm×120cm (約85g) マット 65cm× 90cm(約140g)	販売単位 320 × 450 × 45	235.0g	30袋	4971032843117
		外装 550 × 450 × 445	8.0kg		—
84312	滅菌グッドシートF 100180-S ブルー 1枚入 シート100cm×180cm(約130g) マット 65cm× 90cm(約140g)	販売単位 320 × 450 × 65	280.0g	30袋	4971032843124
		外装 570 × 470 × 460	9.4kg		—

■ 素材: [マット] (表面材) ポリエステル、ポリエチレン (吸収体) 吸水紙、高吸収ポリマー、綿状パルプ (防水材) ポリエチレン
[シート] (吸収材) レーヨン、ポリエステル (防水材) ポリエチレン
■ 製造国: 日本

◇ 商品は全てオープン価格です。


オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
オフィシャルサイト

取扱店

※ 規格には誤差が生じる場合があります。



ディスポーザブル吸水防水シート

滅菌グッドシート S ピンク



マットが取り外し可能な、吸水防水タイプの
滅菌済分娩用 マット付きシートです。



産科・婦人科製品

産科・婦人科用マット・シート

E.O.G.

商品特長

1 セッティングと清潔野の確保が簡単

- 吸収マットとシートが組み合わせてあるため、マットとシートのセッティングが1度で行えます。
また、汚染された吸収マットを取り外せるため、瞬時に清潔野の確保ができます。

2 便利な羊水ポケット付き（フラットタイプ除く）

- 端に羊水ポケットが付いているため、羊水受けや、両手を入れてシートを差し込む際に便利です。
- ポケットのサイドから、液体がモレにくい接着方法になっています。



3 吸収マットと柔らかシート

- 羊水や血液などを素早く吸収するマットと、分娩台に沿う柔らかいシートで分娩台の汚染を防止します。

4 汚染防止の処理テープ付き


- マット部分の廃棄時に汚染防止やゴミの少量化が図れる処理テープ付きです。

5 分娩室の雰囲気合うピンク


- 分娩室の雰囲気を明るく柔らかなピンク色です。

商品情報

■ マット部分の廃棄方法

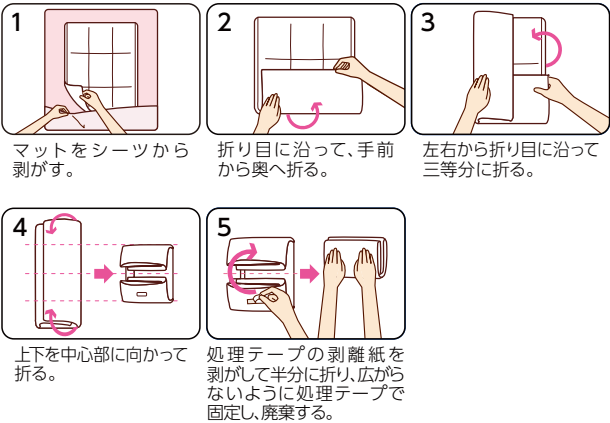

■ サイズ

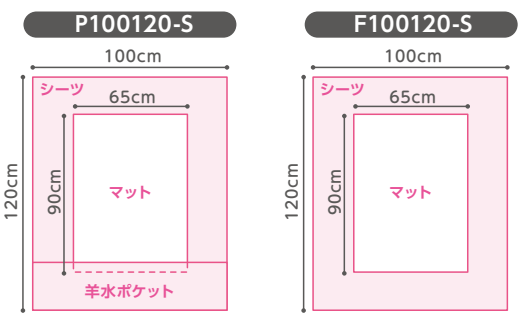

商品規格

E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
84319	滅菌グッドシートP 100120-S ピンク 1枚入 シート100cm×120cm(約100g) マット 65cm× 90cm(約140g)	販売単位 320 × 450 × 45	250.0g	30袋	4971032843193
		外装 550 × 450 × 445	8.5kg		—
84320	滅菌グッドシートP 100150-S ピンク 1枚入 シート100cm×150cm(約120g) マット 65cm× 90cm(約140g)	販売単位 320 × 490 × 45	275.0g	30袋	4971032843209
		外装 550 × 450 × 445	9.3kg		—
84321	滅菌グッドシートF 100120-S ピンク 1枚入 シート100cm×120cm (約85g) マット 65cm× 90cm(約140g)	販売単位 320 × 450 × 45	235.0g	30袋	4971032843216
		外装 550 × 450 × 445	8.0kg		—
84322	滅菌グッドシートF 100180-S ピンク 1枚入 シート100cm×180cm(約130g) マット 65cm× 90cm(約140g)	販売単位 320 × 450 × 65	280.0g	30袋	4971032843223
		外装 570 × 470 × 460	9.4kg		—

■ 素材: [マット] (表素材) ポリエステル、ポリエチレン (吸収体) 吸水紙、高吸収ポリマー、綿状/シルク (防水材) ポリエチレン
[シート] (吸収材) レーヨン、ポリエステル (防水材) ポリエチレン
■ 製造国: 日本

◇ 商品は全てオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



取扱店