



外科製品

PPE

ディスポーザブルエプロン

プラスチックエプロン

袖なしタイプ



血液・体液などから医療従事者を守る
着用しやすい防水プラスチックエプロンです。



外科製品

PPE

商品特長

1 優れた経済性

- 湿性生体物質(血液・体液)が飛び散る処置などで使用できる、経済的な袖なしエプロンです。
- 首まわりと肩の露出を極力抑えた設計のため、医療従事者を湿性生体物質からしっかりと防御します。
- PE(ポリエチレン製)で水分を通さず、バリア性・耐薬品性に優れています。

2 展開しやすく簡単着用

- エプロンの端を持つと、簡単に広げられ、肌にまわりつかず、簡単に着用できます。(下記「■着衣方法」参照)

3 選べるカラーバリエーション

- 使用用途や部署で使い分けが可能な3色のカラーバリエーションです。

ホワイト

ブルー

ピンク

4 使いやすいパッケージ

- 取り出し口が広く、エプロンを1枚ずつ取り出しやすいパッケージになっています。
- コンパクト設計のため、『オオサキPPEホルダーソフト』にぴったりと収まります。
※一部のPPEホルダーには入らない場合があります。



1枚ずつ取り出しやすい!




『オオサキPPEホルダーソフト』にぴったりと収まります。

商品情報


■着衣方法



エプロンを取り出し、○の部分を持つと、簡単に広げることができます。2つ折りになっているため、広げて使用してください。

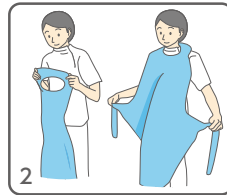


首部を開いて首にかけ、腰ひもを広げます。

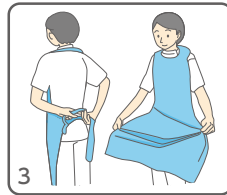

腰ひもを後ろで結び、裾を完全に開きます。

■脱衣方法

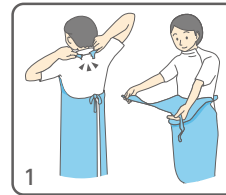

首ひもを後ろで切り、胸部分を前に垂らします。



裾の左右から裏側へ手を入れ、汚染部に触れないように内側にたたみます。腰ひもを切り、左右から内側へ折りたたんでください。

■処置別使用シーン

- おむつ交換時
- 嘔吐物・排泄物の処理時
- 口腔・気管の吸引時
- 口腔ケア時
- 尿道留置カテーテル挿入時
- ドレーン管理時
- 経腸栄養
(胃ろう・腸ろう・食道ろうなど)管理時

商品規格

■オオサキ プラスチックエプロン 袖なし

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
57085	オオサキ プラスチックエプロン 袖なし ホワイト 60枚入 身丈120cm×幅72cm	販売単位 238 × 80 × 115	600.0g	16箱	4971032570853 ----- 14971032570850
		外装 480 × 255 × 345	10.5kg		
57086	オオサキ プラスチックエプロン 袖なし ブルー 60枚入 身丈120cm×幅72cm	販売単位 238 × 80 × 115	600.0g	16箱	4971032570860 ----- 14971032570867
		外装 480 × 255 × 345	10.5kg		
57087	オオサキ プラスチックエプロン 袖なし ピンク 60枚入 身丈120cm×幅72cm	販売単位 238 × 80 × 115	600.0g	16箱	4971032570877 ----- 14971032570874
		外装 480 × 255 × 345	10.5kg		

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市区西玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店