



医療用マスク

プロフェッショナルマスクⅢ シールド



プロフェッショナルマスクⅢ
シールド AR 着用

プロフェッショナルマスクⅢ
シールド 着用

PPEホルダーに設置可能な
取り出しやすいシールド付きマスクです。



外科製品

PPE

商品特長

1 省スペース設計

- PPEホルダーにぴったり収まるため、壁などに設置することができ、省スペースで場所をとりません。
- PPEホルダーを使用することで縦横どちらの向きにも設置することができます。



【適合PPEホルダー】

ステン:2609T プラ:2509S
ソフト:2509S


2 最後の1枚まで取り出しやすい

- 本体の枚数が少なくなってきたら箱内部の中板を引き出すことで、マスクが手前までスライドするため、最後まで取り出しやすい設計です。

実用新案登録 第3252762号




中板を手前に引き出します。

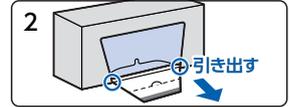

取り出し口のフチに引っかかるまで引き出します。




底面に折り曲げます。

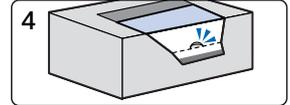

差込口に差し込み、固定します。

3 映り込みにくいARタイプ

- ARタイプはマスク上部に紺色の不織布が付いているため、シールドにマスクの色が映り込みづらく、ストレスを感じにくくなっています。
穿孔・内視鏡処置など、下向きの作業や長時間の処置にも快適に使用できます。

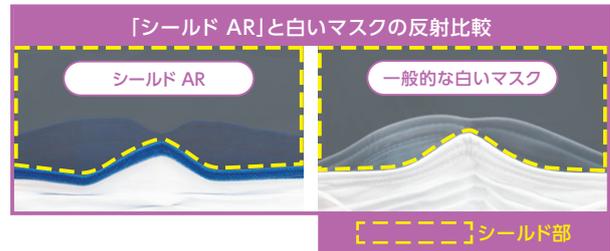

商品情報

■JIS T9001適合審査合格品(一社)日本衛生材料工業連合会が運用するJIS適合審査です。

日本産業規格 JIS T 9001						
医療用マスククラス III 規格適合番号 M32510005						
適合番号発行元: JHPFA						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98%	(区分1)	21.3 kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

57156 プロフェッショナルマスクⅢ シールド AR

日本産業規格 JIS T 9001						
医療用マスククラス III 規格適合番号 M32510006						
適合番号発行元: JHPFA						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98%	(区分1)	21.3 kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

57157 プロフェッショナルマスクⅢ シールド

⚠MRI検査時は使用しないでください。ノーズフィッターが鉄素材のため、磁力でマスクが引き寄せられる恐れがあります。

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
57156	プロフェッショナルマスクⅢ シールド AR ゴム紐 フリー ブルー 25枚入 マスク9cm×17.5cm シールド12.6cm×24.5cm	販売単位 247 × 80 × 128	351.0g	32箱	4971032571560
		外装 540 × 340 × 520	12.9kg		14971032571567
57157	プロフェッショナルマスクⅢ シールド ゴム紐 フリー ブルー 25枚入 マスク9cm×17.5cm シールド12.6cm×24.5cm	販売単位 247 × 80 × 128	348.0g	32箱	4971032571577
		外装 540 × 340 × 520	12.8kg		14971032571574

■素材: [本体・フィルタ]ポリプロピレン [ノーズフィッター]鉄、ポリエチレンコーティング [シールド]ポリエチレンテレフタレート [耳紐]ポリエステル、ポリウレタン
※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

■製造国: 中国

◇商品は全てオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
https://www.osakimedical.co.jp/



オオサキメディカル
オオサイタル

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。