



外科製品

PPE

E.O.G.

滅菌サージカルガウン

# 滅菌オオサキ サージカルガウン



軽くてソフトな着心地の  
滅菌済サージカルガウンです。



外科製品

PPE

E.O.G.

## 商品特長

### 1 バリア性に優れた素材を使用

- バクテリアバリア性・撥水性・リントフリー性に優れたSMS不織布を使用した、滅菌済手術用ガウンです。
- AAMI(米国医療機器振興協会)の定める液体防護性能レベル3に適合しています。

### 2 軽量で動きやすい

- 軽くてソフトな肌触りで、長時間の手術にも適しています。

### 3 豊富なバリエーション


- M・L・LLの3種類のサイズとマスク有無の2規格から選べます。
- マスク付きは、ガウンとマスクが一体化しているため、首元に隙間がでず、バリア性に優れています。

### ■SMS不織布とは

スパンボンド不織布(S)、メルトブロー不織布(M)、スパンボンド不織布(S)の略称です。


素材: ポリプロピレン

構造: バクテリアバリア性に優れた、極細繊維のメルトブロー高密度不織布を、低発塵で撥水性に優れた、長繊維スパンボンド不織布で挟み、複層構造にしています。

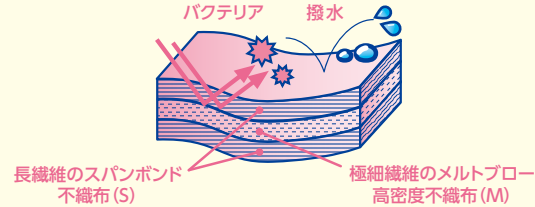

## 商品情報

### ■製品仕様

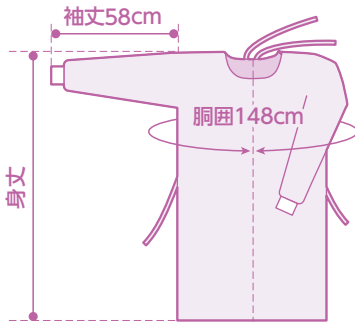

## 関連商品



### プロフェッショナルマスクⅢ

- バリア性が高く手術室での使用に適した、紐タイプの医療用マスクです。
- 手術室や救急科などの血液飛散が考えられる場面に適しています。
- 通気性の高い高性能フィルタを使用しているため、呼吸しやすくなっています。



### オオサキ サージカルキャップ

- ソフトで通気性に優れたサージカルキャップです。
- No.1・No.2は吸湿性・通気性の高い素材を使用し、長時間の手術でも快適に着用できます。
- No.3は通気性の高い素材を使用した、ソフトなキャップです。ICU・手術室・器具の洗浄時・患者用など、毛髪の脱落を防ぎたいさまざまな場面に使用できます。

## 商品規格

### ■滅菌オオサキ サージカルガウン

E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
50500	滅菌オオサキサージカルガウン M 1枚入 身丈119cm 袖丈57cm 袖口付	販売単位   250 × 350 × 50	160.0g	50袋	4971032505008
		外表   645 × 380 × 430	8.5kg		
50501	滅菌オオサキサージカルガウン L 1枚入 身丈122cm 袖丈57cm 袖口付	販売単位   250 × 350 × 25	150.0g	50袋	4971032505015
		外表   650 × 430 × 380	8.8kg		
50502	滅菌オオサキサージカルガウン LL 1枚入 身丈129cm 袖丈57cm 袖口付	販売単位   250 × 350 × 25	150.0g	50袋	4971032505022
		外表   650 × 430 × 380	8.8kg		
50504	滅菌オオサキサージカルガウン M マスク付 1枚入 身丈119cm 袖丈57cm 袖口付	販売単位   250 × 350 × 25	163.0g	50袋	4971032505046
		外表   650 × 430 × 380	9.4kg		
50505	滅菌オオサキサージカルガウン L マスク付 1枚入 身丈122cm 袖丈57cm 袖口付	販売単位   250 × 350 × 25	163.0g	50袋	4971032505053
		外表   650 × 430 × 380	9.4kg		
50506	滅菌オオサキサージカルガウン LL マスク付 1枚入 身丈129cm 袖丈57cm 袖口付	販売単位   250 × 350 × 25	163.0g	50袋	4971032505060
		外表   650 × 430 × 380	9.4kg		

■素材: [本体] ポリプロピレン [袖口] ポリエステル  
※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません。)

◇商品は全てオープン価格です。

**Osaki**  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル  
オフィシャルサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。