



医 疗 产 品 目 录
MEDICAL PRODUCTS CATALOGUE



我们全心全意地创造， 永远为顾客提供 最好的医疗产品和服务。

Originality

我们永远提供高品质的创新性产品。

Satisfaction

我们的一致目标是让顾客满意、员工满意、股东满意。

Autonomy

我们尊重自主、自律的精神。

Knowledge

我们力求集结所有知识。

Improvement and Innovation

我们随时代不断进步。



Trademark

用代表动脉的红色和代表静脉的蓝色所组成的圆环代表心脏，这就是本公司的商标。
我们的产品与生命紧紧相连，为此，我们充满了使命感。

可在主页浏览商品 详细信息

亦可访问本公司的主页浏览商品信息。



<https://www.osakimedical.co.jp/>

以更高的品质让顾客 们更加满意

以更高的品质让顾客们更加满意
公司以创造让生活更加丰富、健康优质的
商品为目标。2005年9月,本公司获得了品质
管理体系(ISO 9001以及ISO13485)的
认证。以生产为中心,开发、销售、系统、人
事、财务及其他所有部门的员工们团结一
心,全力保证产品质量,坚定不移地尊崇
让顾客满意的宗旨。



ISO9001



ISO13485



纱布制品

包扎用纱布、
手术用纱布等



脱脂棉制品

棉球、酒精棉、
裁剪棉、棉棒等



外科制品

PPE、
外科垫单和垫子等



矫形外科制品

夹板、腰部、
胸部固定带等



绷带制品

粘性绷带、
伸缩绷带等



护理制品

口腔护理、介護湿纸巾、
清洁棉等



产妇护理制品

入院待产包、入院OB分娩包、
产妇用卫生巾等

●产妇护理制品请另行查阅[产科用品目录]

图标说明

E.O.G.

E.O.G.灭菌

已实施E.O.G.灭菌
已经过环氧乙烷灭菌的产品。

A.C.

A.C.灭菌

已实施A.C.灭菌
已经过高压蒸汽灭菌的产品。

DuPont™
Tyvek®

使用[Tyvek®]

使用了[Tyvek®]灭菌包装的无菌
手术用纱布。
[Tyvek®]为美国杜邦公司的注册
商标。
详情请见112页。

E.B.

E.B.灭菌

经电子束灭菌的制品。



订单产品

接到订单后生产的产品。需要等
待一段时间。

● 款式及价格可能会有更改,恕不预先通知。 ● 价格均为公开售价。 ● 规格可能会有误差。



纱布制品



医用纱布 /
灭菌医用纱布

P09/10



Medi纱布 /
灭菌Medi纱布

P11



OS折叠纱布

P12



折叠纱布(Ori-ze)

P12



Osaki 纱布

P12



Dispose /
灭菌Dispose

P13



Dispose III /
灭菌Dispose III

P13



Y型切口纱布 /
灭菌Y型切口纱布 /
SF灭菌Y型切口纱布

P14



引流纱布 /
灭菌引流纱布

P14



OP纱布 X /
灭菌OP纱布 X

P15/16




Osaki 缝制纱布 X /
灭菌 Osaki 缝制纱布 X

P17



Puls X / 灭菌Puls X

P18

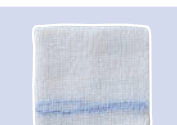

灭菌Wipe Sponge X

P18



灭菌填塞海绵 X

P19



HEPA LIFT X

P19




TroX

P20/21



Endo Wiper-X

P22

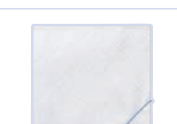


灭菌Scope Wiper X

P22



Osaki小纱布球 X /
灭菌 Osaki小纱布球 X

P23

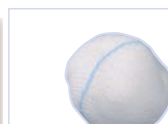

Osaki 纱布球 X /
灭菌Osaki 纱布球 X

P24



灭菌插入用纱布 X

P24



插入用纱布

P25



Tampon纱布

P25



New Tampon纱布

P26



小型折叠纱布

P26



RP Cloth Gauze

P27



RP Cloth Gauze EV

P27



Osaki 医用无纺布纱布

P27



Cloth Gauze Cotton /
灭菌Cloth Gauze Cotton

P28



Ouze CP /
灭菌Ouze CP

P29



Sand Gauze /
灭菌Sand Gauze

P30



Sarafit /
灭菌Sarafit

P30



脱脂棉制品



外科制品





外科制品



Osaki 鞋套

P60



MSB防护套装CV

P60



灭菌Osaki 洞巾F

P61



灭菌Osaki 布单R

P61



Osaki 患者服

P62



Osaki 检查服

P62



Osaki 检查用短裤

P62



超声耦合剂

P63




Osaki 探针罩

P63



Mighty Sheets E /
灭菌Mighty Sheets E

P64

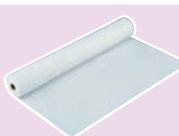

Osaki Despo卷装垫单

P64



防滑布单 /
灭菌防滑布单

P65



医用垫 /
灭菌医用垫

P65



医用垫 轻型 /
灭菌医用垫 轻型

P66



Osaki 检查用布单

P66



Osaki 检查用卷装垫单

P67



Osaki 检查用卷装垫单架

P67



矫形外科制品



Osaki 软夹板

P68



Pan-Net

P68



缠绕式Pan Net /
灭菌缠绕式Pan Net

P69



Osaki 暖贴

P69



Fit Band

P70



Waist Guard DX

P70



Waist Belt Mesh

P70




绷带制品



Clean Tex

P71

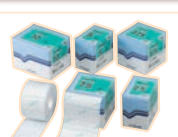

Clean Pore

P71



Osaki 伸缩绷带 /
灭菌Osaki 伸缩绷带

P72



Heart Tie /
灭菌Heart Tie

P73



Well Tie /
灭菌Well Tie

P73



Osaki 弹力绷带 /
灭菌Osaki 弹力绷带

P74



Osaki 棉绷带 /
灭菌Osaki 棉绷带

P75



Clean Net

P75



护理制品



驱血・压迫胶带

P76



次氯酸钠Cloth

P77



Alwety 灭菌垫单

P78



Alwety 除菌Cloth

P79



Skit Cloth

P79



口腔护理海绵

P80



口腔护理棉棒

P81



卷棉棒 / 灭菌卷棉棒

P82



口腔纸巾

P82



口腔喷雾

P83



口腔护理凝胶

P83



灭菌Osaki 压舌器 / SF灭菌Osaki 压舌器

P84



舌用纱布

P84



棒状毛巾

P85



身体擦拭用湿巾

P85



滋润肌肤的擦身巾

P86



橄榄油臀部湿巾

P86



溶水型清爽臀部擦拭巾

P86



清洁棉 A

P87



清洁棉 L

P87



眼部清洁棉

P88



眼罩 Clean Patch

P89



Osaki 丁腈手套

P90



Osaki 塑料手套 PF

P90



PH 塑料手套 软质

P91



Milky Fit 手套

P91



小型夹板

P92



小型夹板套

P92



OP腹带

P93



裁剪腹带

P93



简易腹带

P93



伸缩腹带 Nouvelle

P94



伸缩腹带 Bellina

P94



Osaki 胸带

P95



Osaki 伸缩胸带

P95



柔软的胸带

P96



Osaki T字带

P96



一次性的T字带

P97



简易T字带

P97



伸缩T字带

P97



贴身内裤

P98



Osaki 三角巾

P98



Osaki 棉绒布

P98



胸部X光检查时的防
跌固定带

P99



Osaki 床侧袋 I

P99



护理制品



防滑手杖

P100



PH 一触式内衣

P101



オオサキ 纱布睡衣

P102



天使睡衣

P103



天使set

P103



PH 就餐围裙

P104/105



一次性就餐围裙
带口袋

P105



PH 吸管杯

P106



PH 吃药器

P106



一次性强力吸收垫

P107



超防水垫单

P108



轻软防水垫单

P108



干爽防水垫单

P109



柔软垫单DX

P109



PH 斜纹布垫单

P109



PH 入浴辅助用围裙

P110



安心手套

P110




■ 医疗用纱布的形状规格

类型	1 cm内的线数(根)				1cm×1cm 范围内的线数 容许误差	标准宽度(cm)	标准重量(g)	相应商品
	纵线 平均	容许误差	横线 平均	容许误差				
I	12	±1	12	±1	24+2 24-1	30+0.5 30-1.0	宽30cm 长100cm 10.3±8%	医用纱布 Ori-ze
II	12	±1	12	±1	24+2 24-1	91.4±1.5	宽91.4cm 长30cm 8.7±8%	Dispose 缝制纱布X KP
III	11	±1	9	±1	20+2 20-1	91.4±1.5	宽91.4cm 长30cm 7.6±8%	DisposeIII
IV	9	±1	8	±1	17+2 17-1	91.4±1.5	宽91.4cm 长30cm 6.1±8%	OS折叠纱布 Puls X
USP IV	22-26 ※1		18-22 ※1		41-47 ※2	—	—	Medi纱布

※1: 2.54厘米的条数 ※2: 2.54平方厘米的条数

■ 纱布折叠方法

--- 沿折痕向外折 --- 沿折痕向内折

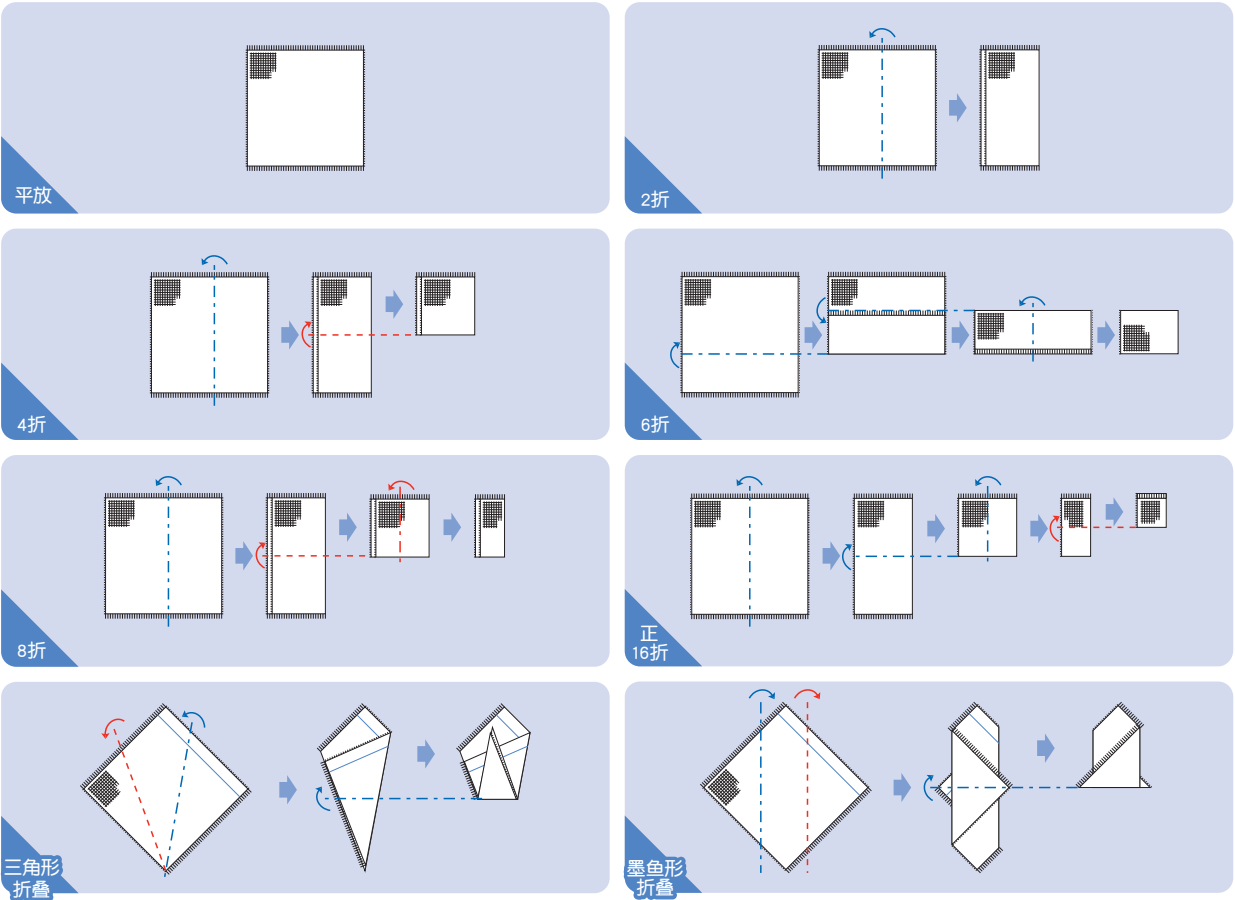

■ 什么是ply(层)...

折叠纱布的厚度单位,表示纱布有几层。例如,8ply是8层纱布的厚度。



医用纱布 / 灭菌医用纱布



●柔软、吸收性强的医用纱布类型Ⅰ处理用纱布。

●单片(30 cm×30 cm)重量固定为约3 g。

医用纱布

一般医疗器具 医用纱布: 13700000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
11137	平放	30cm×30cm 300片装	10包	4971032111377
11219	双折	30cm×30cm 300片装	10包	4971032112190
11138	4折	30cm×30cm 300片装	10包	4971032111384
11139	8折	30cm×30cm 300片装	10包	4971032111391
11220	16折	30cm×30cm 300片装	10盒	4971032112206

■商品名称: Osaki医用纱布 ■申报编号: 23B2X10001000003

●使用了[Tyvek®]灭菌袋的EOG灭菌纱布。

灭菌医用纱布 TS

一般医疗器具 医用纱布: 13700000 E.O.G. Tyvek

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
11298	TS2-5	30cm×30cm 双折 15片装(120袋)	2盒	4971032112985
11369	TS2-10	30cm×30cm 双折 10片装(60袋)	2盒	4971032113692
11299	TS2-20	30cm×30cm 双折 20片装(30袋)	2盒	4971032112992
11370	TS2-30	30cm×30cm 双折 30片装(20袋)	2盒	4971032113708
11263	TS4-1	30cm×30cm 4折 1片装(100袋)	8盒	4971032112633
11264	TS4-2	30cm×30cm 4折 2片装(50袋)	8盒	4971032112640
11265	TS4-3	30cm×30cm 4折 3片装(40袋)	8盒	4971032112657
11266	TS4-5	30cm×30cm 4折 5片装(20袋)	8盒	4971032112664
11267	TS4-10	30cm×30cm 4折 10片装(10袋)	4盒	4971032112671
11268	TS4-20	30cm×30cm 4折 20片装(5袋)	4盒	4971032112688
11269	TS4-30	30cm×30cm 4折 30片装(7袋)	4盒	4971032112695
11270	TS8-1	30cm×30cm 8折 1片装(100袋)	8盒	4971032112701
11271	TS8-2	30cm×30cm 8折 2片装(50袋)	8盒	4971032112718
11272	TS8-3	30cm×30cm 8折 3片装(40袋)	8盒	4971032112725
11273	TS8-5	30cm×30cm 8折 5片装(20袋)	8盒	4971032112732
11274	TS8-10	30cm×30cm 8折 10片装(10袋)	8盒	4971032112749
11275	TS16-1	30cm×30cm 16折 1片装(60袋)	6盒	4971032112756
11276	TS16-2	30cm×30cm 16折 2片装(30袋)	8盒	4971032112763

■商品名称: 灭菌Osaki医用纱布 ■申报编号: 23B2X10001000004



●按折叠类型将包装用颜色进行区分的EOG灭菌折叠纱布。

●在灭菌包装盒上扩大显示内装纱布数量。

●当内装数量不同的纱布放入同一盒内时, 通过灭菌包装盒上部的索引内容便可一眼看出(※仅限RS4-2、4-5、4-10、8-1、8-2、8-5、8-10、16-1)。

灭菌医用纱布 RS

一般医疗器具 医用纱布: 13700000 E.O.G.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
11196	RS4-1	30cm×30cm 4折 1片装(100袋)	8盒	4971032111964
11197	RS4-2	30cm×30cm 4折 2片装(50袋)	8盒	4971032111971
11198	RS4-3	30cm×30cm 4折 3片装(40袋)	8盒	4971032111988
11199	RS4-5	30cm×30cm 4折 5片装(20袋)	8盒	4971032111995
11200	RS4-10	30cm×30cm 4折 10片装(10袋)	4盒	4971032112008
11201	RS4-20	30cm×30cm 4折 20片装(5袋)	4盒	4971032112015
11202	RS4-30	30cm×30cm 4折 30片装(7袋)	4盒	4971032112022
11203	RS8-1	30cm×30cm 8折 1片装(100袋)	8盒	4971032112039
11204	RS8-2	30cm×30cm 8折 2片装(50袋)	8盒	4971032112046
11205	RS8-3	30cm×30cm 8折 3片装(40袋)	8盒	4971032112053
11206	RS8-5	30cm×30cm 8折 5片装(20袋)	8盒	4971032112060
11207	RS8-10	30cm×30cm 8折 10片装(10袋)	8盒	4971032112077
11209	RS16-1	30cm×30cm 16折 1片装(60袋)	6盒	4971032112091
11210	RS16-2	30cm×30cm 16折 2片装(30袋)	8盒	4971032112107

■商品名称: 灭菌Osaki医用纱布 ■申报编号: 23B2X10001000004



- 按数量将包装用颜色进行区分的AC灭菌折叠纱布。
- 在灭菌包装盒上扩大显示内装纱布数量。
- 当内装数量不同的纱布放入同一盒内时，通过灭菌包装盒上部的索引内容便可一眼看出(※仅限AS4-2、4-5、4-10、8-2、8-5、8-10)。

灭菌医用纱布 AS

一般医疗器具 医用纱布: 13700000 (A.C.)

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
11249	AS4-1	30cm×30cm 4折 1片装(100袋)	8盒	4971032112497
11250	AS4-2	30cm×30cm 4折 2片装(50袋)	8盒	4971032112503
11251	AS4-3	30cm×30cm 4折 3片装(40袋)	8盒	4971032112510
11252	AS4-5	30cm×30cm 4折 5片装(20袋)	8盒	4971032112527
11253	AS4-10	30cm×30cm 4折 10片装(20袋)	4盒	4971032112534
11254	AS4-20	30cm×30cm 4折 20片装(10袋)	4盒	4971032112541
11255	AS4-30	30cm×30cm 4折 30片装(7袋)	4盒	4971032112558
11256	AS8-1	30cm×30cm 8折 1片装(100袋)	8盒	4971032112565
11257	AS8-2	30cm×30cm 8折 2片装(50袋)	8盒	4971032112572
11258	AS8-3	30cm×30cm 8折 3片装(40袋)	8盒	4971032112589
11259	AS8-5	30cm×30cm 8折 5片装(20袋)	8盒	4971032112596
11260	AS8-10	30cm×30cm 8折 10片装(10袋)	8盒	4971032112602
11261	AS16-1	30cm×30cm 16折 1片装(60袋)	6盒	4971032112619
11262	AS16-2	30cm×30cm 16折 2片装(30袋)	8盒	4971032112626

■商品名称: 灭菌Osaki医用纱布 ■申报编号: 23B2X10001000004



- 应用SPD等进行管理, 便于使用的小包装处理用灭菌纱布。
- 细分时, 手不直接接触灭菌物品, 可保证清洁使用。
- 无需进行细分, 省力省时。
- 以1包为单位, 标有GS1-128条码, 易于物品管理。
- 在灭菌包装盒上扩大显示内装纱布数量。
- 当内装数量不同的纱布放入同一盒内时，通过灭菌包装盒上部的索引内容便可一眼看出。

QP 灭菌医用纱布 RS

一般医疗器具 医用纱布: 13700000 (E.O.G.)

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
11450	RS4-1QP	30cm×30cm 4折 1片装(10袋×90个)	—	4971032114507
11451	RS4-1QP	30cm×30cm 4折 1片装(20袋×48个)	—	4971032114514
11423	RS4-2QP	30cm×30cm 4折 2片装(5袋×120个)	—	4971032114231
11452	RS4-2QP	30cm×30cm 4折 2片装(10袋×60个)	—	4971032114521
11424	RS4-5QP	30cm×30cm 4折 5片装(5袋×48个)	—	4971032114248
11425	RS4-10QP	30cm×30cm 4折 10片装(5袋×24个)	—	4971032114255
11453	RS8-1QP	30cm×30cm 8折 1片装(5袋×144个)	—	4971032114538
11426	RS8-1QP	30cm×30cm 8折 1片装(10袋×72个)	—	4971032114262
11427	RS8-1QP	30cm×30cm 8折 1片装(20袋×48个)	—	4971032114279
11428	RS8-2QP	30cm×30cm 8折 2片装(5袋×72个)	—	4971032114286
11430	RS8-2QP	30cm×30cm 8折 2片装(10袋×48个)	—	4971032114309
11431	RS8-5QP	30cm×30cm 8折 5片装(5袋×48个)	—	4971032114316
11432	RS8-10QP	30cm×30cm 8折 10片装(5袋×24个)	—	4971032114323

■商品名称: 灭菌Osaki医用纱布 ■申报编号: 23B2X10001000004



背面 GS1-128条码



Medi纱布 / 灭菌Medi纱布



- 具有与Hospital纱布同等的性能, 经济实惠的处理用纱布。
- 具有与Hospital纱布同等的吸收量和吸水速度。
- 单片(30 cm×30 cm)重量固定为约3 g。

Medi纱布

一般医疗器具 医用纱布: 13700000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
22612	平放	30cm×30cm 150片装	20袋	4971032226125
22613	双折	30cm×30cm 150片装	20袋	4971032226132
22614	4折	30cm×30cm 150片装	20袋	4971032226149
22616	6折	30cm×30cm 150片装	20袋	4971032226163
22615	8折	30cm×30cm 150片装	20袋	4971032226156

■商品名称: Osaki医用纱布30 ■申报编号: 23B2X10001000001

- 使用了[Tyvek®]灭菌袋的灭菌产品。

灭菌Medi纱布 TS

一般医疗器具 医用纱布: 13700000 E.O.G. Tyvek



款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
22803	TS4-1	30cm×30cm 4折 1片装(100袋)	8盒	4971032228037
22601	TS4-2	30cm×30cm 4折 2片装(60袋)	8盒	4971032226019
22602	TS4-5	30cm×30cm 4折 5片装(30袋)	8盒	4971032226026
22603	TS4-10	30cm×30cm 4折 10片装(30袋)	4盒	4971032226033
22604	TS4-20	30cm×30cm 4折 20片装(15袋)	4盒	4971032226040
22605	TS4-30	30cm×30cm 4折 30片装(10袋)	4盒	4971032226057
22815	TS8-1	30cm×30cm 8折 1片装(120袋)	8盒	4971032228150
22607	TS8-2	30cm×30cm 8折 2片装(60袋)	8盒	4971032226071
22608	TS8-5	30cm×30cm 8折 5片装(30袋)	8盒	4971032226088
22816	TS8-10	30cm×30cm 8折 10片装(16袋)	8盒	4971032228167
22610	TS8-20	30cm×30cm 8折 20片装(15袋)	4盒	4971032226101
22817	TS8-30	30cm×30cm 8折 30片装(5袋)	8盒	4971032228174

■商品名称: 灭菌Osaki医用纱布30 ■申报编号: 23B2X10001000002

- 按折叠类型将包装用颜色进行区分的灭菌折叠纱布。

灭菌Medi纱布 RS

一般医疗器具 医用纱布: 13700000 E.O.G.



款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
22804	RS4-1	30cm×30cm 4折 1片装(100袋)	8盒	4971032228044
22708	RS4-2	30cm×30cm 4折 2片装(60袋)	8盒	4971032227085
22707	RS4-5	30cm×30cm 4折 5片装(30袋)	8盒	4971032227078
22706	RS4-10	30cm×30cm 4折 10片装(30袋)	4盒	4971032227061
22705	RS4-20	30cm×30cm 4折 20片装(15袋)	4盒	4971032227054
22704	RS4-30	30cm×30cm 4折 30片装(10袋)	4盒	4971032227047
22819	RS8-1	30cm×30cm 8折 1片装(120袋)	8盒	4971032228198
22702	RS8-2	30cm×30cm 8折 2片装(60袋)	8盒	4971032227023
22701	RS8-5	30cm×30cm 8折 5片装(30袋)	8盒	4971032227016
22820	RS8-10	30cm×30cm 8折 10片装(16袋)	8盒	4971032228204
22699	RS16-1	30cm×30cm 16折 1片装(80袋)	8盒	4971032226996
22698	RS16-2	30cm×30cm 16折 2片装(60袋)	8盒	4971032226989

■商品名称: 灭菌Osaki医用纱布30 ■申报编号: 23B2X10001000002

OS折叠纱布



- 最适合包扎使用的IV 4ply(4层)和8ply(8层)的处理用纱布。
- 将裁剪面往内侧折叠,避免了线头的露出。
- 单片(30cm×30cm)重量固定为约2g。

一般医疗器具 医用纱布: 13700000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
15501	4号	15cm×15cm(成品尺寸) 4ply 200片装	20袋	4971032155012
15500	8号	7.5cm×15cm(成品尺寸) 8ply 200片装	20袋	4971032155005

■商品名称: Osaki医用纱布 ■申报编号: 23B2X10001000003

折叠纱布 (Ori-ze)



- 为便于使用而特地进行了裁剪的医用纱布类型I处理用纱布。

一般医疗器具 医用纱布: 13700000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
14102	平放	30cm×30cm 300片装	10包	4971032141022
14110	双折	30cm×30cm 300片装	10包	4971032141107
14103	4折	30cm×30cm 300片装	10包	4971032141039
14106	8折	30cm×30cm 300片装	10包	4971032141060

■商品名称: Osaki医用纱布 ■申报编号: 23B2X10001000003

Osaki 纱布



- 柔软、吸引性强的医用纱布类型I纱布。
- 纱布宽度为30cm, 可根据不同用途进行裁剪。

一般医疗器具 医用纱布: 13700000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
14300	1m	30cm× 1m 1片装	50袋×6捆	4971032143002
52302	5m	30cm× 5m 1片装	200袋	4971032523026
52301	10m	30cm× 10m 1片装	100袋	4971032523019

■商品名称: Osaki医用纱布 ■申报编号: 23B2X10001000003



Dispose/ 灭菌 Dispose



●为避免线头露出而将裁剪面往内侧折叠的医用纱布类型Ⅱ 8ply的处理用纱布。

Dispose

一般医疗器具 医用纱布: 13700000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
15000	No.10	5cm× 5cm(成品尺寸) 8ply 200片装	20袋	4971032150000
15001	No.20	5cm×7.5cm(成品尺寸) 8ply 200片装	20袋	4971032150017
15002	No.30	7.5cm×7.5cm(成品尺寸) 8ply 200片装	20袋	4971032150024
15003	No.40	7.5cm× 10cm(成品尺寸) 8ply 200片装	20袋	4971032150031
15004	No.50	10cm× 10cm(成品尺寸) 8ply 200片装	20袋	4971032150048

■商品名称: Osaki医用纱布 ■申报编号: 23B2X10001000003

灭菌 Dispose

一般医疗器具 医用纱布: 13700000 E.O.G.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
15091	S10-1	5cm× 5cm(成品尺寸) 8ply 1片装(50袋)	12盒	4971032150918
15092	S20-1	5cm×7.5cm(成品尺寸) 8ply 1片装(50袋)	12盒	4971032150925
15093	S30-1	7.5cm×7.5cm(成品尺寸) 8ply 1片装(50袋)	12盒	4971032150932
15094	S40-1	7.5cm× 10cm(成品尺寸) 8ply 1片装(50袋)	12盒	4971032150949
15095	S50-1	10cm× 10cm(成品尺寸) 8ply 1片装(50袋)	12盒	4971032150956

■商品名称: 灭菌Osaki医用纱布 ■申报编号: 23B2X10001000004
■可根据顾客需要提供其他规格。

DisposeⅢ / 灭菌 DisposeⅢ



●为避免线头露出而将裁剪面往内侧折叠的医用纱布类型Ⅲ 12ply的处理用纱布。

●需要较厚纱布时最为适用。

DisposeⅢ

一般医疗器具 医用纱布: 13700000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
15185	No.10	5cm× 5cm(成品尺寸) 12ply 100片装	20袋	4971032151854
15206	No.20	5cm×7.5cm(成品尺寸) 12ply 100片装	20袋	4971032152066
15184	No.30	7.5cm×7.5cm(成品尺寸) 12ply 100片装	20袋	4971032151847
15207	No.40	7.5cm× 10cm(成品尺寸) 12ply 100片装	20袋	4971032152073
15208	No.50	10cm× 10cm(成品尺寸) 12ply 100片装	20袋	4971032152080

■商品名称: Osaki医用纱布 ■申报编号: 23B2X10001000003

灭菌 DisposeⅢ

一般医疗器具 医用纱布: 13700000 E.O.G.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
15180	S1012-1	5cm× 5cm(成品尺寸) 12ply 1片装(50袋)	12盒	4971032151809
15199	S2012-1	5cm×7.5cm(成品尺寸) 12ply 1片装(50袋)	12盒	4971032151991
15181	S3012-1	7.5cm×7.5cm(成品尺寸) 12ply 1片装(50袋)	12盒	4971032151816
15200	S4012-1	7.5cm× 10cm(成品尺寸) 12ply 1片装(50袋)	12盒	4971032152004
15201	S5012-1	10cm× 10cm(成品尺寸) 12ply 1片装(50袋)	12盒	4971032152011

■商品名称: 灭菌Osaki医用纱布 ■申报编号: 23B2X10001000004
■可根据顾客需要提供其他规格。

Y型切口纱布 / 灭菌Y型切口纱布 / SF灭菌Y型切口纱布



纱布类



无纺布类

- 具有Y型切口,便于夹入气管插管等的处理用纱布。
- 有粘性液体吸收性强的纱布类和纤维脱落少的无纺布类两种。
- 有一定的厚度,因此吸收性及弹性较强,可起到保护气管插管插入部的作用。
- 19081和19080通过特殊裁剪,避免了裁剪部位有线头露出。

Y型切口纱布(纱布类)

一般医疗器具 医用纱布:13700000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
18605	D3012	7.5cm×7.5cm(成品尺寸) 12ply 100片装	10盒	4971032186054
18606	O3016	7.5cm×7.5cm(成品尺寸) 16ply 100片装	10盒	4971032186061

■商品名称:Osaki医用纱布 ■申报编号:23B2X10001000003

Y型切口纱布(无纺布类)

一般医疗器具 医用无纺布:34655000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
19085	CC308	7.5cm×7.5cm(成品尺寸) 8ply 100片装	10盒	4971032190853
19084	CC3016	7.5cm×7.5cm(成品尺寸) 16ply 100片装	10盒	4971032190846
19123	CC408	7.5cm×10cm(成品尺寸) 8ply 100片装	10盒	4971032191232

■商品名称:Cloth Gauze Cotton ■申报编号:23B2X100010000082

灭菌Y型切口纱布(纱布类)

一般医疗器具 医用纱布:13700000 [E.O.G.](#)

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
19081	SD3012-1	7.5cm×7.5cm(成品尺寸) 12ply 1片装(50袋)	12盒	4971032190815
19080	SD3016-1	7.5cm×7.5cm(成品尺寸) 16ply 1片装(50袋)	12盒	4971032190808

■商品名称:灭菌Osaki医用纱布 ■申报编号:23B2X100010000004

灭菌Y型切口纱布(无纺布类)

一般医疗器具 医用无纺布:34655000 [E.O.G.](#)

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
19078	SCC308-1	7.5cm×7.5cm(成品尺寸) 8ply 1片装(50袋)	12盒	4971032190785
19079	SCC3016-1	7.5cm×7.5cm(成品尺寸) 16ply 1片装(50袋)	12盒	4971032190792
19120	SCC408-1	7.5cm×10cm(成品尺寸) 8ply 1片装(50袋)	12盒	4971032191201

■商品名称:灭菌 Cloth Gauze Cotton ■申报编号:23B2X100010000083

- 幼儿用Y型切口纱布。

SF灭菌Y型切口纱布(无纺布类)

一般医疗器具 医用无纺布:34655000 [E.O.G.](#)

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
19113	SCC108-1	5cm×5cm(成品尺寸) 8ply 1片装(50袋)	12盒	4971032191133
19119	SCC1016-1	5cm×5cm(成品尺寸) 16ply 1片装(30袋)	12盒	4971032191195

■商品名称:灭菌 Cloth Gauze Cotton ■申报编号:23B2X100010000083



引流纱布 / 灭菌引流纱布



- 带有放射形切口的处理用纱布。
- 便于安放,不易与液管产生缝隙。
- 对皮肤刺激性小且吸收性强,全棉的无纺布。
- 基本上没有纤维脱落,可清洁地进行操作。
- 可节省制作纱布切口的作业。

引流纱布

一般医療機器 医療用不織布:34655000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
19159	CC3012	7.5cm×7.5cm(成品尺寸) 12ply 100片装	20盒	4971032191591

■商品名称:Cloth Gauze Cotton ■申报编号:23B2X100010000082

灭菌引流纱布


一般医療機器 医療用不織布:34655000 [E.O.G.](#)

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
19157	SCC3012-1	7.5cm×7.5cm(成品尺寸) 12ply 1片装(50袋)	8盒	4971032191577


■商品名称:灭菌 Cloth Gauze Cotton ■申报编号:23B2X100010000083



OP纱布X/ 灭菌OP纱布X

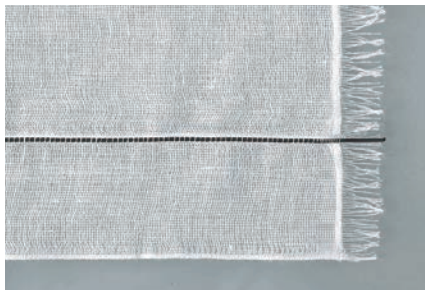


黑线

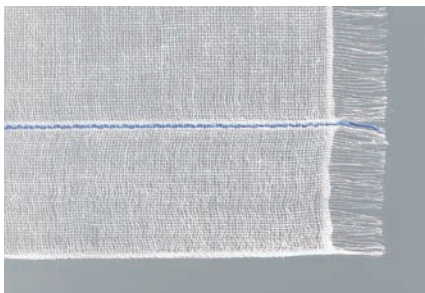


蓝线

- 嵌入了X光显影线的手术用纱布。
- 即使不慎遗留在体内,也可用X光检查出遗留位置。
- 单片(30 cm×30 cm)重量固定为约3.3g,适用于测量出血量。
- 有蓝线、黑线2种X光显影线。
- 易于剪裁的特殊形状折叠(三角形折叠、章鱼形折叠)的纱布。

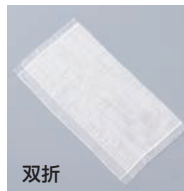


双折

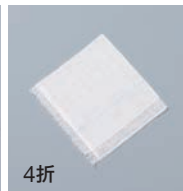

4折



三角形折叠

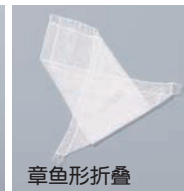

章鱼形折叠

OP纱布X 黑线

一般医疗器具 带X光显影材料的纱布: 32374000

款号	种类	规格·内容量	内装数量	条形码
10067	平放	30cm×30cm 300片装	10包	4971032100678
12462	双折	30cm×30cm 300片装	10包	4971032124629
12463	4折	30cm×30cm 300片装	10包	4971032124636
★ 10228	三角折	30cm×30cm 300片装	10盒	4971032102283

■商品名称: OP纱布X-A ■申报编号: 23B2X10001000065

■材质: [纱布]棉 [X光显影线](固定材料)聚苯乙烯类热塑性弹性体(显影剂)硫酸钡(着色剂)炭黑

★由于是定制产品,有时需要等待交付时间。

OP纱布X 蓝线

一般医疗器具 带X光显影材料的纱布: 32374000

款号	种类	规格·内容量	内装数量	条形码
12285	蓝线 1/4	15cm×15cm 1200片装	10盒	4971032122854
12311	蓝线 1/2	15cm×30cm 600片装	10包	4971032123110
10070	蓝线 平放	30cm×30cm 300片装	10包	4971032100708
10071	蓝线 双折	30cm×30cm 300片装	10包	4971032100715
10072	蓝线 4折	30cm×30cm 300片装	10包	4971032100722
★ 12135	蓝线 三角形折叠	30cm×30cm 300片装	8盒	4971032121352
★ 12136	蓝线 章鱼形折叠	30cm×30cm 300片装	8盒	4971032121369

■商品名称: OP纱布X-A ■申报编号: 23B2X10001000013

■材质: [纱布]棉 [X光显影线](固定材料)聚丙烯、涤纶等(显影剂)硫酸钡(着色剂)深海蓝 grade02

★由于是定制产品,有时需要等待交付时间。

- 使用了[Tyvek®]灭菌袋的灭菌产品。

灭菌OP纱布X 黑线

一般医疗器具 带X光显影材料的纱布: 32374000 E.O.G. Tyvek

款号	种类	规格·内容量	内装数量	条形码
10073	黑线 TS4-10	30cm×30cm 4折 10片装(30袋)	4盒	4971032100739
10074	黑线 TS4-20	30cm×30cm 4折 20片装(15袋)	4盒	4971032100746
10075	黑线 TS4-30	30cm×30cm 4折 30片装(10袋)	4盒	4971032100753

■商品名称: 灭菌OP纱布X-KS ■申报编号: 23B2X10001000066

■材质: [纱布]棉 [X光显影线](固定材料)聚苯乙烯类热塑性弹性体(显影剂)硫酸钡(着色剂)炭黑

■可根据顾客需要提供其他规格。

▲若直接夹持X光显影线,可能会导致其断裂或掉出而遗留于体内,因此请夹持X光显影线以外的纱布部分。

▲X光显影线接近电手术刀等时,可能会断裂或起火,敬请注意。

灭菌OP纱布X 蓝线

一般医疗器具 带X光显影材料的纱布: 32374000 E.O.G. Tyvek

款号	种类	规格·内容量	内装数量	条形码
12387	蓝线 TS2-10	30cm×30cm 双折 10片装(60袋)	2盒	4971032123875
12304	蓝线 TS2-20	30cm×30cm 双折 20片装(30袋)	2盒	4971032123042
12388	蓝线 TS2-30	30cm×30cm 双折 30片装(20袋)	2盒	4971032123882
10382	蓝线 TS4-10	30cm×30cm 4折 10片装(30袋)	4盒	4971032103822
12215	蓝线 TS4-20	30cm×30cm 4折 20片装(15袋)	4盒	4971032122151
10383	蓝线 TS4-30	30cm×30cm 4折 30片装(10袋)	4盒	4971032103839

■商品名称: 灭菌OP纱布X-A ■申报编号: 23B2X10001000014

■材质: [纱布]棉 [X光显影线](固定材料)聚丙烯、涤纶等(显影剂)硫酸钡(着色剂)深海蓝 grade02

■可根据顾客需要提供其他规格。

▲若直接夹持X光显影线,可能会导致其断裂或掉出而遗留于体内,因此请夹持X光显影线以外的纱布部分。


▲X光显影线接近电手术刀等时,可能会断裂或起火,敬请注意。



- 无需清点便对纱布数量一目了然的手术用灭菌纱布。
- 将手 用纱布如骰子的5个点般进行配置，这样，无需清点也能一目了然地掌握纱布多或少的情况。
- 以骰子的5点配置图像进行记忆，即使经过长时间的手术后，也能清楚记起手术前的数量。
- 只需从手术用纱布上揭下衬纸[Tyvek®]，便能马上使用。
- 单片(30 cm×30 cm)重量固定为约3g，适用于测量出血量。
- 织入X光显影线的手术用纱布，即使不慎遗留在体内，也可通过X光检查出遗留位置。
- 使用了[Tyvek®]灭菌袋的灭菌产品。



黑线

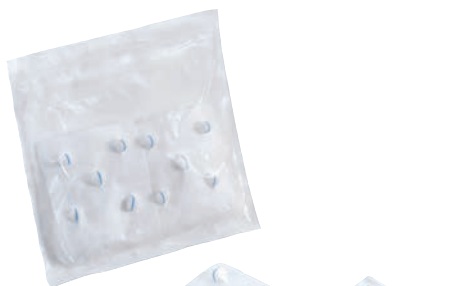

蓝线

灭菌OP计数纱布× 黑线

一般医疗器具 带X光显影材料的纱布：32374000 E.O.G. Tyvek

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
12638	黑线 TS-10	30cm×30cm 10片装(10袋)	4盒	4971032126388
12655	黑线 TS-20	30cm×30cm 20片装(15袋)	2盒	4971032126555
12656	黑线 TS-30	30cm×30cm 30片装(10袋)	2盒	4971032126562

■商品名称：灭菌OP纱布×KS ■申报编号：23B2X10001000066
 ■材质：[纱布]棉 [X光显影线](固定材料)聚苯乙烯类热塑性弹性体(显影剂)硫酸钡(着色剂)炭黑
 ■可根据顾客需要提供其他规格。

▲若直接夹持X光显影线，可能会导致其断裂或掉出而遗留在体内，因此请夹持X光显影线以外的纱布部分。
 ▲X光显影线接近电手术刀等时，可能会断裂或起火，敬请注意。

灭菌OP计数纱布× 蓝线

一般医疗器具 带X光显影材料的纱布：32374000 E.O.G. Tyvek

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
12639	蓝线 TS-10	30cm×30cm 10片装(10袋)	4盒	4971032126395
12657	蓝线 TS-20	30cm×30cm 20片装(15袋)	2盒	4971032126579
12658	蓝线 TS-30	30cm×30cm 30片装(10袋)	2盒	4971032126586

■商品名称：灭菌OP纱布×A ■申报编号：23B2X10001000014
 ■材质：[纱布]棉 [X光显影线](固定材料)聚丙烯、涤纶等(显影剂)硫酸钡(着色剂)深蓝色 grade02
 ■可根据顾客需要提供其他规格。

▲若直接夹持X光显影线，可能会导致其断裂或掉出而遗留在体内，因此请夹持X光显影线以外的纱布部分。
 ▲X光显影线接近电手术刀等时，可能会断裂或起火，敬请注意。




Osaki 缝制纱布X/ 灭菌Osaki 缝制纱布 X



- 使用含X光检查时可视性强的X光显影材料的聚苯乙烯类热塑性弹性体的医用纱布类型II的手术用缝制纱布。
- 加入了面积大的板状X光显影材料,在X光检查时的可视性更高。
- X光显影板的材质柔软,采用圆角设计,因此不易弄伤组织。
- 种类丰富,可根据用途选择有无灭菌及最适当的尺寸。

■X光检查时的比较

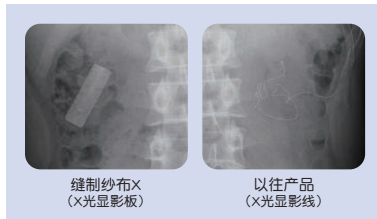

■X光显影板的形状



X光显影板

Osaki 缝制纱布X

一般医疗器具 带X光显影线的折叠纱布: 13705000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
13611	KP20204PT	20cm×20cm 4ply 带柄 20片装	12包	4971032136110
13612	KP30304PT	30cm×30cm 4ply 带柄 20片装	6包	4971032136127
13613	KP30304P	30cm×30cm 4ply 20片装	6包	4971032136134
13614	KP30308PT	30cm×30cm 8ply 带柄 20片装	6包	4971032136141
13615	KP30308P	30cm×30cm 8ply 20片装	6包	4971032136158
13616	KP30454PT	30cm×45cm 4ply 带柄 20片装	6包	4971032136165
13617	KP30458PT	30cm×45cm 8ply 带柄 20片装	6包	4971032136172
13618	KP30604PT	30cm×60cm 4ply 带柄 20片装	6包	4971032136189
13619	KP30608PT	30cm×60cm 8ply 带柄 20片装	6包	4971032136196
13620	KP45454PT	45cm×45cm 4ply 带柄 20片装	6包	4971032136202
13621	KP45458PT	45cm×45cm 8ply 带柄 20片装	6包	4971032136219
13622	KP45458P	45cm×45cm 8ply 20片装	6包	4971032136226
13623	KP60608PT	60cm×60cm 8ply 带柄 10片装	6包	4971032136233

■商品名称: 缝制纱布X-KS ■申报编号: 23B2X10001000067
 ■材质: [纱布]棉 [X光显影线](固定材料)聚苯乙烯类热塑性弹性体 (显影剂)硫酸钡 (着色剂)炭黑 [挂带]棉

▲用于确保手术视野及保护脏器时,请在灭菌后一定用生理食盐水等浸泡之后再使用。

- 使用了[Tyvek®]灭菌袋的灭菌产品。

灭菌Osaki 缝制纱布X

一般医疗器具 带X光显影线的折叠纱布: 13705000 E.O.G. Tyvek

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
13625	KP30304PT	30cm×30cm 4ply 带柄 2片装(40袋)	4盒	4971032136257
13626	KP30308PT	30cm×30cm 8ply 带柄 2片装(20袋)	4盒	4971032136264
13627	KP30454PT	30cm×45cm 4ply 带柄 2片装(20袋)	4盒	4971032136271
13628	KP30458PT	30cm×45cm 8ply 带柄 2片装(15袋)	4盒	4971032136288
13629	KP30608PT	30cm×60cm 8ply 带柄 2片装(20袋)	4盒	4971032136295
13630	KP45454PT	45cm×45cm 4ply 带柄 2片装(12袋)	2盒	4971032136301
13631	KP45458PT	45cm×45cm 8ply 带柄 2片装(12袋)	2盒	4971032136318
13632	KP60608PT	60cm×60cm 8ply 带柄 1片装(15袋)	2盒	4971032136325

■商品名称: 灭菌缝制纱布X-KS ■申报编号: 23B2X10001000068
 ■材质: [纱布]棉 [X光显影线](固定材料)聚苯乙烯类热塑性弹性体 (显影剂)硫酸钡 (着色剂)炭黑 [挂带]棉

Puls X/ 灭菌 Puls X



- 提升了柔软度和吸收力，并织入X光显影线的手术用缝制纱布。
- 即使不慎遗留在体内时，也可使用X光检查出遗留位置。
- 带有50 cm棉线呈环形的挂柄。

Puls X

一般医疗器具 带X光显影线的折叠纱布：13705000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
13014	20204P	20cm×20cm 4ply 带柄 20片装	12盒	4971032130149
13015	30304P	30cm×30cm 4ply 带柄 20片装	6盒	4971032130156
13016	30308P	30cm×30cm 8ply 带柄 20片装	6盒	4971032130163
13017	30454P	30cm×45cm 4ply 带柄 20片装	6盒	4971032130170
13018	30458P	30cm×45cm 8ply 带柄 20片装	6盒	4971032130187
13020	45454P	45cm×45cm 4ply 带柄 20片装	6盒	4971032130200
25020	45458P	45cm×45cm 8ply 带柄 20片装	8盒	4971032250205
13019	30608P	30cm×60cm 8ply 带柄 20片装	6盒	4971032130194
13022	60608P	60cm×60cm 8ply 带柄 10片装	6盒	4971032130224

■商品名称：缝制纱布X-A ■申报编号：23B2X10001000023
 ■材质：[纱布]棉 [X光显影线](固定材料)聚丙烯、涤纶等（显影剂）硫酸钡（着色剂）深海蓝 grade02
 [挂带]棉

▲用于确保手术视野及保护脏器时，请在灭菌后一定用生理食盐水等浸泡之后再使用。

- 使用了[Tyvek®]灭菌袋的灭菌产品。

灭菌 Puls X

一般医疗器具 带X光显影线的折叠纱布：13705000 E.O.G. Tyvek

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
13023	TS20204P-2	20cm×20cm 4ply 带柄 2片装(40袋)	4盒	4971032130231
13024	TS30304P-2	30cm×30cm 4ply 带柄 2片装(30袋)	4盒	4971032130248
13025	TS30308P-2	30cm×30cm 8ply 带柄 2片装(20袋)	4盒	4971032130255
13026	TS30454P-2	30cm×45cm 4ply 带柄 2片装(20袋)	4盒	4971032130262
13027	TS30458P-2	30cm×45cm 8ply 带柄 2片装(15袋)	4盒	4971032130279
13028	TS45454P-2	45cm×45cm 4ply 带柄 2片装(12袋)	4盒	4971032130286
13029	TS45458P-2	45cm×45cm 8ply 带柄 2片装(12袋)	2盒	4971032130293
13030	TS30608P-2	30cm×60cm 8ply 带柄 2片装(20袋)	2盒	4971032130309
13031	TS60608P-1	60cm×60cm 8ply 带柄 1片装(15袋)	2盒	4971032130316

■商品名称：灭菌缝制纱布X-A ■申报编号：23B2X10001000024
 ■材质：[纱布]棉 [X光显影线](固定材料)聚丙烯、涤纶等（显影剂）硫酸钡（着色剂）深海蓝 grade02
 [挂带]棉
 ■由于是定制产品，有时需要等待交付时间。

灭菌 Wipe Sponge X




- 最适用于肠管切除时擦拭的带X光显影线的纱布。
- 即使不慎遗留在体内时，也可使用X光检查出遗留位置。
- 因为是使用了易折叠材料的纱布，具有厚实、柔软、吸收性及擦拭性强的优点。
- 将带X光显影线纱布往内侧折叠缝制，避免了线头的露出。
- 使用了[Tyvek®]灭菌袋的灭菌产品。

一般医疗器具 带X光显影线的折叠纱布：13705000 E.O.G. Tyvek

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
13453	TS35358P-10	3.5cm×3.5cm(成品尺寸) 8ply 10片装(20袋)	10盒	4971032134536
13454	TS35358P-20	3.5cm×3.5cm(成品尺寸) 8ply 20片装(20袋)	8盒	4971032134543
13455	TS25258P-10	2.5cm×2.5cm(成品尺寸) 8ply 10片装(20袋)	10盒	4971032134550
13456	TS25258P-20	2.5cm×2.5cm(成品尺寸) 8ply 20片装(20袋)	8盒	4971032134567

■商品名称：灭菌缝制纱布X-A ■申报编号：23B2X10001000024
 ■材质：[纱布]棉 [X光显影线](固定材料)聚丙烯、涤纶等（显影剂）硫酸钡（着色剂）深海蓝 grade02

灭菌填塞海绵 X

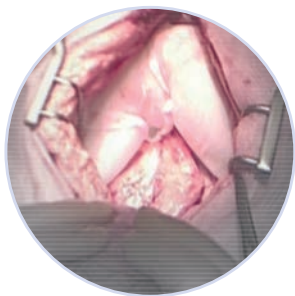

- 手术时将妨碍视线的非手术脏器排开，确保手术视野的压排脏器用海绵。
- 弹性海绵可有效排开非手术脏器，确保手术视野。
- 海绵材质柔软，不会对脏器造成伤害。
- 表面包裹纱布，可避免脏器发生偏移，此外，即使被镊子、钳子等夹住，海绵也不会断裂。
- 根据压排对象脏器及患者的体型，有4种尺寸可供选择。
- 即使不慎遗留在体内时，也可使用X光检查出遗留位置。
- 使用蓝色无菌包装，可保证无菌操作。

■使用方法(例)

- 1、打开灭菌包装，取出产品。在洁净环境下展开灭菌膜使用。
- 2、本产品含有杀菌生理盐水，在保持适度的湿润状态下，轻轻挤压。
- 3、妥当排除其他脏器器官。
- 4、使用后，必须取出本产品，为了防止残留，通过X光线摄影，确认本产品没有残留在体内后进行关腹手术。

一般医疗器具 带X光显影线的折叠纱布：13705000 (A.C.)

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
50414	AS-L	直径8cm×30cm 1条装(10袋)	—	4971032504148
50415	AS-M	直径8cm×22cm 1条装(10袋)	—	4971032504155
50416	AS-S	直径8cm×13cm 1条装(10袋)	—	4971032504162
50417	AS-SS	直径6cm×10cm 1条装(10袋)	—	4971032504179

■商品名称：灭菌Osaki带X光显影材质海绵X-KS ■申报编号：23B2X10001000079

■材质：[主体]涤纶、棉
[X光显影线](固定材料)聚苯乙烯(显影剂)硫酸钡(着色剂)炭黑
[挂带]棉

⚠请在灭菌后一定用生理盐水等浸泡之后再使用。

HEPA LIFT X



- 排压肝脏，确保良好视野的内视镜下手术用排压器具。
- 在排压肝脏时不占用套管针的时间，可提高手术效率。
- 与硬质压排器具相比，可有效保护肝脏。
- 肝脏冠状韧带(左三角韧带)的切开位置，也可使用彭罗斯法从外侧切开，手术操作安全简单。
- 器具形状可处理肝脏左叶膨大等多种肝脏疾病。
- 通过颜色区别各个支脚与线色，方便识别。
- 使用的材质结实、安全性高且操作性能良好。
- 使用了[Tyvek®]灭菌袋的灭菌产品。

一般医疗器具 脏器固定器：1337100 (E.O.G.) (Tyvek)

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
50413	—	1片装(5袋)	—	4971032504131

■商品名称：灭菌Osaki脏器固定器X-A ■申报编号：23B2X10001000076

■材质：[主体]涤纶、尼龙、棉
[X光显影线](固定材料)聚苯乙烯(显影剂)硫酸钡(着色剂)炭黑(黑色)TET 5MA636 GRN(绿色)


⚠请具有丰富腹腔镜下手术操作经验的医生或在具指导下使用本产品。

⚠在使用本产品之前，请务必观看操作录像，同时请认真阅读使用方法，并在使用时遵守操作方法、操作手册。




- 操作简便的带X光显影线的内镜下手术用灭菌纱布。
- 通过套管针,只要推一即可插入。
- 在剥离血管周围及神经纤维组织时非常有效。
- 通过纱布的层叠,可充分吸收血液、体液等。
- 以对角线上的X光显影线为标记,用钳子将角部夹持住后拖出使纱布呈直线,无需绞动套管针的前端即可取出吸收的血液及体液。
- 使用了[Tyvek®]灭菌袋的灭菌产品。

■使用方法

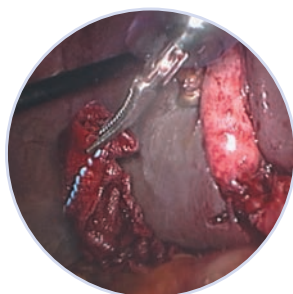

Trox 使用例

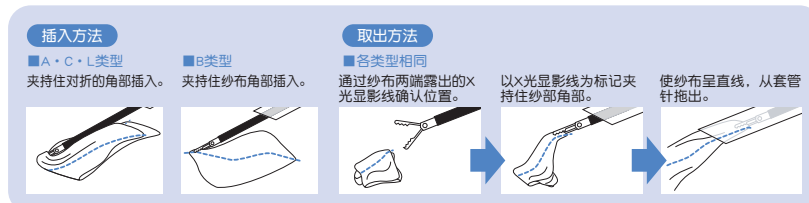

Trox

Trox

一般医疗器具 带X光显影线的折叠纱布: 13705000 E.Q.G. Tyvek

款号	种类	规格	内装数量	对应器具	条形码
23700	A类型	30mm×150mm 4ply 5片装(20袋)	12盒	使用10 mm以上的套管针 5 mm钳子	4971032237008
23701	B类型	50mm× 75mm 8ply 2片装(20袋)	12盒	使用10 mm以上的套管针 5 mm钳子	4971032237015
23702	C类型	30mm×150mm 1ply 5片装(20袋)	12盒	使用5 mm以上的套管针 3 mm钳子	4971032237022

■商品名称: 灭菌缝制纱布X-A ■申报编号: 23B2X10001000024

■材质: [纱布]棉 [X光显影线](固定材料)聚丙烯、涤纶等(显影剂)硫酸钡(着色剂)深海蓝 grade02

- ▲如直接夹X光显影线,有可能会造成断线、脱落而导致其遗留在体内,因此请务必夹X光显影线之外的纱布部分。
- ▲X光显影线如果靠近电手术刀,有可能会引起断线、着火,请注意。

- 制成的X光显影线被缝在纱布内,因此不会掉落。



Trox II

Trox II

一般医疗器具 带X光显影线的折叠纱布: 13705000 E.Q.G. Tyvek

款号	种类	规格	内装数量	对应器具	条形码
23710	A类型	30mm×150mm 4ply 5片装(20袋)	12盒	使用10 mm以上的套管针 5 mm钳子	4971032237107
23711	B类型	50mm× 70mm 8ply 2片装(20袋)	12盒	使用10 mm以上的套管针 5 mm钳子	4971032237114
23712	C类型	30mm×150mm 1ply 5片装(20袋)	12盒	使用5 mm以上的套管针 3 mm钳子	4971032237121
23723	L类型 3c	30mm×200mm 4ply 5片装(20袋)	—	使用10 mm以上的套管针 5 mm钳子	4971032237237

■商品名称: 灭菌缝制纱布X-A ■申报编号: 23B2X10001000024


■材质: [纱布]棉 [X光显影线](固定材料)聚丙烯、涤纶等(显影剂)硫酸钡(着色剂)深海蓝 grade02

- ▲如直接夹X光显影线,有可能会造成断线、脱落而导致其遗留在体内,因此请务必夹X光显影线之外的纱布部分。
- ▲X光显影线如果靠近电手术刀,有可能会引起断线、着火,请注意。



- 5mm套管针、5mm钳子专用筒夹类型的TroX。
- 通过圆筒状的筒夹，只要一推，纱布即可轻松插入。
- 通过纱布的层叠，可充分吸收血液和体液。
- 在剥离血管周围及神经纤维组织时有效。
- 疏水性PP(聚丙烯)制成的X光显影线被缝在纱布内，因此不会掉落。
- 拉出时，以对角线上的X光显影线为大致的位置标记，用钳子夹持住纱布角部，并将纱布拉成直线，便能无需绞套管针的前端即可取出吸收的血液和体液。

■ 各部位名称

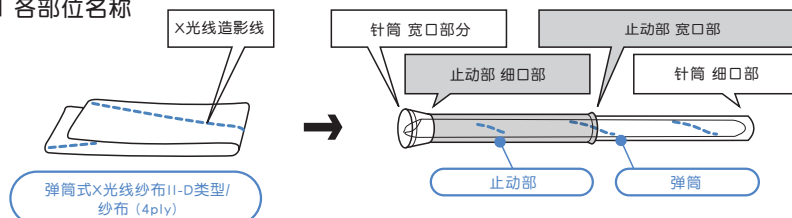

■ 使用方法




- ⚠ 由于具有损伤人体和脏器的可能性，请务必遵守使用说明书记载的内容。
- 使用前，请务必仔细阅读本书和附件(记载处:外包装背面)。



弹筒式X光线纱布 II -D类型

实物尺寸

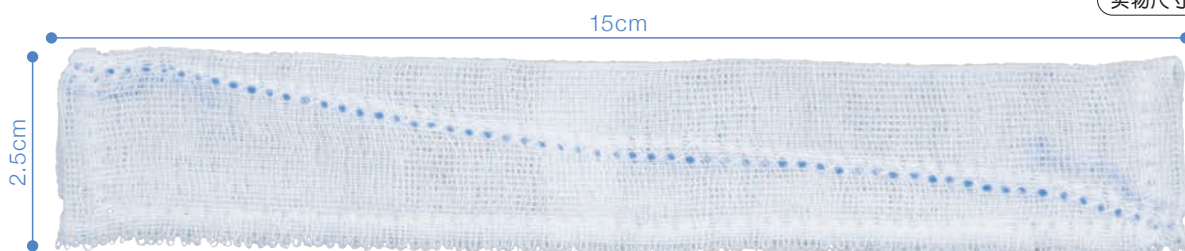

弹筒式专用纱布(本体)

Trox II -D类型

E.O.G. TIVEX

款号	种类	规格	内装数量	对应器具	条形码
23725	II -D类型	弹筒式 2.5cm×15cm 4ply 1根装(20袋)	12盒	使用5 mm以上的套管针 5 mm钳子(一部分商品除外)	4971032237251
23713	II -D类型	弹筒式 2.5cm×15cm 4ply 3根装(20袋)	12盒	使用5 mm以上的套管针 5 mm钳子(一部分商品除外)	4971032237138

■ 商品名称: 灭菌缝制纱布X-A ■ 申报编号: 23B2X10001000024
■ 材质: [纱布]棉 [X光显影线](固定材料)聚丙烯、涤纶等 (显影剂)硫酸钡 (着色剂)深海蓝 grade02


- ⚠ 如直接夹X光显影线，有可能会造成断线、脱落而导致其遗留在体内，因此请务必夹X光显影线之外的纱布部分。
- ⚠ X光显影线如果靠近电手术刀，有可能会引起断线、着火，请注意。
- ⚠ 弹筒和止动部内不含造影剂，因此无法进行X光摄影。
- 不单独销售医用纱布。

Endo Wiper-X



- 能简单清除输液港内腔的污垢,从而防止再插入摄像头时发生污染的擦拭巾。
- 吸收性好,充分吸收输液港内腔的血液。
- 使用不起毛的材料,几乎不会有脱落的纤维。
- 使用柔软的无纺布,若万一触碰到脏器时,也不易伤及脏器。
- 万一遗留于体内,也可用X光检查找出位置。
- 使用了[Tyvek®]灭菌袋的灭菌产品。

■使用方法

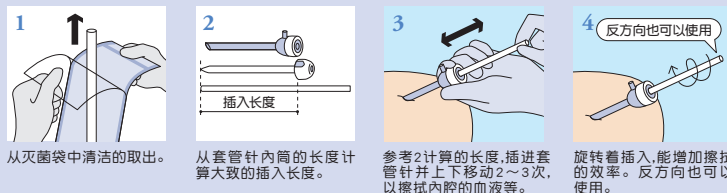

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
23721	5mm输液港用	6mm×25cm 1根装(20袋)	8盒	4971032237213
23722	12mm输液港用	12mm×25cm 1根装(20袋)	8盒	4971032237220


▲使用前请确认与套管针的适合度。

灭菌Scope Wiper X



- 贴着硬性镜或软性镜前端,不仅是妨碍视野的水滴,脂肪滴及蛋白等顽固的污垢也可轻松去除的极细纤维无纺布擦拭纱布。
- 使用了不起毛的长纤维无纺布,不会造成镜头表面粘上脱落纤维。
- 插入到体内后不慎造成遗留时,可用X光查出遗留位置。
- 采用100%纤维素的无纺布,不会造成溶出。
- 使用了[Tyvek®]灭菌袋的灭菌产品。


■纤维比较

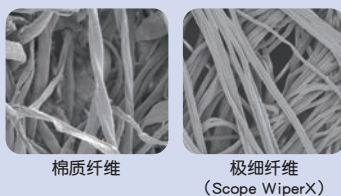

■镜片擦拭前后比较




■使用方法(例)

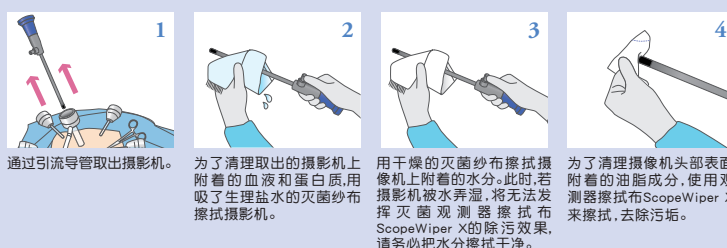

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
23704	—	10cm×10cm 4ply 1片装(50袋)	12盒	4971032237046

Osaki 小纱布球・X/ 灭菌Osaki 小纱布球・X

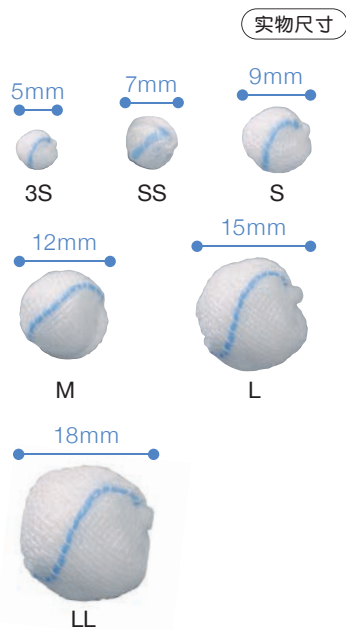

- 外科手术剥离血管周围及神经组织时使用的带X光显影线的小纱布球。
- 不慎遗留在体内时,可用X光查出遗留位置。
- 由于是用纱布紧紧卷起来做成的小纱布球,所以也具有一定的硬度。
- 可节省制作纱布球的作业。

Osaki 小纱布球・X

一般医疗器具 带X光显影线的折叠纱布:13705000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
19994	铃铛型 3S	直径5mm 100个装	30盒	4971032199948
19917	铃铛型 SS	直径7mm 100个装	30盒	4971032199177
19918	铃铛型 S	直径9mm 100个装	30盒	4971032199184
19919	铃铛型 M	直径12mm 100个装	30盒	4971032199191
19920	铃铛型 L	直径15mm 100个装	30盒	4971032199207
20002	铃铛型 LL	直径18mm 100个装	30盒	4971032200026

■商品名称:Osaki小纱布球X-A ■申报编号:23B2X10001000017
 ■材质:[纱布]棉[X光显影线](固定材料)聚丙烯、涤纶等(显影剂)硫酸钡(着色剂)深海蓝 grade02

- 使用了[Tyvek®]灭菌袋的灭菌产品。


灭菌Osaki 小纱布球・X

一般医疗器具 带X光显影线的折叠纱布:13705000 E.O.G. Tyvek

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
19988	TS铃铛型 3S-5	直径5mm 5 入(20袋)	10盒	4971032199887
19921	TS铃铛型 SS-5	直径7mm 5 入(20袋)	10盒	4971032199214
19922	TS铃铛型 S-5	直径9mm 5 入(20袋)	10盒	4971032199221
19923	TS铃铛型 M-5	直径12mm 5 入(20袋)	10盒	4971032199238
19924	TS铃铛型 L-5	直径15mm 5 入(20袋)	10盒	4971032199245
20001	TS铃铛型 LL-5	直径18mm 5 入(20袋)	10盒	4971032200019

■商品名称:灭菌Osaki小纱布球X-A ■申报编号:23B2X10001000018
 ■材质:[纱布]棉[X光显影线](固定材料)聚丙烯、涤纶等(显影剂)硫酸钡(着色剂)深海蓝 grade02
 ■可根据顾客需要提供其他规格。

Osaki 纱布球 X/ 灭菌 Osaki 纱布球 X

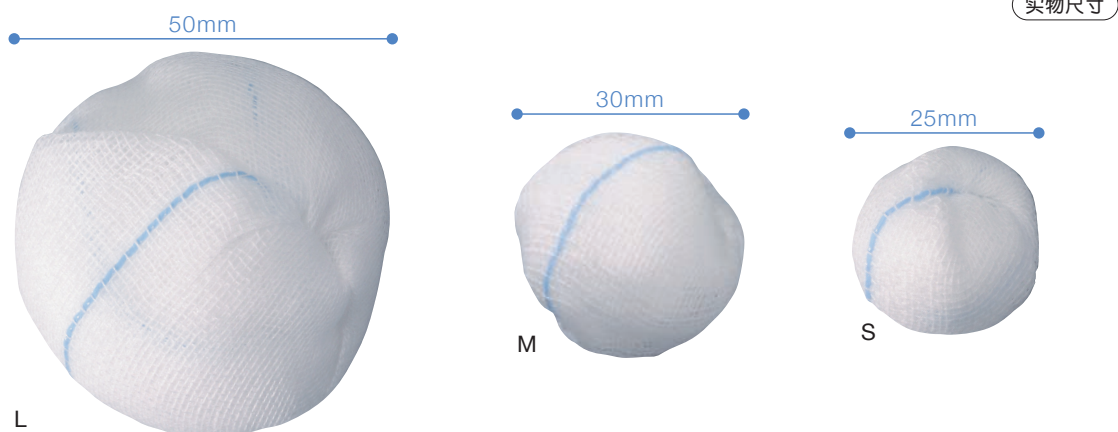

- 在剃毛后消毒时不会留下棉线的、带X光显影线的纱布球。
- 不慎遗留在体内时，可用X光查出遗留位置。
- 将裁剪面卷入内侧，避免了线头露出。

Osaki 纱布球 X

一般医疗器具 带X光显影线的折叠纱布：13705000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
24900	S	直径25mm 100球装	10盒	4971032249001
24901	M	直径30mm 100球装	10盒	4971032249018
24902	L	直径50mm 100球装	4盒	4971032249025

■商品名称：灭菌Osaki小纱布球X-A ■申报编号：23B2X10001000017
■材质：〔纱布〕棉〔X光显影线〕〔固定材料〕聚丙烯、涤纶等（显影剂）硫酸钡（着色剂）深海蓝 grade02

- 使用了[Tyvek®]灭菌袋的灭菌产品。

灭菌 Osaki 纱布球 X

一般医疗器具 带X光显影线的折叠纱布：13705000 E.O.G. Tyvek

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
24903	TSS-5	直径25mm 5球装(50袋)	8盒	4971032249032
24904	TSM-5	直径30mm 5球装(30袋)	8盒	4971032249049
24905	TSL-5	直径50mm 5球装(30袋)	4盒	4971032249056

■商品名称：灭菌Osaki小纱布球X-A ■申报编号：23B2X10001000018
■材质：〔纱布〕棉〔X光显影线〕〔固定材料〕聚丙烯、涤纶等（显影剂）硫酸钡（着色剂）深海蓝 grade02
■可根据顾客需要提供其他规格。

灭菌插入用纱布 X



- 带X光显影线的手术用插入纱布。
- 不慎遗留在体内时，可用X光查出遗留位置。
- 采用密织制法，X光显影线不会脱落。
- 带耳部，线头不露出，使用方便。
- 使用了[Tyvek®]灭菌袋的灭菌产品。

一般医疗器具 带X光显影材料的纱布：32374000 E.O.G. Tyvek

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
★ 19678	—	3cm×10cm 双折 10片装(100袋)	—	4971032196787
★ 19679	—	3cm×15cm 双折 10片装(100袋)	—	4971032196794
★ 19659	—	3cm×20cm 双折 5片装(100袋)	—	4971032196596
★ 19658	—	5cm×30cm 正4折 5片装(100袋)	—	4971032196589

■商品名称：灭菌OP纱布X-A 申报编号：23B2X10001000014
■材质：〔纱布〕棉〔X光显影线〕〔固定材料〕聚丙烯、涤纶等（显影剂）硫酸钡（着色剂）深海蓝 grade02
■可根据顾客需要提供其他规格。
★由于是定制产品，需要等待交付时间。

插入用纱布



- 用于耳鼻科、妇产科等的插入纱布。
- 可根据用途进行裁剪。

一般医疗器具 医用纱布：13700000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
19608	1号	1cm×20m 10根装	—	4971032196084
19609	1.5号	1.5cm×20m 10根装	—	4971032196091
19610	2号	2cm×20m 10根装	—	4971032196107
19611	2.5号	2.5cm×20m 10根装	—	4971032196114
19612	3号	3cm×20m 10根装	—	4971032196121
19613	4号	4cm×20m 10根装	—	4971032196138
19614	5号	5cm×20m 10根装	—	4971032196145

■商品名称：Osaki医用纱布 ■申报编号：23B2X10001000003

Tampon纱布



- 用于耳鼻科、妇产科等的插入纱布。
- 去除了裁剪部的线头，纤维不会脱落。
- 可根据用途进行裁剪。

一般医疗器具 医用纱布：13700000


款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
16012	1号	1cm×40m 10根装	—	4971032160122
16000	1.5号	1.5cm×40m 10根装	—	4971032160009
16001	2号	2cm×40m 10根装	—	4971032160016
16002	2.5号	2.5cm×40m 10根装	—	4971032160023
16003	3号	3cm×40m 10根装	—	4971032160030
16004	4号	4cm×40m 10根装	—	4971032160047
16005	5号	5cm×40m 10根装	—	4971032160054
16006	6号	6cm×40m 10根装	—	4971032160061
16007	7号	7cm×40m 10根装	—	4971032160078
16013	8号	8cm×40m 10根装	—	4971032160139
16014	10号	10cm×40m 10根装	—	4971032160146

■商品名称：Osaki医用纱布 ■申报编号：23B2X10001000003

New Tampon纱布



- 尺寸裁剪成易于使用的 tampon 纱布。
- 去除了裁剪部的线头，纤维不会脱落。
- 可以节省制作插入用纱布的作业。

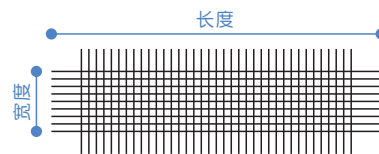

一般医疗器具 医用纱布：13700000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
★ 16015	1×10	1cm×10cm 3840片装	—	4971032160153
★ 16008	1.5×15	1.5cm×15cm 2560片装	—	4971032160085
★ 16023	2×15	2cm×15cm 2560片装	—	4971032160238
★ 16027	2.5×15	2.5cm×15cm 2560片装	—	4971032160276
★ 16009	3×15	3cm×15cm 2560片装	—	4971032160092
★ 16011	3×30	3cm×30cm 1280片装	—	4971032160115
★ 16037	4×30	4cm×30cm 1280片装	—	4971032160375
★ 16041	5×30	5cm×30cm 1280片装	—	4971032160412

■商品名称：Osaki医用纱布 申报编号：23B2X10001000003
 ■可根据顾客需要提供其他规格。
 ★由于是定制产品，有时需要等待交付时间。

小型折叠纱布



- 使用了医用纱布类型Ⅱ的牙科用止血、吸收纱布。
- 将裁剪面折入内侧，避免了线头露出。
- 在需要一定的吸收量和厚度时最为适用。

一般医疗器具 医用纱布：13700000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
18000	3号	3.5cm×3.5cm(成品尺寸) 8ply 200片装	20袋	4971032180007
18001	5号	5cm×5cm(成品尺寸) 9ply 1120片装	—	4971032180014

■商品名称：Osaki医用纱布 ■申报编号：23B2X10001000003



RP Cloth Gauze



- 柔软、吸收性及透气性强的人造丝/聚脂无纺布纱布。
- 即使经过高压蒸气灭菌、E.O.G.灭菌,也几乎没有品质劣化。

一般医疗器具 医用无纺布:34655000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
21806	0号	10cm×10cm 4折 200片装	40袋	4971032218069
21807	1号	15cm×15cm 4折 200片装	40袋	4971032218076
21808	2号	15cm×20cm 4折 200片装	20袋	4971032218083
21809	3号	20cm×20cm 4折 200片装	20袋	4971032218090
21801	4号	25cm×25cm 4折 200片装	20袋	4971032218014
21804	5号	30cm×30cm 平放 200片装	20袋	4971032218045
21802	6号	30cm×30cm 4折 200片装	20袋	4971032218021
21803	7号	30cm×30cm 8折 200片装	20袋	4971032218038

■商品名称: RP Cloth Gauze ■申报编号: 23B2X10001000005

RP Cloth Gauze EV



- 柔软、吸收性及透气性强的人造丝/聚脂无纺布纱布。
- 即使经过高压蒸气灭菌、E.O.G.灭菌,也几乎没有品质劣化。

一般医疗器具 医用无纺布:34655000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
21871	4号	25cm×25cm 4折 200片装	20袋	4971032218717
21881	6号	30cm×30cm 4折 200片装	20袋	4971032218816

■商品名称: RP Cloth Gauze ■申报编号: 23B2X10001000005

Osaki 医用无纺布纱布



- 柔软、吸收性及透气性强的人造丝/聚脂无纺布纱布。
- 即使经过高压蒸气灭菌、E.O.G.灭菌,也几乎没有品质劣化。
- 有2种尺寸可供选择。

一般医疗器具 医用无纺布:34655000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
25560	4号	25cm×25cm 4折 200片装	20袋	4971032255606
25561	6号	30cm×30cm 4折 200片装	20袋	4971032255613

■商品名称: Osaki 医用无纺布纱布 ■申报编号: 23B2X10001000090

Cloth Gauze Cotton/灭菌Cloth Gauze Cotton



- 柔软、吸收性及透气性优良的全棉无纺布纱布。
- 全棉材料，可作为处理用纱布放心使用。
- 吸收量约为棉纱布的1.5倍。
- 即使经过高压蒸气灭菌、E.O.G.灭菌，也几乎没有品质劣化。

Cloth Gauze Cotton

一般医疗器具 医用无纺布：34655000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
18450	4号	25cm×25cm 4折 200片装	24个	4971032184500
18451	6号	30cm×30cm 4折 200片装	20个	4971032184517

■商品名称：Cloth Gauze Cotton ■申报编号：23B2X10001000082

- 类型丰富，可选择最适合的尺寸和内容量，不会造成浪费。
- 剪去内包装箱的顶部，纱布便更易取出，可以直接放在查房车上使用。

灭菌Cloth Gauze Cotton

一般医疗器具 医用无纺布：34655000 E.O.G.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
18452	S6号-1	30cm×30cm 4折 1片装(100袋)	8盒	4971032184524
18453	S6号-2	30cm×30cm 4折 2片装 (50袋)	8盒	4971032184531
18454	S6号-5	30cm×30cm 4折 5片装 (20袋)	8盒	4971032184548
18455	S6号-10	30cm×30cm 4折 10片装 (20袋)	4盒	4971032184555
18456	S6号-20	30cm×30cm 4折 20片装 (10袋)	4盒	4971032184562
18457	S6号-30	30cm×30cm 4折 30片装 (6袋)	4盒	4971032184579
18458	S7号-1	30cm×30cm 8折 1片装 (100袋)	8盒	4971032184586
18459	S7号-2	30cm×30cm 8折 2片装 (50袋)	8盒	4971032184593
18460	S7号-5	30cm×30cm 8折 5片装 (20袋)	8盒	4971032184609
18461	S7号-10	30cm×30cm 8折 10片装 (10袋)	8盒	4971032184616
18462	S16号-1	30cm×30cm 16折 1片装 (60袋)	6盒	4971032184623
18463	S16号-2	30cm×30cm 16折 2片装 (30袋)	8盒	4971032184630

■商品名称：灭菌Cloth Gauze Cotton ■申报编号：23B2X10001000083



Ouze CP/ 灭菌 Ouze CP



- 用纱布卷起脱脂棉的、柔软的外科用垫。
- 可快速吸收渗出液，小心地保护伤口。
- 烫伤、眼科、外科、皮肤科等，可根据用途使用。

Ouze CP

一般医疗器具 绵状创伤覆盖、保护材料:11751000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
28600	1号	5cm× 6cm(脱指棉1层) 150片装	40袋	4971032286006
28601	2号	7.5cm× 7.5cm(脱指棉1层) 100片装	40袋	4971032286013
28602	3号	10cm× 10cm(脱指棉1层) 60片装	40袋	4971032286020
28603	4号	7.5cm× 15.5cm(脱指棉2层) 30片装	40袋	4971032286037
28604	5号	10cm× 20.5cm(脱指棉2层) 40片装	20袋	4971032286044
28605	6号	15cm× 15cm(脱指棉2层) 40片装	20袋	4971032286051
28606	7号	15cm× 28cm(脱指棉2层) 20片装	20袋	4971032286068
28607	8号	27cm× 28cm(脱指棉2层) 10片装	20袋	4971032286075
28608	9号	27cm× 60cm(脱指棉2层) 5片装	20袋	4971032286082

■商品名称:棉垫片 ■申报编号:23B2X10001000087



灭菌 Ouze CP

一般医疗器具 绵状创伤覆盖、保护材料:11751000 E.O.G.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
28609	S1号-150	5cm× 6cm(脱指棉1层) 150片装	40袋	4971032286099
28610	S2号-100	7.5cm× 7.5cm(脱指棉1层) 100片装	40袋	4971032286105
28611	S3号-60	10cm× 10cm(脱指棉1层) 60片装	40袋	4971032286112
28612	S4号-30	7.5cm× 15.5cm(脱指棉2层) 30片装	40袋	4971032286129
28613	S5号-40	10cm× 20.5cm(脱指棉2层) 40片装	20袋	4971032286136
28614	S6号-40	15cm× 15cm(脱指棉2层) 40片装	20袋	4971032286143
28615	S7号-20	15cm× 28cm(脱指棉2层) 20片装	20袋	4971032286150
28616	S8号-10	27cm× 28cm(脱指棉2层) 10片装	20袋	4971032286167

■商品名称:灭菌棉垫片 ■申报编号:23B2X10001000088

- 使用了[Tyvek®]灭菌袋的灭菌产品。

灭菌 Ouze CP TS

一般医疗器具 绵状创伤覆盖、保护材料:11751000 E.O.G. Tyvek

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
28618	TS1号-1	5cm× 6cm(脱指棉1层) 1片装(100袋)	4盒	4971032286181
28619	TS2号-1	7.5cm× 7.5cm(脱指棉1层) 1片装(100袋)	4盒	4971032286198
28620	TS3号-1	10cm× 10cm(脱指棉1层) 1片装 (40袋)	8盒	4971032286204
28621	TS4号-1	7.5cm× 15.5cm(脱指棉2层) 1片装 (40袋)	8盒	4971032286211
28622	TS5号-1	10cm× 20.5cm(脱指棉2层) 1片装 (30袋)	4盒	4971032286228
28623	TS6号-1	15cm× 15cm(脱指棉2层) 1片装 (30袋)	4盒	4971032286235
28624	TS7号-1	15cm× 28cm(脱指棉2层) 1片装 (20袋)	4盒	4971032286242
28625	TS8号-1	27cm× 28cm(脱指棉2层) 1片装 (10袋)	4盒	4971032286259

■商品名称:灭菌棉垫片 ■申报编号:23B2X10001000088

Sand Gauze/ 灭菌Sand Gauze



C类型



F类型

- 使用了高吸收片状聚合物的、吸收性强的外科用护垫。
- 有表面材料采用全棉无纺布的C类型, 和使用了在表面材料上开孔的PET (聚对苯二甲酸乙二醇酯)膜、不易于粘住创口、易于剥离的F类型。
- 反面采用了防水纸, 避免外漏。

Sand Gauze C类型

一般医疗器具 手术用覆盖、保护材料: 34654000
烫伤覆盖、保护材料: 11322101
医用无纺布: 34655000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
15751	C7515	7.5cm×15cm 60片装	5盒	4971032157511
15752	C1515	15cm×15cm 40片装	5盒	4971032157528
15753	C1530	15cm×30cm 50片装	4盒	4971032157535
15754	C3030	30cm×30cm 25片装	4盒	4971032157542

■商品名称: OsakiSand Gauze C ■申报编号: 23B2X10001000074

Sand Gauze F类型

一般医疗器具 手术用覆盖、保护材料: 34654000
烫伤覆盖、保护材料: 11322101
医用无纺布: 34655000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
15755	F7515	7.5cm×15cm 60片装	5盒	4971032157559
15756	F1515	15cm×15cm 40片装	5盒	4971032157566
15757	F1530	15cm×30cm 50片装	4盒	4971032157573
15758	F3030	30cm×30cm 25片装	4盒	4971032157580

■商品名称: OsakiSand GauzeF ■申报编号: 23B2X10001000072

- 使用了[Tyvek®]灭菌袋的灭菌产品。

灭菌Sand Gauze C类型

一般医疗器具 手术用覆盖、保护材料: 34654000
烫伤覆盖、保护材料: 11322101
医用无纺布: 34655000 E.O.G. Tyvek

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
15743	SC7515-1	7.5cm×15cm 1片装(30袋)	8盒	4971032157436
15744	SC1515-1	15cm×15cm 1片装(20袋)	8盒	4971032157443
15745	SC1530-1	15cm×30cm 1片装(20袋)	6盒	4971032157450
15746	SC3030-1	30cm×30cm 1片装(15袋)	4盒	4971032157467

■商品名称: 灭菌OsakiSand Gauze C ■申报编号: 23B2X10001000073

灭菌Sand Gauze F类型

一般医疗器具 手术用覆盖、保护材料: 34654000
烫伤覆盖、保护材料: 11322101
医用无纺布: 34655000 E.O.G. Tyvek

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
15747	SF7515-1	7.5cm×15cm 1片装(30袋)	8盒	4971032157474
15748	SF1515-1	15cm×15cm 1片装(20袋)	8盒	4971032157481
15749	SF1530-1	15cm×30cm 1片装(20袋)	6盒	4971032157498
15750	SF3030-1	30cm×30cm 1片装(15袋)	4盒	4971032157504

■商品名称: 灭菌OsakiSand GauzeF ■申报编号: 23B2X10001000071

Sarafit/ 灭菌Sarafit



- 易于从创口部剥离的两面吸收型外科用垫。
- 更换时不会弄伤创口部。
- 不使用粘合剂,而是将PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)膜贴合至脱脂棉。

Sarafit

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
20910	1515	15cm×15cm 40片装	30袋	4971032209104
20909	1530	15cm×30cm 20片装	30袋	4971032209098
20911	3030	30cm×30cm 20片装	10袋	4971032209111
20912	6060	60cm×60cm 3片装	30袋	4971032209128

灭菌Sarafit


E.O.G.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
20901	S1515-40	15cm×15cm 40片装	30袋	4971032209012
20903	S1530-20	15cm×30cm 20片装	30袋	4971032209036
20902	S3030-10	30cm×30cm 10片装	30袋	4971032209029
20900	S3060-5	30cm×60cm 5片装	30袋	4971032209005
20904	S6060-3	60cm×60cm 3片装	30袋	4971032209043

脱脂棉制品



珍珠棉球／灭菌珍珠棉球

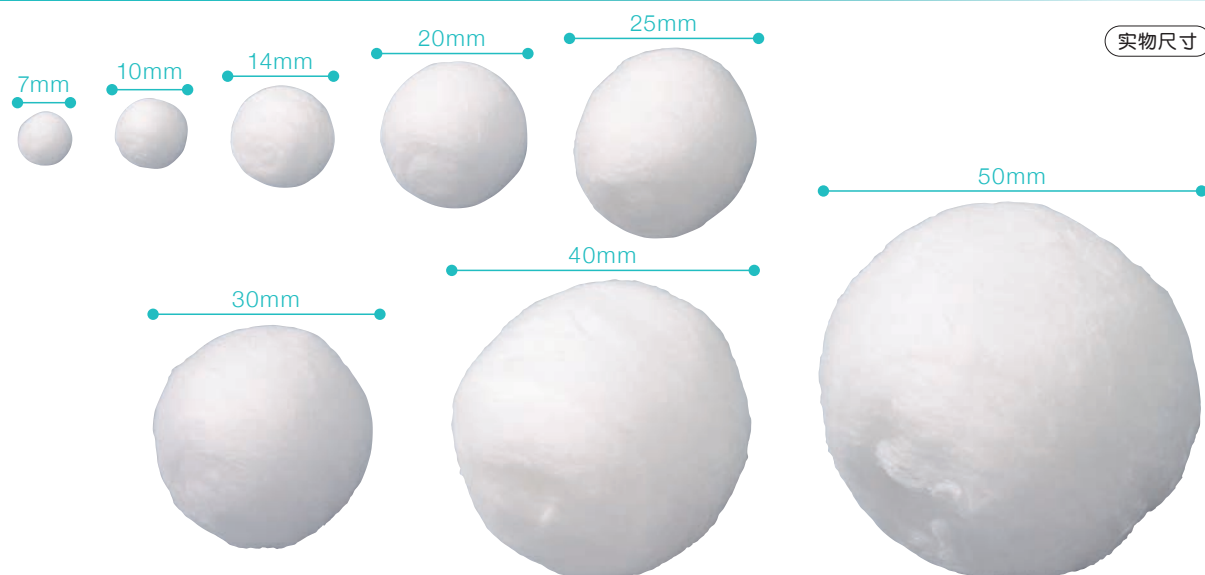

- 可节约10%~15%药液使用量的经济实用型棉球。(与本公司的Osaki棉球相比)
- 完全不使用合成树脂胶，通过特殊表面加工达到抑制棉球毛绒的效果，因此脱落纤维少，棉线不会残留在创口部。
- 不易变形，即使在药液浸泡之后也会维持球型。
- 各棉球之间不会缠在一起，节省分离棉球的麻烦。

珍珠棉球

一般医疗器具 棉球：11028000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
31420	No.7	直径 7mm 50g装	10袋×6盒	4971032314204
31400	No.10	直径10mm 50g装	10袋×6盒	4971032314006
31401	No.14	直径14mm 50g装	10袋×6盒	4971032314013
31402	No.20	直径20mm 50g装	10袋×6盒	4971032314020
31403	No.25	直径25mm 50g装	10袋×6盒	4971032314037
31405	No.30	直径30mm 50g装	10袋×6盒	4971032314051
31407	No.40	直径40mm 50g装	10袋×6盒	4971032314075
31554	No.50	直径50mm 50g装	10袋×6盒	4971032315546
31616	No.20T	带柄 直径20mm 50g装	10袋×6盒	4971032316161
31404	No.25T	带柄 直径25mm 50g装	10袋×6盒	4971032314044
31406	No.30T	带柄 直径30mm 50g装	10袋×6盒	4971032314068
31659	No.40T	带柄 直径40mm 50g装	10袋×6盒	4971032316598

■商品名称：珍珠棉球 ■申报编号：23B2X10001000031

- 使用了[Tyvek®]灭菌袋的灭菌产品。

灭菌珍珠棉球

一般医疗器具 棉球：11028000 E.O.G. Tyvek



款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
31555	TS10-10	直径10mm 10球装(50袋)	8盒	4971032315553
31556	TS10-20	直径10mm 20球装(50袋)	8盒	4971032315560
31557	TS14-10	直径14mm 10球装(50袋)	8盒	4971032315577
31558	TS14-20	直径14mm 20球装(50袋)	8盒	4971032315584
31559	TS20-5	直径20mm 5球装(50袋)	8盒	4971032315591
31560	TS20-10	直径20mm 10球装(50袋)	8盒	4971032315607
31561	TS20-20	直径20mm 20球装(50袋)	4盒	4971032315614
31562	TS25-10	直径25mm 10球装(50袋)	4盒	4971032315621
31563	TS25-20	直径25mm 20球装(30袋)	4盒	4971032315638
31564	TS30-10	直径30mm 10球装(30袋)	4盒	4971032315645
31565	TS30-20	直径30mm 20球装(20袋)	4盒	4971032315652
31566	TS40-10	直径40mm 10球装(20袋)	4盒	4971032315669

■商品名称：灭菌珍珠棉球 ■申报编号：23B2X10001000032
■可根据顾客需要提供其他规格。

●采用了医用脱脂棉的棉球。

一般医疗器具 棉球：11028000



款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
31100	No.7	直径 7mm 50g装	10袋×6盒	4971032311005
31101	No.10	直径10mm 50g装	10袋×6盒	4971032311012
31102	No.14	直径14mm 50g装	10袋×6盒	4971032311029
31103	No.20	直径20mm 50g装	10袋×6盒	4971032311036
31104	No.25	直径25mm 50g装	10袋×6盒	4971032311043
31105	No.30	直径30mm 50g装	10袋×6盒	4971032311050
31106	No.40	直径40mm 50g装	10袋×6盒	4971032311067
31109	No.50	直径50mm 50g装	10袋×6盒	4971032311098
31139	No.20T	带柄 直径20mm 50g装	10袋×6盒	4971032311395
31107	No.25T	带柄 直径25mm 50g装	10袋×6盒	4971032311074
31108	No.30T	带柄 直径30mm 50g装	10袋×6盒	4971032311081
31140	No.40T	带柄 直径40mm 50g装	10袋×6盒	4971032311401

■商品名称：Osaki棉球 ■申报编号：23B2X10001000033






Neo·Pearl



- 只需掀开上盖即可直接注装药液使用的、杯装的无菌珍珠棉球。
- 每次治疗使用1杯的一次性使用类型，最适用于一般处理、导尿时的消毒、感染症患者的处理、灾害储备等。
- 使用后可将杯重叠起来丢弃，减少了垃圾量。
- 杯的素材为A-PET(非结晶聚对苯二甲酸乙二酯：无公害性、安全卫生性、耐药品性强)，在丢弃后焚烧也不会产生二恶英等有毒气体，完全燃烧时产生二氧化碳和水。

■使用方法

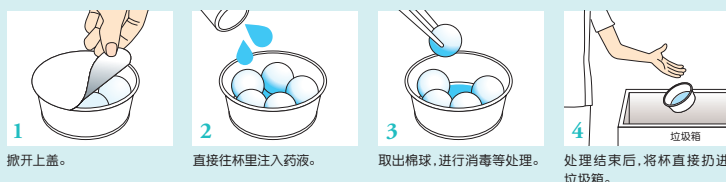

Neo Pearl

一般医疗器具 棉球：11028000 E.B.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
32505	EB10-3	直径10mm 3球装(20个)	6盒	4971032325057
32507	EB10-10	直径10mm 10球装(20个)	6盒	4971032325071
32511	EB14-3	直径14mm 3球装(20个)	6盒	4971032325118
32512	EB14-5	直径14mm 5球装(20个)	6盒	4971032325125
32513	EB14-10	直径14mm 10球装(20个)	6盒	4971032325132
32516	EB20-3	直径20mm 3球装(20个)	6盒	4971032325163
32518	EB20-5	直径20mm 5球装(20个)	6盒	4971032325187
32519	EB20-10	直径20mm 10球装(20个)	6盒	4971032325194
32523	EB25-3	直径25mm 3球装(20个)	6盒	4971032325231
32524	EB25-5	直径25mm 5球装(20个)	6盒	4971032325248
32525	EB30-2	直径30mm 2球装(20个)	6盒	4971032325255
32526	EB30-3	直径30mm 3球装(20个)	6盒	4971032325262
32527	EB30-4	直径30mm 4球装(20个)	6盒	4971032325279

■商品名称：灭菌珍珠棉球 ■申报编号：23B2X10001000032
■可根据顾客需要提供其他规格。

- 适用于棉球需求较多及使用大尺寸棉球的情况。

Neo PearlJ EB

一般医疗器具 棉球：11028000 E.B.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
32530	EB10-10	直径10mm 10球装(20个)	4盒	4971032325309
32531	EB10-20	直径10mm 20球装(20个)	4盒	4971032325316
32533	EB14-10	直径14mm 10球装(20个)	4盒	4971032325330
32535	EB14-20	直径14mm 20球装(20个)	4盒	4971032325354
32539	EB20-10	直径20mm 10球装(20个)	4盒	4971032325392
32541	EB20-20	直径20mm 20球装(20个)	4盒	4971032325415
32542	EB20-30	直径20mm 30球装(20个)	4盒	4971032325422
32543	EB25-10	直径25mm 10球装(20个)	4盒	4971032325439
32547	EB30-5	直径30mm 5球装(20个)	4盒	4971032325477
32550	EB30-10	直径30mm 10球装(20个)	4盒	4971032325507
32552	EB40-3	直径40mm 3球装(20个)	4盒	4971032325521

■商品名称：灭菌珍珠棉球 ■申报编号：23B2X10001000032
■可根据顾客需要提供其他规格。

- 适合手术室使用的层包装。

Neo PearlJ S

一般医疗器具 棉球：11028000 E.O.B.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
32459	S30-5W	直径30mm 5球装(层包装)(20个)	4盒	4971032324593
32460	S30-7W	直径30mm 7球装(层包装)(20个)	4盒	4971032324609
32492	S30-10W	直径30mm10球装(层包装)(20个)	4盒	4971032324920

■商品名称：灭菌珍珠棉球 ■申报编号：23B2X10001000032
■可根据顾客需要提供其他规格。




灭菌QC 珍珠棉球





- 只需注装药液即可使用，放装一次性万能罐的无菌珍珠棉球。
- 有S杯(约125mL)和J杯(约250mL)两种尺寸。
- 可像不锈钢制万能罐一样使用，能用单手清洁、稳妥地开合盖子。
- 不需要将灭菌棉球移换至万能罐，可减少污染的风险。
- 可节省棉球的灭菌及万能罐的维护再利用(洗涤、灭菌等)的作业步骤。
- 使用后将盖与杯分开，再将杯重叠起来丢弃，减少了垃圾量。
- 盖的素材采用PP(聚丙烯)，杯的素材则采用A-PET(非结晶聚对苯二甲酸乙二酯：无公害性、安全卫生性、耐药品性强)，在废弃后焚烧也不会产生二恶英等有毒气体，完全燃烧时产生二氧化碳和水。

■使用方法

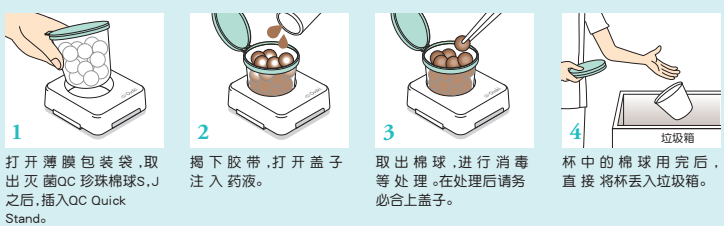

S杯时

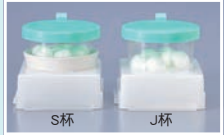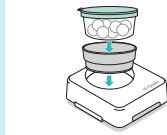

将“QC Quick Stand”安装在“QC Quick Stand支架”上。
打开薄膜包装并取出“灭菌QC珍珠棉球S”后，将其插入“QC Quick Stand支架”。

高度相同，易于使用。



灭菌QC 珍珠棉球 S

一般医疗器具 棉球：11028000 E.B.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
34269	EB7-10	直径 7mm 10球装(10个)	8盒	4971032342696
34270	EB10-10	直径10mm 10球装(10个)	8盒	4971032342702
34271	EB14-10	直径14mm 10球装(10个)	8盒	4971032342719
34272	EB14-20	直径14mm 20球装(10个)	8盒	4971032342726
34273	EB20-10	直径20mm 10球装(10个)	8盒	4971032342733
34274	EB20-15	直径20mm 15球装(10个)	8盒	4971032342740

■商品名称：灭菌珍珠棉球 ■申报编号：23B2X10001000032
■可根据顾客需要提供其他规格。
■请使用专用的QC Quick Stand、QC Quick Stand支架。(参照P48)

- 适用于需要较多棉球及使用大尺寸棉球的情况。

灭菌QC 珍珠棉球 J

一般医疗器具 棉球：11028000 E.B.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
34237	EB20-20	直径20mm 20球装(10个)	8盒	4971032342375
34241	EB25-10	直径25mm 10球装(10个)	8盒	4971032342412
34248	EB30-10	直径30mm 10球装(10个)	8盒	4971032342481

■商品名称：灭菌珍珠棉球 ■申报编号：23B2X10001000032
■可根据顾客需要提供其他规格。
■请使用专用的QC Quick Stand。(参照P48)



Alwety cup




- 4 cm×4 cm的脱脂棉里含浸酒精80%的一次性万能罐型外皮消毒棉。
- 可像不锈钢万能罐一样使用,能用单手清洁、稳妥地开合盖子。
- 与不锈钢万能罐相比密封性高,可抑制酒精的挥发。
- 因为是少量包装,可在24小时管理及使用量较少的诊疗科有效使用,避免了浪费。
- 可节省酒精、裁剪棉的准备及能罐的维护再利用(洗涤、灭菌等)的作业步骤。
- 使用后盖和杯分离,可将杯重叠起来丢弃,减少了垃圾量。
- 盖、杯的素材采用PP(聚丙烯),在丢弃后焚烧也不会产生二恶英等有毒气体,完全燃烧时产生二氧化碳和水。


■使用方法




1 开封前请摇晃Alwety cup几次。在使其均匀浸泡的同时也能简单地取出。

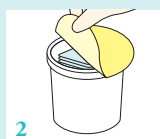

2 剥开外包装的膜,将盖取下后,请将杯的上盖掀开。上盖从每个方向都能打开。

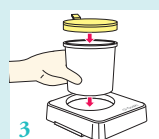

3 将盖盖紧,放入QC Quick Stand(另售)。

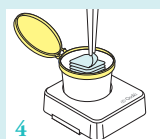

4 取出酒精棉,进行消毒等处理。在处理时请务必将盖合上。如杯里的酒精棉用完,可将盖和杯分开后丢弃。

指定医药部外品

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
31052	—	4cm×4cm 60片装(10个)	8盒	4971032310527
31053	更换用	4cm×4cm 60片装(10个)	8盒	4971032310534

■商品名称: Alwety Cup EI ■批准编号: 21500DZZ00921000

■成分: 日本药局方酒精: 83 mL, 日本药局方异丙醇: 3.7 mL, 日本药局方 纯净水: 适量/药液 100 mL中

■请使用专用的QC Quick Stand。(参照P48)

▲由于测血糖时可能错误显示为低血糖,因此请确认消毒剂充分干燥后再进行测量。

▲开封后请尽早使用。

▲接触衣物可能造成褪色、变色,敬请注意。

▲有酒精过敏症状人士请与医生或药剂师协商。

▲请勿注装酒精或其他药剂使用。此外,请勿续加脱脂棉使用。

▲请勿替换其他容器。

Alwety Box 酒精80%



■ 开封日期填写栏

开封日時			
月	日	時	分

- 含浸76.9%~81.4%酒精的盒装棉。
- 适用于手指、皮肤及医疗设备的消毒。
- 根据各诊疗科的用量,有2种数量可供选择。
- 由于是一次性的,有效防止反复使用,确保使用卫生。
- 即使只有一只手空着,盖子也能单手开合,十分方便。
- 通过记装开封日期和时间,可进行卫生管理。

第3类医药品

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
34612	—	4cm×4cm 104片装	24个×4盒	4971032346120
34613	—	4cm×4cm 200片装	12个×4盒	4971032346137

■商品名称: Alwety Box酒精80% ■批准编号: 23000APX00270000
 ■成分: <104片装> 日本药局方酒精 89.6mL、日本药局方异丙醇4.0mL/104片装 1每包
 <200片装> 日本药局方酒精 172.3mL、日本药局方异丙醇 7.7mL/200片装 1每包

- ▲由于测血糖时可能错误显示为低血糖,因此请确认消毒剂充分干燥后再进行测量。
- ▲开封后请尽早使用。
- ▲接触衣物可能造成褪色、变色,敬请注意。
- ▲有酒精过敏症状人士请与医生或药剂师协商。
- ▲请勿注装酒精或其他药剂使用。此外,请勿续加脱脂棉使用。
- ▲请勿替换其他容器。

Alwety Box-E



■ 4cm×4cm 开封日期填写栏

开封日	
月	日

■ 8cm×8cm 开封日期填写栏

开封日時			
月	日	時	分

- 含浸酒精80%的棉,非常适合24小时管理,脱脂棉类型,密封盒包装。
- 根据使用范围,有2种脱脂棉尺寸可供选择。(4cm×4cm / 8cm×8cm)
- 4cm×4cm有4种数量可供选择,根据诊疗科的用量,经济实用。
- 由于是一次性的,有效防止反复使用,确保使用卫生。
- 通过记装开封日期和时间,可进行卫生管理。
- 打开上盖即可取用,携带方便。

指定医药部外品

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
31072	—	4cm×4cm 32片装	60个	4971032310725
31073	—	4cm×4cm 50片装	72个	4971032310732
31074	—	4cm×4cm 100片装	36个	4971032310749
31075	—	4cm×4cm 200片装	24个	4971032310756
31082	—	8cm×8cm 宽的 50片装	24个	4971032310824

■商品名称: 酒精棉 GX ■批准编号: 22200DZX01613000 <4cm×4cm>
 ■商品名称: 酒精棉 G-C15 ■批准编号: 22200DZX00139000 <8cm×8cm>
 ■成分: 日本药局方酒精 83mL、日本药局方 精制水: 适量/药液100mL中

- ▲由于测血糖时可能错误显示为低血糖,因此请确认消毒剂充分干燥后再进行测量。
- ▲开封后请尽早使用。
- ▲接触衣物可能造成褪色、变色,敬请注意。
- ▲有酒精过敏症状人士请与医生或药剂师协商。
- ▲请勿注装酒精或其他药剂使用。此外,请勿续加脱脂棉使用。
- ▲请勿替换其他容器。

Alwety Box-E 无纺布酒精棉



■ 开封日期填写栏

开封日時			
月	日	時	分

- 含浸80%酒精的棉质无纺布15cm×15cm(4折)。
- 采用棉质无纺布材质,适用对纤维脱落要求较高的场合使用。
- 根据1天的使用量,可选择的产品有两种的款式,保持卫生。
- 由于是一次性的,有效防止反复使用,确保使用卫生。
- 通过记装开封日期和时间,可进行卫生管理。
- 打开上盖即可取用,携带方便。

指定医药部外品

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
34600	—	15cm×15cm 4折 25片装	36个	4971032346007
34601	—	15cm×15cm 4折 50片装	24个	4971032346014

■商品名称: 酒精棉 G-C15 ■批准编号: 22200DZX00139000
 ■成分: 日本药局方酒精 83mL、日本药局方 精制水: 适量/药液100mL中

- ▲由于测血糖时可能错误显示为低血糖,因此请确认消毒剂充分干燥后再进行测量。
- ▲开封后请尽早使用。
- ▲接触衣物可能造成褪色、变色,敬请注意。
- ▲有酒精过敏症状人士请与医生或药剂师协商。
- ▲请勿注装酒精或其他药剂使用。此外,请勿续加脱脂棉使用。
- ▲请勿替换其他容器。



Osaki CHG消毒棉0.2%



- 将含浸0.2%酒精葡萄糖酸氯己定的医疗脱脂棉灭菌后进行独立包装的消毒棉。
- 想充分消毒时的2次擦拭、自己注射时及测血糖值时等，需要同时对外皮及医疗设备消毒时既方便又经济。
- 店铺销售、提供给患者、医院内使用等，根据用途，有2种数量可供选择。
- 包装的左右侧有易撕口，上下呈锯齿状，从4个方向都可以轻易打开。

第2类医药品 A.C.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
34712	—	4cm×4cm 2片装 (60包)	30盒	4971032347127
34713	—	4cm×4cm 2片装 (100包)	30盒	4971032347134

■商品名称: Osaki CHG消毒棉0.2% ■批准编号: 22900APX00168000
■成分、分量: 葡萄糖酸氯己定水溶液(20w/v%) 1mL、医用脱脂棉 19.56g/本品100mL

Alwety one2



- 因脱脂棉可抑制起绒毛，基本不会在使用部位及医疗器械上残留棉线。
- 擦拭2次进行彻底消毒、自己注射、在外皮和输液线等2处同时消毒时最为经济实用。在需要一定厚度时请将2片叠在一起使用。
- 由于是个别包装，浓度下降少，可得到最佳的消毒效果，在搬运时也非常方便。
- 可节省酒精、裁剪棉的准备及万能罐的维护再利用(洗涤、灭菌等)的作业步骤。
- 即使带着手套，也不会撕破脱脂棉，从4个方向均可简单地分开。

- 1包2片装，可完全消毒的脱脂棉类型的、个别包装的、含浸酒精80%的棉。

Alwety one2 酒精

第3类医药品

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
31071	—	4cm×4cm 2片装 (60包)	12个×4盒	4971032310718
31068	—	4cm×4cm 2片装 (200包)	12盒	4971032310688

■商品名称: Alwety one2 酒精 ■批准编号: 30100APX00260000
■成分: 日本药局方酒精 83mL、日本药局方 纯净水: 适量/药液100mL中

- ▲由于测血糖时可能错误显示为低血糖，因此请确认消毒剂充分干燥后再进行测量。
- ▲开封后请尽早使用。
- ▲接触衣物可能造成褪色、变色，敬请注意。
- ▲有酒精过敏症状人士请与医生或药剂师协商。

- 1包2片装，可完全消毒的脱脂棉类型的、个别包装的、含浸异丙醇70%的棉。

Alwety one2 异丙醇

第3类医药品

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
31070	—	4cm×4cm 2片装 (60包)	12个×4盒	4971032310701
31069	—	4cm×4cm 2片装 (200包)	12盒	4971032310695

■商品名称: Alwety one2 异丙醇 ■批准编号: 30100APX00261000
■成分: 日本药局方异丙醇 70mL、日本药局方 纯净水: 适量/药液100mL中

- ▲由于测血糖时可能错误显示为低血糖，因此请确认消毒剂充分干燥后再进行测量。
- ▲开封后请尽早使用。
- ▲接触衣物可能造成褪色、变色，敬请注意。
- ▲有酒精过敏症状人士请与医生或药剂师协商。



Alwety one-E



100包



3000包



- 可以对手指和皮肤进行消毒。方便、卫生的独立包装，含浸酒精80%的脱脂棉。
- 100包装的便携式尺寸，放在回诊车内不占地方，装运时也很方便。
- 1箱为100包，数量较少，便于物品管理。
- 3000包装的本产品，每30包用皮筋捆住，方便物流管理，并且节省开药方的时间。
- 独立铝箔包装，密封性非常好不会发生酒精浓度变低的情况。同时，自己进行注射或者测定血糖值的时候，可以对手指和皮肤进行消毒，消毒效果很好，方便携带。
- 可节省酒精、裁剪棉的准备及万能罐的维护再利用（洗涤、灭菌等）的作业步骤。
- 因脱脂棉可抑制起绒毛，基本不会在使用部位及医疗器械上残留棉线。

指定医药部外品

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
31076	—	3.7cm×8cm 双折 1片装（100包）	36盒	4971032310763
31077	—	3.7cm×8cm 双折 1片装（3000包）	—	4971032310770

■商品名称：酒精棉G II ■批准编号：22200DZX01612000

■成分：日本药局方酒精：83mL，日本药局方 精制水：适量/药液100mL中

▲由于测血糖时可能错误显示为低血糖，因此请确认消毒剂充分干燥后再进行测量。

▲开封后请尽早使用。

▲接触衣物可能造成褪色、变色，敬请注意。

▲有酒精过敏症状人士请与医生或药剂师协商。

Alwety one2-E



100包



3000包



- 1包中2枚装，可以彻底消毒，方便经济型的独立包装，含浸酒精80%的脱脂棉。
- 100包装的便携式尺寸，放在回诊车内不占地方，装运时也很方便。
- 1箱为100包，数量较少，便于物品管理。
- 3000包装的本产品，每30包用皮筋捆住，方便物流管理，并且节省开药方的时间。
- 擦拭2次进行彻底消毒、自己注射、在外皮和输液线等2处同时消毒时最为经济实用。在需要一定厚度时请将2片叠在一起使用。
- 在需要一定厚度时请将2片叠在一起使用。
- 独立铝箔包装，密封性非常好不会发生酒精浓度变低的情况。同时，自己进行注射或者测定血糖值的时候，可以对手指和皮肤进行消毒，消毒效果很好，方便携带。
- 可节省酒精、裁剪棉的准备及万能罐的维护再利用（洗涤、灭菌等）的作业步骤。
- 因脱脂棉可抑制起绒毛，基本不会在使用部位及医疗器械上残留棉线。

指定医药部外品

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
31078	—	4cm×4cm 2片装（100包）	36盒	4971032310787
31079	—	4cm×4cm 2片装（3000包）	—	4971032310794

■商品名称：酒精棉G II plus ■批准编号：22200DZX01614000

■成分：日本药局方酒精：83mL，日本药局方 精制水：适量/药液100mL中

▲由于测血糖时可能错误显示为低血糖，因此请确认消毒剂充分干燥后再进行测量。

▲开封后请尽早使用。

▲接触衣物可能造成褪色、变色，敬请注意。

▲有酒精过敏症状人士请与医生或药剂师协商。



Osaki 裁剪棉



●裁剪为尺寸易于使用的医用脱脂棉。

一般医疗器具 医疗脱脂棉: 70975000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
30500	3.5×3.5	3.5cm×3.5cm 500g装	20盒	4971032305004
30501	4×4	4cm×4cm 500g装	20盒	4971032305011
30502	5×5	5cm×5cm 500g装	20盒	4971032305028
30503	7×7	7cm×7cm 500g装	20盒	4971032305035
30504	8×8	8cm×8cm 500g装	20盒	4971032305042
30513	8×16	8cm×16cm 500g装	20盒	4971032305134
30509	10×10	10cm×10cm 500g装	20盒	4971032305097

■商品名称: Osaki医疗脱脂棉 ■申报编号: 23B2X10001000029
■可根据顾客需要提供其他规格。

Slim棉



- 不宜起绒毛, 一片片地易于分开, 进行了冲压加工的裁剪棉。
- 与以前的裁剪棉相比盒子的体积更小, 节省了存放空间。



一般医疗器具 医疗脱脂棉: 70975000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
33706	4×4	4cm×4cm 500g装	20盒	4971032337067

■商品名称: Osaki医疗脱脂棉 ■申报编号: 23B2X10001000029

Osaki 脱脂棉



- 采用了优质原棉的医用脱脂棉。
- 单独包装且袋口装有夹链, 开封后也能清洁保管。

一般医疗器具 医疗脱脂棉: 70975000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
30071	100g	平 100g装	32袋	4971032300719
30073	500g	平 500g装	20袋	4971032300733

■商品名称: Osaki医疗脱脂棉 ■申报编号: 23B2X10001000029



Neo・Slim



- 只需掀开上盖即可直接往杯里注装药液使用的无菌Slim棉。
- 可节省裁剪棉的灭菌及万能罐的维护再利用(洗涤、灭菌等)的作业步骤。
- 使用后可将杯重叠起来丢弃,减少了垃圾量。
- 杯的素材采用A-PET(非结晶聚对苯二甲酸乙二酯:无公害性、安全卫生性、耐药品性强),在丢弃后焚烧也不会产生二恶英等有毒气体,完全燃烧时产生二氧化碳和水。

Neo・Slim

一般医疗器具 医疗脱脂棉: 70975000 [E.O.G.](#)

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
34005	5g	4cm×4cm 5g装(20个)	6盒	4971032340050

■商品名称: 灭菌Osaki医疗脱脂棉 ■申报编号: 23B2X10001000030

Neo・Slim J

一般医疗器具 医疗脱脂棉: 70975000 [E.O.G.](#)

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
34006	15g	4cm×4cm 15g装(20个)	4盒	4971032340067

■商品名称: 灭菌Osaki医疗脱脂棉 ■申报编号: 23B2X10001000030

灭菌QC Slim棉



- 只需注装药液即可使用, 放装一次性万能罐的无菌Slim棉。
- 可像不锈钢制万能罐一样使用, 可能用单手清洁、稳妥地开合盖子。
- 可节省裁剪棉的灭菌及万能罐的维护再利用(洗涤、灭菌等)的作业步骤。
- 使用后将盖与杯分开, 再将杯重叠起来丢弃, 减少了垃圾量。
- 盖的素材采用PP(聚丙烯), 杯的素材则采用A-PET(非结晶聚对苯二甲酸乙二酯: 无公害性、安全卫生性、耐药品性强), 在丢弃后焚烧也不会产生二恶英等有毒气体, 完全燃烧时产生二氧化碳和水。

灭菌QC Slim棉S

一般医疗器具 医疗脱脂棉: 70975000 [E.O.G.](#)

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
34404	5g	4cm×4cm 5g装(10个)	8盒	4971032344041

■商品名称: 灭菌Osaki医疗脱脂棉 ■申报编号: 23B2X10001000030
■请使用专用的QC Quick Stand、QC Quick Stand支架。(参照P48)

灭菌QC Slim棉J

一般医疗器具 医疗脱脂棉: 70975000 [E.O.G.](#)

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
34400	15g	4cm×4cm 15g装(10个)	8盒	4971032344003

■商品名称: 灭菌Osaki医疗脱脂棉 ■申报编号: 23B2X10001000030
■请使用专用的QC Quick Stand。(参照P48)



牙科用棉



●不易起绒毛且吸收性能良好的牙科用棉。



款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
34506	0825	直径 8mm×25mm 100g装	10袋×4盒	4971032345062
34505	1030	直径10mm×30mm 100g装	10袋×4盒	4971032345055

灭菌QC牙科用棉



- 放入一次性万能罐的无菌牙科用棉。
- 不易起绒毛，吸收性强，使用简便。
- 可像不锈钢制万能罐一样使用，能用单手清洁、稳妥地开合盖子。
- 可节省牙科用棉的灭菌及万能罐的维护再利用（洗涤、灭菌等）的作业步骤。
- 使用后将盖与杯分开，再将杯重叠起来丢弃，减少了垃圾量。
- 盖的素材采用PP（聚丙烯），杯的素材则采用A-PET（非结晶聚对苯二甲酸乙二酯：无公害性、安全卫生性、耐药品性强），在丢弃后焚烧也不会产生二恶英等有毒气体，完全燃烧时产生二氧化碳和水。

灭菌QC 牙科用棉S

E.O.G.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
34507	S0825-20	直径 8mm×25mm 20根装(10个)	8盒	4971032345079
34500	S1030-20	直径10mm×30mm 20根装(10个)	8盒	4971032345000

■请使用专用的QC Quick Stand、QC Quick Stand支架。(参照P48)


灭菌QC 牙科用棉J

E.O.G.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
33810	S1030-40	直径10mm×30mm 40根装(10个)	8盒	4971032338101


■请使用专用的QC Quick Stand。(参照P48)

灭菌 Osaki 压迫止血棉

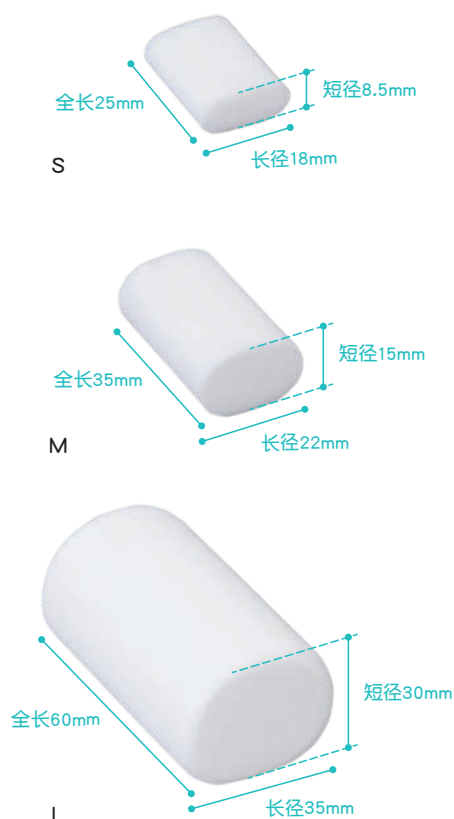

- 硬度适中且形状容易固定的灭菌压迫止血棉。
- 力求节省制作灭菌压迫止血棉的人工。
- S与M的接地面积广，能稳定固定。
- L的两端的角呈圆滑的圆角形，触感温和，此外还可选择以点或面进行压迫。
- 使用了[Tyvek®]灭菌袋的灭菌产品。

■横切面图

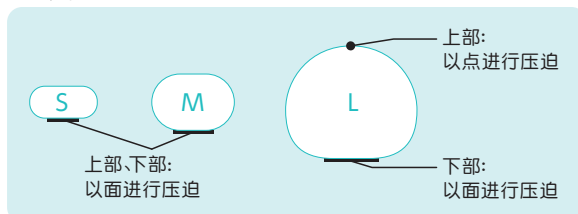

■种类

种类	形状	尺寸(短径 长径×全长)	用途
S	平形	8.5mm 18mm×25mm	适用于透析处理后等的压迫止血。
M	平形	15mm 22mm×35mm	适用于手臂(上臂、桡骨)的血管造影后等的压迫止血。
L	平圆形	30mm 35mm×60mm	适用于腹股沟部(鼠经部)的血管造影后等的压迫止血。

一般医疗器具 止血用按压器具:70617000 E.O.G. Tyvek

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
33925	平形 TS S-2	短径8.5mm 长径18mm×25mm 2个装(50袋)	8盒	4971032339252
33926	平形 TS S-10	短径8.5mm 长径18mm×25mm 10个装(50袋)	8盒	4971032339269
33927	平形 TS M-1	短径 15mm 长径22mm×35mm 1个装(50袋)	8盒	4971032339276
33928	平形 TS M-2	短径 15mm 长径22mm×35mm 2个装(50袋)	8盒	4971032339283
33929	平圆形 TS L-1	短径 30mm 长径35mm×60mm 1个装(50袋)	8盒	4971032339290

■商品名称: 灭菌 Osaki 压迫止血棉 ■申报编号: 23B2X10001000096

- ▲使用时，酌情检查止血状态，调整压迫程度。
- ▲高压蒸汽灭菌是不可能的。

Marble Pad / 灭菌 Marble Pad



- 将垫子的中心部堆高、压缩形成圆盘状的压迫止血用垫。
- 表面素材采用了人造丝无纺布。
- 最适合抽血后及透析后的压迫止血。
- 请使用辅助胶带固定。


Marble Pad

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
32925	No.20	直径20mm 500个装	10盒	4971032329253
32921	No.25	直径25mm 500个装	10盒	4971032329215

- 使用了[Tyvek®]灭菌袋的灭菌产品。

灭菌 Marble Pad

E.O.G. Tyvek

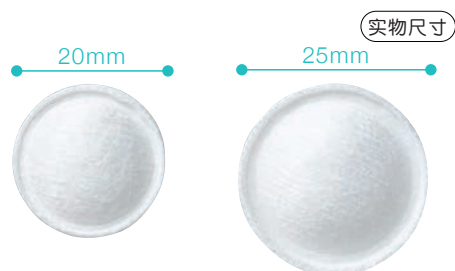

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
32923	TS20-2	直径20mm 2个装(200袋)	8盒	4971032329239
32924	TS20-10	直径20mm 10个装(60袋)	8盒	4971032329246
32926	TS20-30	直径20mm 30个装(40袋)	8盒	4971032329260
32922	TS25-1	直径25mm 1个装(100袋)	8盒	4971032329222
32919	TS25-2	直径25mm 2个装(200袋)	8盒	4971032329192
32920	TS25-10	直径25mm 10个装(60袋)	8盒	4971032329208




Osaki 药液棉棒聚维酮碘



- 附带棉棒的10%聚维酮碘制剂。
- 通过将棉部变软，使其接触范围(接触面积)扩大，并具备对药液的高吸收性及放出性，因此可以保证有充足的药液涂抹。
- 通过采用独有的M字形药液喷出口设计和环状的药液通道，防止药液飞溅、弄脏木轴，从而避免弄脏使用者的手。
- 即使繁忙，只需单手按一下，任何人都能简单地含浸药液。
- 由于使用时才开封，降低受污染的风险。
- 无需万能瓶和镊子，因此不用清洁和消毒这些器材及进行消毒剂的配制。

第3类医药品

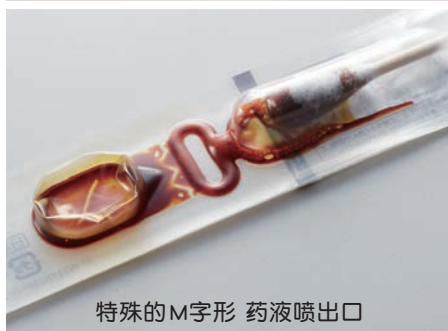


特殊的M字形 药液喷出口

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
34703	1015-1	棉径10mm×153mm 液量1.5mL 1本装(30袋)	12盒	4971032347035
34704	1015-2	棉径10mm×153mm 液量3.0mL 2本装(30袋)	12盒	4971032347042
34705	1415-1	棉径14mm×158mm 液量4.5mL 1本装(30袋)	12盒	4971032347059


■商品名: Osaki药液棉棒聚维酮碘 10% 1015 ■批准编号30100APX00259000
■商品名: Osaki药液棉棒聚维酮碘 10% 1415 ■批准编号30100APX00269000
■有效成分: 聚维酮碘10w/v% ■添加物: 甘油、聚乙二醇、柠檬酸、磷酸一氢钠

- ▲由于测血糖时可能错误显示为高血糖，请不要在消毒部位进行采血。
- ▲挤出药液后或开封后请尽快使用。

■使用方法

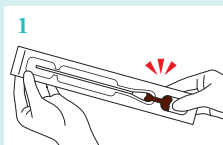

挤压药液袋，使药液渗入棉头。(将木棒前端稍微向上倾斜，使药液难以附在木轴上。)

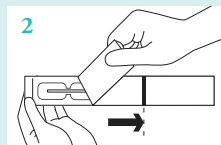

请将薄膜揭到横线的位置，取出棉棒。

Osaki棉棒/灭菌 Osaki棉棒




- 卫生的一次性棉棒。

Osaki棉棒

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
33183	P01s15	棉径1.9mm×150mm 200本装(20袋)	12盒	4971032331836
33186	P02s15	棉径2.3mm×150mm 200本装(20袋)	12盒	4971032331867
33134	P0215	棉径2.7mm×150mm 200本装(20袋)	12盒	4971032331348
33135	P0315	棉径3.4mm×150mm 200本装(15袋)	12盒	4971032331355
33132	PD0475	棉径4.7mm×75mm 100本装(20袋)	12盒	4971032331324
33100	0475	棉径4.7mm×75mm 100本装(20袋)	12盒	4971032331003
33101	0415	棉径4.7mm×150mm 100本装(10袋)	12盒	4971032331010
33102	0815	棉径8mm×150mm 50本装(10袋)	12盒	4971032331027
33103	1215	棉径12mm×150mm 10本装(20袋)	12盒	4971032331034
33182	1515	棉径15mm×150mm 20本装(20袋)	20盒	4971032331829
33121	1518	棉径15mm×180mm 10本装(20袋)	12盒	4971032331218
33198	2026	棉径20mm×260mm 10本装(20袋)	12盒	4971032331980



商品规格编号的读取方法

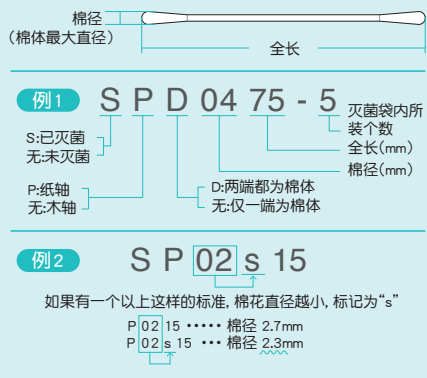

●种类丰富的灭菌产品。

灭菌 Osaki 棉棒

E.O.G.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
33185	SP01s15-1	棉径 1.9mm×150mm 1本装(300袋)	12盒	4971032331850
33184	SP01s15-5	棉径 1.9mm×150mm 5本装(300袋)	12盒	4971032331843
33187	SP02s15-1	棉径 2.3mm×150mm 1本装(300袋)	12盒	4971032331874
33188	SP02s15-5	棉径 2.3mm×150mm 5本装(300袋)	12盒	4971032331881
33137	SP0215-1	棉径 2.7mm×150mm 1本装(300袋)	12盒	4971032331379
33144	SP0215-5	棉径 2.7mm×150mm 5本装(150袋)	12盒	4971032331447
33138	SP0315-1	棉径 3.4mm×150mm 1本装(300袋)	12盒	4971032331386
33145	SP0315-5	棉径 3.4mm×150mm 5本装(150袋)	12盒	4971032331454
33139	SPD0475-1	棉径 4.7mm×75mm 1本装(300袋)	12盒	4971032331393
33146	SPD0475-10	棉径 4.7mm×75mm 10本装(150袋)	12盒	4971032331461
33140	SP0415-1	棉径 4.7mm×150mm 1本装(200袋)	12盒	4971032331409
33147	SP0415-10	棉径 4.7mm×150mm 10本装(120袋)	12盒	4971032331478
33105	S0475-1	棉径 4.7mm×75mm 1本装(300袋)	12盒	4971032331058
33148	SD0475-1	棉径 4.7mm×75mm 1本装(300袋)	12盒	4971032331485
33113	S0475-5	棉径 4.7mm×75mm 5本装(200袋)	12盒	4971032331133
33117	S0475-10	棉径 4.7mm×75mm 10本装(150袋)	12盒	4971032331171
33106	S0415-1	棉径 4.7mm×150mm 1本装(200袋)	12盒	4971032331065
33110	S0415-2	棉径 4.7mm×150mm 2本装(240袋)	12盒	4971032331102
33149	S0415-3	棉径 4.7mm×150mm 3本装(200袋)	12盒	4971032331492
33114	S0415-5	棉径 4.7mm×150mm 5本装(150袋)	12盒	4971032331140
33118	S0415-10	棉径 4.7mm×150mm 10本装(120袋)	12盒	4971032331188
33107	S0815-1	棉径 8mm×150mm 1本装(200袋)	12盒	4971032331072
33111	S0815-2	棉径 8mm×150mm 2本装(200袋)	12盒	4971032331119
33115	S0815-5	棉径 8mm×150mm 5本装(50袋)	12盒	4971032331157
33119	S0815-10	棉径 8mm×150mm 10本装(25袋)	12盒	4971032331195
33108	S1215-1	棉径 12mm×150mm 1本装(150袋)	12盒	4971032331089
33112	S1215-2	棉径 12mm×150mm 2本装(120袋)	12盒	4971032331126
33116	S1215-5	棉径 12mm×150mm 5本装(30袋)	12盒	4971032331164
33120	S1215-10	棉径 12mm×150mm 10本装(20袋)	12盒	4971032331201
33122	S1518-1	棉径 15mm×180mm 1本装(50袋)	12盒	4971032331225
33159	S1518-3	棉径 15mm×180mm 3本装(50袋)	12盒	4971032331591
33189	S2026-1	棉径 20mm×260mm 1本装(50袋)	12盒	4971032331898
33190	S2026-2	棉径 20mm×260mm 2本装(50袋)	12盒	4971032331904



●这是一种特殊形式的冷冻棉签, 用于皮肤科。

●吸入部分很大, 因为没有涂层, 所以可以注入和保留大量的液氮。

●因为针尖又长又细, 很容易检查患处, 可以应用于针尖。

●由于纸轴不易轻易折断, 不易折断, 因此具有很好的可操作性, 可以安全处理。


Osaki 棉棒 凍結療法用

一般医疗器具 医科用捲綿子:10172000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
34750	P2015	棉径 20mm×155mm 5本装(20袋)	12盒	4971032347509

■商品名: Osaki棉棒 ■申报编号: 23B2X10001000098

■实物尺寸图

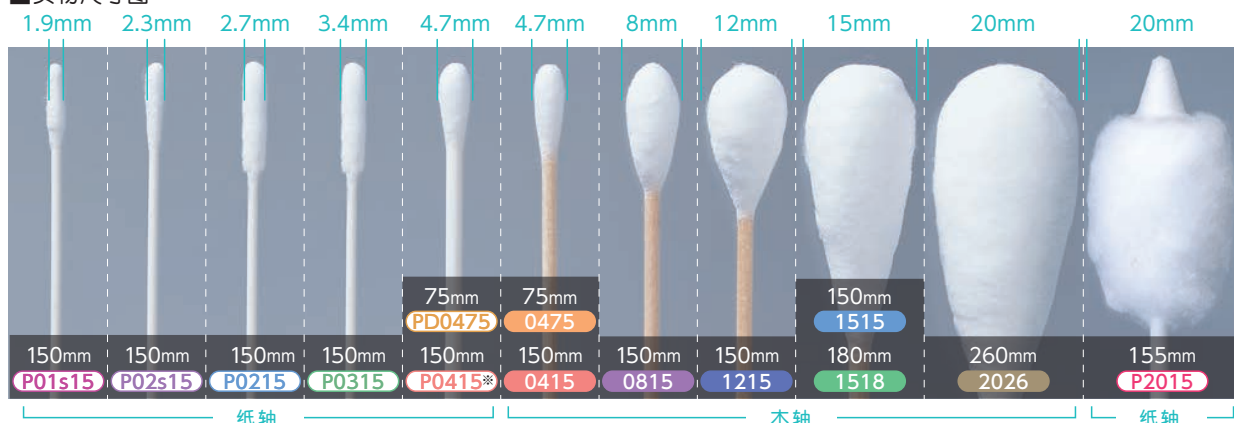


※P0415 只有已灭菌的规格。

外科製品



Neo Care

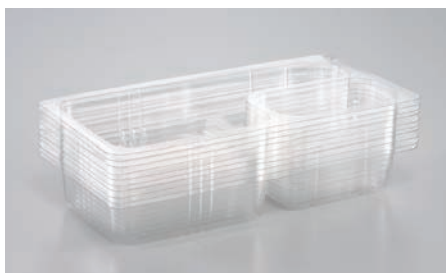


- 为了应对一次处理而将所需材料组合且实施了灭菌处理的套装。
- 以套装的方式,可以1个人进行处理,可简单控制每次进行处理的成本。
- 从开封口按使用顺序排放,可无菌的取出。
- 使用后可将杯重叠起来丢弃,减少了垃圾量。
- 托盘的素材采用A-PET(非结晶聚酯:无公害性、安全卫生性、耐药品性强),在丢弃后焚烧也不会产生二恶英等有毒气体,完全燃烧时产生二氧化碳和水。

■构成品种类、名称

种类	构成品名称
纱布类	纱布、含X光造影线纱布、无纺布纱布、急救创可贴、外科纱布垫片(各种尺寸)
脱脂棉类	Cut棉、棉球、棉棒、压迫棉(各种尺寸)
镊子等	塑料制(各种尺寸)
手术单	吸水防水款、防泼水款(各种尺寸)
垫单与垫子类	无纺布制(各种尺寸)
胶带	无纺布制、塑料制(各种尺寸)
手套	一次性款(各种尺寸)
其他	杯子、处理袋 等

■托盘类型

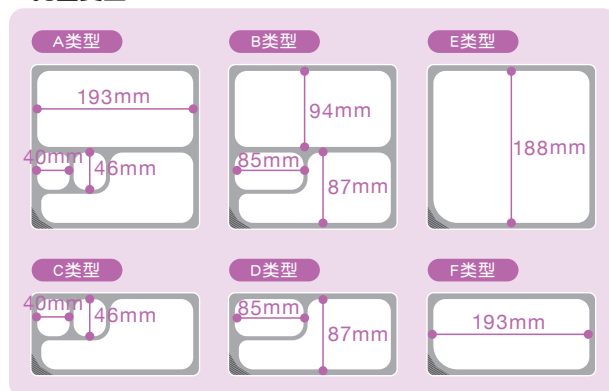

Neo Care 处理套装I

一般医疗器具 单次使用类型I处理套装: 33961001 [E.O.G.](#)

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
55922	S55922A	M无钩镊子 1根, 珍珠棉球 No.25 3球, 手术用纱布 8折 2片 (10个)	4盒	4971032559223
56205	S56205B	M无钩镊子 1根, 珍珠棉球 No.20 3球, 手术用纱布 8折 1片 (10个)	4盒	4971032562056
55966	S55966C	M无钩镊子 1根, 珍珠棉球 No.20 4球, 手术用纱布 16折 3片 (10个)	8盒	4971032559667
56203	S56203D	M无钩镊子 1根, 珍珠棉球 No.20 3球, Dispose No.30 2片 (10个)	8盒	4971032562032

■商品名称: 灭菌Osaki处理用套装 I -S ■申报编号: 23B2X10001000054
 ■组件列表页面: M无钩镊子 P46、珍珠棉球 P31、Dispose P13

- 在需要清洁区时可作为托盘及灭菌肾形盘等使用的无菌托盘。

Neo Care 灭菌托盘

[E.O.G.](#)

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
55891	SE	E类型托盘(10个)	4盒	4971032558912
55892	SF	F类型托盘(10个)	8盒	4971032558929

灭菌M镊子 / 灭菌L镊子



- 超精密成型, 具有和不锈钢镊子同等的精度和使用感的塑料镊子。
- 镊子内侧有可作为简易尺子用的刻度, 可在需要观察创伤部位等时使用。
- 包装可直接作为镊子支架使用。
- 由于进行了个别包装, 不会被落下菌污染。
- 可节省镊子及镊子支架的维护再利用(洗涤、灭菌等)的作业步骤。

■形状说明



M镊子



L镊子

灭菌M镊子

管理医疗器具 单次使用型镊子: 35079002 E.O.G. Tyvek

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
55664	无钩SH-1	18cm 1根装(20袋)	8盒	4971032556642
55665	无钩SH-2	18cm 2根装(15袋)	8盒	4971032556659
55666	有钩SH-1	18cm 1根装(20袋)	8盒	4971032556666

■商品名称: 灭菌一次性镊子 ■认证编号: 22000BZX00853000

灭菌L镊子

管理医疗器具 单次使用型镊子: 35079002 E.O.G. Tyvek

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
55668	无钩SH-1	23cm 1根装(20袋)	8盒	4971032556680
55669	无钩SH-2	23cm 2根装(10袋)	8盒	4971032556697

■商品名称: 灭菌一次性镊子 ■认证编号: 22000BZX00853000

聚维酮碘外用液10%“Osaki”



- 可选择最适合的容量, 避免浪费的棒状、个别包装的聚维酮碘制剂。
- 在使用时开封, 可减少受污染的风险。
- 由于无需对药液瓶进行使用期限的管理、库存管理, 可节省作业步骤。
- 摒除体积大的药液瓶, 可减少垃圾量。

医疗用医药品

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
56401	10mL	60根装	8盒	4971032564012
56402	20mL	40根装	8盒	4971032564029
56403	30mL	20根装	8盒	4971032564036
56404	50mL	20根装	8盒	4971032564043

■商品名称: 聚维酮碘外用液10%“Osaki” ■批准编号: 22300AMX00013000

- ▲由于测血糖时可能错误显示为高血糖, 请不要在消毒部位进行采血。
- ▲开封后请不要保存, 尽快使用。




清洁擦拭毛巾HP



- 不含酒精清洁擦拭用毛巾，擦拭脏污(碘酒等)。
- 含8%海波(硫代硫酸钠)，能够迅速彻底清除脏污(碘酒等)。
- 独立单片包装，可在需要时立刻用于清洁。
- 不含酒精，皮肤过敏人士也可使用。
- 可通过电子保温箱(另售)等加热使用。

※大约60℃以下的温度均不会对包装材料造成影响。

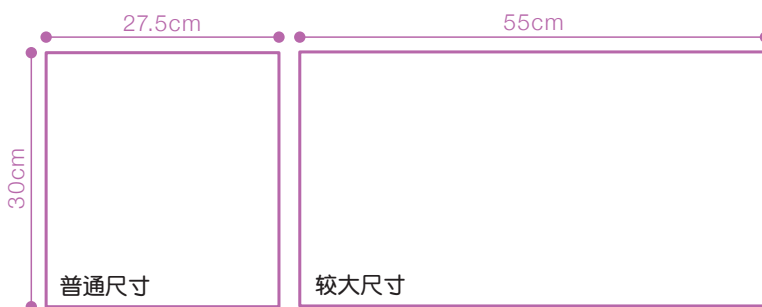

清洗用品

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
72003	普通尺寸	27.5cm×30cm 1片装(30个)	12袋	4971032720036
72004	较大尺寸	55cm×30cm 1片装(30个)	10袋	4971032720043

■商品名称：清洁擦拭毛巾S-hp

■成分：水、硫代硫酸钠、BG、苯氧乙醇、1,2-己二醇、辛乙二醇、碳酸钠


- ▲使用前若需加热，请注意不要烫伤。此外，请勿以高温或长时间加热，以避免包装破损或变色。
- ▲请勿使用微波炉加热。
- ▲使用时请注意肌肤是否出现异常。
- ▲请不要用于有伤口、肿胀或湿疹等肌肤异常部位。
- ▲请勿用于粘膜部位。
- ▲请注意不要进入眼中。

灭菌清洁擦拭巾HP



- 擦拭污垢(碘等)用的无酒精灭菌清洁擦拭巾。
- 含8%海波(硫代硫酸钠)，能够迅速彻底清除脏污(碘酒等)。
- 独立单片包装，可在需要时立刻用于清洁。
- 不含酒精，皮肤过敏人士也可使用。
- 由于不需要将化学溶液浸入无纺布中，因此可以减少不必要的化学溶液的使用。
- 采用厚、柔软且强韧的无纺布，并充分含浸药液，能切实擦拭干净。
- 铝制的独立包装，气密性高，防止成分蒸发。可用电子保温箱(另售)等加热后使用。

※加热至约60℃不会对包装等产生影响。

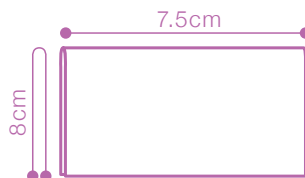

清洗用品 A.C.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
57000	—	7.5cm×8cm 2折 1片装(100包)	20盒	4971032570006

■商品名称：灭菌清洁擦拭巾 HP

■成分：水、硫代硫酸钠、碳酸钠

- ▲本品为灭菌品。请勿再次灭菌。
- ▲使用前若需加热，请注意不要烫伤。此外，请勿以高温或长时间加热，以避免包装破损或变色。
- ▲请勿使用微波炉加热。
- ▲使用时请注意肌肤是否出现异常。
- ▲请不要用于有伤口、肿胀或湿疹等肌肤异常部位。
- ▲请勿用于粘膜部位。
- ▲请注意不要进入眼中。

灭菌QC Quick Cup



- 使用范围广的一次性灭菌万能罐。
- 可节省万能罐的再利用作业(洗涤、灭菌等)。
- 使用后将盖与杯分开,再将杯重叠起来丢弃,减少了垃圾量。
- 盖的素材采用PP(聚丙烯),杯的素材则采用A-PET(非结晶聚对苯二甲酸乙二醇酯:无公害性、安全卫生性、耐药品性强),在废弃后焚烧也不会产生二恶英等有毒气体,完全燃烧时产生二氧化碳和水。

灭菌QC Quick Cup S

E.B.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
55647	—	容量:125mL 10个	8盒	4971032556475

■请使用专用的QC Quick Stand、QC Quick Stand 支架。(参照如下内容)

灭菌QC Quick Cup J

E.B.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
55635	—	容量:250mL 10个	8盒	4971032556352

■请使用专用的QC Quick Stand。(参照如下内容)

QC Quick Stand



- 可以用作QC系列的支架。
- 带防滑设置,可连结侧面的勾使用。
- 素材采用PP(聚丙烯),在废弃后焚烧也不会产生二恶英等有毒气体。

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
55675	—	5个装	20袋	4971032556758

QC Quick Stand 支架



- QC系列用支架,可装在QC Quick Stand上使用。
- 如装上S杯,可以达到与J杯相同的高度。
- 亦可作为简易Stand单独使用。
- 素材为硅胶,采用了防滑的形状。

■使用方法



高度相同,便于使用。



亦可作为简易Stand使用。

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
55643	—	5个装	20袋	4971032556437



Osaki 一次性肾形盘



- 使用范围广的一次性塑料肾形盘。
- 带有刻度,可方便地用于测量。
- 由于是塑料制品,可在MRI室使用。
- 可进行高压蒸气灭菌。(根据灭菌条件等有发生变形的可能)
- 素材采用PP(聚丙烯),在废弃后焚烧也不会产生二恶英等有毒气体。

Osaki 一次性肾形盘

款号	种类	规格·内容量	内装数量	条形码
55672	S	容量: 500ml 250个装	—	4971032556727
55671	L	容量: 1,500ml 100个装	—	4971032556710


Osaki 纱布计数托盘



- 采用只能放1块纱布的特殊袋结构,是可以减少计数错误的纱布计数托盘。
- 将纱布放入袋后内部会横向鼓起,能完全收纳,因此无需担心纱布掉出。
- 特殊的袋结构使血液流向4个方向,抑制放入时因压力而使血液飞溅,降低医疗从业人员感染的风险。
- 可以沿针孔线分割成两半,以配合纱布的使用数量,避免浪费,经济实惠。
- 为方便测量时计算出血量,1个托盘(20个袋)约20g。半个托盘(10个袋)约10g。
- 底部平坦且接地面积广,放入纱布时托盘稳定,即使叠放也不易倒落。

■放入纱布后,内部横向鼓起的结构

横切面图

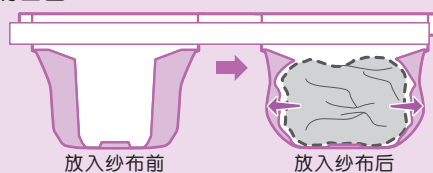


■血液等不易飞溅的袋结构

侧面图




箭头代表血液的流向。

顶视图

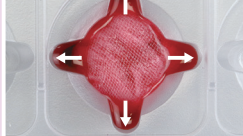

■易于测量的托盘重量

1个托盘(20个袋)约20g
 $\frac{1}{2}$ 个托盘(10个袋)约10g

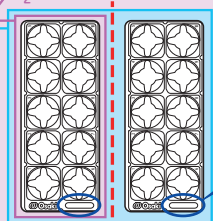

针孔线



防滑加工

施以凹凸的防滑加工,易于握持。

款号	种类	规格·内容量	内装数量	条形码
57135	20	100片装(50片×2袋)	4盒	4971032571355


■材质: 聚丙烯

- ⚠请勿使用手术用纱布30cm×30cm 1ply以外商品。
- ⚠不可用高压蒸气灭菌。

Osaki PPE支架 软质



纵向设置(2509S・1910S)

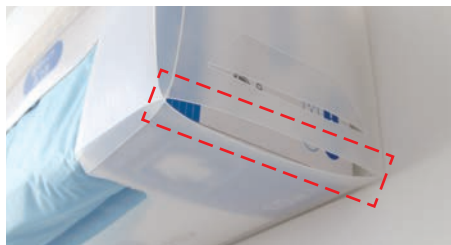


易于清洁的排出口



板、栏杆配件 设置例

- 考虑到安全性和便利性的PPE(个人防护具)专用支架。
- 使用塑料板, 经济实惠。
- 包装小巧, 减少运输成本及保管空间。
- “1910S”“2509S”能根据使用场所和方法, 选择横向或纵向设置(2610T・2413T仅对应横向设置)。
- 支架侧面的洞可挂护目镜。
- 采取易于清洁的结构, 底面设有排出口, 以防止灰尘等积聚。
- 选用轻且柔软的材料及没有角的设计, 万一人或物件撞到也不会发生危险。
- 可根据设置场地, 利用螺丝或磁铁(另售)轻松安装。

■尺寸种类(内部尺寸)

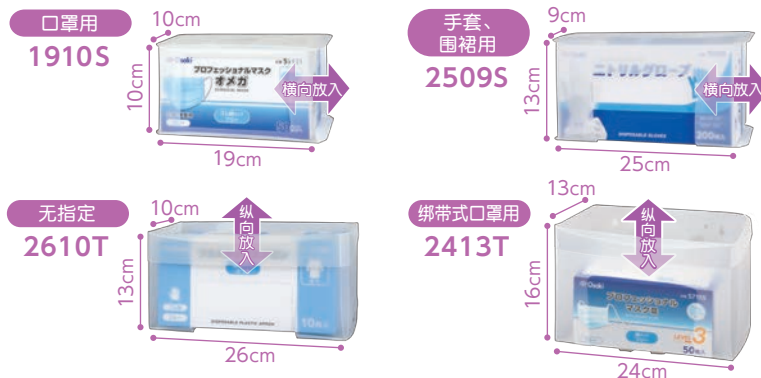

Osaki PPE支架 软质

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
74607	1910S透明色	21cm×12cm×11cm 1个装	40袋	4971032746074
74608	1910S透明色	21cm×12cm×11cm 10个装	6袋	4971032746081
74609	2509S透明色	28cm×15cm×11cm 1个装	40袋	4971032746098
74610	2509S透明色	28cm×15cm×11cm 10个装	6袋	4971032746104
74611	2610T透明色	28cm×14cm×12cm 1个装	40袋	4971032746111
74612	2610T透明色	28cm×14cm×12cm 10个装	6袋	4971032746128
74620	2413T透明色	27cm×18cm×16cm 1个装	40袋	4971032746203
74621	2413T透明色	27cm×18cm×16cm 10个装	6袋	4971032746210

■材质: 聚丙烯

Osaki 支架用磁铁

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
74613	—	3.5cm×0.9cm 带2个螺丝 2个装	30袋×2盒	4971032746135

⚠由于磁力强劲, 请不要使磁铁互相吸住。此外, 请勿只将磁铁吸在墙上等。可能无法取下。

Osaki 支架用带挂墙螺丝

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
74614	—	带4个锚栓 4个装	50袋×6包	4971032746142

Osaki 支架用挂钩

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
74615	—	2.8cm×3cm×0.4cm 2个装	50袋×6包	4971032746159

Osaki 支架用板

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
74616	3个用	27.6cm×39.6cm×1.3cm 带3套螺丝和螺栓 1块装	15袋	4971032746166
74617	5个用	27.6cm×70.4cm×1.3cm 带5套螺丝和螺栓 1块装	15袋	4971032746173

Osaki 支架用栏杆配件

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
74618	—	27.6cm×19cm×4cm 1个装	30袋	4971032746180

业务用口罩



- 符合ASTM F2100-11※屏障等级1, Omega形状褶皱外科口罩。
※“ASTM F2100-11”是美国医用口罩标准。”
- Omega形状褶皱能大幅度展开, 不压迫口鼻, 易于呼吸。此外, 展开的褶皱能切实覆盖口部周围。
- 松紧带采用不会使耳朵感觉疼痛的椭圆形设计。
- 口罩2侧用无纺布覆盖并进行密封处理, 触及肌肤不会造成疼痛。
- 使用高贴合度的鼻梁条, 眼镜及护目镜都不易起雾。此外, 充分贴合肌肤, 也适用于防止感染、感冒、花粉。

■试验数据

试验项目	实测值*	ASTM F2100-11 标准值 等级 1
BFE(细菌过滤效率)	≥99%	≥95%
ΔP(呼吸阻力)	<3.9mmH ₂ O/cm ²	<4.0mmH ₂ O/cm ²
PFE(微粒子过滤效率)	≥99%	≥95%
人工血液不渗透性	80mmHg	80mmHg
可燃性	CLASS1	CLASS1

<试验实施日>

一般財団法人 化檢試験機構

●BFE、PFE、人工血液不渗透性: 2017年9月23日 ●ΔP: 2016年9月13日 ●可燃性: 2016年9月20日
※为Professional口罩 I Omega的实测值, 并非保证值。

Professional口罩 I Omega

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
51421	松紧带 均码 蓝色	9cm×17cm 50个装	40盒	4971032514215
51420	松紧带 均码 白色	9cm×17cm 50个装	40盒	4971032514208
51419	松紧带 小号 粉色	9cm×15cm 50个装	40盒	4971032514192

■材质: [主体]聚丙烯 [鼻梁条]铁、聚乙烯 [耳带]聚酯纤维、聚氨酯纤维
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)

▲MRI检查时请不要使用。由于鼻梁条为铁制, 口罩可能被磁力吸去。



- 符合ASTM F2100-11屏障等级1, 触感舒适的外科口罩。
- 由于松紧带在口罩外侧, 与以往的口罩相比, 与面部间不易产生空隙。
- 松紧带采用平带, 即使长时间使用耳朵也不会感觉疼痛。
- 使用高贴合度的鼻梁条, 眼镜及护目镜都不易起雾。

■试验数据

试验项目	实测值*	ASTM F2100-11 标准值 等级 1
BFE(细菌过滤效率)	≥99%	≥95%
ΔP(呼吸阻力)	<3.2mmH ₂ O/cm ²	<4.0mmH ₂ O/cm ²
PFE(微粒子过滤效率)	≥99%	≥95%
人工血液不渗透性	80mmHg	80mmHg
可燃性	CLASS1	CLASS1

<试验实施日>

一般財団法人 化檢試験機構

●BFE、PFE、人工血液不渗透性: 2017年9月29日 ●ΔP: 2020年10月8日
●PFE: 2017年9月27日 ●可燃性: 2017年9月28日
※为Professional口罩 I 的实测值, 并非保证值。

Professional口罩 I

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
51408	松紧带 均码 蓝色	9.5cm×17.5cm 50个装	40盒	4971032514086
51409	松紧带 均码 白色	9.5cm×17.5cm 50个装	40盒	4971032514093
51411	松紧带 小号 白色	9cm×14.5cm 50个装	40盒	4971032514116
51410	松紧带 小号 粉色	9cm×14.5cm 50个装	40盒	4971032514109

■材质: [主体]聚丙烯 [鼻梁条]铁、聚乙烯 [耳带]聚酯纤维、聚氨酯纤维
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)

▲MRI检查时请不要使用。由于鼻梁条为铁制, 口罩可能被磁力吸去。



- 符合ASTM F2100-11※屏障等级2, 带防护面罩的外科口罩。
- 防护面罩的两面经防起雾加工且鼻梁部分附有内垫, 不易起雾。
- 防护面罩弯曲, 提升面部两侧的飞沫防御效果。

■试验数据

试验项目	实测值*	ASTM F2100-11 标准值 等级 2
BFE(细菌过滤效率)	≥99.5%	≥98%
ΔP(呼吸阻力)	<3.2mmH ₂ O/cm ²	<5.0mmH ₂ O/cm ²
PFE(微粒过滤效率)	≥99%	≥98%
人工血液不渗透性	120mmHg	120mmHg
可燃性	CLASS1	CLASS1

<试验实施日>
NELSON LABORATORIES, INC.
●BFE、ΔP: 2020年8月27日 ●PFE: 2020年8月31日 ●人工血液不渗透性: 2020年8月20日
一般財団法人 化檢試験機構
●可燃性: 2020年8月6日
※为Professional口罩 II 带防护面罩的实测值, 并非保证值。

Professional口罩 II 带防护面罩

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
51417	松紧带 均码 蓝色	口罩: 9cm×17.5cm 防护面罩: 12.6cm×24.5cm 25个装	24盒	4971032514178

■材质: [主体]聚丙烯 [防护面罩]聚对苯二甲酸乙二醇酯 [鼻梁条]铁 [耳带]聚酯纤维、聚氨酯纤维
※不含乳胶(不含来自天然橡胶蛋白的蛋白质)

▲MRI检查时请不要使用。由于鼻梁条为铁制, 口罩可能被磁力吸去。



- 符合ASTM F2100-11等级3, 屏障性能高, 是适用于手术室内的绑带式外科口罩。
- 适用于手术室及急诊科等有可能出现血液飞溅的场所。
- 采用具有高通气性的高性能滤网, 易于呼吸。

■试验数据

试验项目	实测值*	ASTM F2100-11 标准值 等级 3
BFE(细菌过滤效率)	≥99%	≥98%
ΔP(呼吸阻力)	<3.7mmH ₂ O/cm ²	<5.0mmH ₂ O/cm ²
PFE(微粒过滤效率)	≥99%	≥98%
人工血液不渗透性	160mmHg	160mmHg
可燃性	CLASS1	CLASS1

<试验实施日>
一般財団法人 化檢試験機構
●BFE: 2017年3月24日 ●ΔP: 2017年7月28日 ●PFE: 2017年3月27日
●人工血液不渗透性: 2017年8月8日 ●可燃性: 2017年8月21日
※为Professional口罩 III 的实测值, 并非保证值。

Professional口罩 III

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
57155	带 均码 蓝色	9cm×17cm 50个装	40盒	4971032571553

■材质: [主体、带]聚丙烯 [鼻梁条]铁、聚乙烯

▲MRI检查时请不要使用。由于鼻梁条为铁制, 口罩可能被磁力吸去。

■戴法和脱法

Professional口罩 I Omega / Professional口罩 I

戴法



戴时鼻梁条位于上方, 松紧带位于外侧。(粉红色、蓝色的有色面向外。Professional口罩 I 的褶皱向下。)



将松紧带挂在耳上, 再将鼻梁条贴合鼻子的形状。



按住鼻梁条展开褶皱。

脱法



脱口罩时手持松紧带, 避免接触口罩外侧。

Professional口罩 II 带防护面罩

戴法



将口罩微微向内弯曲, 使内垫立起。



将防护面罩的左右向内弯曲, 将松紧带挂在耳上。确认内垫是否盖住鼻子。



将鼻梁条贴合鼻子的形状。按住鼻梁条展开口罩。


脱法



脱口罩时手持松紧带, 避免接触口罩和防护面罩的外侧。

Professional口罩 III

戴法

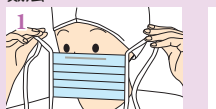

戴时鼻梁条位于上方, 蓝色面向外。



将上带系于后头部, 将鼻梁条贴合鼻子的形状。



按住鼻梁条展开褶皱。



将下带系于颈后。




戴时的注意事项
交叉系
由于容易在面部和口罩间产生空隙, 因此请勿交叉系上下带。

脱法



先解开下带再解开上带。

SF无纺布口罩 儿童用

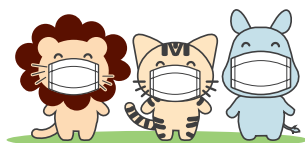

- Omega形状褶皱的儿童用无纺布口罩。
- 面向儿童的可爱包装,使候诊室和诊察室的气氛更柔和。
- 通过包装上戴着口罩微笑的动物图案,减少儿童对戴口罩的抵触情绪。
- 戴法用“注音假名”写成,让儿童也能阅读。

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
51418	—	7.5cm×12cm 50个装	40盒	4971032514185

■材质:[主体]聚丙烯 [耳带]聚酯纤维、聚氨酯纤维
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)



IC护目镜



IC护目镜 I



IC护目镜 II



IC护目镜 III




IC护目镜 FS

- 防止因血液、体液溅到眼部而造成的飞沫感染的护目镜。
- 镜腿端部有孔，可挂在挂钩等进行保管。(I 和 II 对应直径4mm以下、III 对应直径5mm以下的挂钩。)
- 可再利用。



镜腿端部

IC护目镜 I

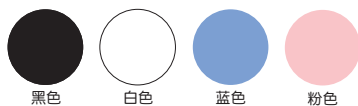

黑色

白色

蓝色

粉色

- 可以戴在眼镜上面。
- 轻盈设计，即使长时间使用也不易感到疲劳。
- 颜色丰富，可根据部门和用途选取适合的颜色。

IC护目镜 I

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
57005	处理、检查用 黑色	10副入	24盒	4971032570051
57006	处理、检查用 白色	10副入	24盒	4971032570068
57007	处理、检查用 蓝色	10副入	24盒	4971032570075
57009	处理、检查用 粉色	10副入	24盒	4971032570099


■材质：聚丙烯

▲IC护目镜 I 没有镜片。镜片需另行购买。(参阅P55)



镜腿端部

IC护目镜 II

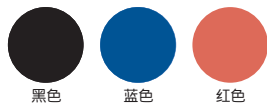

黑色

蓝色

红色

- 可以戴在眼镜上面。(与眼镜一起使用时，请取出鼻垫。)
- 采用轻量弹性材料，即使长时间使用也不易感到疲劳。
- 特殊设计和镜架上带有的防滑橡胶，使其不易偏移。
- 带鼻垫，具有安定感，不易偏移。
- 采用不易反射光线的材料，避免反射的光线妨碍视线。
- 和眼镜的镜架一样可折叠，便于收纳。

IC护目镜 II

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
57015	手术、检查用 黑色	1副入	12个×12盒	4971032570150
57016	手术、检查用 蓝色	1副入	12个×12盒	4971032570167
57017	手术、检查用 红色	1副入	12个×12盒	4971032570174

■材质：聚酰胺树脂、合成橡胶

▲IC护目镜 II 没有镜片。镜片需另行购买。(参阅P55)




- 适合各种脸型，不会令患者有不协调感的眼镜款护目镜。
- 采用轻量弹性材料，即使长时间使用也不易感到疲劳。
- 从门诊到处理都可使用，用途广泛。
- 采用不易反射光线的材料，避免妨碍视线。
- 采用可以轻松更换镜片的设计。

IC护目镜 III

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
57025	眼镜款 黑色	1副入（带2个镜片）	6个×24盒	4971032570259

■ 材质：[主体]聚酰胺树脂 [镜片]聚对苯二甲酸乙二醇酯

▲ IC护目镜 III 没有镜片。镜片需另行购买。（参阅P55）

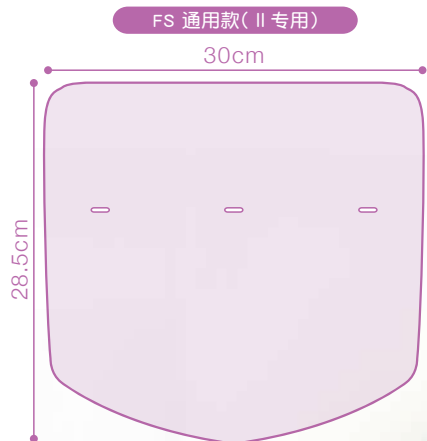

- 为一次性镜片。
- 2面均采用防起雾加工，即使佩戴口罩也不易起雾，确保作业顺畅（FS除外）。
- 为了易于更换镜片，I・II 专用镜片采用3点固定设计、III 专用 片采用1点固定设计。
- 光学款经防反射加工，不会因光的反射而成像，减轻精细作业时的负担。
- 光学款的透光度高，即使长时间使用眼睛也不易感到疲劳。
- FS通用款为覆盖整个面部的尺寸，提供大范围的防护。

IC护目镜 镜片

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
57035	通用款 I・II 专用	7cm×23.2cm 50个入	10个×6盒	4971032570358
57036	光学款 I・II 专用	7cm×23.2cm 50个入	10个×6盒	4971032570365
57037	光学款 III 专用	3.3cm×13.6cm 50个入	10个×6盒	4971032570372
57041	FS 通用款 II 专用	28.5cm×30cm 30个入	12盒	4971032570419


■ 材质：〈57035、57036、57037〉聚对苯二甲酸乙二醇酯
〈57041〉聚氯乙烯



IC盒



IC盒 I (防护罩布一起使用)

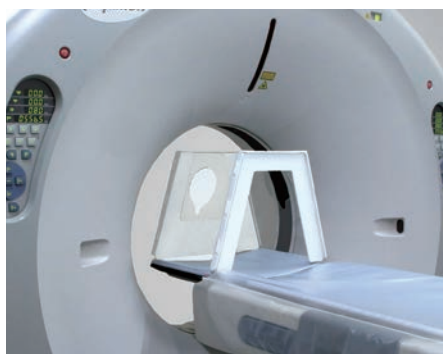

IC盒 II




IC盒 III

- 轻量且经济的组装式防感染气溶胶隔离盒。
 - 1个人也能在短时间内轻松完成组装。
 - 轻盈, 1个人便能搬运和设置。
 - 选用的材料经济性好, 能在多处处理时设置在需要设置的地方。
 - 包装小巧, 减少运送成本及保管空间。此外, 积存起来也不占空间。
 - 可用酒精或次氯酸钠擦拭。
 - 可根据用途选取适合的类型, 处理时方便使用。
 - 装上防护罩布(另售), 更有效预防飞沫。
- ※能装在任何类型的IC盒上。


IC盒 I

重量: 约2.5kg

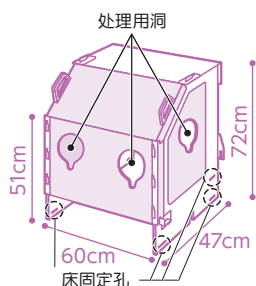


IC盒 II

重量: 约1kg

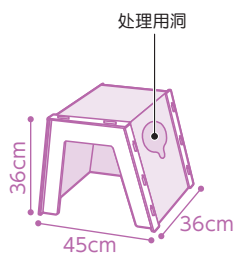

IC盒 III

重量: 约2kg

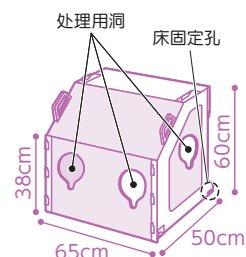

IC盒

款号	种类	规格·内容量	内装数量	条形码
57166	I	60cm×72cm×47cm 1个入	3盒	4971032571669
57167	II	45cm×36cm×36cm 1个入	3盒	4971032571676
57168	III	65cm×60cm×50cm 1个入	3盒	4971032571683

■材质: 聚对苯二甲酸乙二酯、聚丙烯

IC盒用 防护罩布

款号	种类	规格·内容量	内装数量	条形码
57169	140160 透明色	140cm×160cm 10个入	10袋	4971032571690

■材质: 聚乙烯

osaki 塑料围裙



- 可预防液体物质(血液、体液等)而保护医务人员、防水性能强的塑料围裙。
- PE(聚乙烯)制,具备强的防水性、屏障性、耐化学性。
- 只要握持围裙的边缘,便能轻松展开,不粘皮肤,穿戴容易。

- 可预防液体物质(血液、体液等)而保护医务人员、经济型无袖围裙。
 - 极力减少颈部周围和肩部外露部分,帮助医疗从业人员防御湿性活体物质。
 - 备有3种颜色选择,可根据用途和部门选用。
- ※根据制造批次,颜色可能有异。

■使用方法

穿法	脱法
1 挂在颈部,将腰带展开。	1 从后面将颈带解开,胸部部分向前垂放。
2 将腰带在身后打结,将下摆完全展开。	2 避免接触污染部分,将手从下摆左右伸入内侧后将围裙往内折叠。腰带也请解开,从左右往内侧折叠。

Osaki 塑料围裙 无袖

款号	种类	规格·内容量	内装数量	条形码
57085	白色	衣身长120cm×宽72cm 60件装	16盒	4971032570853
57086	蓝色	衣身长120cm×宽72cm 60件装	16盒	4971032570860
57087	粉色	衣身长120cm×宽72cm 60件装	16盒	4971032570877

■材质:聚乙烯



- 能切实保护包括手腕在内的全身,适用于预防接触感染时、进行抗癌药的无菌配制时、在中央材料室进行清洗业务时的有袖围裙。
- 尺寸有“普通”和“大号”2种,袖口样式有“松紧带型”和“指钩型”2种可供选择。

■使用方法

穿法	脱法
1 展开颈部部分并套在颈上,将手穿过袖口,注意不要接触围裙表面。	1 剪断颈后的颈带,解开腰带或将腰带的根部剪断。
2 将腰带在身后打结,并完全展开下摆。	2 注意不要接触围裙的受污染部分,将手臂逐一脱出。废弃时请将受污染部分向内摺。

Osaki 塑料围裙 带袖型

款号	种类	规格·内容量	内装数量	条形码
57088	松紧带袖口 普通号	衣身长115cm×宽 98cm 袖长86cm 10件装	16盒	4971032570884
57089	松紧带袖口 大号	衣身长125cm×宽100cm 袖长90cm 10件装	16盒	4971032570891
57090	指钩型 普通号	衣身长115cm×宽 98cm 袖长86cm 10件装	16盒	4971032570907
57091	指钩型 大号	衣身长125cm×宽100cm 袖长95cm 10件装	16盒	4971032570914

■材质:〔松紧带袖口〕〔主体〕聚乙烯 〔袖口〕天然橡胶乳胶(直接接触肌肤的部分不使用)
〔指钩型〕聚乙烯

▲ 松紧带袖口采用天然橡胶乳胶,过敏者请勿使用。



Osaki隔离服／灭菌Osaki隔离服



- 护理用、探访用、患者用的一次性简易预防衣。
- 素材采用了SMS无纺布,对血液和体液等的遮挡性强。
- 采用了衣长120 cm、袖长60 cm(粉色S为53 cm)的宽松设计。
- 质地轻、透气性强。
- 可节省洗濯等作业。
- 像手术袍一样折叠,易于穿着。

Osaki隔离服 SMS

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
51030	均码 蓝色	衣身长120cm 袖长60cm 带袖口 5件装	12袋	4971032510309
51031	均码 黄色	衣身长120cm 袖长60cm 带袖口 5件装	12袋	4971032510316
51032	S 粉色	衣身长120cm 袖长53cm 带袖口 5件装	12袋	4971032510323

■材质:[主体]聚丙烯, [袖口]聚酯纤维
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)

灭菌Osaki隔离服 SMS

E.O.G.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
51034	均码 蓝色	衣身长120cm 袖长60cm 带袖口 1件装(50袋)	—	4971032510347
51035	均码 黄色	衣身长120cm 袖长60cm 带袖口 1件装(50袋)	—	4971032510354
51036	S 粉色	衣身长120cm 袖长53cm 带袖口 1件装(50袋)	—	4971032510361

■材质:[主体]聚丙烯, [袖口]聚酯纤维
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)



- 正面、手臂部有层压加工、防护性能强的隔离服。
- 实施了使用化疗药物(抗癌药)的耐渗透测试,便于化疗药物配制时使用。
- 身长125cm,袖长65cm,能提供大范围的防护。
- 像手术袍一样折叠,易于穿着。

■试验数据※

试验对象 化疗药物(抗癌药)	浓度	结果
环磷酰胺	20.0mg/mL	240分钟 没有渗透
阿霉素(亚德里亚霉素)	2.0mg/mL	
依托泊苷	20.0mg/mL	
氟尿嘧啶	50.0mg/mL	
紫杉醇(Taxol)	6.0mg/mL	
顺铂	1.0mg/mL	
达卡巴嗪	10.0mg/mL	

<试验实施日>
AKRON RUBBER DEVELOPMENT LABORATORY, INC. 2016年11月14日
※按“ASTM D6978-05”进行试验。

Osaki隔离服 PE

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
51026	均码 蓝色	衣身长125cm 袖长65cm 带袖口 正面、手臂部PE层压加工 10件装	10袋	4971032510262

■材质:[主体]聚丙烯、聚乙烯层压板, [袖口]聚酯纤维
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)

灭菌Osaki隔离服 PE

E.O.G.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
51028	均码 蓝色	衣身长125cm 袖长65cm 带袖口 正面、手臂部PE层压加工 1件装(100袋)	—	4971032510286

■材质:[主体]聚丙烯、聚乙烯层压板, [袖口]聚酯纤维
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)

灭菌 Osaki外科用手术服



- 素材采用了SMS无纺布,防细菌性、防水性、防起毛性强的灭菌手术服。
- 质地轻盈柔软,穿着舒适,适用于长时间的手术。
- 有M、L、LL3种尺寸,有口罩和无口罩2种规格可供选择。
- 带口罩的规格,由于手术袍和口罩一体化,颈部没有空隙,因此具备高的屏障性。
- 符合AAMI等级3。

E.O.G.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
50500	M	衣身长119cm 袖长57cm 带袖口 1件装	50袋	4971032505008
50501	L	衣身长122cm 袖长57cm 带袖口 1件装	50袋	4971032505015
50502	LL	衣身长129cm 袖长57cm 带袖口 1件装	50袋	4971032505022
50504	M 带口罩	衣身长119cm 袖长57cm 带袖口 1件装	50袋	4971032505046
50505	L 带口罩	衣身长122cm 袖长57cm 带袖口 1件装	50袋	4971032505053
50506	LL 带口罩	衣身长129cm 袖长57cm 带袖口 1件装	50袋	4971032505060

■材质:[主体]聚丙烯 [袖口]聚酯纤维
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)

Osaki外科帽



- 柔软、透气性强的外科帽。
- No.1、No.2使用吸湿性、透气性强的素材,穿戴舒适,可适用于长时间的手术。
- No.3采用了透气性强的素材,质地柔软。使用范围广,也可以用于手术时的患者。
- No.3(25个装)可以配合“Osaki PPE架 软质(参阅P50)”使用。

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
51600	No.1 蓝色	绳线型 100顶装	5个×2盒	4971032516004
51601	No.2 蓝色	松紧带型 100顶装	5个×2盒	4971032516011
51602	No.3 蓝色	100顶装	5个×2盒	4971032516028
51613	No.3 蓝色	25顶装	20盒	4971032516134
51612	No.3 粉色	25顶装	20盒	4971032516127

■材质:<No.1> 人造丝 / 聚丙烯
<No.2> [主体]人造丝 / 聚丙烯 [橡胶]乳胶(直接接触肌肤的部分不使用)
<No.3> <No.3> [主体]聚丙烯 [橡胶]合成橡胶
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)

⚠ No.2采用天然橡胶乳胶,过敏者请勿使用。

灭菌 Osaki袖套



- 素材采用了柔软、防水性及透气性强的无纺布袖套。
- 在手术服的手腕部分破损、污染时穿着，无需更换手术服即可继续进行手术。

E.O.G.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
56101	均码	带袖口 单件装	50袋	4971032561011

■ 材质：〔主体〕聚丙烯 〔袖口〕聚酯纤维65%、合成橡胶35%
※不含乳胶（不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质）

Osaki鞋套



- 防水性、透气性强的鞋套。
- 在手术室、I.C.U.等进行处理时，可防止血液等污渍。
- 最适用于无尘室等，可防止脚部带来的尘埃。
- 在鞋底实施了防滑加工。

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
51700	S	到脚踝 50双装	3盒	4971032517001
51701	L	到膝部 25双装	3盒	4971032517018


■ 材质：〔S〕〔主体〕聚丙烯 〔穿着口〕天然橡胶乳胶（直接接触肌肤的部分不使用）
〔L〕〔主体〕聚丙烯 〔穿着口〕合成橡胶
※不含乳胶（不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质）

▲ S采用天然橡胶乳胶，过敏者请勿使用。

MSB防护套装CV



- 最大限度地搭配了防护所需用品的MSB防护套装。
- CDC指南第ⅠB类中强烈推荐“CVC穿刺时使用的用品（外科帽、口罩、灭菌手术袍、全身用无菌手术单）”一套。
- 可像手术服一样穿着，保持清洁。即使在病房也可以和在手术室一样确保清洁区。
- CV用布单为半透明，可有效把握患者脸部位置，作为插入导管及导丝方向的标记。布单可充分确保清洁区，即使在有限的空间内也可清洁地展开。
- CV用布单从孔部位到下摆的长度非常充足，足以无菌地插入导管及导丝。

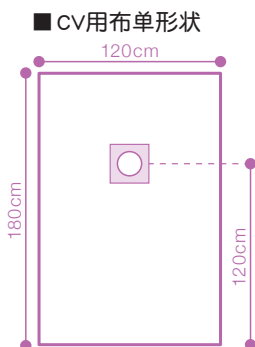


一般医疗器具 单次使用通用型外科用洞巾：35531000 E.O.G.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
55004	1218AT9-M	一次性帽子、外科用口罩、外科用手术服M、CV用布单1218AT9 1组装(10袋)	—	4971032550046
55005	1218AT9-L	一次性帽子、外科用口罩、外科用手术服L、CV用布单1218AT9 1组装(10袋)	—	4971032550053
55006	1218AT9-LL	一次性帽子、外科用口罩、外科用手术服LL、CV用布单1218AT9 1组装(10袋)	—	4971032550060

■ 商品名称：OsakiMSB防护套装 ■ 申报编号：23B2X10001000055



灭菌 Osaki洞巾 F

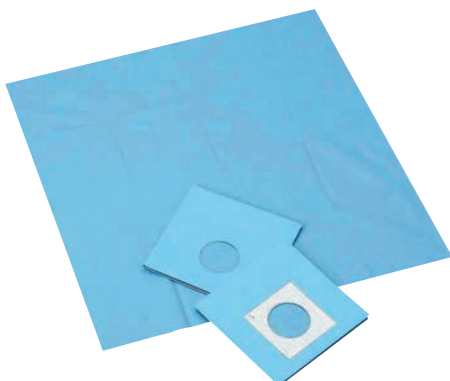


- 吸水、防水型的灭菌洞巾。
- 与棉布相比具有起尘少、不会被血液、生理食盐水浸透的优点，在手术时最为适用。
- 强度高，可用于长时间的手术。

一般医疗器具 单次使用通用型外科用洞巾：35531000 [E.O.G.](#)

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
50868	606	60cm× 60cm 1片装(50袋)	4盒	4971032508689
50870	909	90cm× 90cm 1片装(50袋)	2盒	4971032508702
50871	912	90cm× 120cm 1片装(50袋)	2盒	4971032508719
50872	918	90cm× 180cm 1片装(25袋)	2盒	4971032508726
50873	1212	120cm× 120cm 1片装(50袋)	2盒	4971032508733
50875	1215	120cm× 150cm 1片装(25袋)	2盒	4971032508757
50876	1218	120cm× 180cm 1片装(25袋)	2盒	4971032508764
50877	1220	120cm× 200cm 1片装(25袋)	2盒	4971032508771
50879	1515	150cm× 150cm 1片装(25袋)	2盒	4971032508795
50880	1518	150cm× 180cm 1片装(20袋)	2盒	4971032508801
50881	1520	150cm× 200cm 1片装(20袋)	2盒	4971032508818
50886	606A63	60cm×60cm(6.3 cm圆孔) 1片装(50袋)	4盒	4971032508863
50888	606A12	60cm×60cm(12 cm圆孔) 1片装(50袋)	4盒	4971032508887
50896	909A12	90cm×90cm(12cm圆孔) 1片装(50袋)	2盒	4971032508962
50891	606AT63	60cm×60cm(6.3 cm圆孔带胶带) 1片装(50袋)	4盒	4971032508917
50892	909AT9	90cm×90cm(9 cm圆孔带胶带) 1片装(50袋)	2盒	4971032508924
50894	1220DAT5-8	120cm×200cm(5 cm×8 cm椭圆孔带胶带) 1片装(25袋)	2盒	4971032508948
50895	1520DAT5-8	150cm×200cm(5 cm×8 cm椭圆孔带胶带) 1片装(20袋)	2盒	4971032508955

■材质：〔表面材料〕人造丝、聚酯纤维，〔防水材料〕聚乙烯
 ■商品名称：灭菌 Osaki布单 F ■申报编号：23B2X10001000058
 ■商品名称：灭菌 Osaki布单 FT ■申报编号：23B2X10001000059
 ■请联系您的销售代表，因为它可能缺货。

灭菌 Osaki布单 R

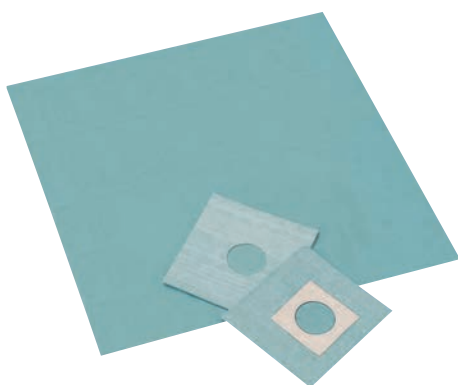

- 防水型的灭菌布单。
- 与棉布相比具有起尘少的优点，在手术时最为适用。
- 强度高，可用于长时间的手术。

一般医疗器具 单次使用通用型外科用洞巾：35531000 [E.O.G.](#)

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
50837	606	60cm× 60cm 1片装(50袋)	4盒	4971032508375
50838	909	90cm× 90cm 1片装(50袋)	2盒	4971032508382
50839	912	90cm× 120cm 1片装(50袋)	2盒	4971032508399
50840	1212	120cm× 120cm 1片装(50袋)	2盒	4971032508405
50841	1215	120cm× 150cm 1片装(25袋)	2盒	4971032508412
50842	1220	120cm× 200cm 1片装(25袋)	2盒	4971032508429
50843	1515	150cm× 150cm 1片装(25袋)	2盒	4971032508436
50844	1520	150cm× 200cm 1片装(20袋)	2盒	4971032508443
50845	606A63	60cm× 60cm (6.3 cm圆孔) 1片装(50袋)	4盒	4971032508450
50846	606A12	60cm× 60cm (12cm圆孔) 1片装(50袋)	4盒	4971032508467
50847	909A12	90cm× 90cm (12cm圆孔) 1片装(50袋)	2盒	4971032508474
50850	606AT63	60cm× 60cm (6.3cm圆孔带胶带) 1片装(50袋)	4盒	4971032508504
50851	1220AT58	120cm×200cm (5cm×8cm椭圆孔带胶带) 1片装(25袋)	2盒	4971032508511

■材质：纸浆、聚酯纤维
 ■商品名称：灭菌 Osaki布单 F ■申报编号：23B2X10001000058
 ■商品名称：灭菌 Osaki布单 FT ■申报编号：23B2X10001000059(带胶带)
 ■请联系您的销售代表，因为它可能缺货。

Osaki患者服




- 2肩有魔术贴, 静脉注射或处理时无需动手臂便可轻易穿脱, 是一次性的患者服。
- 采用通气性好、不易透光的材料。
- 不使用金属和塑料, 可以穿着进行X光检查。
- 男女兼用, 在做检查时、静脉注射中或处理时等各种场合都可使用。
- 可节省洗濯等作业。

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
51100	均码	带肩部粘带扣 长131 cm 单件装	50袋×2盒	4971032511009

■材质: 聚丙烯

Osaki体检服

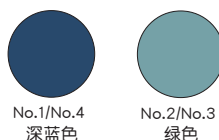

No.1/No.4
深蓝色

No.2/No.3
绿色

- 透气性强、穿着舒适的一次性体检服。
- 采用不易透光的材料。
- 不使用金属和塑料, 可以穿着进行X光检查。
- 男女兼用, 在做检查时、静脉注射中或处理时等各种场合都可使用。
- 可节省洗濯等作业。

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
51201	No.1	前开式(魔术贴胶带) 深蓝色 衣身长96cm 单件装	50袋×2盒	4971032512013
51202	No.2	从头戴的类型 绿色 衣身长108cm 单件装	50袋×2盒	4971032512020
51204	No.3	从头戴的类型 短款 绿色 衣身长70cm 单件装	50袋×2盒	4971032512044
51205	No.4	从头戴的类型 深蓝色 衣身长108cm 单件装	50袋×2盒	4971032512051

■材质: 聚丙烯

Osaki检查用短裤



- 男女兼用、灌肠检查用, 不易透光的一次性开孔短裤。
- 开口部重叠, 避免非检查时外露。
- 采用深蓝色且较厚的面料, 防止透光。

款号	种类	规格(适合尺寸)・内容量	内装数量	条形码
51305	均码	长款50cm 裆下长18cm 腰围42~130cm 单件装	50袋×4盒	4971032513058
51306	长款	长款62cm 裆下长30cm 腰围42~130cm 单件装	50袋×4盒	4971032513065
51307	加长款	长款71cm 裆下长41cm 腰围42~130cm 单件装	50袋×4盒	4971032513072
51309	超长款	长款102cm 裆下长67cm 腰围42~130cm 单件装	35袋×4盒	4971032513096

■材质: [主体]聚丙烯 [松紧带]天然橡胶乳胶(直接接触肌肤的部分不使用)

▲采用天然橡胶乳胶, 过敏者请勿使用。





超声耦合剂



中粘度



高粘度

■使用场景

粘度	用法/使用地点
中等粘度	腹部等其他范围的检查
高粘度	心脏、颈部等曲面/垂直面的检查

- 超声波传导性能卓越，能够获得鲜明图像的已经过杀菌处理的超声波检查用凝胶。
- 即使用加热器加热至40℃，粘度与常温状态下也几乎无变化，让检查变得更加容易。
- 已通过干燥高温杀菌处理，不含界面活性剂、着色料、香料等成分。因此，进行经阴道超声波检查时、或皮肤过敏患者均可放心使用。
- 不含着色料，因此不会在探头或衣服沾上颜色。
- 水溶性凝胶，擦拭之后不会产生黏附感，清爽舒服。
- 根据用途和使用部位，可以选择粘度。

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
54314	中粘度	250g装	24支	4971032543147
54354	中粘度	2.5kg装(2个) 附带250g空瓶1个	—	4971032543543
54325	高粘度	250g装	24支	4971032543253
54355	高粘度	2.5kg装(2个) 附带250g空瓶1个	—	4971032543550

■成分：精制水、聚合物、保湿剂、pH调整剂、防腐剂

Osaki 探针罩



袋装款



独立包装款

- 预防感染，节省清洗探头的时间，容易安装的阴超探头专用保护套。
- 由于是一次性产品，能清洁使用，预防患者及医疗从业人员的感染。
- 使用后的处理简单，节省清洗探头的时间。
- 没有啫喱，因此安装时不会发粘，容易装卸。
- 没有避孕套般的储精囊，因此更能贴合，获取更鲜明的图像。
- 袋装款由于使用袋口装有夹链的铝制袋，取出后可立即使用。
- 独立包装款由于每个单独装在铝制袋中，能更清洁地进行保管和使用。




管理医疗设备 腔内超声探头保护套：70015000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
54251	袋装款	144个装(1袋装)	6盒	4971032542515
54252	独立包装款	1个装(144包)	6盒	4971032542522

■商品名称：探头保护套 N ■认证编号：222AKBZX00088000 ■材质：天然橡胶乳胶

- ▲本品每个只限使用1次，请勿再次使用。
- ▲采用天然橡胶乳胶，过敏者请勿使用。

Mighty Sheets／灭菌Mighty Sheets

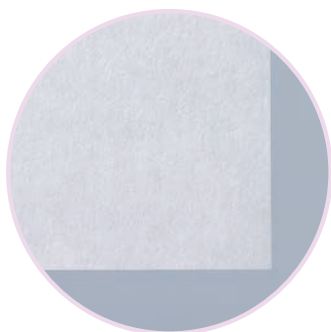

- 使用范围广、吸水、防水型无纺布制层压布单。
- 采用双层聚乙烯层压加工，避免漏出。
- 如蛇腹般的折叠形状，非常易于展开。
- 用于防止诊察台、器械台、床等被液体物质(血液、体液等)污染。
- 也可作为分娩时的腹部盖布及接生布使用。

Mighty Sheets E

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
50158	—	60cm× 80cm 1片装	10袋×20包	4971032501581
50159	—	80cm× 180cm 1片装	10袋×10包	4971032501598
50160	—	90cm× 100cm 1片装	10袋×10包	4971032501604
50161	—	100cm× 120cm 1片装	10袋×10包	4971032501611
50162	—	100cm× 150cm 1片装	10袋×10包	4971032501628
50163	—	100cm× 180cm 1片装	10袋×10包	4971032501635
50164	—	100cm× 210cm 1片装	10袋×10包	4971032501642
50165	—	60cm× 80cm 10片装	20袋	4971032501659
50166	—	80cm× 180cm 10片装	10袋	4971032501666
50167	—	90cm× 100cm 10片装	10袋	4971032501673
50168	—	100cm× 120cm 10片装	10袋	4971032501680
50169	—	100cm× 150cm 10片装	10袋	4971032501697
50170	—	100cm× 180cm 10片装	10袋	4971032501703
50171	—	100cm× 210cm 10片装	10袋	4971032501710

■材质:[表面材料]人造丝、丙烯 [防水材料]聚乙烯
■可根据顾客需要提供其他规格。

灭菌Mighty Sheets E

E.O.G.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
50187	—	50cm× 60cm 1片装	50个×8袋	4971032501871
50172	—	60cm× 80cm 1片装	200袋	4971032501727
50173	—	80cm× 180cm 1片装	100袋	4971032501734
50174	—	90cm× 100cm 1片装	100袋	4971032501741
50175	—	100cm× 120cm 1片装	100袋	4971032501758
50176	—	100cm× 150cm 1片装	100袋	4971032501765
50177	—	100cm× 180cm 1片装	100袋	4971032501772
50178	—	100cm× 210cm 1片装	100袋	4971032501789

■材质:[表面材料]人造丝、丙烯 [防水材料]聚乙烯
■可根据顾客需要提供其他规格。

Osaki Despo卷装垫单



- 能用于多种目的，吸水、防水款的无纺布层压垫单。
- 双层PE(聚乙烯)的层压加工，有效防漏。
- 可根据使用情况裁剪，是能自由调节尺寸的卷装款。
- 最适合用于防止诊察台、器械台、病床等被湿性活体物质(血液、体液等)污染。

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
50084	—	100cm× 100m卷 1个装	6包	4971032500843

■材质:[表面材料]人造丝、丙烯 [防水材料]聚乙烯



防滑布单/灭菌防滑布单



- 实施了防滑加工的吸水、防水型无纺布制层压布单。
- 在诊察台及易被污染的地板处无需胶带即可简单使用。

防滑布单

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
50200	—	80cm×200cm 1片装	10袋×10包	4971032502007
50204	—	80cm×200cm 裸 100片装	—	4971032502045
55002	—	100cm×120cm 10片装	10袋	4971032550022
50201	—	100cm×200cm 1片装	10袋×10包	4971032502014
50202	—	100cm×50m卷 1个装	5包	4971032502021
50209	—	100cm×220cm 特折 5片装	20袋	4971032502090

■材质:[表面材料]人造丝、丙烯酸 [防水材料]聚乙烯

灭菌防滑布单

E.O.G.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
55001	—	100cm×120cm 1个装	25袋×4盒	4971032550015


■材质:[表面材料]人造丝、丙烯酸 [防水材料]聚乙烯

医用垫/灭菌医用垫



- 使用范围广、吸水性强的一次性垫子。
- 可快速吸收大量液体物质,不会漏出。吸水后不会渗出,可保持干爽的表面状态。

商品规格

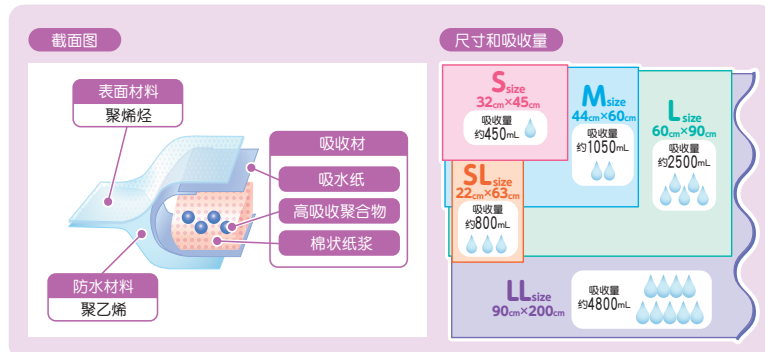

医用垫

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
84206	S	32cm×45cm 100片装	6袋	4971032842066
84207	M	44cm×60cm 50片装	6袋	4971032842073
84208	L	60cm×90cm 20片装	4袋	4971032842080
84216	LL	90cm×200cm 20片装	—	4971032842165
84223	SL	22cm×63cm 30片装	6袋	4971032842233

■材质:[表面材料]聚乙烯 [防水材料]聚乙烯 [吸收材]吸水纸、高吸收聚合物、棉状纸浆


灭菌医用垫

E.O.G.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
84209	S	32cm×45cm 1片装(50袋)	4盒	4971032842097
84210	M	44cm×60cm 1片装(25袋)	4盒	4971032842103
84211	L	60cm×90cm 1片装(25袋)	—	4971032842110
84219	LL	90cm×200cm 1片装(20袋)	—	4971032842196
84224	SL	22cm×63cm 1片装(30袋)	4盒	4971032842240


■材质:[表面材料]聚乙烯 [防水材料]聚乙烯 [吸收材]吸水纸、高吸收聚合物、棉状纸浆

医用垫 轻型／灭菌医用垫 轻型

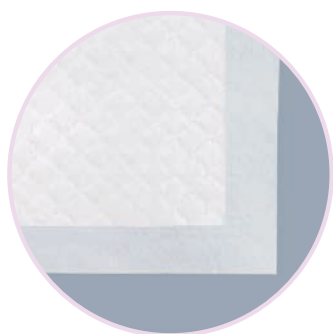

- 使用范围广、吸水性强的一次性垫子。
- 可快速吸收大量液体物质，不会漏出。吸水后不会渗出，可保持干爽的表面状态。
- 备有符合各种用途的规格。

■商品规格

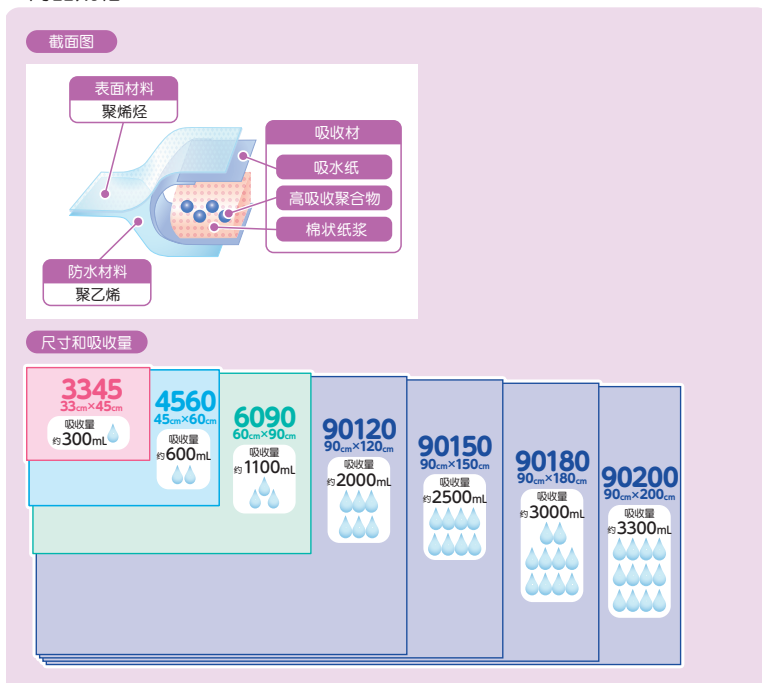

医用垫 轻型

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
84268	3345	33cm×45cm 100片装	6袋	4971032842684
84255	4560	45cm×60cm 50片装	6袋	4971032842554
84256	6090	60cm×90cm 30片装	4袋	4971032842561
84262	90120	90cm×120cm 10片装	6袋	4971032842622
84263	90150	90cm×150cm 10片装	6袋	4971032842639
84264	90180	90cm×180cm 10片装	3袋	4971032842646
84265	90200	90cm×200cm 10片装	3袋	4971032842653

■材质：[表面材料]聚丙烯 [防水材料]聚乙烯 [吸收材]吸水纸、高吸收聚合物、棉状纸浆

灭菌医用垫 轻型

E.O.G.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
84269	S3345-1	33cm×45cm 1片装(50袋)	4盒	4971032842691
84258	S4560-1	45cm×60cm 1片装(25袋)	4盒	4971032842585
84259	S6090-1	60cm×90cm 1片装(25袋)	—	4971032842592
84266	S90120-1	90cm×120cm 1片装(10袋)	—	4971032842660

■材质：[表面材料]聚丙烯 [防水材料]聚乙烯 [吸收材]吸水纸、高吸收聚合物、棉状纸浆

Osaki体检用布单



- 已裁剪成尺寸便于使用的吸水、防水型体检用布单。
- 妇科检查时及进行简单的处理、检查时，可作为防水布单使用。

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
84003	—	36.5cm×30cm 200片装	12盒	4971032840031

■材质：[表面材料]皱纹纸 [防水材料]聚乙烯

Osaki体检用卷筒形布单



绿色(盒装)



绿色(收缩包装)



粉色(收缩包装)

- 卷筒型的吸水、防水型体检用布单。
- 在妇科检查及进行简单的处理、检查时,可作为防水布单使用。
- 宽37cm,符合大部分诊察台的需要。
- 每一定长度(30cm、60cm)即有切缝,可在每次处理时撕取。
- 有绿色、粉色、白色3种颜色,可根据部门、用途区分使用。
- 粉色有4种尺寸,可根据用途选择。
- 盒装能连箱挂在“检查用卷装垫单架”上,确保使用卫生。

Osaki体检用卷筒形布单

款号	种类	规格	内装数量	条形码
84111	1930 粉色	19cm×30cm 可用170次 1卷装	24个	4971032841113
84121	3430 粉色	34.5cm×30cm 可用100次 1卷装	12个	4971032841212
84116	3730 绿色	37cm×30cm 可用120次 1卷装	12个	4971032841168
84104	3730 粉色	37cm×30cm 可用120次 1卷装	12个	4971032841045
84102	3730 绿色 盒装	37cm×30cm 可用120次 1卷装	12盒	4971032841021
84112	3760 白色 盒装	37cm×60cm 可用60次 1卷装	12盒	4971032841120
84105	5030 粉色	50cm×30cm 可用120次 1卷装	12个	4971032841052

■材质:[表面材料]皱纹纸 [防水材料]聚乙烯

- 经防滑加工,吸水、防水款诊察用卷装垫单。
- 宽37cm,有绿色、粉色2种颜色,可根据部门、用途区分使用。

Osaki体检用卷筒形布单 防滑


款号	种类	规格	内装数量	条形码
84115	NS 3730 绿色	37cm×30cm 可用120次 1卷装	12个	4971032841151
84114	NS 3730 粉色	37cm×30cm 可用120次 1卷装	12个	4971032841144
84117	NS 5850 绿色	58cm×50cm 可用72次 1卷装	12个	4971032841175

■材质:[表面材料]皱纹纸 [防水材料]聚乙烯

Osaki 体检用卷筒形布单架



- 能装在查房车上,诊察用的卷装垫单支架。
- 只要挂在手推把或侧面杆子上,便能轻易放置,不占空间。
- 只要将卷装垫单的中芯孔挂在支架上,便能轻松替换。

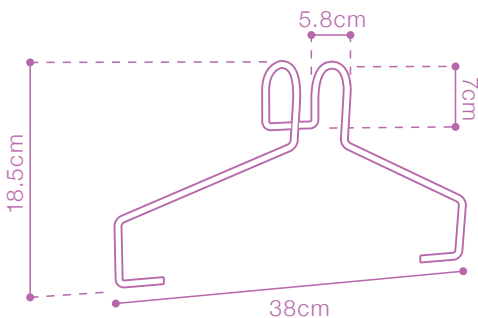

- 能挂在直径5cm以下的柱子。
- 备有宽34.5cm和宽37cm的诊察用卷装垫单。

款号	种类	规格	内装数量	条形码
57055	—	1个入	10袋	4971032570556



Osaki软夹板



正面(绒织物) 反面(氨纶海绵)

■软夹板®(特定保健医疗素材 056 夹板)的功能区分表

功能分类	类型	种类
(2)形状 ①手指、脚指用	夹板・F10-b-1	指-S、指-M、指-L
②上肢用	夹板・F10-b-2	6S・5S・4S・3S・SS・S
③下肢用	夹板・F10-b-3	M・L・LL

- 采用柔软的尿烷素材、并覆盖了金属支架的夹板。
- 表面素材采用了棉织物,不会引起发汗或炎症等不适。
- 弹性强,温柔紧贴患部。
- 可简单地剥离软尿烷素材和金属支架,后之分别丢弃。

一般医疗器具 单次使用带垫夹板:35357000

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
60026	指-S	25mm× 90mm×10mm(手指、脚指用) 单个装	30袋×12盒	4971032600260
60025	指-M	25mm× 120mm×10mm(手指、脚指用) 单个装	30袋×12盒	4971032600253
60024	指-L	25mm× 170mm×10mm(手指、脚指用) 单个装	30袋×12盒	4971032600246
60023	6S	45mm× 150mm×20mm (上肢用) 单个装	6袋×12盒	4971032600239
60022	5S	45mm× 215mm×20mm (上肢用) 单个装	6袋×12盒	4971032600222
60021	4S	45mm× 320mm×20mm (上肢用) 单个装	6袋×12盒	4971032600215
60020	3S	60mm× 410mm×20mm (上肢用) 单个装	6袋×12盒	4971032600208
60019	SS	70mm× 510mm×20mm (上肢用) 单个装	6袋×12盒	4971032600192
60018	S	80mm× 630mm×20mm (上肢用) 单个装	6袋×12盒	4971032600185
60017	M	90mm× 720mm×20mm (上肢用) 单个装	6袋× 6盒	4971032600178
60016	L	100mm× 830mm×25mm (下肢用) 单个装	6袋× 6盒	4971032600161
60015	LL	120mm× 1130mm×30mm (下肢用) 单个装	6袋× 6盒	4971032600154

■商品名称:Osaki软夹板 ■申报编号:23B2X10001000040 ■特定保险医疗素材 056 夹板

- ▲请勿在使用本产品的情况下使用磁共振设备(MRI设备)。(以免造成发热或烫伤。)
- ▲X光检查时请取下。
- ▲请将正面(绒织物)贴着皮肤使用。

Pan-Net



- 采用了吸湿性高的棉、手感佳的卷石膏用筒型绷带。
- 素材里不含乳胶。

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
60963	2号	5cm×23m(上肢、儿童脚用)	单卷装	16盒
60964	3号	7.5cm×23m(上肢、小腿用)	单卷装	12盒
60965	4号	10cm×23m(小腿、儿童头部用)	单卷装	8盒
60966	5号	14cm×23m(大腿、头部、躯干(儿童)用)	单卷装	6盒
60967	8号	20cm×23m(躯干、石膏覆盖部位用)	单卷装	4盒

■材质:棉100%
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)





缠绕式 Pan Net / 灭菌缠绕式 Pan Net



- 裁剪为易于使用的长度,可简单装上的缠绕式Pan Net。
- 采用了吸湿性高的纯棉线。
- 素材里不含乳胶。

缠绕式 Pan Net

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
60305	4号(手臂用)	10cm×85cm 20卷装	—	4971032603056
60306	5号(腿用)	14cm×110cm 20卷装	—	4971032603063

■材质:棉100%
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)

灭菌缠绕式 Pan Net

E.O.S.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
60336	4号(手臂用)	10cm×85cm 1卷装(15袋)	5盒	4971032603360
60337	5号(腿用)	14cm×110cm 1卷装(10袋)	5盒	4971032603377

■材质:棉100%
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)

osaki 暖贴



C




L



C 无包装盒

L 无包装盒


- 紧密贴合患处,具高保温性的温热用暖贴。
- 采用具高保温性的啫喱,适用于利用温热效果的治疗。
- 采用能让啫喱平均分布的形状,温暖整个使用部位。
- 通过使用加温槽,能在合适的温度下使用。
- 暖贴可用于身体任何部位,C款较适用于颈部、肘、膝等,L款则较适用于背部、腰等部位。

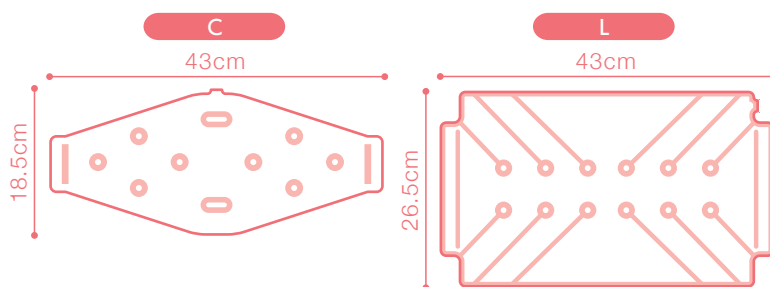

⚠ 请注意使用期限及耐用期限

可在下述的【使用期限】前开始使用,【耐用期限】以内使用。
请务必将使用开始日用油性笔写在产品主体上。

〈制造年月的理解〉

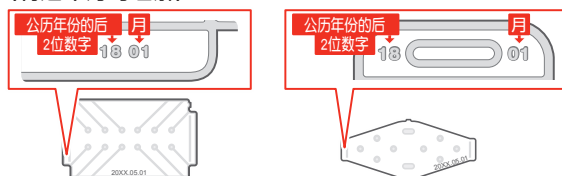

【使用期限】:制造年月的次年同月为止

【耐用期限】:使用开始日起5个月內(例子①、②都为使用开始日起5个月內)

例



一般医疗器具 温热用暖贴:37240010

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
61005	C	18.5cm×43cm 1个装	10盒	4971032610054
61006	C 无包装盒	18.5cm×43cm 10个装	—	4971032610061
61007	L	26.5cm×43cm 1个装	5盒	4971032610078
61008	L 无包装盒	26.5cm×43cm 5个装	—	4971032610085

■商品名称:温热用暖贴 ■申报编号:23B2X10001000094
■材质:[主体]聚氯乙烯 [内容物]保温啫喱(水、水溶性聚合物、防腐剂)



Fit Band



●透气性、伸缩性强的胸部固定带。

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
60802	S	胸围 60cm～ 75cm 单片装	10袋×10包	4971032608020
60803	M	胸围 70cm～ 85cm 单片装	10袋×10包	4971032608037
60804	L	胸围 80cm～ 95cm 单片装	10袋×10包	4971032608044
60805	LL	胸围 90cm～115cm 单片装	10袋×10包	4971032608051

■材料：聚酯纤维、聚氨酯纤维、锦纶、棉、合成皮革
※不含乳胶（不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质）

Waist Guard DX



- 采用吸湿性、透气性强的素材的腰部固定带。
- 整体形状呈弓形弯曲，贴合腰部。
- 通过2片塑料固定片，使其紧贴在腰部。
- 使用辅助带可让腹压上升，在减轻腰部疲劳的同时提升了贴身性。

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
60600	S	腰围 65cm～ 75cm 单片装	20盒	4971032606002
60601	M	腰围 75cm～ 85cm 单片装	20盒	4971032606019
60602	L	腰围 85cm～ 95cm 单片装	20盒	4971032606026
60603	LL	腰围 95cm～105cm 单片装	20盒	4971032606033
60604	3L	腰围 105cm～115cm 单片装	20盒	4971032606040

■材料：聚酯纤维、锦纶、棉、聚氨酯纤维、聚甲醛、EVA、聚丙烯
※不含乳胶（不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质）

Waist Belt Mesh



- 采用透气性、伸缩性强的网眼素材的腰部固定带。
- 通过2片铝制固定片，沿腰部给予支撑。
- 对应腰部的改善幅度可装卸铝制固定片。
- 使用辅助带可提高腹压，在减轻腰部疲劳的同时提升了贴身性。

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
60710	S	腰围 60cm～ 70cm 单片装	30盒	4971032607108
60711	M	腰围 70cm～ 80cm 单片装	30盒	4971032607115
60712	L	腰围 80cm～ 90cm 单片装	30盒	4971032607122
60713	LL	腰围 90cm～100cm 单片装	30盒	4971032607139
60714	3L	腰围 100cm～110cm 单片装	30盒	4971032607146



■材料：锦纶、聚酯纤维、聚氨酯纤维、棉、铝、天然橡胶乳胶（直接接触肌肤的部分不使用）

▲采用天然橡胶乳胶，过敏者请勿使用。

绷带制品



Clean Tex

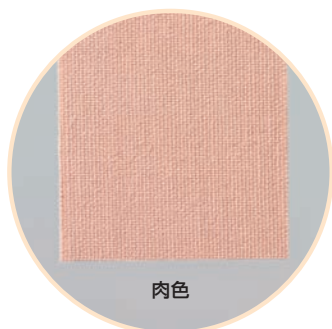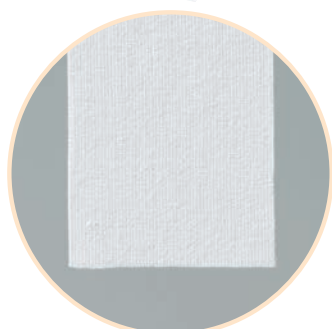



肉色

- 采用了棉和聚氨酯的具伸缩性素材、并涂上低刺激性的丙烯酸系粘合剂的粘性伸缩绷带。
- 可放在包装盒里直接使用，节省置放绷带交换车及处理台的空间。
- 贴纸上印有方形格子，可作为对应使用部位进行裁剪时的标记。
- 适用于处理用纱布的覆盖保护、关节的固定。
- 肉色类型可用于脸部等会对外表造成影响的部位。
- 素材不含乳胶。

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
40713	1.25cm	1.25cm×5m 4卷装	6盒×20包	4971032407135
40714	2.5cm	2.5cm×5m 2卷装	6盒×20包	4971032407142
40715	3.75cm	3.75cm×5m 2卷装	4盒×20包	4971032407159
40716	5cm	5cm×5m 1卷装	6盒×20包	4971032407166
40717	7.5cm	7.5cm×5m 1卷装	4盒×20包	4971032407173
40718	10cm	10cm×5m 1卷装	3盒×20包	4971032407180
40719	肉色 1.25cm	1.25cm×5m 4卷装	6盒×20包	4971032407197
40720	肉色 2.5cm	2.5cm×5m 2卷装	6盒×20包	4971032407203
40721	肉色 3.75cm	3.75cm×5m 2卷装	4盒×20包	4971032407210
40722	肉色 5cm	5cm×5m 1卷装	6盒×20包	4971032407227
40723	肉色 7.5cm	7.5cm×5m 1卷装	4盒×20包	4971032407234
40724	肉色 10cm	10cm×5m 1卷装	3盒×20包	4971032407241

■材质：棉、聚氨酯纤维、丙烯酸类粘合剂
※不含乳胶（不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质）

Clean Pore

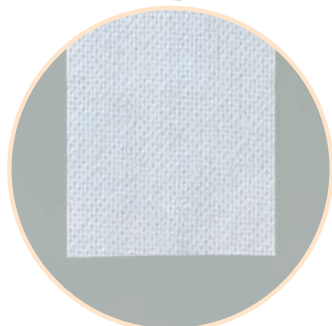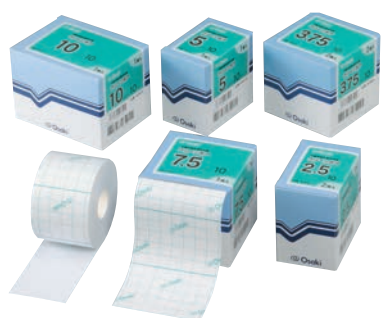

- 素材采用柔软的无纺布、贴身性强的粘性绷带。
- 可直接放在包装里使用，节省置放绷带交换车及处理台的空间。
- 贴纸上印有方形格子，可作为对应使用部位进行裁剪时的标记。
- 涂有低刺激性的丙烯酸系粘合剂，透气性强、使用舒适，即使长时间使用也不会感到闷热或起炎症。
- 适用于处理用纱布的覆盖保护、导管等的固定、膏药贴的固定。
- 素材不含乳胶。

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
40808	2.5cm	2.5cm×10m 2卷装	6盒×20包	4971032408088
40809	3.75cm	3.75cm×10m 2卷装	4盒×20包	4971032408095
40810	5cm	5cm×10m 1卷装	6盒×20包	4971032408101
40811	7.5cm	7.5cm×10m 1卷装	4盒×20包	4971032408118
40812	10cm	10cm×10m 1卷装	3盒×20包	4971032408125

■材质：聚酯纤维、丙烯酸类粘合剂
※不含乳胶（不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质）

Osaki 伸缩绷带 / 灭菌 Osaki 伸缩绷带



- 聚酯纤维和聚氨酯纤维混纺而成的伸缩绷带。
- 采用网状设计，通气性好。
- 较薄，减轻包裹部分的鼓起程度。
- 贴合关节等可动部位，不会妨碍活动。
- 采用便于物品管理的独立包装。
- 材料不含荧光增白剂、乳胶。

Osaki 伸缩绷带 网状

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
42040	5cm	5cm×9m(伸长) 1卷装(10袋)	20盒	4971032420400
42041	7.5cm	7.5cm×9m(伸长) 1卷装(10袋)	20盒	4971032420417
42042	9cm	9cm×9m(伸长) 1卷装(10袋)	20盒	4971032420424
42043	18cm	18cm×9m(伸长) 1卷装(10袋)	6盒	4971032420431

■ 材质：聚酯纤维、聚氨酯纤维
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)


- 使用了[Tyvek®]灭菌袋的灭菌产品。

灭菌Osaki 伸缩绷带 网状

E.O.G. Tyvek

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
42044	TS 5cm	5cm×9m(伸长) 1卷装(10袋)	10盒	4971032420448
42045	TS 7.5cm	7.5cm×9m(伸长) 1卷装(10袋)	10盒	4971032420455
42046	TS 9cm	9cm×9m(伸长) 1卷装(10袋)	10盒	4971032420462

■ 材质：聚酯纤维、聚氨酯纤维
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)

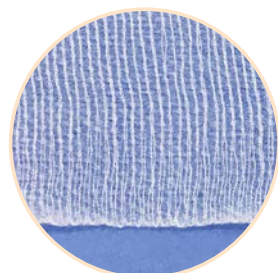

- 保持必要功能的同时，追求经济性的伸缩绷带。
- 较薄，减轻包裹部分的鼓起程度。
- 贴合关节等可动部位，不会妨碍活动。
- 采用便于物品管理的独立包装。
- 材料不含荧光增白剂、乳胶。

Osaki 伸缩绷带 轻量

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
42060	5cm	5cm×9m(伸长) 1卷装(10袋)	20盒	4971032420608
42061	7.5cm	7.5cm×9m(伸长) 1卷装(10袋)	20盒	4971032420615
42062	10cm	10cm×9m(伸长) 1卷装(10袋)	20盒	4971032420622

■ 材质：聚酯纤维100%
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)

- 使用了[Tyvek®]灭菌袋的灭菌产品。

灭菌Osaki 伸缩绷带 轻量

E.O.G. Tyvek

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
42063	TS 5cm	5cm×9m(伸长) 1卷装(10袋)	10盒	4971032420639
42064	TS 7.5cm	7.5cm×9m(伸长) 1卷装(10袋)	10盒	4971032420646
42065	TS 10cm	10cm×9m(伸长) 1卷装(10袋)	10盒	4971032420653

■ 材质：聚酯纤维100%
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)

Heart Tie / 灭菌Heart Tie



- 棉花和聚氨酯纤维混纺而成的伸缩绷带。
- 厚实且触感舒适、通气性好。
- 贴合关节等可动部位、不会妨碍活动。
- 采用便于物品管理的独立包装。
- 材料不含荧光增白剂、乳胶。

Heart Tie

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
41014	5cm	5cm×9m(伸长) 1卷装(10袋)	20盒	4971032410142
41015	7.5cm	7.5cm×9m(伸长) 1卷装(10袋)	20盒	4971032410159
41016	9cm	9cm×9m(伸长) 1卷装(10袋)	20盒	4971032410166

■材质：棉、聚氨酯纤维
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)

- 使用了[Tyvek®]灭菌袋的灭菌产品。


灭菌Heart Tie

E.O.G. Tyvek

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
41017	TS 5cm	5cm×9m(伸长) 1卷装(10袋)	10盒	4971032410173
41018	TS 7.5cm	7.5cm×9m(伸长) 1卷装(10袋)	10盒	4971032410180
41019	TS 9cm	9cm×9m(伸长) 1卷装(10袋)	10盒	4971032410197

■材质：棉、聚氨酯纤维
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)

Well Tie / 灭菌Well Tie

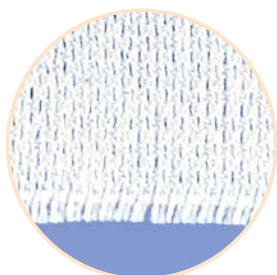

- 素材采用了棉制强捻线的弹性绷带。
- 适用于关节炎、扭伤、脱臼、骨折时固定关节和夹板。
- 适用于下肢静脉曲张或淋巴水肿等的压迫疗法或预防血栓。
- 采用便于物品管理的独立包装。
- 材料不含荧光增白剂、乳胶。

Well Tie

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
40500	2号	5cm×4.5m(伸长) 1卷装(6袋)	30盒	4971032405001
40501	3号	7.5cm×4.5m(伸长) 1卷装(6袋)	20盒	4971032405018
40502	4号	10cm×4.5m(伸长) 1卷装(6袋)	20盒	4971032405025
40503	7号	17.5cm×4.5m(伸长) 1卷装(6袋)	10盒	4971032405032

■材质：棉100%
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)

- 使用了[Tyvek®]灭菌袋的灭菌产品。


灭菌Well Tie TS

E.O.G. Tyvek

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
40505	TS2号-1	5cm×4.5m(伸长) 1卷装(10袋)	10盒	4971032405056
40506	TS3号-1	7.5cm×4.5m(伸长) 1卷装(10袋)	10盒	4971032405063
40507	TS4号-1	10cm×4.5m(伸长) 1卷装(10袋)	10盒	4971032405070
40508	TS7号-1	17.5cm×4.5m(伸长) 1卷装(10袋)	10盒	4971032405087

■材质：棉100%
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)

Osaki 弹力绷带／灭菌 Osaki 弹力绷带

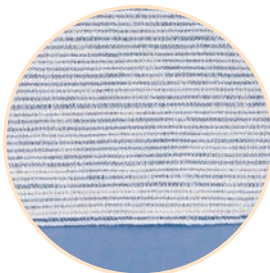

- 聚酯纤维、聚氨酯纤维和人造丝混纺而成的弹性绷带。
- 适用于关节炎、扭伤、脱臼、骨折时固定关节和夹板。
- 适用于下肢静脉曲张或淋巴水肿等的压迫疗法或预防血栓。
- 采用便于物品管理的独立包装。
- 材料不含荧光增白剂、乳胶。

Osaki 弹力绷带 4.5m

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
42090	5cm	5cm×4.5m(伸长) 1卷装(10袋)	20盒	4971032420905
42091	7.5cm	7.5cm×4.5m(伸长) 1卷装(10袋)	20盒	4971032420912
42092	10cm	10cm×4.5m(伸长) 1卷装(10袋)	20盒	4971032420929
42093	15cm	15cm×4.5m(伸长) 1卷装(10袋)	6盒	4971032420936

■ 材质：聚酯纤维、聚氨酯纤维、人造丝
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)

- 使用了[Tyvek®]灭菌袋的灭菌产品。

灭菌 Osaki 弹力绷带 4.5m



款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
42098	TS 5cm	5cm×4.5m(伸长) 1卷装(10袋)	10盒	4971032420981
42099	TS 7.5cm	7.5cm×4.5m(伸长) 1卷装(10袋)	10盒	4971032420998
42100	TS 10cm	10cm×4.5m(伸长) 1卷装(10袋)	10盒	4971032421001
42101	TS 15cm	15cm×4.5m(伸长) 1卷装(10袋)	10盒	4971032421018

■ 材质：聚酯纤维、聚氨酯纤维、人造丝
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)


- 长款弹性绷带。

Osaki 弹力绷带 9m

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
42094	5cm	5cm×9m(伸长) 1卷装(10袋)	10盒	4971032420943
42095	7.5cm	7.5cm×9m(伸长) 1卷装(10袋)	10盒	4971032420950
42096	10cm	10cm×9m(伸长) 1卷装(10袋)	10盒	4971032420967
42097	15cm	15cm×9m(伸长) 1卷装(10袋)	6盒	4971032420974

■ 材质：聚酯纤维、聚氨酯纤维、人造丝
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)

osaki 棉绷带 / 灭菌 osaki 棉绷带

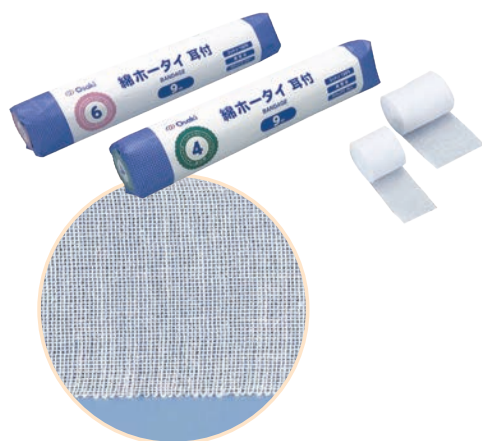

- 选用100%优质棉花的棉绷带。
- 由于为非伸缩款, 适用于固定等。
- 材料不含荧光增白剂。

● 绷带两端有不会绽开的边缘。

Osaki 棉绷带 有边缘

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
40063	3撕开	9.3cm×9m 3卷装	10根×8盒	4971032400631
40064	4撕开	7cm×9m 4卷装	10根×8盒	4971032400648
40065	5撕开	5.6cm×9m 5卷装	10根×8盒	4971032400655
40066	6撕开	4.6cm×9m 6卷装	10根×8盒	4971032400662
40067	8撕开	3.5cm×9m 8卷装	10根×8盒	4971032400679


■ 材质: 棉100%

灭菌 Osaki 棉绷带 有边缘

E.O.S.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
40068	3撕开	9.3cm×9m 1卷装(9袋)	1盒	4971032400686
40027	4撕开	7cm×9m 1卷装(12袋)	1盒	4971032400273
40028	5撕开	5.6cm×9m 1卷装(15袋)	1盒	4971032400280
40029	6撕开	4.6cm×9m 1卷装(18袋)	1盒	4971032400297
40030	8撕开	3.5cm×9m 1卷装(24袋)	1盒	4971032400303

■ 材质: 棉100%

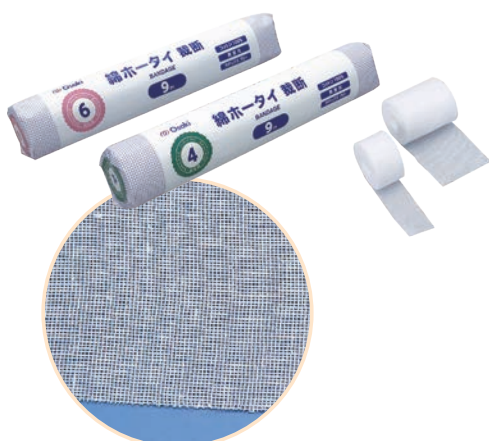

● 2端未经处理, 经济实惠的裁剪绷带。

Osaki 棉绷带 裁剪

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
40057	2撕开	14cm×9m 2卷装	10根×8盒	4971032400570
40058	3撕开	9.3cm×9m 3卷装	10根×8盒	4971032400587
40059	4撕开	7cm×9m 4卷装	10根×8盒	4971032400594
40060	5撕开	5.6cm×9m 5卷装	10根×8盒	4971032400600
40061	6撕开	4.6cm×9m 6卷装	10根×8盒	4971032400617
40062	8撕开	3.5cm×9m 8卷装	10根×8盒	4971032400624

■ 材质: 棉100%

Clean Net




- 管状、具有伸缩性的网状绷带。
- 伸缩性强、与患部的适应性高、可快速固定处理用纱布及膏药贴等。
- 可根据用途进行裁剪。

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
40600	1号	0.8 cm×25 m(伸长) 手指用 单卷装	20盒	4971032406008
40601	2号	2 cm×25 m(伸长) 手、腿、手臂(小)用 单卷装	20盒	4971032406015
40602	3号	2.5 cm×25 m(伸长) 手臂、小腿、肩部(小)用 单卷装	20盒	4971032406022
40603	4号	3.5 cm×25 m(伸长) 肩部、大腿、头部(小)用 单卷装	20盒	4971032406039
40604	5号	5 cm×25 m(伸长) 头部、胸部(小)、腹部(小)用 单卷装	10盒	4971032406046
40605	6号	7 cm×25 m(伸长) 胸部、腹部、腰部用 单卷装	10盒	4971032406053
40606	7号	7.5 cm×25 m(伸长) 胸部、腹部、头部用 单卷装	10盒	4971032406060

■ 材质: 聚酯纤维、乳胶(直接接触肌肤的部分不使用)

▲ 采用天然橡胶乳胶, 过敏者请勿使用。

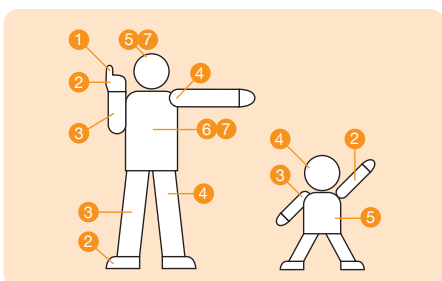



驱血、压迫胶带




- 防止血液感染的一次性驱血、压迫带。
- 使用简单,只需撕开胶带贴上即可。
- 可以重贴,所以在驱血后可用作压迫带,一物两用。
- 与以往的驱血带不同,无需消毒,节省人工。
- 胶带透明,采血后可以一边施压,一边观察止血状况。
- 包装小巧不占空间,不会妨碍采血,且便于携带。
- 能单个取出,无需担心被血液污染。

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
42031	—	最大周长 34cm 100片装	12个×8盒	4971032420318

▲若驱血胶带长时间勒得过紧,可能会造成淤血或血液浓缩,敬请注意。
▲已固定的胶带有可能脱落,请注意。
▲止血时使用止血贴或止血棉,确认止血后立即取下胶带。
▲当用作有分流管的手臂的压迫胶带时,请勿勒得过紧或长时间使用。

■使用方法

驱血时

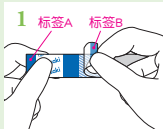

双手分别握持标签A、B,左右展开。(在中央附近会停顿一下,但请继续展开至最后。)



剥去右侧的胶带,翻转胶带使粘合部分(斜线)向下。



让胶带穿过手臂下方,右手握持标签B,将粘合部分(斜线)对准手臂中心。




使标签A靠近上臂,标签B侧胶带与标签A侧胶带交叉。适度拉扯,固定在粘合部分(斜线)。



穿刺后,左手中指及无名指按住标签A,拇指及食指剥去胶带。



采血后,左手握持标签A,进行第3和第4个步骤,粘贴时调整位置,使透明部分覆盖止血棉。(请用安全性高的剪刀剪去多余部分。)

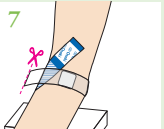

进行第3和第4个步骤,粘贴时调整位置,使透明部分覆盖止血棉。(请用安全性高的剪刀剪去多余部分。)

止血时



次氯酸钠 Cloth




- 充分含浸0.91%的次氯酸钠溶液，EPA注册※的物体专用除菌擦拭布。
- ※EPA(美国环境保护署)注册号 46781-14
- 含浸药液，省去调制的时间，同时也避免浓度的偏差。
- 符合吸收毒性和皮肤敏感性的基准。
- 在3分钟内对包括细菌芽胞在内的多种细菌及病毒有效，可作实用性用途。
- 对擦拭表面同时进行清洁和除菌。
- 含浸充足药液，能维持湿润状态3分钟。
- 在含浸药液的状态下，从制造起的12个月内，能保持适当浓度。
- 开封后浓度的下降也不显著，只要在使用期限内便能确保适当浓度，因废弃而产生的损失也较少，十分经济(需遵守保管上的注意事项)。

■推荐使用场所、使用对象(例)

推荐使用场所

- 血液污染区域
(手术室、透析室、中央采血室、急诊抢救室等)
- 特殊病原菌感染者周边区域
(被粪便污染的厕所、高频接触表面等)
- 呕吐物污染区域

使用对象(例)

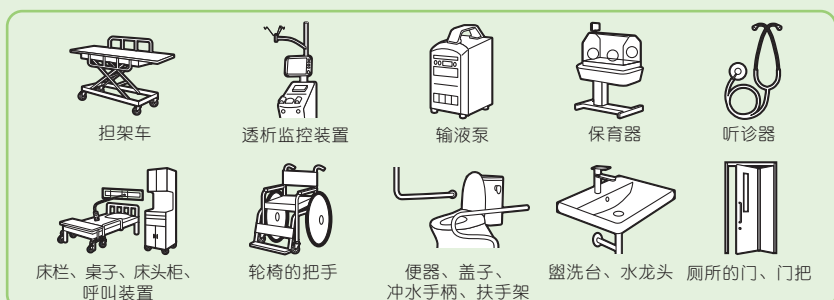

- 用于装置或器械时，请务必参阅各制造商的使用说明书。
- 根据材质、涂装的种类，可能造成表面变色或变质，使用时请先在不显眼的部分试用。

■使用方法

有肉眼可见的污垢时



从次氯酸钠Cloth中取出擦拭布
(以水平方向呈90度拉出)



用擦拭布清洁表面，去除污垢及有机物



废弃已使用的擦拭布



取出新的擦拭布

进行5

无肉眼可见的污垢时



擦拭表面擦拭表面
保持湿润状态3分钟。



废弃已使用的擦拭布。



3分钟过后，用水进行2次擦拭。

擦拭时的要点

- 为将污垢的扩散减至最少，请用适当的方法擦拭。



从右至左或从左至右 从上至下的单向

■耐性材料

＜可使用的材料＞

塑料制品
聚乙烯、聚苯乙烯、ABS树脂、丙烯、聚碳酸酯、聚甲醛、聚对苯二甲酸乙二酯、聚丙烯、聚氯乙稀
橡胶类
硅橡胶

- 根据本公司进行的耐性材料测试结果(室温，5天)。
- 丁腈手套不受本产品的使用时间影响。

＜不适用的材料＞

金属制品
铁、不锈钢、铜、铝、黄铜、锌
橡胶类
天然橡胶、丁腈橡胶、苯乙烯丙烯橡胶、丁基橡胶、氯丁橡胶、氨基甲酸酯橡胶

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
72150	—	无纺布 15cm×26cm 90片装	12个	4971032721507

■成分：0.91%次氯酸钠 其他

▲除菌指减少对象表面的细菌，而非去除所有细菌。

Alwety 除菌wipes



- 人造丝无纺布中含浸最适于除菌的浓度为80%酒精溶液的物体专用除菌擦拭布。
- 由于只含有酒精和水，擦拭后快速挥发，不会有成分残留。
- 还有既环保又经济的替换装。
- 替换装款有开封的日期记录栏，填写开封日期以便卫生管理。也可以贴上“开封日期贴纸(另售)”进行管理。
- 80块装款为手掌大小(15cm×21cm)，能胜任一般的擦拭。
- 250片装款使用大尺寸的无纺布(15cm×30cm)，适合需要大范围除菌的手术室和透析室等使用。

■替换装用 开封日期记录栏

開封日	
月	日

■开封日期贴纸(另售)



80片装

宽型 250片装

Alwety 除菌wipes

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
72129	—	15cm×21cm 80片装	20个	4971032721293
72130	替换装用	15cm×21cm 80片装	30袋	4971032721309
72131	宽型	15cm×30cm 250片装	4个	4971032721316
72132	宽型替换装用	15cm×30cm 250片装	6袋	4971032721323

■成分：酒精、水

▲除菌指减少对象表面的细菌，而非去除所有细菌。

- 用油性笔等记录开封日期的贴纸。贴纸可以剥去，替换时能贴上新的贴纸。

osaki 开封日期贴纸

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
72140	—	4cm(直径) 20片装	20袋	4971032721408

※可用于Alwety除菌Cloth和Skit Cloth。



Alwety 除菌 Cloth



■ 替换装用 开封日期记录栏

开封日	开封日
月 日	月 日

80片装 200片装、350片装

- 素材采用质地厚、柔软、浸含80%酒精的、人造丝无纺布除菌用擦拭布。
- 由于只含有酒精和水，擦拭后快速挥发，不会有成分残留。
- 替换装款有开封日期记录栏位，填写开封日期以便卫生管理。也可以贴上“开封日期贴纸(另售 参阅P78)”进行管理。
- 80片装款为手掌大小(14cm×20cm)，能胜任一般的擦拭。
- 250片装款使用大尺寸的无纺布(20cm×30cm 双折)，适合需要大范围除菌的手术室和透析室等使用。
- 350片装适合频繁使用的部门(12.5cm×30cm 双折)。



80片装

宽型 200片装

宽型S 350片装

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
T2100	—	14cm×20cm 80片装	20个	4971032721002
T2101	替换装用	14cm×20cm 80片装	20袋	4971032721019
T2102	宽型	30cm×20cm 双折 200片装	4个	4971032721026
T2103	宽型替换装用	30cm×20cm 双折 200片装	4袋	4971032721033
T2127	宽型S	30cm×12.5cm 双折 350片装	4个	4971032721279
T2128	宽型S替换装用	30cm×12.5cm 双折 350片装	4袋	4971032721286

■ 成分：酒精、水

▲ 除菌指减少对象表面的细菌，而非去除所有细菌。

Skit Cloth



■ 替换装用 开封日期记录栏

开封日
月 日

- 在网状无纺布中含浸了“EPA注册※”的除菌成分“四级铵盐”、“PHMB”和具清洁效果好的“界面活性剂”，是环境、器具用的清洁、除菌擦拭布。※美国环境保护署
- 对金属、塑料的影响及令蛋白质凝固的情况较少，适用于环境、器械的清洁和除菌。
- 替换装款有开封日期记录栏位，填写开封日期以便卫生管理。也可以贴上“开封日期贴纸(另售 参阅P78)”进行管理。
- 80片装款为手掌大小(14cm×20cm)，能胜任一般的擦拭。
- 250片装款使用大尺寸的无纺布(28cm×20cm 双折)，适合需要大范围除菌的手术室和透析室等使用。
- 350片装适合频繁使用的部门(28cm×12.5cm 双折)。



80片装

宽型 200片装

宽型S 350片装

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
T2114	—	14cm×20cm 80片装	20个	4971032721149
T2115	替换装用	14cm×20cm 80片装	20袋	4971032721156
T2116	宽型	28cm×20cm 双折 200片装	4个	4971032721163
T2117	宽型替换装用	28cm×20cm 双折 200片装	4袋	4971032721170
T2125	宽型S	28cm×12.5cm 双折 350片装	4个	4971032721255
T2126	宽型S替换装用	28cm×12.5cm 双折 350片装	4袋	4971032721262

■ 成分：纯净水、四级铵盐、PHMB、界面活性剂、pH调节剂等

▲ 除菌指减少对象表面的细菌，而非去除所有细菌。

Mouthponge

实物尺寸（塑料轴）

塑料轴：15.7cm、纸轴：15.3cm



普通号

小号




塑料轴普通号



塑料轴小号

- 口腔护理用海绵，采用特殊形状，可彻底清洁口腔。
- 前端的曲线使其能顺畅进入狭窄缝隙。
- 根据开口状态或用途，头部有2种尺寸供选择。
- 柔软可弯曲的塑料轴，能确保清洁时不会对粘膜用力过度。
- 纸轴不易出现皱褶，可操作性强，能正确清洁污垢附着的位置。
- 采用黄色海绵，易发现出血。
- 采用易于保管及携带的单独包装。

■使用方法

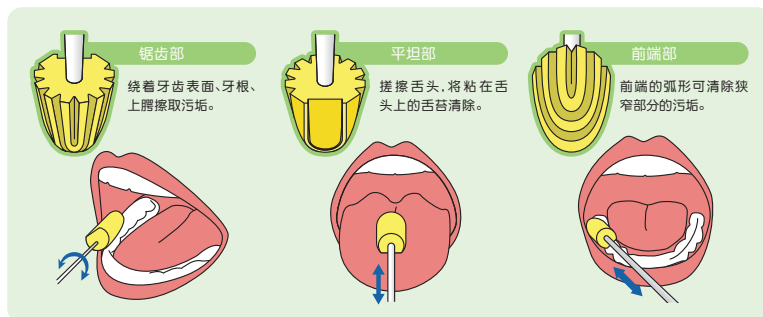


款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
74401	塑料轴普通号	海绵宽度1.7cm×15.7cm 单根装（10袋）	10个×12盒	4971032744018
74402	塑料轴普通号	海绵宽度1.7cm×15.7cm 单根装（50袋）	24盒	4971032744025
74403	塑料轴普通号	海绵宽度1.7cm×15.7cm 单根装（300袋）	4盒	4971032744032
74407	塑料轴小号	海绵宽度1.4cm×15.7cm 单根装（10袋）	10个×12盒	4971032744070
74408	塑料轴小号	海绵宽度1.4cm×15.7cm 单根装（50袋）	24盒	4971032744087
74409	塑料轴小号	海绵宽度1.4cm×15.7cm 单根装（300袋）	4盒	4971032744094
74411	普通号	海绵宽度1.7cm×15.3cm 单根装（10袋）	10个×12盒	4971032744117
74412	普通号	海绵宽度1.7cm×15.3cm 单根装（50袋）	24盒	4971032744124
74413	普通号	海绵宽度1.7cm×15.3cm 单根装（300袋）	4盒	4971032744131

■材质：[海绵]尿烷 [塑料轴]聚丙烯 [纸轴]纸



口腔棉棒

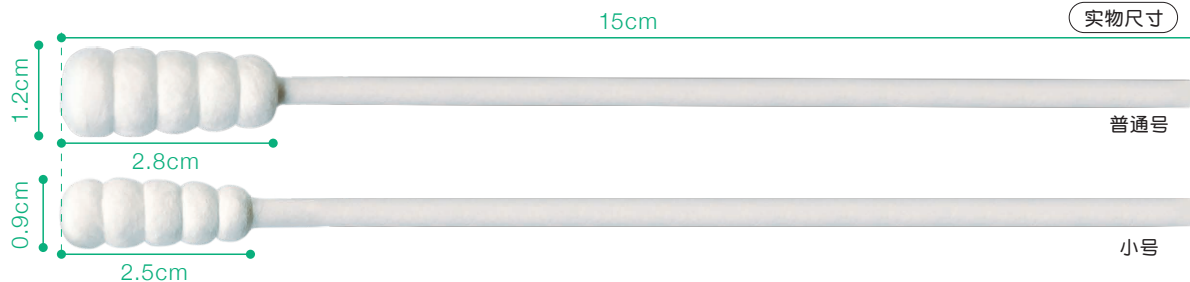

普通号




小号




- 适用于吞咽训练和口腔护理的独立包装特殊形状棉棒。
- 施加了防止泡胀或折断的加工,并采用抗湿度能力强的强化纸轴。
- 独立的包装袋上有针孔线,易于打开,准备咽部冷刺激时、将湿润的棉棒放回包装袋时都很方便。
- 小尺寸款的棉部前端只有9mm,对于张口有困难、正在插管、想要护理细微部分的患者相当便利。

■使用方法

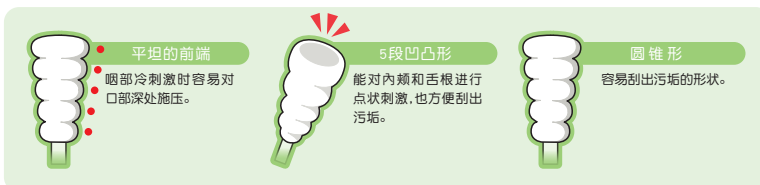

■打开方法

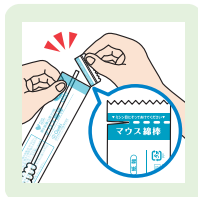

款号	种类	规格·内容量	内装数量	条形码
75060	普通号	径先端部1.2cm×15cm 单根装(10袋)	10个×12盒	4971032750606
75061	普通号	径先端部1.2cm×15cm 单根装(50袋)	24盒	4971032750613
75062	普通号	径先端部1.2cm×15cm 单根装(300袋)	8盒	4971032750620
75063	小号	径先端部0.9cm×15cm 单根装(10袋)	10个×12盒	4971032750637
75064	小号	径先端部0.9cm×15cm 单根装(50袋)	24盒	4971032750644
75065	小号	径先端部0.9cm×15cm 单根装(300袋)	8盒	4971032750651

■材质:[棉部]棉 100% [轴]纸


■口腔护理用品的区分使用

口腔护理用品	口腔护理目的		对象	使用者	特征
	口腔清洁	口腔功能恢复			
口腔护理用纸巾	○	○ 粘膜拉伸	老年人、痴呆症者	口腔卫生士/ 介护士/护士	易于擦去污垢,容易使用。对没有意识的患者也能使用。
口腔护理用棉棒	○	◎ 咽部冷刺激	吞咽障碍患者、 需介护者	言语听力师/护士	主要用于口腔功能回复训练。 也能用于涂抹啫喱。
口腔护理用海绵	○	○ 粘膜拉伸	需介护者	护士/介护士/ 言语听力师/ 口腔卫生士	主要用于口腔清洁。 具有广泛用途。
牙刷	◎	×	有牙齿者、需介护者	护士/ 口腔卫生士/ 介护士	仅限有牙齿者。

卷棉棒 / 灭菌卷棉棒



- 适用于口腔清洁擦拭及痰液清除、冰按摩等用途的一次性卷棉棒。
- 用纱布将脱脂棉部分包住，避免棉残留。
- 最适用于有气管插管时的口腔清洁擦拭或咽喉内的痰液清除。
- 棉体冷冻后，可用于吞咽困难患者的康复治疗。

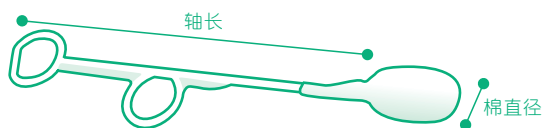

卷棉棒

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
72207	No.7	棉直径0.7cm×16cm 100根装	10盒	4971032722078
72204	No.10	棉直径 1cm×16cm 100根装	10盒	4971032722047
72206	No.15	棉直径1.5cm×16cm 100根装	10盒	4971032722061
72205	No.20	棉直径 2cm×16cm 100根装	10盒	4971032722054

灭菌卷棉棒

E.O.G.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
72219	S7-5	棉直径0.7cm×16cm 5根装(20袋)	10盒	4971032722191
72220	S10-5	棉直径 1cm×16cm 5根装(20袋)	10盒	4971032722207
72221	S15-5	棉直径1.5cm×16cm 5根装(20袋)	10盒	4971032722214
72222	S20-5	棉直径 2cm×16cm 5根装(20袋)	10盒	4971032722221


口腔纸巾



草莓

橘子

- 带让人不禁想张口的味道、香气的口腔护理湿纸巾。
- 提高口腔护理的积极性。
- 低热量，不会因使用而摄取过量的热量。
- 采用起毛少的柔软无纺布，不易弄伤口腔内部。
- 无酒精。
- 含木糖醇。

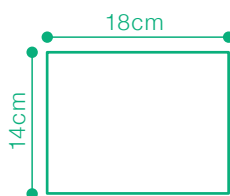

■使用方法

1

展开纸巾并搭在食指上对折。

2

再对折。

3

卷在手指上后擦拭口腔及唇部。

⚠ 请小心不要让被保护者咬伤手指。

牙刷

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
75040	草莓	14cm×18cm 60片装	24个	4971032750408
75041	橘子	14cm×18cm 60片装	24个	4971032750415

■商品名：口腔纸巾

■成分：水、PG、PEG-60氢化蓖麻油、甜菜碱、透明质酸钠、甘油、甘草酸二钾、木糖醇、糖精钠、柠檬酸、柠檬酸钠、苯甲酸钠、西吡氯铵、羟苯甲酯、羟苯乙酯、羟苯丁酯、香料

⚠ 本品不可食用，请注意不要误食本品。

⚠ 不溶于水，因此勿将本品冲进厕所，请采用卫生的方法处理。

口腔喷雾



- 能切实感到滋润的高粘度口腔保湿喷雾。
- 由于是高粘度喷雾，具有非常高的保水力。
- 含有谷氨酸钠，有助于唾液分泌。
- 由于是高粘度喷雾，不易积在喉部深处，减轻误吞的风险。
- 含有扁柏酚，能调整口腔环境。
- 能轻松一键保湿，因此无需用水也可浸泡污垢，还可不费时的保湿。

□口腔化妆品

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
74414	苏打香味	50mL装	12个×6盒	4971032744148
74415	无香料	50mL装	12个×6盒	4971032744155

■商品名：口腔喷雾
 ■成分：水、甘油（湿润剂）、PEG-240/HDI 共聚物双-癸基十四醇聚醚-20醚（增稠剂）、扁柏酚（着香剂）、甘草酸二钾、木糖醇（甜味剂）、葡萄糖基神经酰胺、甜褐色叶提取物、光果甘草根提取物、α-葡聚糖（保湿剂）、透明质酸钠、水解胶原（湿润剂）、谷氨酸钠（矫味剂）、柠檬酸钠（pH调节剂）、BG（溶剂）、苯甲酸钠（防腐剂）、香料（仅苏打香味）
 ▲本品非内服药。

Mouth Moist




- 保湿性佳、易涂抹的口腔用保湿凝胶。
- 无酒精，刺激较少。
- 盖帽为单触式，便于每天进行护理。（仅72g）
- 带清新的薄荷味。味较淡，因此使用对象广泛。


■使用方法



为了防止唇部裂开时的出血及疼痛，在嘴唇处涂抹Mouth Moist，使嘴唇湿润。上次护理残留留在口腔内的Mouth Moist可用海绵刷等清除。

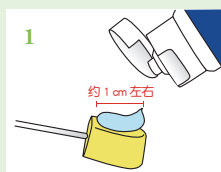

用海绵刷、口腔用棉棒、清洁的手指等取适量Mouth Moist（约1cm）。

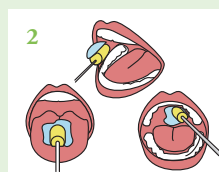

请分2~3次，涂抹在上唇、脸颊内侧、舌头等整个口腔。涂好后，多余的凝胶请用海绵刷等去除或者吐出。

□口腔化妆品

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
74406	—	3g装	100个×20袋	4971032744063
74405	—	20g装	20个×6盒	4971032744056
74404	—	72g装	12个×6盒	4971032744049

■商品名称：Mouth Moist
 ■成分：水、甘油、纤维素接甲醚、透明质酸钠、甜菜碱、乳铁传递蛋白（源自牛奶）、氯化十六烷吡啶、木糖醇、柠檬酸、柠檬酸钠、薄荷油、PEG-60氢化蓖麻油、角叉胶、BG、粘多糖、安息香酸钠

灭菌 Osaki 压舌器 / SF灭菌 Osaki 压舌器



●采用优质天然木材、个别包装的灭菌木制压舌器。

灭菌 Osaki 压舌器

一般医疗器具 压舌器: 14066000 E.O.G.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
74301	—	17mm×150mm×1.6mm 单根装(300袋)	12盒	4971032743011
74311	—	17mm×150mm×1.6mm 单根装(200袋)	18盒	4971032743110

■商品名称: 灭菌 Osaki 压舌器 ■申报编号: 23B2X10001000039

⚠ 由于是天然产物, 有可能会因运输、保管环境等因素出现断裂、损伤等。出现这些问题时请不要使用。



灭菌 Osaki 压舌器

●适用于儿童的小型压舌板。

●面向儿科的可爱包装, 可缓解儿童在检查时的不安。

SF灭菌 Osaki 压舌器

一般医疗器具 压舌器: 14066000 E.O.G.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
74307	—	14mm×140mm×1.6mm 单根装(100袋)	24盒	4971032743073

■商品名称: 灭菌 Osaki 压舌器 ■申报编号: 23B2X10001000039

⚠ 由于是天然产物, 有可能会因运输、保管环境等因素出现断裂、损伤等。出现这些问题时请不要使用。



取出方法



SF灭菌 Osaki 压舌器

舌用纱布

●脱落纤维少、使用舒适的舌头牵引用纱布。

●采用可轻松取出每片纱布的包装。

●即使经过高压蒸汽灭菌、E.O.G.灭菌, 也几乎没有品质劣化。

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
18100	—	5cm×12.5cm 双折 300片装	20盒	4971032181004







棒状毛巾



- 由于富含水分的厚湿巾无需重新折叠便能展开成手掌大小，因此能在暖和的状态下进行大范围擦拭。
- 采用了具高屏障性的薄膜进行独立包装，因此不易干燥，使用期限能保持至独立包装上的制造日起2年。
- 带制造日和使用期限的标示。
- 含有库拉索芦荟叶提取物，擦拭后滋润舒适。
- 无酒精、无香料、无色素，不含刺激皮肤的成分。
- 为了让使用者使用时心情舒畅，采用了明亮又有亲切感的包装。

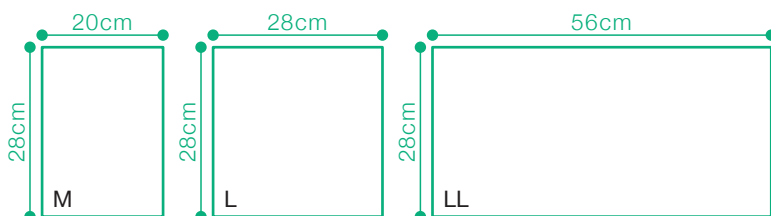

■使用方法

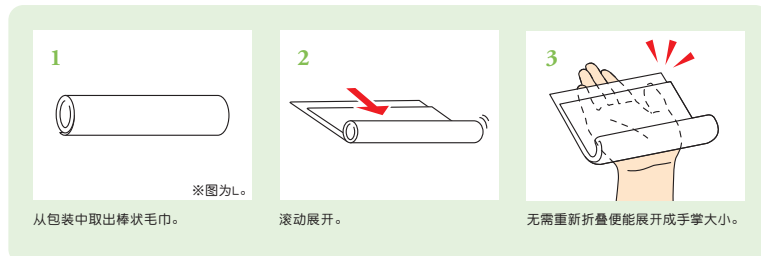


款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
74990	M	20cm×28cm 单片装(100袋)	8个	4971032749907
74991	L	28cm×28cm 单片装 (50袋)	12个	4971032749914
74992	LL	28cm×56cm 单片装 (50袋)	8个	4971032749921

■成分：水、PG、库拉索芦荟叶提取物、苯扎氯铵、碘丙炔醇丁基氨甲酸酯

身体擦拭用湿巾



- 棒状包装的身体擦拭用湿巾，柔软、牢固的无纺布配合保湿成分“糖基海藻糖”。
- 采用个别包装，可对应季节及使用目的加热或冷却后使用。
- 折叠方法适合医疗机构或设施内所用擦拭毛巾的使用方法。
- 采用安全性高的防腐剂“聚氨基双胍”。
- 药液成分为pH值4.5左右的弱酸性，对皮肤刺激性小。
- 不含酒精(乙醇)、香料。

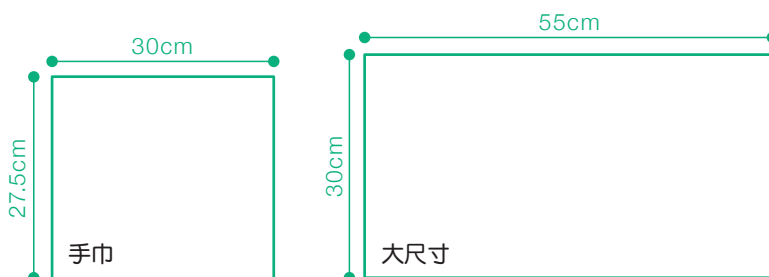

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
72001	手巾	30cm×27.5cm 单片装(30个)	12袋	4971032720012
72000	大尺寸	30cm×55cm 单片装(30个)	12袋	4971032720005

■成分：水、DPG、1,2-己二醇、辛乙二醇、糖基海藻糖、氧化淀粉水解物、聚氨基双胍、尿囊素、柠檬酸、柠檬酸钠


▲用微波炉等加热时请先开封。

▲若需加热后使用，请注意不要烫伤。

滋润肌肤的擦身巾



- 含双重保湿成分，滋润肌肤的特大擦身巾。
- 加入了双重保湿成分糖基海藻糖和LIPIDURE®※，预防造成瘙痒等原因的干燥，保持肌肤滋润。
- ※聚季铵盐-51
- 含有整肌成分柿子提取物(柿子单宁)，在擦去汗和污垢的同时，令人在意的气味也一并除去。
- 柔软不易破且尺寸特大，只需1块便能进行大范围擦拭。
- 无酒精、无香料、无色素，不含刺激皮肤的成分。
- 弱酸性，对肌肤温和。

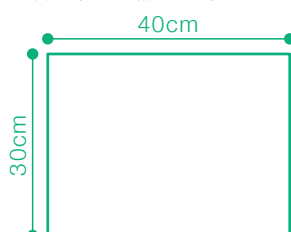

清洁济

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
72006	—	30cm×40cm 30片装	16个	4971032720067


■商品名: 滋润肌肤 擦身巾

■成分: 水、PG、甘油、糖基海藻糖、聚季铵盐-51、柿子单宁、西吡氯铵、氯化淀粉水解物、羟苯甲酯、羟苯乙酯、PEG-60氢化蓖麻油、乳酸钠、BG

橄榄油臀部湿巾



- 顽固的粪便也能清除干净，含天然橄榄油的臀部湿巾。
- 含天然橄榄油并富含水分，无需擦拭臀部也能干净去除顽固的粪便。
- 湿巾超厚，1片便可彻底擦拭，十分经济。
- 含有神经酰胺和角鲨烷2种成分，呵护受伤肌肤。
- 无酒精、无香料、无色素，不含刺激皮肤的成分。
- 弱酸性，对肌肤温和。

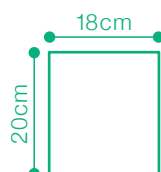

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
72005	—	18cm×20cm 60片装	24个	4971032720050


■成分: 水、PG、POE氢化蓖麻油、橄榄油、葡萄糖基神经酰胺、角鲨烷、透明质酸钠、卵磷脂、稻糠油、甘油、EDTA-2Na、对羟基苯甲酸酯、西吡氯铵

▲不溶于水，因此勿将本品冲进厕所，请采用卫生的方法处理。

溶水型清爽臀部擦拭巾



- 用后可放入厕所冲走，处理既清洁又轻松。
- 带容易开关的塑料盖，单手也能轻易取出。
- 含有LIPIDURE®，呵护受伤肌肤。
- 无酒精、无香料、无色素，不含刺激皮肤的成分。
- 弱酸性，对肌肤温和。

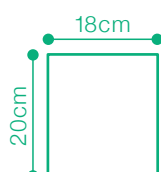

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
72002	—	18cm×20cm 80片装	24个	4971032720029

■成分: 水、BG、聚季铵盐-51、油醇聚醚-12、苯扎氯铵、柠檬酸、碘丙炔醇丁基氨甲酸酯、甘油聚醚-26、苯氧乙醇

▲为防止厕所堵塞，每次请只冲1块。

▲水流较弱的厕所可能会出现堵塞。



清洁棉A



- 方便用于皮肤清洁和擦拭的个别包装灭菌清洁棉。
- 采用铝包装,可防止水分蒸发,保持在清洁的状态下使用。
- 不含酒精、香料。
- 2片装,可根据用途分别使用。在需要一定厚度时,可将2片重叠使用。
- 适用于产前产后及生理期的处理、身体的清洁和擦拭。

■使用用途



医药部外品 A.C.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
72712	—	7.5cm×8cm 双折 2片装(25包)	20盒	4971032727127
72711	—	7.5cm×8cm 双折 2片装(70包)	12盒	4971032727110

■商品名称: 清洁棉A-b

■成分: 一般医疗器具医疗脱脂棉含杀藻胶0.01%水溶液

清洁棉L



- 方便用于皮肤清洁和擦拭的个别包装灭菌清洁棉。
- 采用铝包装,可防止水分蒸发,保持在清洁的状态下使用。
- 不含酒精、香料。
- 适用于不能入浴时的皮肤及局部的清洁、擦拭。

■使用用途




医药部外品 A.C.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
72713	—	9.5cm×13cm 双折 单片装(20包)	20盒	4971032727134

■商品名称: 清洁棉L-b

■成分: 一般医疗器具医疗脱脂棉含杀藻胶0.01%水溶液

实物尺寸

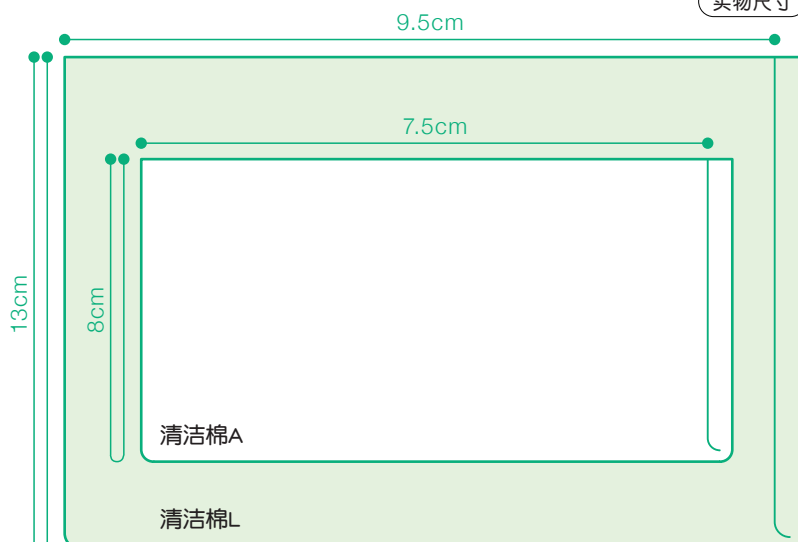

眼部清洁棉



2片装



点字标记



双袋款 单片装



单片装

- 方便的个别包装无菌清洁棉，可作为眼科用擦拭棉。
- 采用从4个方向均可开封的单独包装。此外，包装上标有可清洁取出脱脂棉的位置。
- 采用铝包装，可防止水分蒸发，保持了在清洁状态下使用。
- 不含有酒精、香料。
- 包装颜色对比鲜明，采用患白内障或弱视患者也可在购买时轻松辨认的通用设计。此外，为了照顾有视觉障碍的患者，每包2片装的16包款和双袋款的包装顶部上都有点字。

■使用用途



- 2片装，可分别擦拭左右双眼。
- 100包款可通过切缝从盒子上方取出，因此在处理室等昏暗处也可轻易取出。

眼部清洁棉 2片装

医药部外品 A.C.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
72708	—	3.75cm×8cm 双折 2片装 (16包)	10个×6盒	4971032727080
72707	—	3.75cm×8cm 双折 2片装(100包)	12盒	4971032727073

■商品名称：眼部清洁棉A2
■成分：一般医疗器具医疗脱脂棉含洗必泰葡萄糖酸盐0.02%水溶液

- 每包只有1块脱脂棉，在点眼前后各使用1片，确保卫生。

眼部清洁棉 双袋款 单片装

医药部外品 A.C.

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
72007	—	3.7cm×8cm 双折 单片装(32包)	10个×8盒	4971032720074

■商品名称：眼部清洁棉TP1
■成分：一般医疗器具医疗脱脂棉含洗必泰葡萄糖酸盐0.02%水溶液


- 采用较厚的脱脂棉，可有效擦拭污垢的大尺寸单片装。

眼部清洁棉 单片装

医药部外品 A.C.


款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
00114	—	6cm×7.5cm 双折 单片装(16包)	10个×6盒	4971032001142

■商品名称：眼部清洁棉
■成分：一般医疗器具医疗脱脂棉含洗必泰葡萄糖酸盐0.02%水溶液

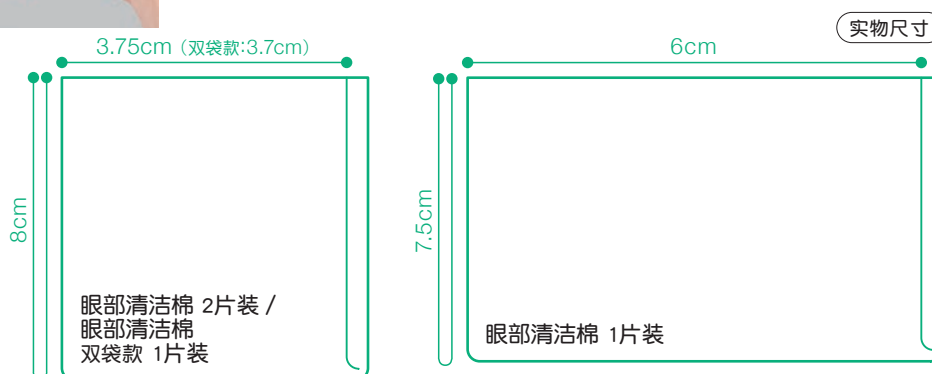



Clean Patch

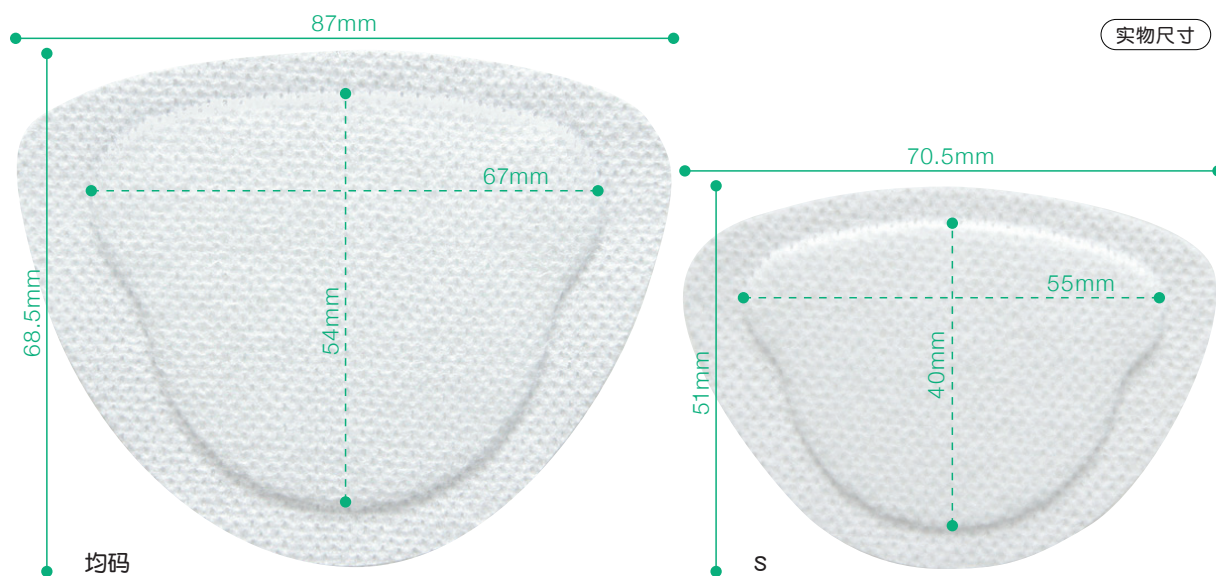

- 可简单遮蔽的遮光型粘贴式眼带。
- 采用柔软的无纺布，对皮肤的适应性优异。
- 贴纸部分采用低刺激性的丙烯酸系粘合剂。
- 采用可盖住眉毛的大尺寸垫，剥离时也不会有疼痛感。
- 100片装可通过切缝从盒子上方取出，因此在处理室等昏暗处也可轻易取出。
- 单独包装上简单易懂地记载了使用方法和注意事项，既便于清洁保管，也方便发给患者。
- 可节省制作检查用纱布及脱脂棉制作等作业。
- 贴上带可爱卡通贴纸的Clean Patch，愉快地进行训练(仅12包款)。

■使用用途



张贴前请把眼部周围清洁干净。



张贴时，请把垫子盖住眼睛和眉毛。



张贴时尽量避免起褶。



■年龄


尺寸	年龄
均码	3岁~成年人
S	1岁~3岁

■人物贴纸 (仅 12 包款)



款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
73307	均码	贴纸部: 87mm×68.5mm 垫部: 67mm×54mm 单片装(100包)	12盒	4971032733074
73305	均码	贴纸部: 87mm×68.5mm 垫部: 67mm×54mm 单片装(12包) 试用眼部清洁棉 2片装(2包)	10个×8盒	4971032733050
73306	S	贴纸部: 70.5mm×51mm 垫部: 55mm×40mm 单片装(100包)	12盒	4971032733067
73304	S	贴纸部: 70.5mm×51mm 垫部: 55mm×40mm 单片装(12包) 试用眼部清洁棉 2片装(2包)	10个×8盒	4971032733043

Osaki 丁腈手套

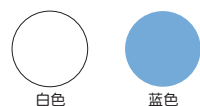

白色

蓝色

- 具高伸缩性和贴合感的无粉末丁腈手套。
- 施以防滑加工,方便作业。
- 不含乳胶,乳胶过敏者也可以放心使用。
- 有白色和蓝色,可根据用途和使用部门区分使用。

丁腈手套 白色

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
70103	SS	掌宽 7.5cm×24cm 200片装	10盒	4971032701035
70104	S	掌宽 8.5cm×24cm 200片装	10盒	4971032701042
70105	M	掌宽 9.5cm×24cm 200片装	10盒	4971032701059
70106	L	掌宽 10.5cm×24cm 200片装	10盒	4971032701066

■材质:合成橡胶(丁腈橡胶)
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)

⚠ 请勿用于食品加工。

丁腈手套 蓝色

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
70111	SS	掌宽 7.5cm×24cm 200片装	10盒	4971032701110
70112	S	掌宽 8.5cm×24cm 200片装	10盒	4971032701127
70113	M	掌宽 9.5cm×24cm 200片装	10盒	4971032701134
70114	L	掌宽 10.5cm×24cm 200片装	10盒	4971032701141

■材质:合成橡胶(丁腈橡胶)
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)

⚠ 请勿用于食品加工。

Osaki塑料手套 PF



- 使用范围广的无粉末塑料手套。
- 不含乳胶,乳胶过敏者也可以放心使用。
- 左右手兼用,单手使用也没有问题,十分经济。

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
70000	S	掌宽 8.5cm×24cm 100片装	20盒	4971032700007
70001	M	掌宽 9.5cm×24cm 100片装	20盒	4971032700014
70002	L	掌宽 10.5cm×24cm 100片装	20盒	4971032700021
70010	LL	掌宽 11.5cm×24cm 100片装	20盒	4971032700106

■材质:氯乙烯、塑化剂
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)



PH 塑料手套 软质



- 具高伸缩性和贴合感的一次性塑料手套。
- 薄且柔软，指尖也很贴合，适用于需要进行细致作业的介护和看护。
- 不含乳胶，乳胶过敏者也可以放心使用。
- 无粉末，粉末过敏者也可以放心使用。
- 左右手兼用，单手使用也没有问题，十分经济。

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
70006	SS	掌宽 7.5cm×24cm100片装	20盒	4971032700069
70007	S	掌宽 8.5cm×24cm100片装	20盒	4971032700076
70008	M	掌宽 9.5cm×24cm100片装	20盒	4971032700083
70009	L	掌宽 10.5cm×24cm100片装	20盒	4971032700090

■材质：氯乙烯、塑化剂
※不含乳胶（不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质）

Milky Fit手套



- 具高伸缩性和贴合感，可以用于换尿布和清洁身体等多个用途的一次性乙烯基手套。
- 左右手兼用，单手使用也没有问题，十分经济。
- 不含乳胶，乳胶过敏者也可以放心使用。
- 无粉末，粉末过敏者也可以放心使用。
- 符合食品卫生法，可用于食品加工。
- 将包装底部的针孔线塞向内侧，在所余无几时易于取出。

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
70204	S	掌宽10.2cm×28cm 200片装	20盒	4971032702049
70205	M	掌宽10.5cm×28cm 200片装	20盒	4971032702056
70206	L	掌宽11.5cm×28cm 200片装	20盒	4971032702063

■材质：聚烯烃树脂
※不含乳胶（不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质）

■一次性手套戴脱方法

戴法



戴时请抓住腕口部。

Milky Fit Glove时



戴时请抓住腕口部，并拉向指根部。

脱法



抓住单侧手套的腕口（外侧）。



将手套的里外翻转脱掉。



握住脱掉的手套，将已脱掉手套的手插进另一只手套的腕口。



将手套的里外翻转脱掉。



请将脱掉的2只手套形成一团后立即废弃。

小型夹板




- 应对MRI检查的幼儿点滴固定用夹板。
- 未使用金属,在MRI检查时无需更换夹板也可获得清晰的图片。
- 其中一面(表面)使用高弹性发泡氨基甲酸酯聚氨酯,具有分散体压的效果,可预防医疗设备造成的压迫创伤。
- 设计轻薄,即使长时间使用也很舒适。在用绷带等进行固定时也不会显得累赘。
- 采用柔软的发泡聚氨酯,使用时对儿童的肌肤造成的负担非常轻微。
- 芯材采用特殊塑料制成,即使弯折也不会断裂,十分安全。

款号	种类	规格·内容量	内装数量	条形码
72610	208	2cm×8cm×0.8cm 2.2g (10个装)	40袋	4971032726106
72626	310	3cm×10cm×1.1cm 6.8g (10个装)	28袋	4971032726267
72627	414	4cm×14cm×1.1cm 14.0g (10个装)	14袋	4971032726274
72628	519	5cm×19cm×1.2cm 32.5g (10个装)	10袋	4971032726281
72629	625	6cm×25cm×1.1cm 45.8g (10个装)	6袋	4971032726298

■材质:〈208〉[主体、芯]聚乙烯100% [软垫部分]发泡聚乙烯
 〈310、414、519、625〉[主体、芯]聚乙烯100% [垫片部分]聚乙烯泡沫、发泡聚氨酯

小型夹板套

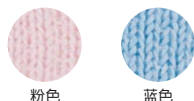

粉色

蓝色

- 应对MRI检查的点滴固定用夹板专用外壳。
- 使用的棉料经水洗加工,吸汗性强,不会感到闷热,对肌肤温和。
- 套上夹板套包住夹板,防止误食。
- 夹板和夹板套一起使用,能提升体压分散效果。
- 不含乳胶,乳胶过敏者也可以放心使用。
- 一次性产品,可1人使用1片,清洁卫生。

款号	种类	规格·内容量	内装数量	条形码
72612	208 粉色	2.4cm×9cm 1.3g (10片装)	15袋×10盒	4971032726120
72613	208 蓝色	2.4cm×9cm 1.3g (10片装)	15袋×10盒	4971032726137
72614	310 粉色	3.6cm×12.5cm 2.7g (10片装)	15袋×10盒	4971032726144
72615	310 蓝色	3.6cm×12.5cm 2.7g (10片装)	15袋×10盒	4971032726151
72616	414 粉色	4.4cm×17cm 4.4g (10片装)	10袋×10盒	4971032726168
72617	414 蓝色	4.4cm×17cm 4.4g (10片装)	10袋×10盒	4971032726175
72618	519 粉色	5.4cm×22cm 6.5g (10片装)	10袋×10盒	4971032726182
72619	519 蓝色	5.4cm×22cm 6.5g (10片装)	10袋×10盒	4971032726199
72620	625 粉色	6.6cm×28cm 10.2g (10片装)	10袋×10盒	4971032726205
72621	625 蓝色	6.6cm×28cm 10.2g (10片装)	10袋×10盒	4971032726212

■材质:棉、氨纶
 ※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)

■小型夹板套 对应一览表

种类	小型夹板	小型夹板套	
	款号	款号	颜色
208	72610	72612	粉色
		72613	蓝色
310	72626	72614	粉色
		72615	蓝色
414	72627	72616	粉色
		72617	蓝色
519	72628	72618	粉色
		72619	蓝色
625	72629	72620	粉色
		72621	蓝色




OP腹带



●将3片优质漂白棉合并在一起的术后用腹带。

均码 : 125cm
S : 90cm
L : 150cm

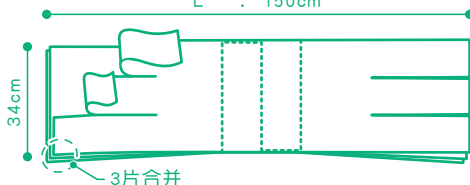

■适合尺寸

种类	腰围
均码	60cm~ 90cm
S	46cm~ 60cm
L	85cm~110cm

款号	种类	规格·内容量	内装数量	条形码
00030	均码	34cm×125cm 3枚合并 单件装	20袋×4盒	4971032000305
70900	S	34cm×90cm 3枚合并 单件装	—	4971032709000
61003	L	34cm×150cm 3枚合并 单件装	16袋×4盒	4971032610030



■材质: 棉100%

裁剪腹带



●将臀部处裁剪掉的术后用腹带。

●可防止腹带被排泄物弄脏。

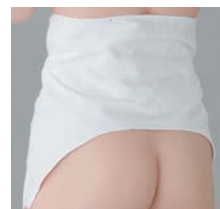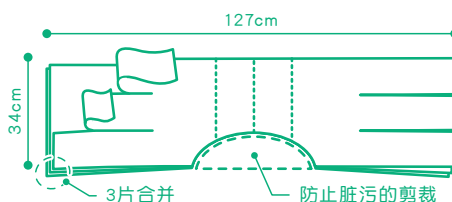

■适合尺寸

腰围
60cm~90cm

款号	种类	规格·内容量	内装数量	条形码
00007	均码	34cm×127cm 3枚合并 单件装	20袋×10盒	4971032000077

■材质: 棉100%

简易腹带



●它是一种用一触式胶带就能轻松穿脱的松紧带, 手术后被子部分轻轻保护患处。

●裁掉了臀部面料并采用立体剪裁, 因此贴合腹部的凹凸曲线。

●可作为产前、产后的腹带使用。



■适合尺寸

种类	腰围
S	50cm~ 65cm
M	65cm~ 85cm
L	85cm~110cm
LL	110cm~125cm


款号	种类	规格·内容量	内装数量	条形码
70936	S	26cm×85cm 单件装	10个×6袋	4971032709369
70937	M	30cm×100cm 单件装	10个×6袋	4971032709376
70938	L	30cm×112cm 单件装	10个×6袋	4971032709383
70939	LL	30cm×130cm 单件装	10个×6袋	4971032709390

■材质: [主体]棉100% [棉絮]涤纶100% [弹力面料]棉95%、氨纶5%
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)

Nouvelle



- 它是一种用一触式胶带就能轻松穿脱的松紧带，手术后缝合部分轻轻保护患处。
- 裁掉了臀部的面料并采用立体剪裁，因此贴合腹部的凹凸曲线。
- 可作为产前、产后的腹带使用。
- 底面也标有号码，无需按号码分开保管，即使平放也一目了然。

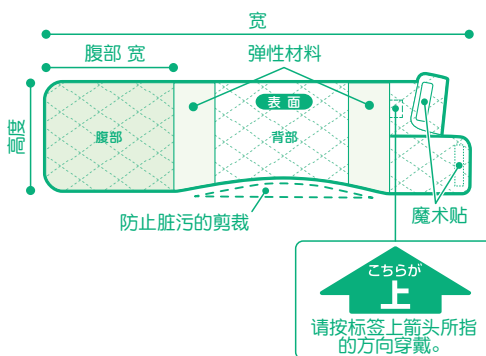

■堆叠图像



■适合尺寸

种类	腰围
S	50cm～ 65cm
M	65cm～ 85cm
L	85cm～ 110cm
LL	110cm～ 125cm


款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
00021	S	26cm× 85cm 单件装	10个×10袋	4971032000213
00020	M	30cm× 100cm 单件装	10个×10袋	4971032000206
00019	L	30cm× 115cm 单件装	10个×10袋	4971032000190
00049	LL	30cm× 130cm 单件装	10个×10袋	4971032000497

■材质：[主体]棉100% [棉絮]涤纶100% [弹力面料]棉95%、氨纶5%
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)

Bellina



- 采用魔术贴设计，简单穿戴的伸缩性腹带。
- 腹部的缝合部分温柔保护术后的患处。
- 接触肌肤的面料为棉100%，温和吸汗，穿着舒适。
- 可作为产前、产后的腹带使用。

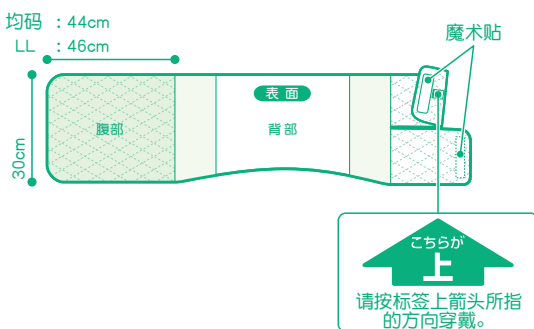

■适合尺寸

种类	腰围
均码	55cm～105cm
LL	76cm～128cm

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
00046	均码	30cm× 100cm 单件装	10个×10袋	4971032000466
00047	LL	30cm× 122cm 单件装	10个×10袋	4971032000473


■材质：[主体]棉100% [棉絮]涤纶100%
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)



Osaki胸带



- 附粘带扣的胸带,采用优质漂白棉制成。
- 肩部、肋部两处有粘带扣。
- 穿脱简便,适用于胸部手术后的患部保护及手术后的处理。
- 左右两侧均可使用。

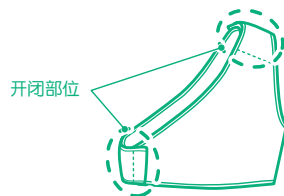

■适合尺寸

腰围
80cm~96cm


款号	种类	规格·内容量	内装数量	条形码
71100	1号	48cm×120cm 单件装	50袋	4971032711003

■材质:棉100%

Osaki伸缩胸带



- 附粘带扣的保护胸带,具有优质伸缩性。
- No.1是肩膀和腋下两部分, No.2是腋下部分附粘带扣。
- 吸湿性、透气性好,穿着舒适。
- 左右两侧均可使用。

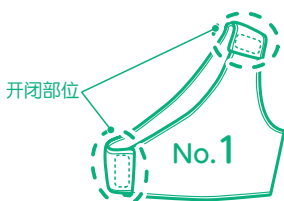

款号	种类	规格(适合尺寸)·内容量	内装数量	条形码
00069	No.1 M	下胸围 65cm~ 82cm 单件装	10个×12袋	4971032000695
00068	No.1 L	下胸围 80cm~ 92cm 单件装	10个×12袋	4971032000688
00067	No.1 LL	下胸围 90cm~105cm 单件装	10个×12袋	4971032000671
90004	No.2 M	下胸围 65cm~ 82cm 单件装	10个×12袋	4971032900049
90005	No.2 L	下胸围 80cm~ 92cm 单件装	10个×12袋	4971032900056
90006	No.2 LL	下胸围 90cm~105cm 单件装	10个×12袋	4971032900063


■材质:[主体]棉95%, 聚氨酯5%

※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)

Soft Breath Tie



- 舒适女性用胸带，乳癌手术后或放射线治疗期间，单手便可轻松脱穿。
- 两肩与正面采用粘带扣或按扣，单手便可轻松开闭，穿脱非常便利。
- 使用吸水性与伸缩性良好的弹力棉材质，可与身体完美贴合，亲肤舒适。
- 背部为平滑设计，睡觉时也可舒适穿着。
- 胸贴袋设计，外出时可将胸贴或胸垫等放入，安全放心。(本品不包含胸贴。)
- 未使用金属部件，在放射线治疗期间可作为病患服穿着。

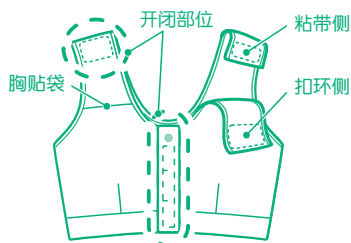


款号	种类	规格(适合尺寸)・内容量	内装数量	条形码
71202	M 咖啡色	上胸围 75cm~ 85cm 下胸围 65cm~ 75cm 单件装	10个×12袋	4971032712024
71203	L 咖啡色	上胸围 85cm~ 95cm 下胸围 75cm~ 85cm 单件装	10个×12袋	4971032712031
71204	LL 咖啡色	上胸围 95cm~105cm 下胸围 85cm~ 95cm 单件装	10个×12袋	4971032712048

■材质：[主体]棉95%，聚氨酯5% [按扣]塑料
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)

osaki T字带



- 采用优质漂白棉布的T字带。
- 2号款有聚乙烯防水布层。
- 面料为棉100%，温和吸汗，穿着舒适。

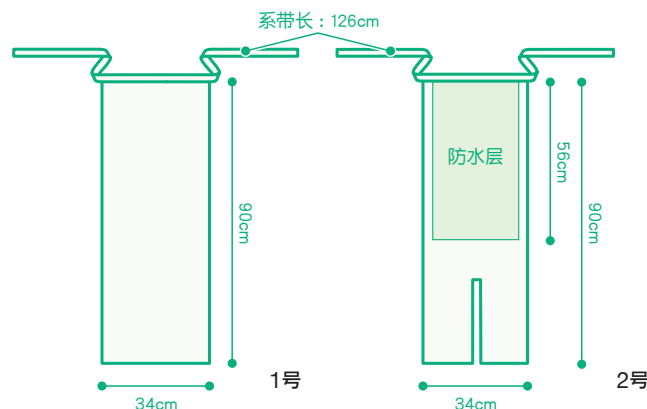

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
00037	1号	34cm×90cm 系带长126cm 单件装	50袋×6盒	4971032000374
00038	2号	34cm×90cm 系带长126cm 带聚乙烯防水布层 单件装	50袋×6盒	4971032000381


■材质：棉100%



DespoT字带



- 使手术后及分娩前后的诊察简单轻松的一次性T字带(患痔疮者请同时使用垫片)。
- 3种尺寸,可按用途和使用部位区分使用。

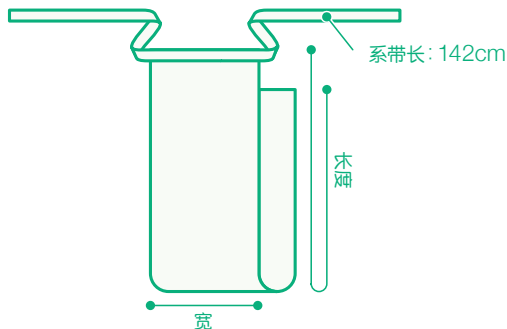


款号	种类	规格·内容量	内装数量	条形码
71302	小	17cm×97.5cm 系带长142cm 单件装	500袋	4971032713021
71300	中	22cm×97.5cm 系带长142cm 单件装	500袋	4971032713007
71303	大	25cm×97.5cm 系带长142cm 单件装	500袋	4971032713038

■材质:[主体]聚丙烯100% [带]棉100%

简易T字带



- 手术后及分娩前后的诊察简单轻松,穿脱简单,是一款可三方向开合的无纺布一次性T字带。
- 使用魔术贴,可简单调整尺寸,适于各种尺寸、不同性别的人使用。
- 左右的魔术贴粘合面积大,可紧密贴合腹部。
- 窝边设于外侧,防止接触肌肤,穿戴舒适。

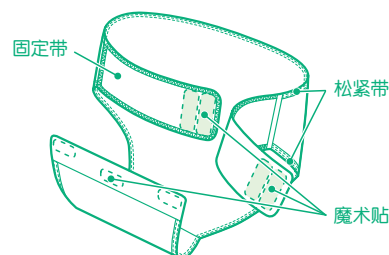


款号	种类	规格(适合尺寸)·内容量	内装数量	条形码
75011	普通号	臀围 95cm~115cm 单件装	30个×8盒	4971032750118
75012	小号	臀围 82cm~ 95cm 单件装	30个×8盒	4971032750125

■材质:[主体]聚酯纤维100% [带]尼龙100% [松紧带] 聚酯78%, 聚氨酯22%
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)

Neo Holder



- 可三方向开合的弹力T字带,最适于手术和分娩前后用做内裤。
- 可三方向开合并带有魔术贴,适用于手术和分娩前后的诊察及更换垫片和尿布。
- 使用弹力面料,不易勒进肌肤或对腹部产生压迫感。密切贴合身体,防止垫片和尿布偏移。

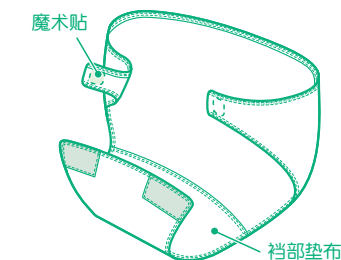

款号	种类	规格(适合尺寸)·内容量	内装数量	条形码
00015	均码	臀围 80cm~105cm 单件装	50袋	4971032000152

■材质:[主体]聚酯纤维100% [裆部垫布]棉100%
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)

贴身内裤



- 用途多样的平角裤形高弹内裤。
- 高弹力,可密切贴合身体却又不过分勒紧,穿着舒适。
- 平角裤形,可完全包裹臀部,即使使用垫片也能切实固定。
- 透气性好,舒适而不会感到闷热。
- 适于各种尺寸和不同性别的人使用。


款号	种类	规格(适合尺寸)・内容量	内装数量	条形码
71600	普通号	臀围 85cm~120cm 单件装	20个×18袋	4971032716008
71601	小号	臀围 70cm~100cm 单件装	20个×18袋	4971032716015

■材质: 聚酯纤维90%、聚氨酯10%
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)

osaki 三角巾



- 采用优质漂白棉的三角巾。
- 可在骨折时吊住胳膊等,用于身体任意部位的受伤。

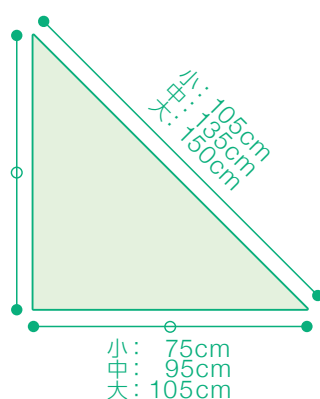

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
31201	小	75cm× 75cm× 105cm 单片装	10个×20袋	4971032312019
31200	中	95cm× 95cm× 135cm 单片装	10个×10袋	4971032312002
00031	大	105cm× 105cm× 150cm 单片装	10个×30袋	4971032000312

■材质: 棉100%

osaki 棉绒布



- 可作为涂药布或膏药贴等的基布使用的棉绒布。
- 采用较厚的斜纹面料和单面起毛的法兰绒面料。
- 可根据用途进行裁剪。


款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
70701	50cm	38cm× 50cm 单片装	20袋×25包	4971032707013
70700	3m	38cm× 3m 单根装	10根×10包	4971032707006



胸部X光检查时的防跌固定带



- 可在进行胸部X光摄影时对腰部和臀部提供支撑。
- 通过2条支撑带支撑腰部和臀部,即使对站立感到不安的人也可安心摄影。
- 使用魔术贴,可简单粘到设备和身体上,也可简单取下。
- 不使用时可以用魔术贴粘合起来,防止粘到地板上弄脏。

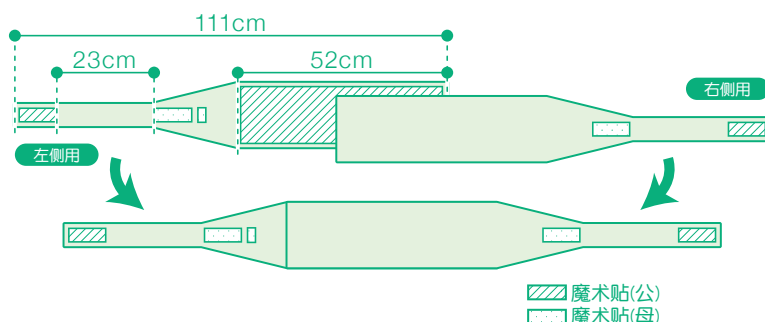


款号	种类	规格(适合尺寸)・内容量	内装数量	条形码
★ 73053	绿色	腰围 ~120cm 2条1组	1袋	4971032730530
★ 73060	蓝色	腰围 ~120cm 2条1组	1袋	4971032730608

■材质:棉100%

★属订购商品,需要一定的交货期。

- ▲要他人帮助才能维持短时间站立的人请勿使用。
- ▲使用时请将魔术贴贴好。如果魔术贴没有完全贴好,使用时可能无法获得足够的强度。
- ▲反复使用可能导致魔术贴强度降低。使用前请务必确认固定带是否已安装好。
- ▲以液温40℃为限度,可普通机洗。
- ▲适用腰围因设备而异。


床侧袋 I

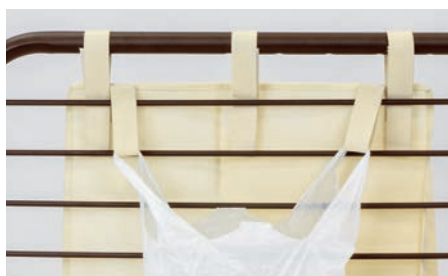

背面 垃圾袋用魔术贴



- 可防止因跌倒及掉落而受伤的床周小物件收纳袋。
- 可将小物件集中收纳在身边,防止因取东西时姿势过于勉强而导致跌倒、掉落以及被夹在床架间等。
- 将小物件收纳整齐,防止因踩踏而导致破损或受伤。
- 可用于收纳眼镜、带盖的饮料容器、书写用具及平板电脑等各种尺寸的小物件。
- 是仅为住院期间使用而设计的一次性商品,经济实惠。
- 可通过3个魔术贴简单安装。
- 可简单地通过背面的2个魔术贴固定垃圾袋,从而保持床周清洁。

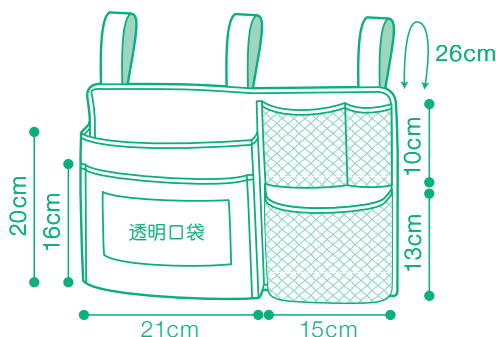

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
75130	乳白色	单片装	10个×12袋	4971032751306

■材质:[主体]聚丙烯 [网眼部分]聚酯纤维 [透明薄膜]聚乙烯



防滑手杖



- 可在容易打滑的路面和地板上安心使用的步行辅助手杖。
- 前端橡胶采用特殊沟痕设计,不易打滑。
- 前端橡胶中没有混合其他材料,不易对地板等造成损伤。
- 手杖主体表面采用阳极处理※,结实耐用。
※表面采用阳极氧化膜处理。人工在金属铝的表面形成厚厚的氧化铝膜,以提升其耐腐蚀性和耐磨耗性。
- 采用铝质材料,轻量便携,长时间使用也不易疲劳。
- 满足产品安全协会认定的SG标志产品标准。



防滑手杖 伸缩2段式

款号	种类	规格·内容量	内装数量	条形码
75080	褐色	适用身高 135cm~189cm 单根装	30袋	4971032750804
75081	黑色	适用身高 135cm~189cm 单根装	30袋	4971032750811
75082	银色	适用身高 135cm~189cm 单根装	30袋	4971032750828
75083	粉红色	适用身高 135cm~189cm 单根装	30袋	4971032750835
75084	黑色圆点图案	适用身高 135cm~189cm 单根装	30袋	4971032750842
75085	紫色花图案	适用身高 135cm~189cm 单根装	30袋	4971032750859
75086	红色花图案	适用身高 135cm~189cm 单根装	30袋	4971032750866
75087	白色花图案	适用身高 135cm~189cm 单根装	30袋	4971032750873
75088	粉红色花图案	适用身高 135cm~189cm 单根装	30袋	4971032750880
75089	深蓝色花图案	适用身高 135cm~189cm 单根装	30袋	4971032750897
75090	褐色木纹图案	适用身高 135cm~189cm 单根装	30袋	4971032750903

■材质:[主体]铝合金[手柄(2种)]:(无图案)聚丙烯 (有图案)木制[手带]聚丙烯
[前端橡胶]合成橡胶(丁腈橡胶)

- 设计紧凑,携带方便的伸缩折叠式。



防滑手杖 伸缩折叠式

款号	种类	规格·内容量	内装数量	条形码
75091	褐色	适用身高 146cm~170cm 单根装	50袋	4971032750910
75092	黑色	适用身高 146cm~170cm 单根装	50袋	4971032750927
75093	紫色格子图案	适用身高 146cm~170cm 单根装	50袋	4971032750934
75094	黑色格子图案	适用身高 146cm~170cm 单根装	50袋	4971032750941
75095	深蓝色花	适用身高 146cm~170cm 单根装	50袋	4971032750958
75096	紫色花	适用身高 146cm~170cm 单根装	50袋	4971032750965

■材质:[主体]铝合金[手柄(2种)]:(无图案)聚丙烯 (有图案)木制[手带]聚丙烯
[前端橡胶]合成橡胶(丁腈橡胶)

- 最适合用于店头的商品陈列。

步行辅助手杖用 木制陈列用具

款号	种类	规格·内容量	内装数量	条形码
75097	—	42cm×72cm×28cm 1个 可容纳17根手杖	—	4971032750972

- 前端橡胶可更换。

防滑手杖 前端橡胶

款号	种类	规格·内容量	内装数量	条形码
75098	黑色	适用手杖直径16mm~17.5mm 1个装	—	4971032750989

■材质:合成橡胶(丁腈橡胶)



木制陈列用具

伸缩2段式

伸缩折叠式


前端橡胶为特殊沟痕形状设计



安心·安全



PH 一触式内衣

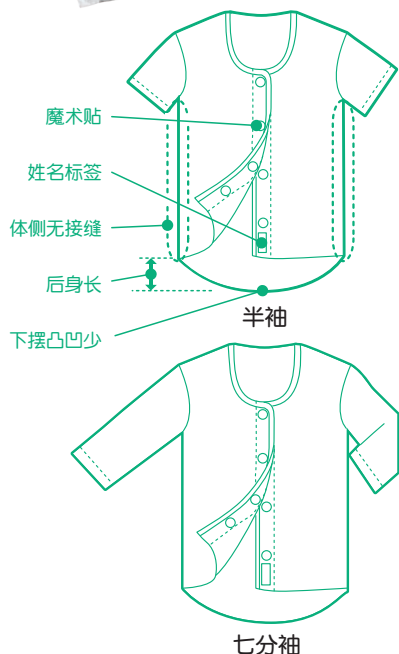

- 男士内衣纽扣在右边,女士内衣纽扣在左边。
(图示为女士内衣。)
- 白色设有5个魔术贴,灰色和粉红条纹设有4个魔术贴。
- 灰色为男士用,粉红条纹为女士用。



白色



灰色



粉红条纹

- 前开款一触式内衣,穿脱简单。
- 使用魔术贴,开合省力轻松。
- 后身设计得较长,身体前倾或坐下时不会露出后背。
- 侧面没有接缝,因此伸缩性好,不刺激肌肤。下摆采用凸凹较少的缝制方法,可减轻对肌肤的刺激。
- 附有可填写姓名的标签,在万一住院的情况下也不会与其他患者的内衣混淆。
- 采用柔软的短毛绒魔术贴,不但对皮肤温和,还不易粘上异物。
- 从底面也可识别袖长、号码和颜色,因此无需按规格分开保管,即使平放也一目了然。

PH 一触式内衣 前开襟 男士

款号	种类	规格(适合尺寸)・内容量	内装数量	条形码
74790	半袖 S 白色	胸围 80cm~ 88cm 单件装	10袋×6盒	4971032747903
74791	半袖 M 白色	胸围 88cm~ 96cm 单件装	10袋×6盒	4971032747910
74792	半袖 L 白色	胸围 96cm~104cm 单件装	10袋×6盒	4971032747927
74793	半袖 LL 白色	胸围 104cm~112cm 单件装	10袋×6盒	4971032747934
74794	7分袖 S 白色	胸围 80cm~ 88cm 单件装	10袋×6盒	4971032747941
74795	7分袖 M 白色	胸围 88cm~ 96cm 单件装	10袋×6盒	4971032747958
74796	7分袖 L 白色	胸围 96cm~104cm 单件装	10袋×6盒	4971032747965
74797	7分袖 LL 白色	胸围 104cm~112cm 单件装	10袋×6盒	4971032747972
74806	半袖 S 灰色	胸围 80cm~ 88cm 单件装	10袋×6盒	4971032748061
74807	半袖 M 灰色	胸围 88cm~ 96cm 单件装	10袋×6盒	4971032748078
74808	半袖 L 灰色	胸围 96cm~104cm 单件装	10袋×6盒	4971032748085
74809	半袖 LL 灰色	胸围 104cm~112cm 单件装	10袋×6盒	4971032748092
74810	7分袖 S 灰色	胸围 80cm~ 88cm 单件装	10袋×6盒	4971032748108
74811	7分袖 M 灰色	胸围 88cm~ 96cm 单件装	10袋×6盒	4971032748115
74812	7分袖 L 灰色	胸围 96cm~104cm 单件装	10袋×6盒	4971032748122
74813	7分袖 LL 灰色	胸围 104cm~112cm 单件装	10袋×6盒	4971032748139

■ 材质:棉100%
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)

PH 一触式内衣 前开襟 女士

款号	种类	规格(适合尺寸)・内容量	内装数量	条形码
74798	半袖 S 白色	胸围 72cm~ 80cm 单件装	10袋×6盒	4971032747989
74799	半袖 M 白色	胸围 79cm~ 87cm 单件装	10袋×6盒	4971032747996
74800	半袖 L 白色	胸围 86cm~ 94cm 单件装	10袋×6盒	4971032748009
74801	半袖 LL 白色	胸围 93cm~101cm 单件装	10袋×6盒	4971032748016
74802	7分袖 S 白色	胸围 72cm~ 80cm 单件装	10袋×6盒	4971032748023
74803	7分袖 M 白色	胸围 79cm~ 87cm 单件装	10袋×6盒	4971032748030
74804	7分袖 L 白色	胸围 86cm~ 94cm 单件装	10袋×6盒	4971032748047
74805	7分袖 LL 白色	胸围 93cm~101cm 单件装	10袋×6盒	4971032748054
74814	半袖 S 粉色条纹	胸围 72cm~ 80cm 单件装	10袋×6盒	4971032748146
74815	半袖 M 粉色条纹	胸围 79cm~ 87cm 单件装	10袋×6盒	4971032748153
74816	半袖 L 粉色条纹	胸围 86cm~ 94cm 单件装	10袋×6盒	4971032748160
74817	半袖 LL 粉色条纹	胸围 93cm~101cm 单件装	10袋×6盒	4971032748177
74818	7分袖 S 粉色条纹	胸围 72cm~ 80cm 单件装	10袋×6盒	4971032748184
74819	7分袖 M 粉色条纹	胸围 79cm~ 87cm 单件装	10袋×6盒	4971032748191
74820	7分袖 L 粉色条纹	胸围 86cm~ 94cm 单件装	10袋×6盒	4971032748207
74821	7分袖 LL 粉色条纹	胸围 93cm~101cm 单件装	10袋×6盒	4971032748214

■ 材质:棉100%
※不含乳胶(不含来自天然橡胶乳胶的蛋白质)




- 睡衣采用棉100%的优质纱布，穿着舒适。
- 夏天吸汗，冬天保暖，全年均可舒适穿着。
- 采用叠合两层布料以防止窝边接触肌肤的制作方法，不增加肌肤负担。
- 前开襟，衣袖宽松，穿脱方便，最适于看护及介护使用。
- 底面也标有号码，无需按号码分开保管，即使平放也一目了然。

osaki 纱布睡衣 男士

款号	种类	规格(适合尺寸)・内容量	内装数量	条形码
74510	S 深蓝色	身高 160cm~165cm 单件装	10袋	4971032745107
74511	M 深蓝色	身高 165cm~170cm 单件装	10袋	4971032745114
74512	L 深蓝色	身高 170cm~175cm 单件装	10袋	4971032745121
74513	LO 深蓝色	身高 170cm~175cm 单件装	10袋	4971032745138
74514	LL 深蓝色	身高 175cm~180cm 单件装	10袋	4971032745145


■材质：棉100%

■以下图案仅为一个示例。图案不能选择。请事先了解。

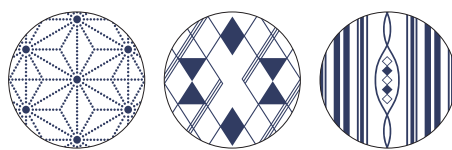

■种类

规格	身高	衣身长	袖长	下摆围
S	160cm~165cm	135cm	64cm	144cm
M	165cm~170cm	140cm		144cm
L	170cm~175cm	145cm		144cm
LO	170cm~175cm	145cm		154cm
LL	175cm~180cm	150cm		144cm

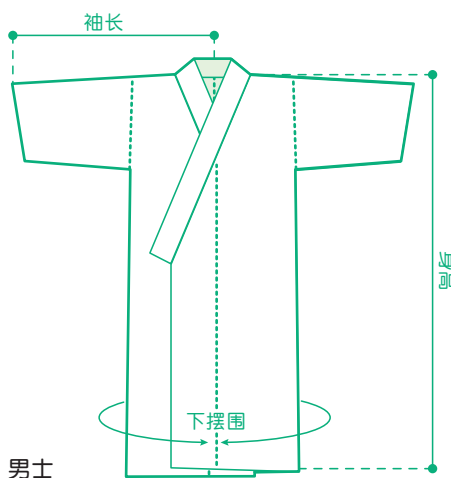


osaki 纱布睡衣 女士

款号	种类	规格(适合尺寸)・内容量	内装数量	条形码
74515	S 深蓝色	身高 150cm~155cm 单件装	10袋	4971032745152
74516	M 深蓝色	身高 155cm~160cm 单件装	10袋	4971032745169
74517	L 深蓝色	身高 160cm~165cm 单件装	10袋	4971032745176
74518	LO 深蓝色	身高 160cm~165cm 单件装	10袋	4971032745183
74519	LL 深蓝色	身高 165cm~170cm 单件装	10袋	4971032745190
74520	M 蓝色	身高 155cm~160cm 单件装	10袋	4971032745206
74521	L 蓝色	身高 160cm~165cm 单件装	10袋	4971032745213
74522	M 粉红色	身高 155cm~160cm 单件装	10袋	4971032745220
74523	L 粉红色	身高 160cm~165cm 单件装	10袋	4971032745237
74524	M 紫色	身高 155cm~160cm 单件装	10袋	4971032745244
74525	L 紫色	身高 160cm~165cm 单件装	10袋	4971032745251

■材质：棉100%


■以下图案仅为一个示例。图案不能选择。请事先了解。

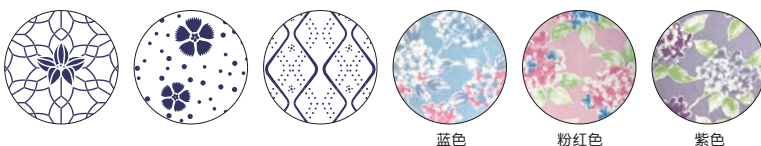

■种类


规格	身高	衣身长	袖长	下摆围
S	150cm~155cm	125cm	64cm	144cm
M	155cm~160cm	130cm		144cm
L	160cm~165cm	135cm		144cm
LO	160cm~165cm	135cm		154cm
LL	165cm~170cm	140cm		144cm

■蓝色、粉红色、紫色的商品设有M、L号。

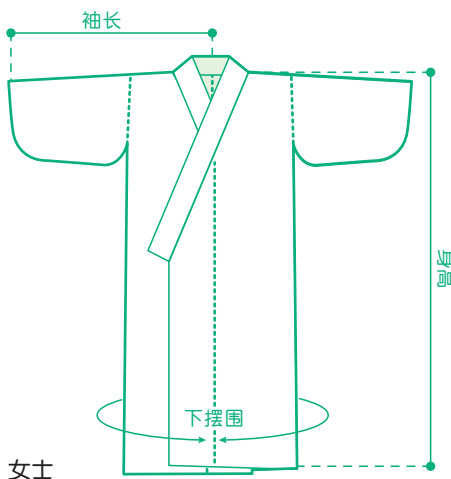



Angel睡衣

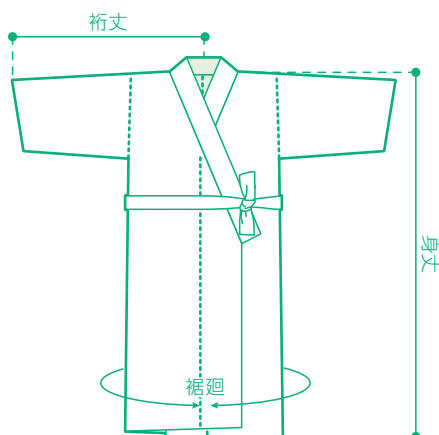


- 用于处置死产儿的睡衣,图案男女兼用。
- 是专用于处置死产儿的短期单次用睡衣,可用新衣服送别死者。
- 推出男女兼用的2种深蓝图案,无需过多占用库存空间。
- 图案细密,是一款不易透出肤色的单层睡衣。
- 采用和服款式,前开襟,衣袖宽松,穿脱简单。

款号	种类	规格(适合尺寸)・内容量	内装数量	条形码
74536	SS 深蓝色	身高 150cm~155cm 单件装	20袋	4971032745367
74537	S 深蓝色	身高 155cm~160cm 单件装	20袋	4971032745374
74538	M 深蓝色	身高 160cm~165cm 单件装	20袋	4971032745381
74539	L 深蓝色	身高 165cm~170cm 单件装	20袋	4971032745398
74540	LL 深蓝色	身高 170cm~175cm 单件装	20袋	4971032745404
74541	3L 深蓝色	身高 175cm~180cm 单件装	20袋	4971032745411

■材质:聚酯纤维65%、棉100%

■以下图案仅为一例。图案不能选择。请事先了解。

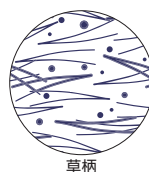

■种类

规格	身高	衣身长	袖长	下摆围
SS	150cm~155cm	125cm	64cm	144cm
S	155cm~160cm	130cm		
M	160cm~165cm	135cm		
L	165cm~170cm	140cm		
LL	170cm~175cm	145cm		
3L	175cm~180cm	150cm		

Angel Set



- 搭配了脱脂棉、T字带、竹筷等制品的死后处理用套装。

■常规套装内容

商品名称	数量
纱布 30cm×30cm 4折	3片
脱脂棉卷	3个
原棉卷	2个
T字带(无纺布)17 cm	1片
里芯(吸水纸+防水纸)	1片
竹筷(天削筷)	1副

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
52000	常规	常规套装内容 1组装	50袋	4971032520001

■可根据顾客需要提供其他规格。

PH 就餐围裙



- 带有侧褶的就餐围裙,防止掉落的食物从侧面漏出。
- 温柔贴合脖颈的“柔软Neck fitter”防止食物顺脖子漏出。
- 较大面积的魔术贴,可简单调整颈周尺寸。(颈周最大尺寸:就餐围裙 ST 46cm / 就餐围裙 带口袋ST 48cm)
- 高耐久性的双面加工(表面:耐久拔水/背面:防水),防止污渍渗入衣服。
- 可使用洗衣机、脱水机、烘干机(60℃以下)。




- “三道侧褶”向围裙内侧卷曲,防止掉落的食物从侧面漏出。
- 设有防滑贴,围裙不易从桌子上偏移,使食器和托盘保持稳定。
- 不易弄脏地板和桌子的加长加大款围裙。

PH 就餐围裙 ST

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
73744	蓝色	宽度75cm×长110cm 单件装	10袋×20束	4971032737447
73745	深蓝色	宽度75cm×长110cm 单件装	10袋×20束	4971032737454
73746	绿色	宽度75cm×长110cm 单件装	10袋×20束	4971032737461
73747	米黄色	宽度75cm×长110cm 单件装	10袋×20束	4971032737478
73749	粉色	宽度75cm×长110cm 单件装	10袋×20束	4971032737492

■材质:聚酯纤维100%

▲反复洗涤和烘干可能使拔水效果降低,导致污渍等渗入衣服。

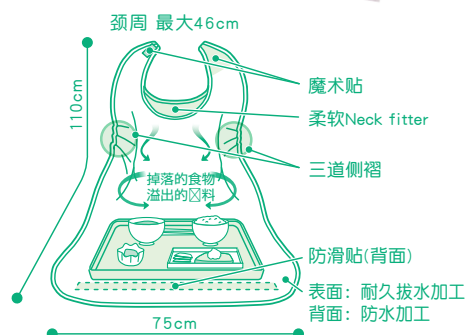

- 带有“内设金属丝的宽口袋”,可在将口袋展开的状态下固定,有效防止食物掉落。
- “一道侧褶”向围裙内侧卷曲,防止洒落的食物从侧面漏出。
- 小巧轻量,也适于外出时携带。

PH 就餐围裙 带口袋ST

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
73750	蓝色	宽度47cm×长60cm 单件装	10袋×20束	4971032737508
73751	深蓝色	宽度47cm×长60cm 单件装	10袋×20束	4971032737515
73752	绿色	宽度47cm×长60cm 单件装	10袋×20束	4971032737522
73753	米黄色	宽度47cm×长60cm 单件装	10袋×20束	4971032737539
73755	粉色	宽度47cm×长60cm 单件装	10袋×20束	4971032737553

■材质:聚酯纤维100%

▲反复洗涤和烘干可能使拔水效果降低,导致污渍等渗入衣服。





- 可在就餐时舒适使用的防水就餐围裙。
- 采用高耐久性双面加工(表面为超拔水加工,背面为防水加工),可有效防止饮料及食物的掉落。
- 采用大魔术贴,可简单调整颈周尺寸。(颈周最大:43cm)
- 轮椅使用者也易于使用的加长加宽款。
- 可使用洗衣机、脱水机、烘干机(60℃以下)。



蓝色



粉色



绿色



黄色



米黄色


PH 就餐围裙

款号	种类	规格·内容量	内装数量	条形码
73738	蓝色	宽度75cm×长110cm 单件装	10袋×20束	4971032737386
73737	粉色	宽度75cm×长110cm 单件装	10袋×20束	4971032737379
73736	绿色	宽度75cm×长110cm 单件装	10袋×20束	4971032737362
73735	黄色	宽度75cm×长110cm 单件装	10袋×20束	4971032737355
73734	乳白色	宽度75cm×长110cm 单件装	10袋×20束	4971032737348

■材质:聚酯纤维100%

▲反复洗涤和烘干可能使拨水效果降低,导致污渍等渗入衣服。

一次性就餐围裙 带口袋

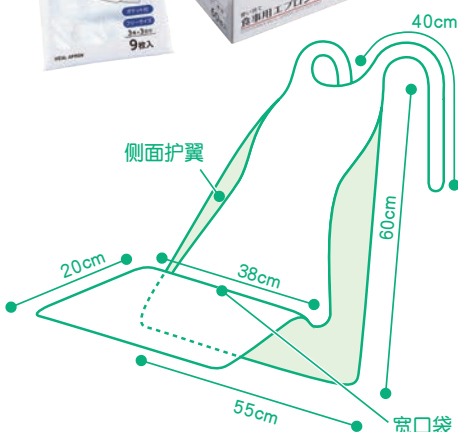

- 一次性就餐围裙,通过宽口袋和侧面护翼,有效接住掉落的食物。
- 不透液体的聚乙烯制。
- 将围裙铺在托盘下固定,口袋就会打开,有效接住掉落的食物。
- 附系带,可根据脖子的粗细进行调整,颈周不会出现空隙。
- 照顾到使用者的羞耻心,采用透明材料(不易被察觉使用了围裙,不易在意见被人注意)。
- 可透过透明材料看见喉咙的动作,便于确认吞咽状态。
- 一次性围裙,无需洗涤。
- 每袋内含9个,为3餐×3天的用量,即使短期住院也可用完,不会浪费,还方便外出携带。
- 每袋内含60个的类型采用便于单个取出的包装设计。使用“Osaki PPE Holder soft(参照P50)”即可挂在墙上而无需担心无处放置。

■穿戴方法



只要取出围裙,抓住突起部分,即可轻松展开。



将有口袋的一面朝前,系上颈部的系带。



展开并整理口袋部分(也可直接使用)。




将围裙下摆夹在托盘下固定。

款号	种类	规格·内容量	内装数量	条形码
73740	—	宽度55cm×丈60cm(颈部系带除外) 60件装	10盒	4971032737409
73756	—	宽度55cm×丈60cm(颈部系带除外) 9件装	10袋×8盒	4971032737560

■材质:聚乙烯



PH 吸管杯

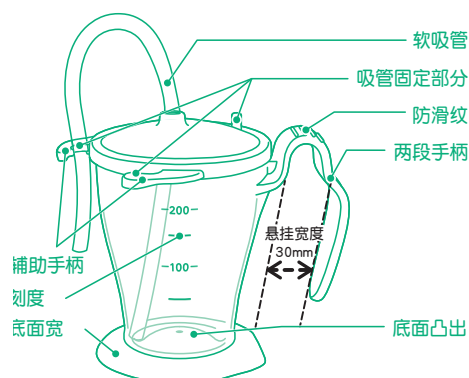

- 可挂在最粗30mm的床栏上。(普通床栏粗细为21mm~29mm。(本公司调查))

- 可悬挂在床栏上的吸管杯，采用贴合手掌的2段手柄设计，不易洒漏。
- 附有可通过旋拧杯盖来改变位置的辅助手柄，因此可结合手的大小进行使用。
- 仅有杯、盖和吸管三个组件，便于清洁保养。
- 采用触感温和柔软，弯曲自如的吸管，躺在床上也可使用。
- 底面凸出，在饮料余量较少时也能喝光。
- 可从“切实固定”和“更清洁地固定”两种要求中，根据使用者的喜好选择吸管的固定方法。
- 附有刻度，对于被规定了每天摄水量的人来说也很方便。


■握持方法



同时使用辅助手柄



用手掌握持

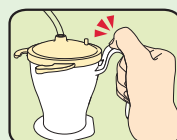

握住手柄

PH 吸管杯

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
74960	橙色	容量：250mL 1个入	6个×8盒	4971032749600
74961	绿色	容量：250mL 1个入	6个×8盒	4971032749617
74962	蓝色	容量：250mL 1个入	6个×8盒	4971032749624

■材质：[主体、杯盖]耐热聚丙烯 [吸管]硅胶


- 柔软方便，弯曲自如的吸管。

PH 吸管杯专用 替换吸管

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
74963	—	长度275mm×直径6.5mm(内径4mm) 2本入	6个×20袋	4971032749631

■材质：硅胶

PH 吃药器

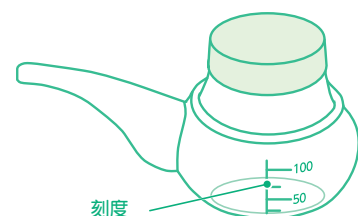

- 便于躺在床上吃药或补水的吃药器。
- 重量轻，即使掉落也不易摔坏，握力和腕力较弱的老年人也可安全使用。
- 前端设有细小的吸口，每次可少量饮用，躺在床上使用也不易洒出。
- 可根据喜好从3种颜色中选择。
- 主体和盖子可以煮沸消毒，吸口和盖子采用抗菌加工，有利于保持卫生。
- 附有刷子，细处也可清洗。

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
74730	橙色	容量：150mL 1个入	6袋×32盒	4971032747309
74731	绿色	容量：150mL 1个入	6袋×32盒	4971032747316
74732	蓝色	容量：150mL 1个入	6袋×32盒	4971032747323

■材质：[本体]聚碳酸酯 [盖子]聚丙烯 [吸口]聚二烯 [刷子]尼龙




一次性强力吸收垫




- 切实吸收万一情况下发生的渗漏,无需洗涤的一次性吸收垫。
- 配合强力吸收聚合体,吸收迅速。
- 吸收量(1100mL)大,可充分吸收从尿布中漏出的尿便。

- 金刚石花型的加压处理有助于尿液的扩散,使吸收更加迅速有效。
- 吸收后不会逆流,保持表面干爽。
- 采用结实的表面材料,浸湿后也不易破损。

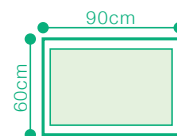

■使用方法

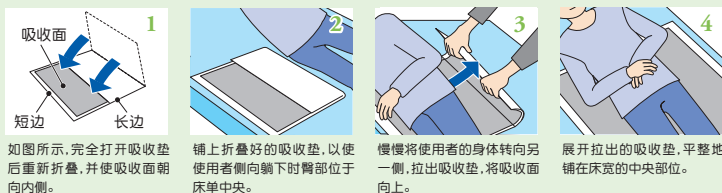


一次性强力吸收垫

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
75150	6090	60cm×90cm 6片装	24袋	4971032751504


■材质:[表面材料]无纺布 [吸收材料]吸水纸、强力吸收聚合体、棉状浆 [防水材料]聚乙烯



- 卷入式吸收垫,追求了吸收量和铺设的方便性。
- 配合强力吸收聚合体,可迅速吸收约6次的尿量※(1000mL),减轻异味。
※设定每次排尿量为150mL。
- 折叠得易于铺设,即使身体难以移动的使用者也只需略微移动即可。
- 设有长度充足的卷布,不易起皱偏移,不会弄脏床和床单。

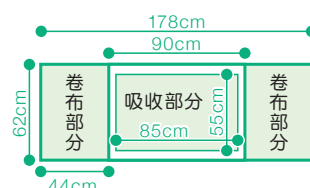

■使用方法

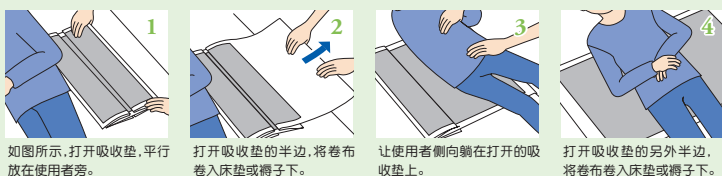

一次性强力吸收垫 卷入式

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
84253	—	55cm×85cm(吸收部分) 62cm×44cm(卷布部分) 10片装	10袋	4971032842530

■材质:[表面材料]无纺布 [吸收材料]强力吸收聚合体、棉状浆、吸水纸 [防水材料]聚乙烯

超防水垫单



- 在透气性强的素材上实施了特殊不沾水加工的防水垫单。
- 可用于防止失禁或遗尿等造成的污渍。
- 100 cm×150 cm大尺寸，不会歪斜，可保持床具清洁。
- 可整体机洗，同时可进行业务用热风烘干(80℃以下)。



款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
71910	—	100cm×150cm 单片装	50袋	4971032719108


■材质：聚酯纤维100%

▲※在一定压力下，有渗水的可能。

轻软防水垫单




蓝色

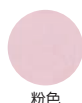

粉色

- 毛巾质地的吸水、防水垫单，抗菌防臭加工，具有透湿性、速干性。
- 纤维内加入天然抗菌素壳聚糖，可有效抑制微生物繁殖并防止异味。即使多次洗濯也几乎不会降低抗菌防臭效果。
- 具有透湿性，可避免体热或汗液造成的闷热，使用舒适。
- 速干性强，洗濯后经挂晒可快速晾干。
- 带有卷入褥子的布质部分，不会歪斜，可保持床具清洁。(可用于可倾斜病床)

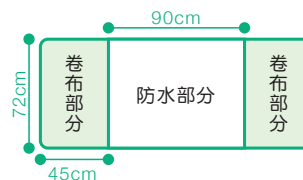

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
73519	蓝色	72cm×90cm(防水部分) 72cm×45cm(卷布部分) 单片装	40个	4971032735191
73520	粉色	72cm×90cm(防水部分) 72cm×45cm(卷布部分) 单片装	40个	4971032735207

■材质：[表面](毛绒)丙烯酸纤维100%(基布)聚酯纤维100%
[背面]聚氨酯100%



干爽防水垫单



蓝色

绿色

乳白色


- 扩散吸收性能卓越的吸水、防水垫单。
- 采用双层结构,第一层可充分吸收水分,第二层可迅速扩散,确保使用时表面干爽舒适。
- 背面为防滑加工,铺好后不易偏移。
- 可整体机洗,同时可进行业务用热风烘干(130℃以下)。
- 床单边缘采用包缝加工,不易感觉到高低差。
- 表面平整,不易沾上异物,脏污容易清除。



款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
03020	蓝色	100cm×150cm 单片装	10袋×4盒	4971032030203
03022	绿色	100cm×150cm 单片装	10袋×4盒	4971032030227
03023	乳白色	100cm×150cm 单片装	10袋×4盒	4971032030234

■材质:[表面]聚酯纤维100% [背面]聚氨酯100%


柔软垫单DX

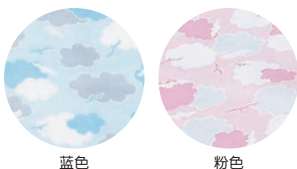

蓝色

粉色

- 肌肤触感舒爽的纱布型吸水、防水垫单。
- 采用较厚的柔软防水性无纺布和密织双重纱布,耐久性优异。
- 可用于防止失禁或遗尿等造成的污渍。
- 卷两端带有卷入褥子的布质部分,不会歪斜,可保持床具清洁。(可用于可倾斜病床)
- 可整体机洗,同时可热风烘干(60℃以下)。

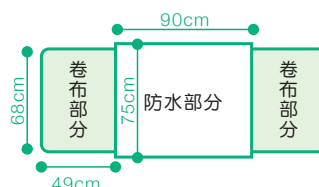


款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
71706	蓝色	75cm×90cm(防水部分) 单片装 68cm×49cm(卷布部分)	10袋	4971032717067
71705	粉色	75cm×90cm(防水部分) 单片装 68cm×49cm(卷布部分)	10袋	4971032717050

■材质:[主体]棉 [防水部分]人造丝、聚酯、聚氯乙烯

PH 斜纹布垫单




- 采用耐久性优异的斜纹布制成的吸水、防水垫单。
- 可整体机洗,同时可热风烘干(60℃以下)。
- 带有卷布,使用活动靠背床或翻身时都不易偏移。
- 切实吸水防水,防止因失禁等而弄脏被褥。

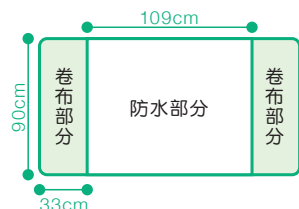

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
00045	蓝色	90cm×109cm(防水部分) 单片装 90cm×33cm(卷布部分)	25袋	4971032000459

■材质:[表面]棉100% [防水部分]聚酯、聚氯乙烯

PH 入浴辅助用围裙

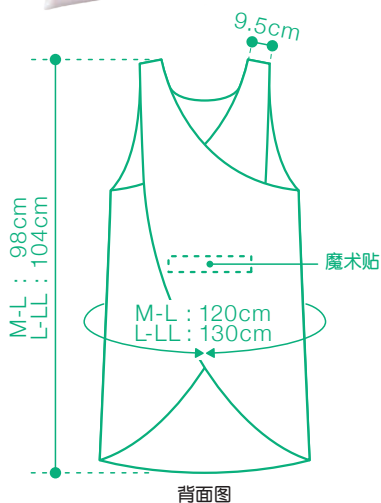

- 可快速穿脱的套头式入浴介助用围裙。
- 无需系带,穿脱简单,介助时无需让入浴者等候。
- 背部设有魔术贴,前倾时围裙也不易移到前面,便于介助。
- 表面拔水,背面防水,切实防止水分浸透。
- 将容易让人感到发黏和发凉的防水膜设于背面,入浴者接触的表面为触感舒适的拔水加工面料,使入浴更加舒适。
- 采用抗菌防臭和防霉加工,在用水处使用也可保持清洁舒适。
- 可机洗,也可使用烘干机(80℃以下)。

■穿戴方法



款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
74770	M-L 粉色	衣身长 98cm×宽度120cm 单件装	120袋	4971032747705
74771	L-LL 粉色	衣身长104cm×宽度130cm 单件装	120袋	4971032747712
74772	M-L 黄色	衣身长 98cm×宽度120cm 单件装	120袋	4971032747729
74773	L-LL 黄色	衣身长104cm×宽度130cm 单件装	120袋	4971032747736

■材质:[表面]聚酯100% 拔水加工(防渗) [背面]聚氨酯100% 防水薄膜

安心手套



- 护理用手套,可保护身体,避免自伤行为或自行拔管。
- 仅用粘带扣固定即可轻松戴上。戴好后带部隐藏,无法直接触碰,使用者本人难以脱下。
- 手腕部采用了粘带扣的固定带,可任意调节,戴上后不易偏移。此外,带部较宽,不易紧勒手腕。
- 内部设有里板,戴好后难以抓取物品,可防止自行拔去插管等行为。
- 通过透气性强的网状素材的开口,可确认手指的血液循环状态。
- 加入防止翻手抓取物品的防翻转线。

款号	种类	规格・内容量	内装数量	条形码
74501	均码	1双入	50个	4971032745015

■材质:[表面]棉100% [背面]聚酯纤维100% [网眼部分、固定带部分]尼龙100%
[中板]聚丙烯50%、聚乙烯50%

<https://www.osakimedical.co.jp/>