

器36 医療用ピンセット

管理医療機器 単回使用ピンセット 35079002

滅菌ディスポピンセット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止
- ・手術又は処置時において皮膚及び組織等を把持しないこと


【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
オオサキメディカル株式会社
お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

プラスチックをピンセット状に成形したものを滅菌した製品です。

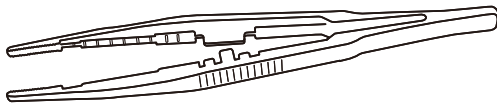

2. 材質

ABS樹脂

【使用目的又は効果】

本品は、血液、体液等を含んだガーゼ、綿球等や血液、体液等の付着したカテーテル等の器具を把持することを使用目的とする手術器具である。物体を閉じて挟む2枚の先端部をもつハンドルは永久的に結合している。本品は単回使用である。

【使用方法等】

適宜使用すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・開封後は速やかに使用すること。
- ・重いものや滑りやすいものを把持しないこと。
- ・カテーテル等を強く把持すると、カテーテル等が変形することがあるため、注意すること。
- ・必要に応じて感染防止のための手袋を着用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

2. 有効期限

容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証(当社データ)による】。